

Kullanma Kılavuzu

UZAKTAN KUMANDA RC-N

bernafon 
Your hearing • Our passion

Tebrikler! Artık yeni bir Bernofon Uzaktan Kumanda cihazına sahipsiniz. İşitme cihazınızın, ses düzeyini ve programlarını kontrol edebilirsiniz.



Lütfen uzaktan kumandayı kullanmadan önce kullanım kitapçığını dikkatle okuyunuz. Bu kitapçık size uzaktan kumandanın kullanımı hakkında detaylı bilgi sağlayacaktır.

İçindekiler

Genel Uyarılar	6
İçerik	14
RC-N Genel Bakış	15
Pil Yerleştirme ve Çıkarma	16
İşitme Cihazınız ile Çalışması	20
Durum Işığı Göstergesi	21
Ses Düzeyi Kontrol Ayarı	22
İşitme Cihazı Sesli/Sessiz	23
Program Ayarı	25
RC-N Tuş Kilidi	26

Askı Kullanma	29
Bakım ve Onarım	30
Cihazın Radyo İletişim Bölümüne (Radio Communication Part of the Device) İlişkin Bilgiler	31
Uluslararası Garanti	36

Genel Uyarılar

RC-N Uzaktan Kumandanızı kullanmadan önce, belirtilen uyarıları dikkatle inceleyiniz.

Uyarılar

- ⚠ RC-N Uzaktan kumanda cihazı oyuncak değildir. Çocuklardan ya da onları yutabilecek kimselerden uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde yutulan bu parçalar kişiye zarar verebilir. Böyle bir durumda, hemen bir doktora başvurulmalıdır.

- ⚠ RC-N Uzaktan Kumanda cihazınızı hiçbir zaman çok yüksek ısıya maruz bırakmayınız (ör:araba içi, radyatör yanı gibi) Cihaz patlayabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- ⚠ Özellikle uçuş personeli tarafından izin verilmedikçe RC-N uçakta kullanılmamalıdır.

⚠ Kalp pili kullanan kişilerin, üretici tarafından tavsiye edildiği gibi telefon kullanılması tavsiye edilir. Eğer vücudunuzda aktif bir implant mevcut ise, RC-N Uzaktan Kumandayı 15cm'den uzak tutunuz.

⚠ RC-N cihazının güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına sebep verebilecek enerjiye sahiptir. RC-N patlayıcı ortamlar konusunda, uluslararası standartlara uygunluk açısından test edilmemiştir. Patlama tehlikesi olan alanlarda RC-N kullanılmaması önerilir.

⚠ Çözücü olmadan kuru veya hafif nemli bir bez kullanarak, düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. RC-N kimyasal ve alkollü ürünlere maruz bırakılmamalıdır. Kozmetik kimyasallar, saç spreyi, parfüm, traş losyonu, güneş kremi gibi ürünler uzaktan kumanda cihazına zarar verebilir. Bu ürünleri kullanmadan önce RC-N uzak tutulmalı ve kuruması için zamana bırakılmalıdır. Su veya diğer sıvılardan uzak tutunuz.

- ⚠ Cihazı kullanmak için askı kullanırsanız, cihaz için uygun olup olmadığını kontrol ediniz.Boğma riskinden dolayı boyun askısı kullanmayınız.
- ⚠ X-Ray, CT/MR, Elektroterapi veya cerrahi sırasında RC-N cihazını kullanmayınız.
- ⚠ Araç kullanırken cihaz sizi rahatsız ediyorsa kullanmayınız. Trafik kuralları gereğince, cihazı kullanmadan önce aracınızı park ediniz.

- ⚠ Her zaman işitme uzmanınız tarafından önerilen pilleri kullanınız. Düşük kalitedeki piller bedeninize zarar verebilir. Pil boşaldıysa, kısa zamanda çıkarılmalıdır.
- ⚠ Şarj edilemeyen pilleri, şarj etmeye çalışmayınız. Patlamalara ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Pilleri ateşe atmayınız. Patlama riski taşımaktadır.

- ⚠ Çevreyi korumak amacıyla lütfen ayrılmamış evsel atıkların içine pil atmayınız. Pillerin geri dönüşümü veya bertarafı için pil geri dönüşüm kutularını kullanınız.
- ⚠ RC-N işitme komutlarını ileten dijital endüktif sinyallerini kullanır. Olası olsa da bu sinyallerin cihazlara müdahale edebildiğini gündeme getirmiştir. Ek önlem olarak kalp pili kullanıcılarına, cihazı göğüs cebinde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.


⚠ RC-N emisyon gücü insan mazuriyeti için uluslararası emisyon limitlerinin altındadır. RC-N radyasyonu, elektromanyetik cihazlara göre daha düşüktür. RC-N, uluslararası elektromanyetik standartlarına uygundur.

İçerik

Kullanım kılavuzunda belirtilen öğeler, RC-N paketi içerisinde yer almaktadır:



RC-N Uzaktan Kumanda
Model: RC-2B

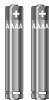

AAAA pilleri




Kullanım Kılavuzu

RC-N Genel Bakış

- 1 Ses düzeyi artırma kontrolü
- 2 Ses düzeyi azaltma kontrolü
- 3 Program deęiřtirme
- 4 Durum ıřığı

- 5 Pil Kapaęı
- 6 Parmak kavrama
- 7 Askı delikleri




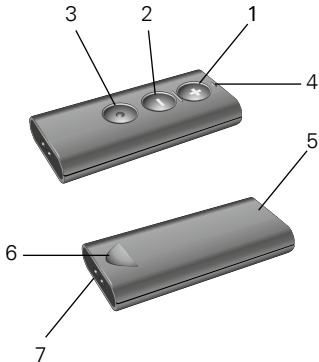


Pil Yerleştirme ve Çıkarma

RC-N cihazında, iki alkali AAAA pilleri kullanılır. Yeni pil yerleştirmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız.



Pil kapağını çıkarın.

1. Baş parmağınızı kullanarak, parmak kavrama noktasını aşağı doğru itin.
2. Pil kapağın diğer ucundan, parmak kavrama noktası yönüne diğer parmağınızla itin.
3. Pil kapağını tamamen çıkartana kadar kaydırın.
4. Pil yuvasına pilleri yerleştirin.

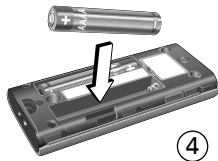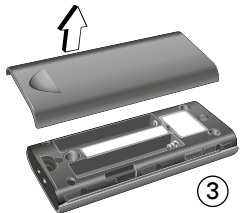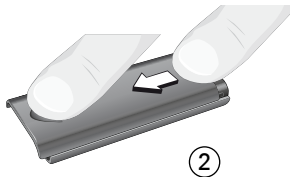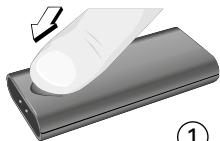

Pil Kapağını yerine takmak

1. Pil kapağını, RC-N cihazının üst bölümünden yaklaşık 6 mm aşağıya yerleştirin.
2. Klik sesi çıkartana kadar gösterildiği gibi pil kapağını kaydırın.

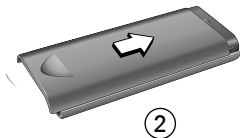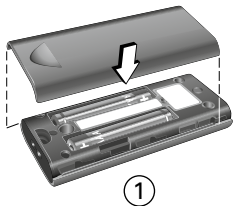

i Pil kapağını açmak ve kapamak için zorlamayınız. Kapağı değiştirmek gerekli ise, kolayca yerine oturacak şekilde yeniden konumlandırın. Pil ömrü kullanım koşullarına bağlı olarak değişecektir.


İşitme Cihazınız ile Çalışması

En fazla 1m uzaklıktaki işitme cihazınız ile çalışabilir.

Tavsiye Edilen Kullanım



Elinizde

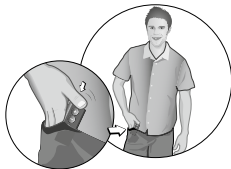

Cebinizde

Durum Işığı Göstergesi

RC-N Cihazının Çalışması	Durum ışığı, RC-N cihazının çalışma durumunu gösterir. Her tuşa basıldığında bir defa yanıp söner.	
Düşük Pil	Pilin değiştirilmesinin gerek olduğu zamanlarda, durum ışığı yavaş yavaş her 2 saniyede bir kere yanıp söner.	
RC-N Tuş Kilitli	RC-N cihazının tuşları kilitli iken durum ışığı 3 kere yanıp söner.	

Ses Düzeyi Kontrol Ayarı

RC-N ile, ses açma ve ses kısma düğmeleri kullanılarak ses düzeyini değiştirebilirsiniz.

Ses düzeyini yükseltme	Ses yükseltme tuşuna basınız.	
Ses düzeyini azaltma	Ses azaltma tuşuna basınız.	

İşitme Cihazı Sesli/Sessiz

RC-N ile, işitme cihazınızın ses butonunu aşağıya doğru basarak sesi kısabilirsiniz.

İşitme Cihazını Sessize Alma	İşitme cihazınızın 2 – 3 saniye ses butonunu aşağıya doğru basılı tutun. İşitme cihazınız sesli konuma geldiğinde, ışık sönecektir.	
İşitme Cihazı Sessiz Konumda	İşitme cihazınızı sessize almak için herhangi bir butona basın.	

i İşitme cihazını sessize aldığınızda işitme cihazı kapanmaz. İşitme cihazını kapatmak için kullanma kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Program Ayarı

RC-N ile, program düğmesini kullanarak ıřıtme programlarını deęiřtirebilirsiniz.

Program Deęiřtirme ve Seęme	ıřıtme cihazındaki programlar arasında seęmek iin program dğmesine basınız. Program dğmesine her basıldıęında bir sonraki programa geiř yapacaktır.	
------------------------------------	--	---

RC-N Tuş Kilidi

RC-N cebinizde iken yanlışlıkla düğmeye basılmasını önlemek için tuş kilidi düğmesini kullanınız.

Tuş Kilidi

1. Ses azaltma düğmesine ve program tuşuna aynı anda, 3 – 4 saniye basılı tutun.



2. Düğmeler kilitli iken durum ışığı 2 kez yanıp söner.

Tuş kilidini doğrulamak için, herhangi bir tuşa basın.

Durum ışığı onaylamak için 3 kez yanıp söner.

(Bknz. 21. Sayfa)

Tuş Kilidini Açma

1. Ses azaltma düğmesine ve program tuşuna aynı anda, 3 – 4 saniye basılı tutun.
2. Tuş kilidi açılana kadar durum ışığı sürekli yanar.

Askı Kullanma

RC-N cihazını daha kolay taşımak ve sabit tutmak amacıyla askı kullanabilmeniz için cihazda delik bulunur.

1. Pil kapağını çıkarın.
(Bknz. 16 ve 17. Sayfa)
2. Askıyı deliklerden geçirin.



Bakım ve Onarım

- Pil değiştirmek veya RC-N cihazını temizlemek amacıyla, cihazın düşmesini engellemek için yumuşak bir yüzey üzerinde tutunuz.
- Kuru bir bezle veya mendille düzenli olarak temizleyiniz.
- Cihazın ıslanmamasına dikkat ediniz.

Cihazın Radyo İletişim Bölümüne (Radio Communication Part of the Device) İlişkin Bilgiler

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document.

This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO İşitme A/S, uzaktan kumanda kontrolü, temel gereksinimler ve diğer Direktif 1999/5/EC ile ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Mevcut Uygunluk Beyanı:

SBO Hearing A/S

Kongebakken 9

DK-2765 Smørum

Danimarka

www.sbohearing.com

Uluslararası Garanti

RC-N cihazı, malzeme ve işçilik hatalarını kapsayan sınırlı garantiye sahiptir. Yanlış veya kötü bir durum sonucunda garanti geçersiz olur.

Yetkili olmayan personel tarafından tamir edildiğinde garanti geçersiz olur. İşitme uzmanınızın garanti kartını incelediğinden ve tamamlamış olduğundan emin olunuz.

Tarih: _____ Model: _____

Garanti Süresi: _____

Seri No: _____

İşitme Merkezi:

Notlar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

143940/TR



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com



Elektronik donanım atıkları
yerel yönetmeliklere
uygun olarak işleme tabi
tutulmalıdır.



0000143940000001

bernafon 
Your hearing • Our passion