

Kullanım Kılavuzu

SOUNDGATE MİK

SoundGate 3 ile kullanmak için



bernafon®
Your hearing • Our passion

İçindekiler

Genel Uyarılar ve Güvenlik Kılavuzu	6
Tanıtım	8
SoundGate Mik genel görünümü	9
SoundGate Mikrofonun çalışma şekli	10
SoundGate Mik'i takmak	11
Kullanım için SoundGate Mik'i şarj etmek	12
Güç göstergesi	13
SoundGate 3 ile eşleştirmek	14
SoundGate Mik'in kurulumu	17
SoundGate Mik üzerinden sesi durdur/yeniden çalıştır	19
SoundGate Mikrofonu kapat	20
Önemli ek bilgi	21

Yeni SoundGate Mik'i satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. SoundGate Mik konuşmacının sesini doğrudan kullanıcının işitme cihazına aktararak aralarındaki iletişimi iyileştirmek için kullanılması amaçlanmıştır. Bu işitme cihazı kullanıcısının konuşmacıyı zor dinleme koşullarında dahi daha iyi işitmesine izin verir.

Bu kılavuz daha iyi iletişim kurmanız için gerekli olan talimatları sunar.



SoundGate Mik'i kullanmadan önce lütfen bu kılavuzun tüm içeriğini okuyunuz. Bu kılavuz SoundGate Mik'in kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgi ve talimatlar içerir.

Genel Uyarılar ve Güvenlik Kılavuzu

SoundGate Mik'i kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları dikkatlice inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları

- ⚠ SoundGate Mik bir oyuncak değildir ve çocuklardan ve onun parçalarını yutabilecek kişilerden uzak tutulmalıdır, aksi takdirde bu kişiler kendilerine zarar verebilirler. Yutma ve boğulmalardan kaçınmak için küçük parçalara özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir parçasının yutulması halinde acilen doktora başvurun.
- ⚠ SoundGate Mik'i asla fırına, mikrodalgaya, ateşe atarak veya güneşte park edilmiş araç içinde bırakarak yüksek ısıya maruz bırakmayın. Böyle bir durumda onun patlayabilme ve ciddi yaralanmalara sebep olma riski vardır.
- ⚠ Boyun askısı, kullanılırken yanlışlıkla bir şeye takıldığında otomatik olarak açılacak şekilde yapılmıştır. Bu yüzden Boyun askısını asla yetkisiz bir şekilde kısaltmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Boyun askısının, 11 kg'dan hafif çocuklarda kullanılmaması gerekir.

- ⚠️ Özellikle uçak personeli tarafından izin verilmediği sürece SoundGate Mik uçakta kullanılmaması gerekir
- ⚠️ SoundGate Mik, Elektromanyetik Uyum ile ilgili uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, SoundGate Mik defibrilatör ve kalp pili gibi medikal aygıtlarla parazite neden olabilir.
- Rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üreticileri ile iletişime geçin.
 - Eğer parazitten şüphelenilirse hemen SoundGate Mik'i çıkartın. SoundGate Mik'i kullanmayın ve yardım alın.
- ⚠️ Parazit oluşumu ayrıca elektrik hattı bozukluklarından, havaalanı metal detektörleri, diğer medikal aygıtlardan, radyo sinyallerinden ve elektroakustik deşarjlardan kaynaklanabilir.
- ⚠️ USB bağlantısı ile pillerin şarj güvenliği harici ekipman tarafından belirlenir. Bu harici ekipman UL onaylı ve IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 veya diğer eşdeğer güvenlik standartları ile uyumlu olmalıdır.

Tanıtım

SoundGate Mik paketiniz aşağıdaki parçaları içerir:



SoundGate Mikrofon
Model: MIC-110



Güç kaynağı (şarj cihazı)



Kullanım kılavuzu



Boyun askısı


SoundGate Mik genel görünümü

LED gösterge

Güç göstergesi

AÇ/KAPAT düğmesi


Gürültü detektörü
(üzerini örtmeyin)

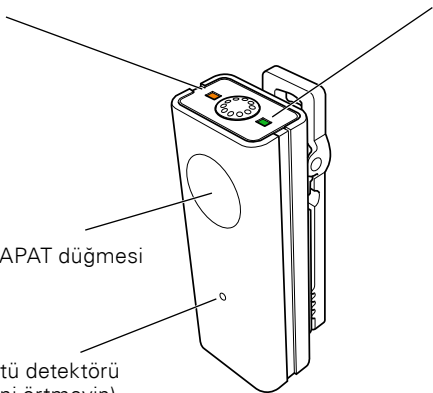

SoundGate Mikrofonun alıřma řekli

SoundGate Mik, konuřmacının sesini doęrudan iřitme cihazı kullanıcısına aktaracaktır


Bir Mikrofon aynı anda ancak bir tane SoundGate ile alıřır.

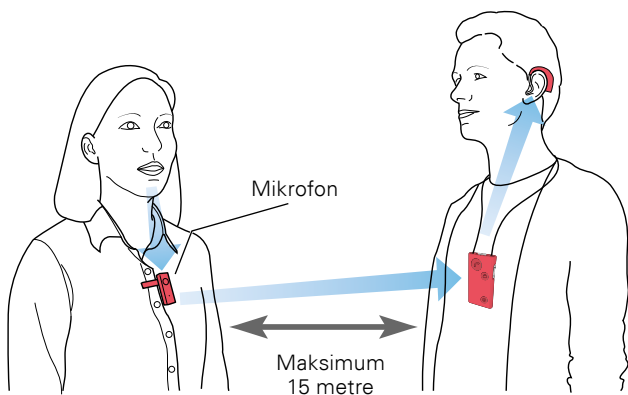


SoundGate Mik'i takmak

SoundGate Mik, 10 ile 20 cm arasındaki bir mesafede, konuşmacının ağızına doğru tutulması gerekir.

Klips ile kullanım

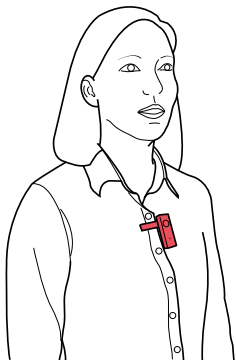


Boyun askısı ile kullanım

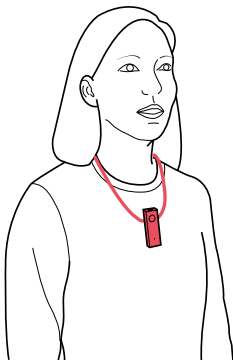


Kullanım için SoundGate Mik'i şarj etmek

Mikrofonu şarj etmek için, güç kaynağı kablosunu Mikrofonun altında bulunan mini USB konektörüne bağlayın.

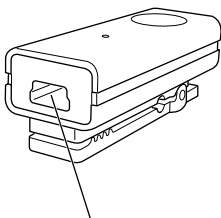


Pil şarjı konektörü
(mini USB)

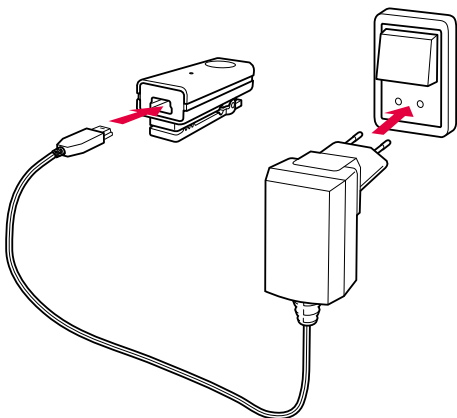

Güç göstergesi

SoundGate Mik'in üst tarafındaki güç göstergesi pil ömrünü ve/veya şarj durumunu izlemenize yardımcı olacaktır.


Sabit kırmızı ışık

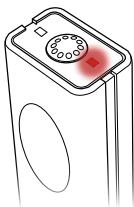

Pil zayıf

Maksimum
20 dakika konuşma
süresi kalmış

Yanıp sönen yeşil
ışık

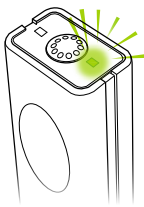

Şarj oluyor

Sürekli yeşil ışık



Tam olarak şarjlı

Yaklaşık 1,5 saat
sonra tam şarj
olur ve tam şarjla
5 saat boyunca
kullanılabilir.

SoundGate 3 ile eşleřtirmek (sadece bir kez yapın)


1. **SoundGate 3'ü eşleřtirme moduna getirin**

SoundGate 3'ün aç/kapat düğmesine 5–6 saniye basarak. SoundGate 3 LED gösterge Mavi'ye dönüşecek ve hızla yanıp sönmeye devam edecek. “Eşleřtirme modu” řimdi aktif.



2. **SoundGate Mik'i eşleştirme moduna getirin**

AÇ/KAPAT düğmesine 5–6 saniye basarak. SoundGate Mik LED göstergesi Turuncu'ya dönüşecek ve hızla yanıp sönmeye devam edecek. "Eşleştirme modu" şimdi aktif.

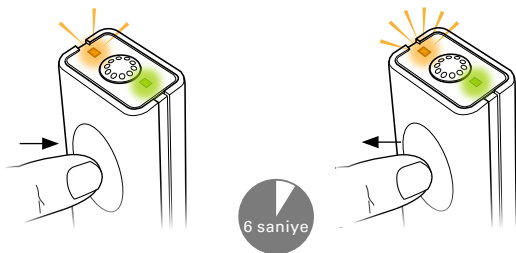

3. **1 dk kadar bekleyin.** SoundGate 3 yardımcı aygıt giriş düğmesi ve SoundGate Mik LED göstergesi turuncuya dönüşecektir. Eşleştirme şimdi tamamlandı.




SoundGate Mik'in kurulumu

1. **SoundGate 3 açık olmasını sağlayın** 1–2 saniye aç/kapat düğmesine basarak. SoundGate 3 LED göstergesi yeşil olarak yanacak.



2. **SoundGate Mik'i açın** AÇ/KAPAT düğmesine kısaca basarak. Güç göstergesi yeşil olarak yanacaktır ve LED gösterge eşleşmiş olduğu SoundGate 3'ü bulana kadar turuncu olarak yanıp sönecek. Bulduğunda LED gösterge sürekli turuncu yanacak.

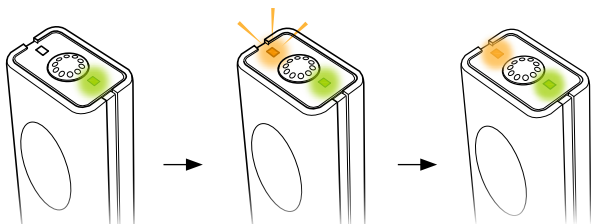

3. **Mikrofon üzerinden ses iletimini başlatmak için**


SoundGate 3 üzerindeki yardımcı aygıt giriş düğmesine art arda iki defa basın.



SoundGate Mik üzerinden sesi durdur/yeniden çalıştır


1. **Mikrofondan gelen sesi durdurmak için**

SoundGate 3 üzerinden yardımcı aygıt giriş düğmesine kısaca basıp bırakın.

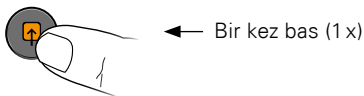


2. **Mikrofondan ses almaya devam etmek için**

SoundGate 3 üzerindeki yardımcı aygıt giriş düğmesine ard arda iki defa basın.

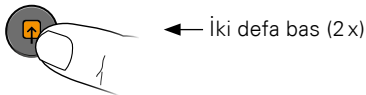

SoundGate Mikrofonu kapat

SoundGate Mik'in AÇ/KAPAT düğmesine güç göstergesi sönene kadar 2–3 saniye basıp bekleyin.

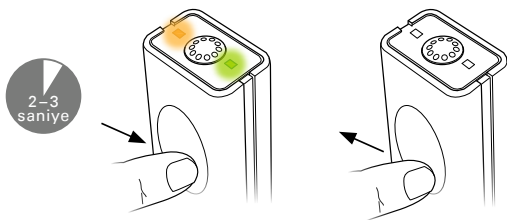

Önemli ek bilgi

SoundGate Mik 2,4 GHz'deki ISM bandında çalışan frekans atlatma teknolojisini kullanan bir radyo vericisi içerir.

Vericinin en yüksek iletim çıkış gücü 6 dBm'nin altındadır ve anteni, direksiyonel kazancı 2 dBi'nin altında olan küçük bir PCB antendir (bir izotropik veya çok yönlü anten üzerinden dB).

SoundGate Mikrofonun emisyon gücü, uluslar arası İnsan Koruma emisyon limitlerinin altındadır.

SoundGate Mikrofon, Elektromanyetik Uyumu ile ilgili uluslararası standartlara uymaktadır.

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110

IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S, SoundGate Mikrofonunun, 1999/5/EC Direktifinin temel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanı aşağıdaki adreste mevcuttur:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

[illegible]

< >
8,15 mm

FSC logosu için
yer tutucu



^
19 mm
v

< 15 mm >

^
9,0 mm
v



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com



Elektronik donanım atıkları
yerel yönetmeliklere
uygun olarak işleme tabi
tutulmalıdır.



0000144935000001

bernafon 
Your hearing • Our passion