

RC-A

Uzaktan Kumanda



Kullanım Kılavuzu

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Giriş



Bu kitapçık, yeni RC-A'nın kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. Lütfen bu kitapçığı Uyarı bölümü de dahil dikkatlice okuyunuz. Bu sizin yeni uzaktan kumandanızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Uzaktan kumandanızın kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

Kullanım amacı

RC-A, wireless işitme cihazı kullanıcıların işitme çözümleri tarafından sağlanan fonksiyonları kontrol etmelerine yardımcı olması için adanmıştır.

RC-A, çocuklar (36 aydan büyük) ve yetişkinler tarafından işitme çözümleriyle birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.

İçindekiler tablosu

Paket içeriği	7
Ürün genel görünümü	8
Pil takma ve çıkartma	9
Uzaktan kumandayı işitme cihazlarınızla eşleştirmek	14
Uzaktan kumanda ile işitme cihazları arasındaki eşleşmeyi silme	20
Çalışma mesafesi	22
Onaylar	24
Programı değiştirin	26
Ses seviyesini ayarlayın	28
Sessiz konum	30
RC-A tuş kilidini aç/kapa	32

Askı delikleri	34
Uzaktan kumandanızın bakımı	35
Uyarılar	36
Uluslararası garanti	46
Teknik bilgi	50

Paket içeriđi

Paket içeriđinde ařađıdaki rnleri bulacaksınız:

RC-A



2x AAAA
piller




Bu kitapık



Ürün genel görünümü

- 1 Ses seviyesini yükseltme
- 2 Ses seviyesini azaltma
- 3 Program değiştirme
- 4 Durum ışığı
- 5 Pil kapağı
- 6 Parmak yuvası
- 7 Askı deliği



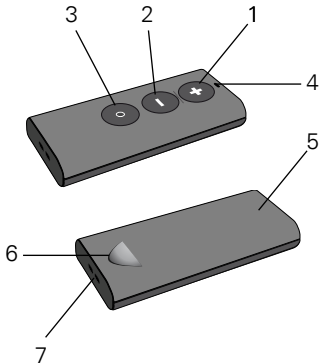


Pil takma ve çıkartma

RC-A iki alkalimli AAAA pil kullanır. Pilleri takmak için lütfen talimatları izleyin. Pil ömrü kullanım şartlarına bağlıdır. Standart kullanım yılda bir pil değiştirmeyi gerektirir. Kullanılmış pilleri çıkartın ve yerel kurallara göre atın.



Pil kapağını çıkartın

1. Baş parmağınızla parmak yuvasını aşağı doğru bastırın.
2. Pil kapağın diğer ucundan parmak yuvası yönünde diğer baş parmağınızla bastırıp kaydırın.
3. Pil kapağını tam olarak kaldırın.
4. Pilleri, pilin üzerindeki "+" işaretin pil yuvasındaki "+" işaretine denk gelecek şekilde pil yuvasına yerleştirin.

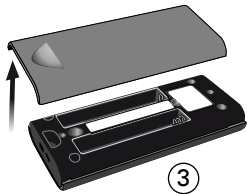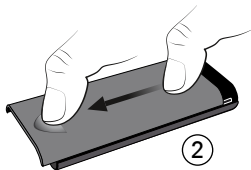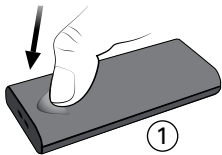

Pil kapağını yeniden yerine takın

1. Pil kapağını RC-A'nın üst kısmından yaklaşık 6mm aşağıya yerleştirin.
2. Klik ses gelene kadar pil kapağını aşağıda gösterildiği gibi kaydırın.

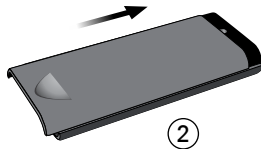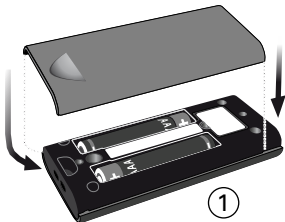

ÖNEMLİ UYARI

Pil kapağı hiç bir zaman zorlanmamalıdır. Kapağı yerleştirmek için zorlamaya ihtiyaç olursa, hizalamayı kontrol edin ve yerine kolayca oturacak şekilde yerini değiştirin.

Uzaktan kumandayı işitme cihazlarınızla eşleştirmek


Bu uzaktan kumanda kişisel bir aygıttır ve bir çift işitme cihazı ile kullanılmak üzere adanmıştır. Bu uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra en fazla iki işitme cihazını kontrol edebilir.

İşitme cihazlarınızla kullanılmadan önce bu aygıtın eşleştirilmesi gerekir.

Uzaktan kumandayı bir veya aynı anda iki işitme cihazı ile eşleştirmeyi seçebilirsiniz. İşitme cihazlarınızı birer birer eşleştirmeyi seçerseniz, eşleştirme işlemini tekrarlamanız gerekir. Aşağıdaki talimatlarla bir çift işitme cihazı uzaktan kumanda ile eşleştirilmektedir.


Uzaktan kumanda hazır

1. Herhangi bir tuşuna basarak uzaktan kumandanın pillerinin çalıştığını kontrol edin. Çalışan pillerle sahip RC-A durum gösterge ışığı tuşa basıldığı sürece yanacaktır.

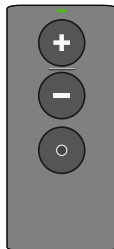


İşitme cihazları hazır

2. Her iki işitme cihazınızın pil yuvasını açıp kapatın.

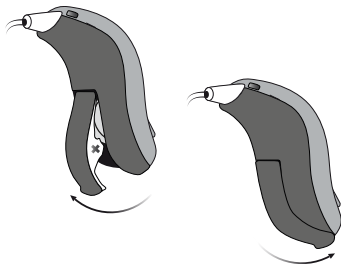


Mesafede

3. Her iki iřitme cihazınızı uzaktan kumanda ile eřleřme mesafesine koyun (ör: 20 cm mesafe içinde).

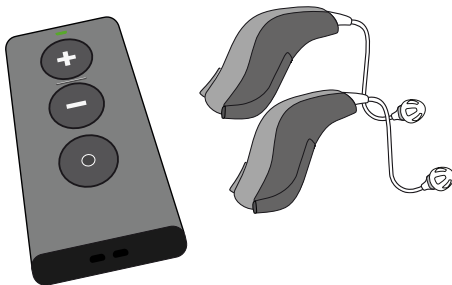

Eşleştirme

4. Uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir tuşa basın ve o uygun mesafe içinde olan ışıltme cihazları ile otomatik olarak eşleşecektir.

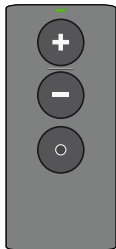


Uzaktan kumanda üzerindeki durum gösterge ışığı 10sn sürekli yeşil olarak yandığında aygıt eşleşmiş olacaktır.

Uzaktan kumanda ile işitme cihazları arasındaki eşleşmeyi silme

Bu uzaktan kumanda bir çift işitme cihazı ile bir kez eşleştirilebilir. Eğer uzaktan kumandanızı başka bir çift işitme cihazı ile eşleştirmek isterseniz, öncelikle mevcut olan eşleşmeyi silmelisiniz.

Mevcut eşleşmeyi silmek için, her üç düğmeye 5 sn kadar birlikte basıp bekleyin.

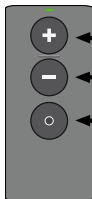

Mevcut eşleşmeyi silmek için yaklaşık 5 sn basın

Uzaktan kumanda üzerindeki durum gösterge ışığı 10 sn sürekli olarak yeşil yandığında eşleşme başarıyla silinmiş olacak.


Uzaktan kumandanız işitme cihazlarınızla yeniden eşleştirmek için hazırdır (sayfa 14'e bakın).

Çalışma mesafesi

Uzaktan kumanda ile işitme cihazlarınızı en fazla 1,8 m mesafeden kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan kumandayla işitme cihazlarınızın arasında doğrudan bir görüş çizgisi olması gerekmez.

Uzaktan kumandayla iki işitme cihazını eşleştirdiyseniz, her ikisi de aynı anda ayarlanır.

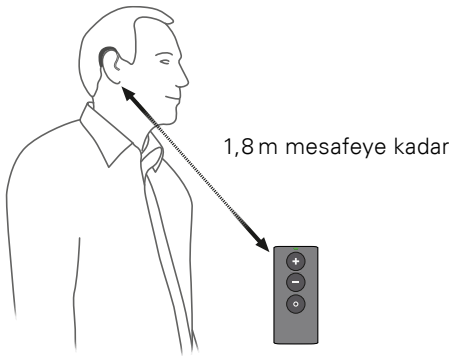

Onaylar

Görsel bildirimler

Bir düğmeye basıldığında, uzaktan kumandadaki durum ışığı yanar.



Sesli bildirimler

İşitme cihazlarınızdan bir eylemin gerçekleştirildiğini onaylayan bir ses duyacaksınız.

Pil zayıf

Piller zayıfladığında, bir düğmeye basıldığında durum ışığı hızlıca yanıp söner. Bu durumda pilleri ilk fırsatta değiştirin.



Programı değiştirin

İşitme uzmanınız işitme cihazlarınızda kullanılabilecek birden fazla program oluşturduğunda uzaktan kumanda, programı değiştirmek için kullanılabilir.

İşitme cihazı programlarında gezinmek için doğrudan uzaktan kumandadaki program düğmesine basın. Her bir basma işitme cihazlarını program döngüsündeki bir sonraki programa geçirecektir.



Programı deęiřtirmek için basın

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazı çözümünüzün fonksiyonları ile ilgili ayrıntılar için lütfen işitme cihazınızın "Kullanım Kılavuzuna" bakın.

Ses seviyesini ayarlayın

Uzaktan kumanda ile işitme cihazlarınızın ses seviyesini ses kontrol düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Sesi arttırdığınızda ya da azalttığınızda, işitme cihazlarınızda kısa bir onay sesi duyarsınız.

İşitme cihazınızın ses seviyesini yükseltmek için üst düğmeye basın.

İşitme cihazınızın ses seviyesini azaltmak için alt düğmeye basın.



Ses seviyesini
yükseltmek için
“+”
'ya basın
(daha yüksek ses)



Ses seviyesini
azaltmak için “-”
'ye basın
(daha hafif ses)

Sessiz konum

İşitme cihazlarınızı kullanırken onları sessize almaya ihtiyaç duyarsanız sessiz konumu kullanın. İşitme cihazlarınızı sessize almak için, ses azaltma düğmesini durum gösterge ışığı kapanana kadar yaklaşık 2 sn basılı tutun.

Sessiz konumdan çıkartın

İşitme cihazlarınızı sessiz konumdan çıkartmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye kısaca basın.



Sessiz konuma almak için
yaklaşık 2 sn basın

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazı çözümünüzün fonksiyonları ile ilgili ayrıntılar için lütfen işitme cihazınızın "Kullanım Kılavuzuna" bakın.

RC-A tuş kilidini aç/kapa

RC-A cebinizde olduğunda yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemek için tuşları kilitlemek isteyebilirsiniz.

Uzaktan kumanda tuşlarını kilitlemek

1. Ses seviyesini azaltma tuşu ile program değiştirme tuşuna 3–4 sn kadar birlikte basılı tutun.



Kilitleme için
yaklaşık 3–4 sn
basın

2. Tuşlar kilitlendiğinde durum gösterge ışığı iki defa yanıp sönecek.

Tuşların kilitlendiğini test etmek için herhangi bir tuşa basın. Bu durumu onaylamak için durum gösterge ışığı üç defa yanıp sönecek.

Uzaktan kumanda tuş kilidini açmak

1. Ses seviyesini azaltma tuşu ile program değiştirme tuşuna tekrar 3–4 sn kadar birlikte basılı tutun.
2. Durum gösterge ışığı tuş kilidi açılana kadar sürekli yanacaktır.

Askı delikleri

Size kolaylık sağlamak için RC-A 'da bir askı deliđi vardır ve RC-A'yı daha kolay ve güvenli taşımanızı sağlar.

1. Pil kapađını çıkartın (sayfa 10 ve 11'e bakın).
2. Askı deliklerine küçük bir askı bağlayın.



Uzaktan kumandanızın bakımı

Pilleri değiştirme veya uzaktan kumandayı temizleme sırasında düşme ihtimalinde zarar görmesini önlemek için bu işlemleri yumuşak bir zeminin üzerinde yapın.

ÖNEMLİ UYARI

Uzaktan kumandanızı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Bu uzaktan kumanda kesinlikle yıkanmamalı veya suya ya da diğer sıvılara daldırılmamalıdır.

Uyarılar

Kişisel güvenliğinizi ve doğru kullanımı sağlamak için, uzaktan kumandanızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları iyice incelemeniz ve bu kitapçığın tamamını okumanız gerekir. Uzaktan kumandanızla ilgili beklenmeyen işlemler veya durumlar ile karşılaştığınız takdirde işitme uzmanınıza başvurun.

Boğulma tehlikesi ve pilleri yutma riski vardır

- Uzaktan kumandanızın küçük parçaları ve pilleri çocukların veya bu ürünleri yutma ihtimali olan kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır, aksi takdirde bu kişiler bunlarla kendilerine zarar verebilirler.

Pilin veya diğer küçük parçaların yutulması halinde, hemen bir doktora başvurun.

Uyarılar

Çapraz kontrol

- Kişisel güvenliğinizi sağlamak ve yanlış kullanımı önlemek için, Uzaktan Kumandanızın, çocukların veya fonksiyonlarının kontrolünü eline geçirebilecek herhangi bir kişinin erişemeyeceği bir yerde saklanması gerekir.

Askıların kullanımı

- El askısı kullandığınızda, amaca göre tasarlanmış ve uygun olduğundan emin olun. Boğulma riski bulunacağından, asla bir çekme ipi kullanmayın.

Pil kullanımı

- Her zaman işitme uzmanınızın tavsiye ettiği pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller akabilir ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.
- Pillerinizi kesinlikle şarj etmeye çalışmayın ve pilleri kesinlikle yakarak elden çıkarmayın. Pillerin patlama riski vardır.

Uyarılar

Aktif İmplantlar

- Aktif implantlar konusunda dikkatli olunmalıdır.
- Aktif bir beyin implantınız varsa, parazit oluşma riski ile ilgili bilgi almak için, lütfen implante edilebilir cihazınızın üreticisine başvurun.

X-ray/CT/MR/PET taraması, elektro terapi ve ameliyat

- Güçlü alanlara maruz kaldığında uzaktan kumanda hasar görebileceğinden, X-ray/CT/MR/PET taraması, elektro terapi, ameliyat vs. öncesinde uzaktan kumandanızı çıkartın.

Muhtemel yan etkiler

- Uzaktan kumandanızda kullanılan ve aslında alerjen olmayan maddeler nadir durumlarda cilt tahrişine veya başka yan etkilere yol açabilir.

Bu durumların ortaya çıkması halinde, lütfen bir doktora başvurun.

Uyarılar

Isı ve kimyasallar

- Uzaktan kumandanız kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır, örn. güneşte park edilmiş bir aracın içinde bırakmayın.
- Uzaktan kumandanız mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmamalıdır.
- Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler uzaktan kumandanıza zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce uzaktan kumandanızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurummasını bekleyin.

Trafikte kullanım

- Uzaktan kumandayı araç kullanırken kullanmak, dikkatinizi dağıtabilir. Lütfen trafikteyken iletişim cihazlarınızı kullanmayı düzenleyen ulusal trafik yasalarına dikkat edin.

Uçakta kullanım

- Uzaktan kumandanız Bluetooth®. İçerir Bu uzaktan kumanda uçuş personelinin özel izin alınmadığı sürece uçakta kullanılmamalıdır.

Uyarılar

Parazit

- Uzaktan kumandanız, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde üretilmiştir. Bununla birlikte, uzaktan kumandanız ile diğer aygıtlar arasında (ör: bazı cep telefonları, vatandaşlık bant aygıtları, mağaza alarm sistemleri ve diğer wireless aygıtlar) parazit oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda uzaktan kumandanızı parazite neden olan cihazdan uzaklaştırın.

Patlayıcılar

- Uzaktan kumandanızın güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir. Bu uzaktan kumanda, ilgili uluslararası standartlara uygun, patlayıcı ortamlarda test edilmemiştir. Patlama tehlikesi olan alanlarda uzaktan kumandanızı kullanmamanızı öneririz.

Uluslararası garanti

Uzaktan kumandanız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır.

Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. Bu aygıtın yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir.

Yukarıdaki garanti tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz her türlü yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız bu sınırlı garantinin koşullarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

Uzaktan kumandanızın ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme cihazı uzmanınıza götürün.

Tarih: _____ Model: _____

Garanti süresi: _____

Seri no: _____

İşitme Merkezi

Teknik bilgi

Model:	RC-3B
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5°C – 40°C Nem: %15 ile %93 arasında, yoğunlaşmamış Çalışma atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060hPa
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: –25°C – 70°C Nem: %15 ile %93 arasında, yoğunlaşmamış
Mekanik boyutlar	75,3 x 35 x 11,8 mm; ağırlık 32,7 g (piller dahil)

Uyumluluk	2,4 GHz radyo teknolojisiyle Bernafon işitme cihazları
Pil tipi	2 x AAAA
Normal kullanımda pil ömrü	12 ay
Tipik iletim alanı	1,8 m'ye kadar
Durum göstergeleri	Yeşil LED

Telsiz:	
Çalışma frekansı	2,402 GHz – 2,480 GHz (ISM Band)
Kanal sayısı	39
Çıkış gücü	<10 dBm EIRP
Bant genişliği kanalları	1 MHz
Modülasyon tipi	GFSK
ITU tasarımcı	F7D

RC-A, Düşük enerjili (BLE) Bluetooth® radyo telsizi kullanan ve 2,4 GHz'de çalışan tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisi içerir. 2,4 GHz radyo verici zayıf ve her zaman 10 dBm EIRP toplam yayılma gücünün altındadır. Bu uzaktan kumanda, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

Uzaktan kumanda üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu belgede bulunmaktadır.

ABD ve Kanada

Bu cihaz, şu sertifikayla sertifikalıdır:

FCC Kimliği: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

Üreticisi bu uzaktan kumandanın 1999/5/EC Direktifinde yer alan temel gereksinimler ve diğer ilgili hükümler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com

178065/TR

< > 8,15
mm

FSC logosu için

yer tutucu



^

< 19 mm

<

< 15 mm

>

< > 9,0

mm



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com



Elektronik donanım atıkları
yerel yönetmeliklere
uygun olarak işleme tabi
tutulmalıdır.



0000178065000001

bernafon 
Your hearing • Our passion