

People First

Tarjoamme ihmisille mahdollisuuden vapaaseen kommunikointiin, luonnolliseen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen osallistumiseen

Sennheiser BTD800 USB-sovitin (Dongle)



144800FI/05.14



oticon
PEOPLE FIRST

oticon
PEOPLE FIRST

Sennheiser BTD800 USB-sovitin

Esittely

Useissa uusissa tietokoneissa on sisäänrakennettu Bluetooth-toiminto kuulokemikrofonia (internet-puhelut / videopuhelut) tai kuulokkeita (musiikin kuuntelu) varten. Ohjelmistot ja Bluetooth-laitteet voidaan liittää eri valmistajien tietokoneisiin monin eri tavoin, mutta silti toimivan yhteyden saaminen ConnectLine Streamer Pro-laitteeseen voi olla vaikeaa, tai jopa mahdotonta.

Ratkaisuksi tarjoamme Sennheiser BTD800-sovittimen, joka mahdollistaa Bluetooth-tietokoneiden yhteensopivuuden ConnectLine-laitteiden kanssa. Sovittimia on saatavilla Sennheiser-jälleenmyyjiltä kautta maan tai suoraan Oticonilta.

Sovitin toimii erinomaisesti ConnectLine-järjestelmien kanssa.

Lisätietoja sovittimesta ja laitteiden yhteensopivuudesta osoitteessa www.oticon.fi.




Sennheiser BTD800 USB-sovitin

BTD800-sovittimen käyttö ConnectLine Streamer Pro:n kanssa

Asennus

1. Lukekaa BTD800-käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta; USB-sovitin on automaattisesti pariliitännättilassa, kun liitätte sen tietokoneeseen ensimmäistä kertaa.
2. Kun olette valmiina, varmistakaa, että Streamer Pro on pariliitännättilassa tai valmistautukaa kytkemään Streamer Pro pariliitännättilaan heti, kun sovitin on liitetty tietokoneeseen. (Katsokaa Streamer Pro:n käyttöohjeet osoitteessa www.oticon.fi)
3. Noudattakaa BTD800-käyttöohjeita.

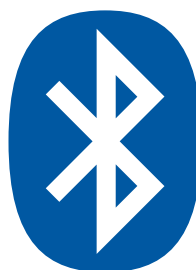

Käyttöohjeet

- 4a. Internet-puhelin tai videopuhelin - esim. Microsoft® Lync™.
Kaikki toiminnot tapahtuvat tietokoneessa käynnissä olevan ohjelman kautta. Kun tietokone on saanut yhteyden Streameriin, saapuvan puhelun hälytysääni kuuluu kuulokojeessa, ja Streamerin puhelinpainike vilkkuu vihreänä. Yhteys voidaan nyt avata painamalla Streamerin puhelinpainiketta.
- 4b. Ääni-/musiikkiohjelmat - esim. iTunes tai mediaplayer.
Yhteys Streameristä tietokoneeseen käynnistetään Streameristä. Painakaa AUX-valitsinta lyhyesti avataksenne yhteyden (kuulette äänimerkin kuulokojeessa). Tämän jälkeen käynnistää ohjelma tietokoneessa.

Huomioikaa:

- ▶ Kuuloalan asiantuntijan on mahdollista määrittää Streamer Pro 1.0:n tai uudemman version asetukset siten, että Streamer Pro yhdistyy automaattisesti tietokoneeseen, kun soveltuva ohjelma on avattu.
- ▶ Jos laite on pariliitetty ja yhdistetty matkapuhelimeen tai lankapuhelimeen (ConnectLine-puhelinsovittimen kautta), saapuvat puhelut ovat ensisijaisia muihin äänilähteisiin nähden.

Lisätietoja ja opastusvideoita osoitteessa www.oticon.fi