

Tekniset tiedot

Charger 1.0 miniRITE R

Laturi on suunniteltu helppoon päivittäiseen lataamiseen muutamalla yksinkertaisella toiminnolla.

Lataaminen

- Kuulokojeet irrotetaan ja asetetaan ne laturiin - ei erikseen avattavaa kantta.
- Kuulokojeet alkavat latautua automaattisesti, kun ne asetetaan laturiin ja käynnistyvät automaattisesti, kun ne poistetaan laturista.
- Kuulokojeet ladataan joka yö, jotta ne ovat täyteen ladatut seuraavan päivän käyttöä varten.

Helppo havaita

Kuulokojeen LED-merkkivalon avulla käyttäjän on helppo havaita latauksen tila:

- Oranssi/Punainen* = Lataa
- Vihreä = Ladattu täyteen

Lyhyt latausaika

Kun kuulokojeiden akut ovat täysin tyhjt, normaali latausaika on:

- 3 t = ladattu täyteen
- 1 t = ladattu 50 %
- 0,5 t = ladattu 25 %

Tuotetiedot

- Induktiivinen lataus
- Virran ON/OFF-merkkivalo, LED
- Magneettiliitäntä - kuulokojeet pysyvät paikoillaan latausporteissa
- Kiinteä virtakaapeli
- Kumiset liukuesteet vakauden parantamiseksi
- Pehmeä, kaareva muotoilu - helppo puhdistaa
- Pehmeä säilytyspussi kuljetukseen



Laturi on suunniteltu miniRITE R:n lataukseen. Se perustuu induktioteknologiaan ja lataa kuulokojeet langattomasti kolmessa tunnissa.


Suunniteltu miniRITE R:lle
Oticon More™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby



* Väri on kuulokojeesta riippuen joko oranssi tai punainen.
** Virtapistoke vaihtelee maittain.



Tekniset tiedot: Laturi	
Nimi	Charger 1.0 Oticon miniRITE R
Suunniteltu/Yhteensopiva	Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Ruby: miniRITE R
Mitat	Ø95 mm / kokonaiskorkeus 39 mm
Paino	135 g
Väri	Musta
Virtalähteen liitäntä	USB A
Tilan merkkivalo	Laturin LED: osoittaa, onko laite päällä vai pois päältä. Kuulokojeiden LED ladatessa: osoittaa latauksen tilan.
Kuulokojeiden latausaika	Maksimissaan 3 tuntia riippuen akkujen varaustasosta (Lämpötila: +10 °C - +35 °C) Maksimissaan 4 tuntia riippuen akkujen varaustasosta (Lämpötila: +5 °C - +10 °C ja +35 °C - +40 °C)
Virtalähde	Mukana toimitettava virtapistoke
Tulojännite	5 V DC
Tulovirta	< 0.2 A (ladattaessa kahta kuulokojetta) < 10 mA valmiustilassa (ei kuulokojeita)
Johto	Kiinteä johto, pituus 150 cm
KytKentä ulkoisiin laitteisiin	Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.
Käyttöolosuhteet	
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +5 °C - +40 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötila: -25 °C - +70 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön
Ilmanpaine	700-1060 hPa
Tekniset tiedot: Virtapistoke	
Tulojännite	100-240 V AC
Tulotaajuus	50-60 Hz
Lähtöjännite	5 V DC
Lähtövirta	1 A

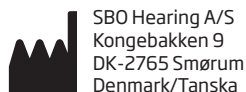

Pääkonttori
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska