

Mode d'emploi

Oticon ON



oticon
life-changing technology

Introduction

Le mode d'emploi suivant s'applique à Oticon ON 2.3.0 ou ultérieur.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section **Avertissements**. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de l'application.

L'application fonctionne sur votre appareil Apple iOS ou Android™ et vous permet de contrôler directement vos aides auditives Oticon.

Lorsque ce manuel mentionne des appareils, il fait référence à votre appareil Apple iOS, par exemple un iPhone® ou un iPad®, ou à votre appareil Android, comme un téléphone ou une tablette.

Veillez à toujours mettre à jour l'application avec la version compatible la plus récente. Assurez-vous également de mettre à jour votre appareil avec la dernière version d'iOS ou d'Android OS.

Pour toute question supplémentaire concernant l'utilisation de l'application, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Veillez noter que certains réglages dépendent de l'adaptation effectuée par l'audioprothésiste.

Ce manuel vous aide avec :

- Le démarrage de l'application mobile
- L'utilisation de l'application sur votre appareil

| À propos | Démarrage | Manipulation | Acouphènes | Options | Avertissements | Plus d'informations |

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Comment utiliser ce manuel

Sachez que vous devez télécharger l'application sur votre appareil et appairer les aides auditives à votre appareil *avant* de suivre les procédures de ce mode d'emploi.

Si vous avez besoin d'aide pour l'appairage de votre appareil aux aides auditives, consultez : www.oticon.fr/pairing

Usage prévu

Usage prévu	Oticon ON est destiné à aider les utilisateurs d'aides auditives sans fil à contrôler différentes fonctions offertes par leur solution auditive. Le produit est conçu pour être utilisé avec une solution auditive déterminée.
Instructions d'utilisation	Aucune indication d'utilisation.
Utilisateurs prévus	Utilisateurs d'aides auditives sans fil. Les enfants de moins de 10 ans doivent être aidés par des adultes responsables.
Environnement d'utilisation	Intérieur et extérieur.
Contre-indications	Aucune contre-indication.
Avantages cliniques	Consulter les avantages cliniques de l'aide auditive.

Sommaire

À propos de

Configuration système	7
-----------------------	---

Démarrage

Écran d'accueil	8
Créer un compte ou se connecter	9

Manipulation

Régler le volume et désactiver le son	10
Changer le programme	11
Adaptateur TV, EduMic et ConnectClip	12
Égaliseur de diffusion	14
Microphone distant	15

Acouphènes

Tinnitus SoundSupport	16
Options avancées de Tinnitus SoundSupport	18

Options

Sound Booster	21
Retrouver mes aides auditives	22
HearingFitness	23
Internet des Objets	24
Apple Watch	25

Avertissements

Avertissements	28
----------------	----

Plus d'informations

Aide et dépannage	29
Informations techniques	30

Clause de non-responsabilité pour Oticon ON

Le fabricant n'assume pas la responsabilité des conséquences de l'utilisation de cette application en dehors de son usage prévu ou des avertissements.

Le fabricant se réserve le droit d'arrêter le service IFTTT sans préavis.

REMARQUE IMPORTANTE

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre aide auditive spécifique, reportez-vous au mode d'emploi de votre aide auditive.

Configuration système

Pour utiliser l'application, vous avez besoin de ce qui suit :

- Des aides auditives Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Opn™, Oticon Xceed, Oticon Xceed Play, Oticon Ruby, ou Oticon Siya - appairées avec votre appareil.
- Un appareil Apple iOS ou Android compatible.
 - Pour vérifier la compatibilité, consultez : www.oticon.fr/compatibility
- Pour les appareils Apple iOS
 - Système d'exploitation iOS fonctionnant avec la version 13.0 ou ultérieure. Pour connaître la version iOS que vous possédez, sur votre iPhone ou votre iPad, rendez-vous dans :
Réglages > Général > Informations > Version du logiciel
- Pour les appareils Android
 - Système d'exploitation Android fonctionnant avec la version 8.0 ou ultérieure. Pour connaître la version Android que vous possédez, sur votre appareil Android, rendez-vous dans : **Paramètres > À propos du téléphone > Version Android**

Écran d'accueil

Utilisez l'écran d'accueil pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'application.

L'écran d'accueil est accessible partout dans l'application en appuyant sur **Accueil** dans la barre des onglets.

- A. Le bouton **Télécommande** vous permet de changer de programme et de régler le volume des aides auditives.
- B. Le bouton **Aides auditives** vous permet de vérifier le niveau des piles et vous aide à retrouver les aides auditives en cas de perte.
- C. Le bouton **HearingFitness™** vous permet de définir des objectifs auditifs personnalisés.
- D. Le bouton **Internet des objets** vous permet d'accéder aux fonctionnalités If This Then That (IFTTT).
- E. Le bouton **Guide auditif** vous donne accès à différents guides pour apprendre à tirer le meilleur parti de vos aides auditives.
- F. Le bouton **Paramètres** vous permet de configurer l'application selon vos préférences et d'accéder au mode d'emploi de l'application.
- G. La barre des onglets vous permet de choisir entre **Accueil**, **Télécommande** et **Aides auditives**.



Créer un compte ou se connecter

La première fois que vous accédez à HearingFitness ou au service Internet des objets/IFTTT, vous êtes invité à créer un compte en utilisant soit vos identifiants Apple, Facebook ou Google, soit votre adresse e-mail.

Si vous créez un compte à l'aide de votre adresse e-mail, vous devez activer le compte et créer un mot de passe.

Si vous avez déjà un compte sur d'autres services enregistrés d'Oticon, vous pouvez réutiliser vos identifiants pour vous connecter à votre compte.

Vous avez uniquement besoin d'un compte pour les services HearingFitness et IFTTT.


Régler le volume et désactiver le son

Vous pouvez régler le volume dans les deux aides auditives en même temps ou indépendamment dans chaque aide auditive.

Le réglage du volume s'applique uniquement au programme sélectionné.

Pour accéder aux commandes de volume et du mode silencieux

- Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
- Indicateur du niveau de volume. La valeur **0** est le volume de démarrage prescrit et défini par votre audioprothésiste.
 - Pour augmenter ou diminuer le volume, déplacez le curseur vers le haut ou le bas.
 - Pour alterner entre le contrôle du volume d'une aide auditive à la fois ou des deux, appuyez sur le bouton curseur **⊕**.
 - Pour activer ou désactiver les microphones des aides auditives, appuyez sur le bouton du mode silencieux.

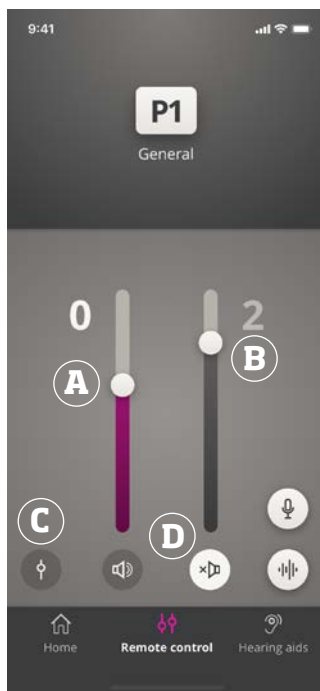

Changer le programme

Un programme est un réglage sonore prédéfini pour vos aides auditives. Chaque programme est optimisé pour des environnements sonores spécifiques ou des sources sonores éloignées.

Le volume peut être réglé indépendamment pour chaque programme.

Pour changer de programme

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le curseur des programmes, balayez vers la gauche ou la droite pour voir les programmes disponibles.
3. Appuyez sur le programme souhaité pour le sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez un programme, la couleur d'arrière-plan de l'icône devient blanche.

Votre audioprothésiste peut définir jusqu'à quatre programmes d'écoute différents lors de votre séance d'adaptation.

Des programmes additionnels pour l'Adaptateur TV Oticon/ EduMic, ConnectClip, et/ou Tinnitus Sound Support™ peuvent également être disponibles.

Adaptateur TV, EduMic et ConnectClip

Si vos aides auditives ont été appairées avec l'Adaptateur TV Oticon ou EduMic et/ou ConnectClip, un ou plusieurs programmes sont disponibles dans le choix des programmes.

Adaptateur TV/EduMic

Si vos aides auditives sont appairées avec un Adaptateur TV, vous pouvez utiliser l'application pour contrôler le son diffusé depuis votre téléviseur à vos aides auditives.

Si vos aides auditives sont appairées avec EduMic, vous pouvez utiliser l'application pour contrôler le son diffusé depuis l'appareil à vos aides auditives.

Pour régler le volume du son diffusé depuis un Adaptateur TV ou EduMic

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des programmes, appuyez sur **Adaptateur TV/EduMic**.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Diffusion**.
4. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

Si vous avez plus d'une télévision et plus d'un Adaptateur TV ou EduMic appairés à vos aides auditives, vous pouvez utiliser l'application pour passer d'une source de diffusion à l'autre.

Pour passer d'une source de diffusion à l'autre

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des programmes, appuyez sur **Adaptateur TV/EduMic**.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Diffusion**. L'appareil mis en évidence est celui qui est en train d'effectuer la diffusion.
4. Dans l'onglet **Diffusion**, appuyez sur le nom de l'appareil.
5. Dans la liste, appuyez sur la source de diffusion souhaitée.

Pour régler le volume des sons ambiants captés par vos aides auditives

1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Environnement**.
2. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

Pour oublier ou supprimer un appareil connecté

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le curseur des programmes, appuyez sur **Adaptateur TV/EduMic**.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Diffusion**.
4. Dans l'onglet **Diffusion**, appuyez sur le nom de l'appareil.
5. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez oublier sur la liste des appareils connectés.
6. Dans l'écran **Modifier l'appareil**, appuyez sur **Oublier l'appareil**.

Remarque

Les deux aides auditives doivent être connectées à l'application pour oublier un appareil. Si vous oubliez/supprimez tous les appareils connectés dans l'application, le programme Adaptateur TV/EduMic est retiré du choix des programmes.

Votre Adaptateur TV/EduMic doit être à nouveau appairé à vos aides auditives avant d'apparaître dans l'application.

Microphone à distance (ConnectClip)

Avec ConnectClip, vous pouvez passer des appels téléphoniques mains libres et diffuser du son depuis tout appareil Bluetooth à vos aides auditives. ConnectClip peut également servir de microphone distant.

Pour régler le volume du son diffusé depuis votre ConnectClip

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des programmes, appuyez sur **Microphone distant**.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Son du microphone**.
4. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

Égaliseur de diffusion

L'égaliseur de diffusion vous permet de régler le volume des bandes de fréquence du son diffusé depuis vos appareils mobiles, l'Adaptateur TV, EduMic, et/ou ConnectClip.


L'égaliseur de diffusion n'est pas disponible sur les programmes pour les acouphènes.

Remarque

Le bouton de l'égaliseur de diffusion est toujours visible sur les appareils Apple et sur certains appareils Android. Sur tous les autres appareils Android, le bouton est visible uniquement lorsque vous diffusez des sons depuis votre téléphone ou d'autres appareils.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.oticon.frl/hearing-aid-users/support/faq/on-app

Pour régler l'égaliseur de diffusion

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Appuyez sur le bouton de l'égaliseur de diffusion .
3. Déplacez les curseurs vers le haut ou le bas.
 - **Basses** ajuste les sons graves.
 - **Moyennes** ajuste les sons médiums.
 - **Hautes** ajuste les sons aigus.

Les réglages par défaut sont toujours de 0 dB et la plage s'étend de +6 dB à -12 dB.


Les réglages de l'égaliseur de diffusion sont conservés tant que l'application est active. Les réglages sont restaurés par défaut lorsque vous quittez l'application.

Microphone distant

Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre iPhone ou iPad comme microphone distant.

Par exemple, vous pouvez placer votre iPhone à côté d'une personne qui parle à l'autre bout de la pièce et le son sera diffusé à vos aides auditives.

Pour activer ou désactiver le microphone distant

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des programmes, sélectionnez l'un des programmes généraux.
3. En bas à droite, appuyez sur le bouton du microphone  .

Remarque

La fonctionnalité microphone distant n'est actuellement disponible que sur les appareils Apple.

Tinnitus SoundSupport - usage prévu

Tinnitus SoundSupport est un outil destiné à générer des sons afin de soulager temporairement les patients souffrant d'acouphènes dans le cadre d'un programme de prise en charge des acouphènes.

La population ciblée est la population adulte (plus de 18 ans).

Tinnitus SoundSupport est destiné aux professionnels de l'audition (audioprothésistes, spécialistes des aides auditives ou ORL) qui connaissent l'évaluation et le traitement des acouphènes et des pertes auditives. L'adaptation de Tinnitus SoundSupport doit être effectuée par un audioprothésiste participant à un programme de prise en charge des acouphènes.

Tinnitus SoundSupport est un générateur de sons qui peut être intégré à vos aides auditives. Dans les aides auditives, des programmes spécialement conçus vous permettent de diffuser différents sons qui peuvent vous aider à détourner votre attention de vos acouphènes.

Durant la séance d'adaptation, votre audioprothésiste peut activer Tinnitus SoundSupport dans un ou plusieurs programmes. À l'instar des autres programmes, ils sont accessibles en haut de l'écran.

Pour obtenir des informations sur les restrictions d'utilisation de ces programmes, nous vous invitons à lire le mode d'emploi de votre aide auditive ou à contacter votre audioprothésiste.

Remarque

Tinnitus SoundSupport est uniquement disponible dans l'application s'il a été activé dans vos aides auditives par l'audioprothésiste.

Tinnitus SoundSupport

Pour sélectionner un programme pour les acouphènes avec des sons de soulagement

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Télécommande**.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des programmes, sélectionnez le programme pour les acouphènes que vous souhaitez utiliser.

Pour de plus amples informations sur les programmes, consultez la section **Changer de programme**.

Pour régler le niveau des sons de soulagement des acouphènes


1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Sons de soulagement des acouphènes**.
2. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

Vous pouvez le faire indépendamment pour chaque aide auditive ou sur les deux aides auditives à la fois.

Pour de plus amples informations sur le contrôle du volume, consultez la section **Régler le volume**.

Pour régler le volume des sons ambiants captés par vos aides auditives

1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Environnement**.
2. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

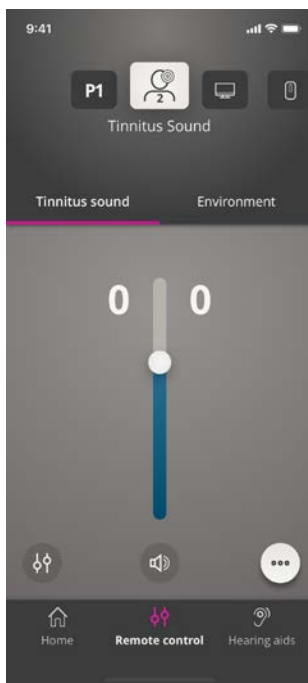

Options avancées de Tinnitus SoundSupport

Les options avancées de Tinnitus SoundSupport incluent les variations des sons de soulagement des acouphènes et un égaliseur de sons de soulagement des acouphènes qui masque les acouphènes selon vos besoins et vous permet de régler le son.

Pour accéder aux options avancées

- Au bas de l'écran de l'application, à droite, appuyez sur le bouton Plus d'options **•••**.

La disponibilité des options avancées de Tinnitus SoundSupport dépend de l'adaptation du programme effectuée par l'audioprothésiste.

Variations des sons de soulagement des acouphènes

Les options des sons de soulagement des acouphènes vous permettent d'apporter des modifications à la variation du son ou à la façon dont il est diffusé.

Les réglages vous permettent de modifier le son de masquage des acouphènes selon vos besoins.



Le son est constant.



Le son est variable dans une très faible mesure, les modulations sont lentes et subtiles.




Le son est variable dans une faible mesure, les modulations sont plus perceptibles.



Le son est très variable, les modulations sont assez actives.



Le son est variable dans une large mesure, les modulations sont très actives.

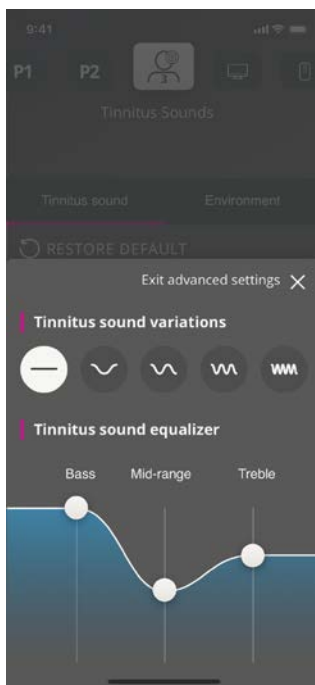

Égaliseur de sons de soulagement des acouphènes

L'égaliseur de sons de soulagement des acouphènes vous permet de régler les différentes caractéristiques (bandes) du son de soulagement des acouphènes.

Il vous permet de modifier :

- A. **Les sons graves**, la partie la plus basse de la gamme musicale.
- B. **Les sons médiums**.
- C. **Les sons aigus** de haute fréquence.

L'état initial, défini par l'audioprothésiste, est de 0 décibels (dB) pour chaque bande. Chaque bande peut être réglée individuellement.


Pour régler l'échelle de décibels (volume) de chaque bande

- Au bas de l'écran de l'application, déplacez les curseurs vers le haut ou le bas.

Le volume peut être diminué jusqu'à 24 dB.

Enregistrer les préférences individuelles

À chaque fois que vous réglez vos préférences pour les sons de soulagement des acouphènes, l'application s'en rappelle, les enregistre automatiquement et les utilise comme vos paramètres préférés.

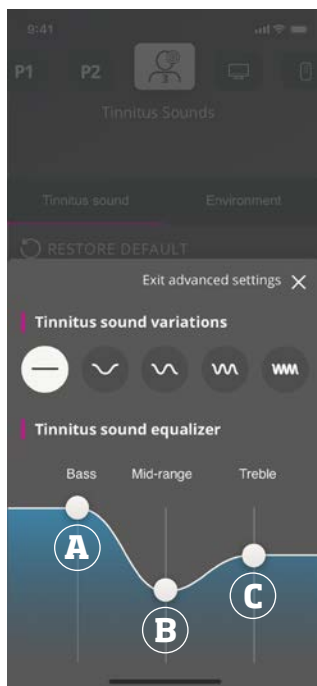


Sound Booster*

Sound Booster est utile si vous rencontrez des difficultés à vous concentrer sur la parole. Lorsqu'il est activé, il améliore la compréhension en supprimant les sources sonores qui ne sont pas de la parole et qui proviennent de l'arrière et des côtés.

Pour activer et désactiver Sound Booster

- Utilisez le bouton horizontal situé au-dessus du curseur de volume pour activer ou désactiver Sound Booster.

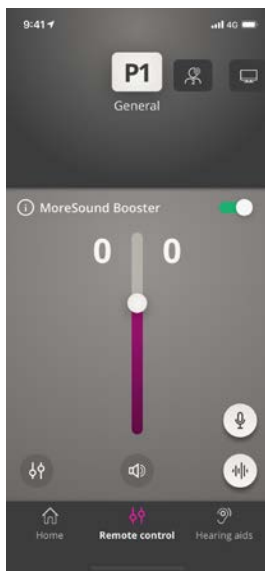

La fonctionnalité peut être désactivée lorsque vous changez de programme, ouvrez le tiroir-pile/ placez les aides auditives dans le chargeur ou reconnectez les aides auditives.

Remarque

*Le nom exact de la fonctionnalité Sound Booster dépend des aides auditives que vous utilisez. La fonctionnalité Sound Booster n'est pas disponible sur les aides auditives Oticon Opn, Oticon Siya et Oticon Ruby.

Retrouver mes aides auditives

Si vous n'arrivez pas à retrouver vos aides auditives, l'application peut vous montrer une carte avec le dernier emplacement connu des aides auditives appairées lorsque l'application était en fonctionnement.

Pour localiser vos aides auditives perdues


1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Aides auditives**.
2. Appuyez sur **Retrouver mes aides auditives**.

Une barre de proximité indique la distance qui vous sépare de chaque aide auditive connectée. Si votre téléphone est hors de portée des aides auditives ou si la connexion est perdue, vous pouvez voir la date et l'heure de la dernière connexion.

Sur la carte, le marqueur vert indique la présence d'une connexion entre votre aide auditive et le téléphone.

Le marqueur rouge indique que la connexion est perdue.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de laisser l'application allumée, exécutée activement ou en arrière-plan.

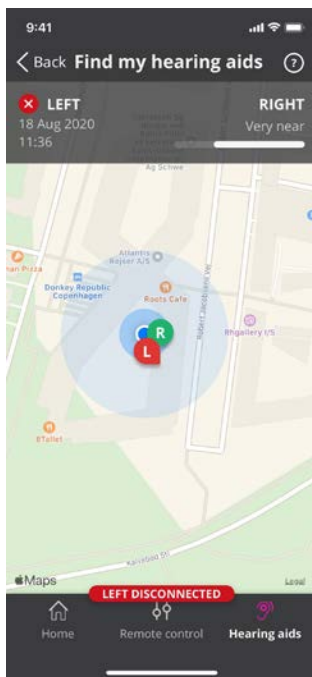

HearingFitness

HearingFitness est une fonction qui vous permet de définir un objectif auditif personnalisé et de suivre l'utilisation quotidienne de vos aides auditives afin d'atteindre cet objectif.

HearingFitness nécessite un compte personnel avec Oticon. Pour de plus amples informations, consultez la section **Créer un compte ou se connecter**.

Si vous avez déjà un compte sur d'autres services enregistrés d'Oticon, vous pouvez réutiliser vos identifiants pour vous connecter à votre compte.

Première utilisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **HearingFitness**.
2. Appuyez sur **Commencer**.
3. Appuyez sur **Se connecter**.

Si vous n'avez pas encore de compte Oticon

- Appuyez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.

Si un message s'affiche indiquant que vos aides auditives ont besoin d'une mise à jour du Firmware, contactez votre audioprothésiste.

HearingFitness

Définir un objectif quotidien

Avec HearingFitness, vous pouvez également définir un objectif pour le nombre d'heures au cours desquelles vous souhaitez utiliser vos aides auditives.

Pour régler votre objectif quotidien

1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Jour**.
2. Appuyez sur **Objectif**.
3. Sélectionnez le nombre d'heures par jour au cours desquelles vous souhaitez utiliser vos aides auditives.
4. Appuyez sur **Définir** lorsque vous avez terminé.

Vue quotidienne, hebdomadaire et mensuelle

Pour obtenir un aperçu de votre utilisation

- Dans la barre de navigation, appuyez sur l'onglet **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Internet des Objets

Oticon ON vous permet de connecter vos aides auditives à l'Internet des objets par le biais du service IFTTT.

Avec IFTTT, vous pouvez automatiser les activités quotidiennes, par exemple allumer les lumières de votre maison lorsque vous allumez vos aides auditives. Vous pouvez également définir une notification SMS envoyée à votre téléphone portable lorsque le niveau de la pile de l'aide auditive devient faible et bien plus encore.

Pour accéder à IFTTT

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet des objets**.

L'utilisation de ce service nécessite un compte personnel avec Oticon. Pour de plus amples informations, consultez la section **Créer un compte ou se connecter**.

Pour de plus amples informations sur IFTTT, consultez : www.oticon.fr/hearing-aid-users/support/how-to/on-app

Apple Watch

Introduction

Avec Apple Watch, vous pouvez régler le volume, activer/désactiver le mode silencieux de vos aides auditives et changer de programme.

Veillez noter que le **0** de l'indicateur du niveau de volume correspond au volume de démarrage prescrit par votre audioprothésiste.

Le volume est modifié dans les deux aides auditives en même temps et s'applique uniquement au programme sélectionné.

Avant de pouvoir utiliser l'application Oticon ON sur votre Apple Watch, vous devez d'abord installer l'application sur votre iPhone et appairer vos aides auditives à votre iPhone.

Configuration système

Pour utiliser l'application avec Apple Watch, vous avez besoin de :


- Apple Watch Series 1-5
- watchOS 4 ou supérieur

Pour régler le volume

- Dans l'écran principal d'**Oticon ON** sur l'Apple Watch, tournez la Digital Crown.

Pour activer/désactiver le mode silencieux de vos aides auditives


- Appuyez sur l'indicateur du niveau de volume.

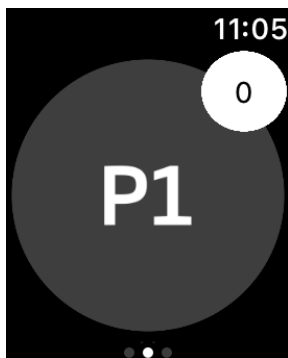

Pour changer de programme

1. Dans l'écran principal d'**Oticon ON**, balayez vers la gauche.
2. Dans l'écran des **Programmes**, appuyez sur le programme que vous souhaitez sélectionner. Par exemple, **P1**.


Lorsque vous appuyez sur le programme sélectionné, la couleur d'arrière-plan de l'icône qui représente le programme devient grise.

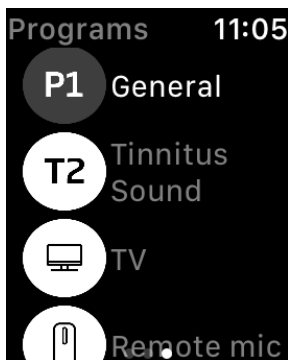

Apple Watch

Pour vérifier le niveau des piles

- Dans l'écran principal d'**Oticon ON**, balayez vers la droite.

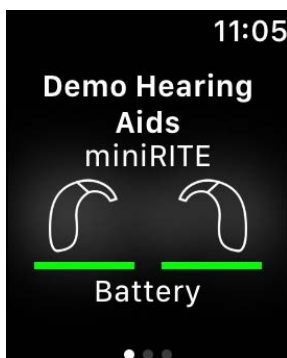

Complication Apple Watch

- Pour accéder rapidement à l'application, vous pouvez définir une complication Apple Watch (si les complications sont disponibles sur le cadran sélectionné). Il s'agit d'une icône pratique qui fait office de raccourci et que vous pouvez placer sur le cadran de la montre (1).



Avertissements

Afin de garantir votre sécurité personnelle et une utilisation correcte, il est indispensable de vous familiariser avec tous les avertissements exposés ci-après et avec le contenu de ce manuel avant d'utiliser l'application. Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec l'application.

L'application est capable de contrôler la sélection de programme et le volume de l'aide auditive connectée. Ainsi, l'application ne doit être utilisée que par le porteur de l'aide auditive, les personnes qui s'occupent de lui ou des professionnels de l'audition. Il faut éviter que d'autres personnes contrôlent l'application.

L'utilisation de l'application peut vous distraire des situations qui requièrent une pleine concentration. Soyez attentif à votre environnement lorsque vous utilisez l'application.

La connexion entre les aides auditives et le téléphone portable peut être perdue en raison d'interférences, d'une batterie faible, de la distance entre le téléphone portable et les aides auditives, etc. Le cas échéant, si cela impacte la fonctionnalité escomptée des aides auditives, il vous est recommandé de redémarrer vos aides auditives.

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre aide auditive spécifique, reportez-vous au mode d'emploi de votre aide auditive.

Aide et dépannage

Pour accéder à l'écran de dépannage

1. Dans la barre des onglets, appuyez sur **Aides auditives**.
2. Appuyez sur **Dépannage**.

Si vous rencontrez encore des difficultés, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Informations techniques

Les définitions présentées ci-dessous peuvent être rencontrées dans le mode d'emploi de l'application Oticon ON :

Description des symboles utilisés dans ce mode d'emploi



Avertissements

Les textes marqués d'un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.



Fabricant

L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les règlements de l'UE 2017/745.



Marquage CE

L'appareil est conforme à tous les règlements et directives de l'UE. Le numéro à quatre chiffres indique l'identification de l'organisme notifié.

Description des symboles et des abréviations utilisés dans l'application mobile



Indicateur de mode d'emploi électronique

Consulter le mode d'emploi électronique

Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter un mode d'emploi électronique.



Dispositif médical

Cet appareil est un dispositif médical.



Code article international

Un code constitué de 14 chiffres, unique et international, utilisé pour identifier les dispositifs médicaux, y compris les logiciels pour les dispositifs médicaux.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark



Siège :

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.fr

