

Scheda dati tecnici

Charger 1.0 miniRITE R

Il caricabatterie è progettato per semplificare le attività di ricarica quotidiane con poche semplici azioni.

Ricarica

- Rimuovere gli apparecchi acustici e inserirli nel caricabatterie, senza dover aprire alcun coperchio.
- Gli apparecchi acustici iniziano a ricaricarsi automaticamente appena posizionati nel caricabatterie e si accendono automaticamente appena tolti dal caricabatterie.
- Ricaricare gli apparecchi acustici ogni notte affinché siano completamente carichi di giorno quando si utilizzano.

Intuitivo

Una spia LED sull'apparecchio acustico consente di capirne facilmente lo stato di carica:

- Arancione/Rosso* = Ricarica in corso
- Verde = Completamente carico

Tempi di ricarica brevi

Se gli apparecchi acustici sono completamente scarichi, i tempi normali di ricarica sono:

- 3 h = Ricarica completa
- 1 h = Ricarica al 50%
- 0,5 h = Ricarica al 25%

Informazioni sul prodotto

- Ricarica induttiva
- Spia LED di accensione/spegnimento
- Connessione magnetica: gli apparecchi acustici rimangono nelle porte di ricarica
- Cavo per alimentazione fissa
- Piedini in gomma per maggiore stabilità
- Forme morbide e arrotondate facili da pulire
- Custodia morbida da viaggio inclusa



Il caricabatterie è progettato per ricaricare i modelli miniRITE R. Si basa su una tecnologia induttiva e ricarica gli apparecchi acustici in modalità wireless nell'arco di tre ore per una ricarica completa.

Progettato per miniRITE R
Oticon More™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby

Porte di ricarica
Per gli apparecchi acustici durante la ricarica



Spina di alimentazione**

- **Spinotto USB**
Da inserire nella spina di alimentazione o in altre sorgenti di alimentazione



Spia LED sull'apparecchio acustico
Arancione/Rosso* = Ricarica in corso
Verde = Completamente carico


Spia LED
Indicatore di accensione/
spegnimento

**Cavo di
alimentazione**

* Il colore è arancione o rosso a seconda dell'apparecchio acustico
** La spina di alimentazione varia da paese a paese



Dati tecnici: Caricabatterie	
Nome	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Progettato per/Compatibile con	Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™ e Oticon Ruby miniRITE R
Dimensioni	Ø 95 mm/altezza totale 39 mm
Peso	135 gr.
Colore	Nero
Spinotto di alimentazione	USB A
Indicatore di stato	Spia LED sul caricabatterie: Indica lo stato di accensione/spegnimento del caricabatterie Spia LED sull'apparecchio acustico durante la ricarica: Indica lo stato di ricarica
Tempo di ricarica degli apparecchi acustici	Max 3 ore a seconda dello stato iniziale della batteria (Temperatura: da +10 a +35 °C) Max 4 ore a seconda dello stato iniziale della batteria (Temperatura: da +5 a +10 °C e da +35 a +40 °C)
Alimentazione	Spina di alimentazione in dotazione
Tensione in ingresso	5 V DC
Corrente in ingresso	<0,2 A (ricarica di due apparecchi acustici) <10 mA in standby (nessun apparecchio acustico inserito)
Cavo	Cavo fisso, lunghezza 150 cm
Connesso a un dispositivo esterno	Se connesso a un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.
Condizioni d'uso	
Condizioni di operatività	Temperatura: da +5 a +40 °C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Temperatura: da -25 a +70 °C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Pressione atmosferica	da 700 hPa a 1060 hPa
Dati tecnici: Unità di alimentazione	
Tensione in ingresso	100-240 V AC
Frequenza in ingresso	50-60 Hz
Tensione in ingresso	5 V DC
Corrente in uscita	1 A

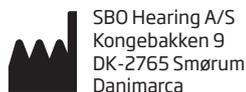

Sede centrale
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca