

GEBRUIKSAANWIJZING

LIHO (LUIDSPREKER-IN-HET-OOR)



Dank u

dat u ons product heeft gekozen om beter te gaan horen.

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw nieuwe hooroplossing van de beste kwaliteit is.

Bovendien is het eenvoudig in het gebruik en onderhoud. Het is aan te bevelen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw toestel.

Uw hooroplossing is voorzien van de modernste technologie en maakt gebruik van de nieuwste inzichten.

Inhoud

Afbeelding LIHO	5a
Afbeelding Power LIHO met Power tip	5b
Afbeelding Power LIHO met PowerMould	5c
Vervangen van de batterij	7
Aan- en uitzetten van uw toestel	9
Links-/Rechtsmarkering	10
Inzetten van het toestel	11
Druktoets	12
Programma's (optie)	14
Volumeregelaar (optie)	16
Standby (optie)	17
Kindveilige batterijlade (optie)	18
Luisterspoel (optie)	21
AutoPhone (optie)	22
DAI (Direct Audio Input)	24
FM	26

Onderhoud van het toestel	28
Dagelijks onderhoud met Mould	30
Dagelijks onderhoud met tips	32
Gebruik van uw hooroplossing	36
Oplossingen bij kleine problemen	43
Oticon Garantiecertificaat	46
Waarschuwingen	51


BELANGRIJK

Lees dit boekje zorgvuldig voordat u uw toestel(len) gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van uw toestel(len) en batterijen.

WAARSCHUWING

De LIHO Power is een krachtige hooroplossing. Sta daarom nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Afbeelding LIHO

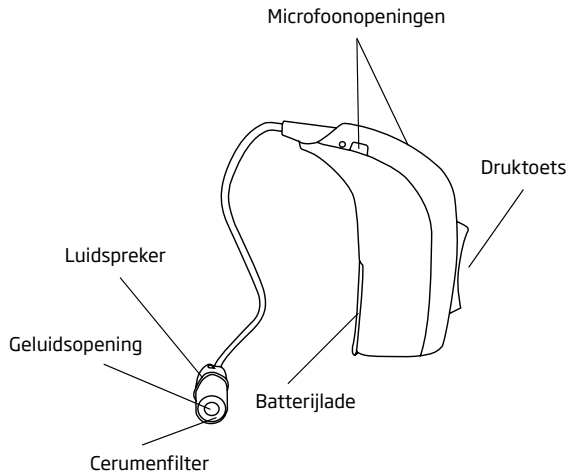



Uw oorstukje:

Open tip

6mm 


8mm 

10mm 

MicroMould 






Plus tip 

Afbeelding Power LIHO met Power tip

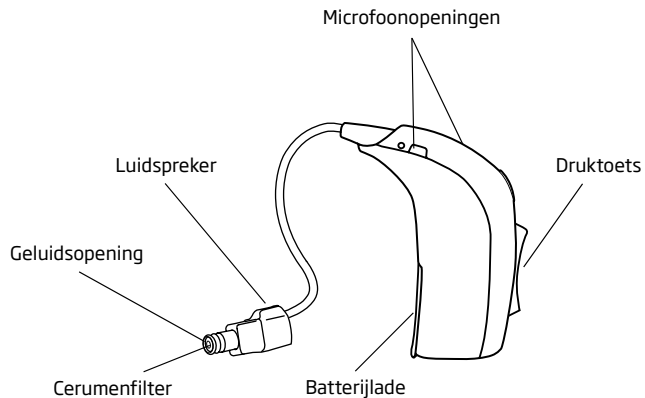


Uw Power tip

Power tips:

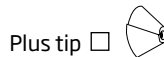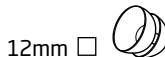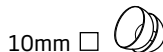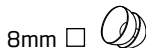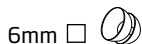

Afbeelding Power LIHO met PowerMould

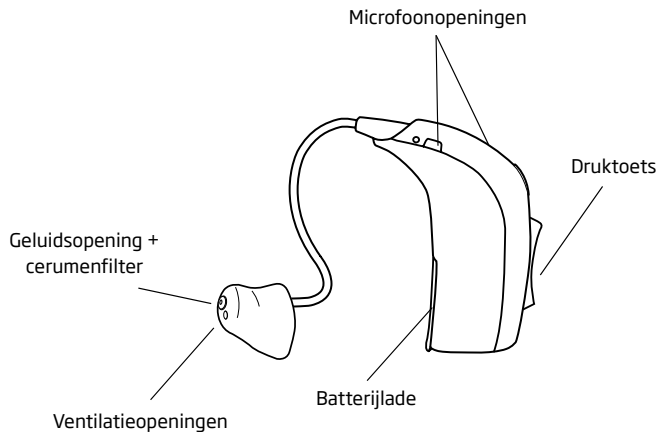



Vervangen van de batterij

Uw toestel gebruikt een type **312** batterij. Bespreek met uw audicien welke batterij u het beste kunt gebruiken.

Een lege batterij moet altijd onmiddellijk worden vervangen.

Wanneer de batterijspanning laag is, hoort u twee signalen. U hoort deze waarschuwing als de batterij nog voor enkele uren stroom heeft. De waarschuwing wordt met regelmatige tussenpozen herhaald om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen.

Wanneer de batterij leeg is, gaat het toestel uit. U hoort dan vier signalen die aangeven dat het niet langer werkt. Dit is geen defect.

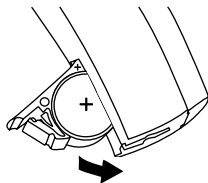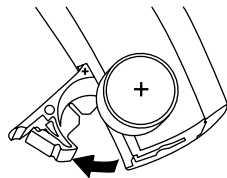


Vervangen van de batterij:

- Open de batterijlade door de verhoogde rand aan de onderkant van het toestel terug te duwen. Verwijder de oude batterij.
- Verwijder de sticker van de +-kant van de nieuwe batterij.
- Plaats de nieuwe batterij zodat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken op de batterijlade. Sluit de batterijlade.

Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden verwijderd.

Na het vervangen van de batterij kan het enige seconden duren voordat de nieuwe batterij optimaal werkt.

Voor het verwisselen van de batterij kan de magneet aan het uiteinde van de MultiTool worden gebruikt.

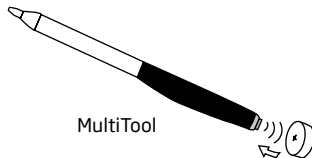

Aan- en uitzetten van uw toestel


U zet het toestel **AAN** door de batterijlade (met batterij) volledig te sluiten. Na het sluiten van de batterijlade start het systeem met een melodie op. Deze melodie geeft aan dat de batterij en het toestel werken.

Zet het toestel **UIT** door de batterijlade enigszins te openen, totdat u een klik voelt.

Zet de batterijlade volledig open als u het toestel niet gebruikt.

BELANGRIJK

Open de batterijlade, met name 's nachts, zodat het eventueel binnenin verzamelde vocht kan verdampen!

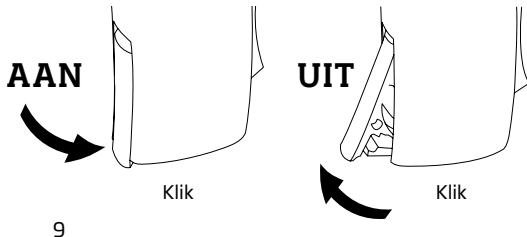


Links-/Rechtsmarkering

Uw hooroplossing is op uw specifieke gehoorverlies aangepast. Wanneer u twee toestellen gebruikt, is het linkertoestel misschien anders geprogrammeerd dan het rechter. Het is dus van belang om de toestellen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Voor eenvoudige herkenning van het linker- en rechtertoestel kan op de batterijlade een kleurcodering zijn aangebracht.

Een blauwe stip markeert het LINKER-toestel.
Een rode stip markeert het RECHTER-toestel.

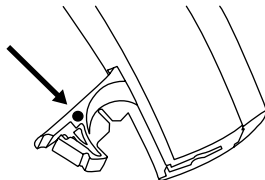


Inzetten van het toestel

Zet de luidspreker, met PowerMould in het oor (1) en plaats vervolgens het toestel achter het oor (2).

Controleer dat de PowerMould na plaatsing stevig en prettig in het oor zit.

De PowerMould moet zodanig geplaatst zijn dat de draad vlak langs de huid ligt.


Zorg dat bij een toestel met grip de contouren van het oor worden gevolgd. Zie afbeeldingen 3 en 4.

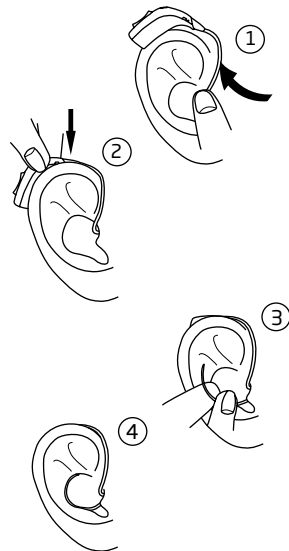

Druktoets

Uw toestel is voorzien van een druktoets om tussen de verschillende programma's te schakelen.

De druktoets kan zowel aan de bovenkant (OP) als aan de onderkant (NEER) worden ingedrukt en geactiveerd.

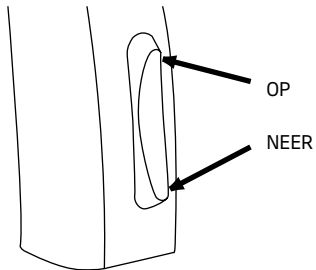

De druktoets van uw toestel kan voor één van de volgende functies worden geprogrammeerd.

Links	Rechts	
		Programmaverandering: Kort indrukken voor programmaverandering.
		Volumeregelaar: Kort indrukken voor volumeverandering.
		Zowel volumeregelaar als programmaverandering: Kort indrukken voor volumeverandering. Lang (2 sec.) indrukken voor programmaveranderingen.

Binaurale coördinatie geactiveerd (zie 'Bij gebruik van twee toestellen').





In te vullen door de audicien!

Programma's (optie)



Uw hooroplossing heeft maximaal vier verschillende voorkeurprogramma's.

Het toestel geeft een signaal bij het schakelen tussen de programma's. Het aantal signalen geeft het gekozen programma aan.

	Eén signaal, bij overschakelen naar programma 1
	Twee signalen, bij overschakelen naar programma 2
	Drie signalen, bij overschakelen naar programma 3
	Vier signalen, bij overschakelen naar programma 4

Druk op het bovenste gedeelte om vooruit te gaan in de programmacyclus, bijvoorbeeld van P1-P2. Druk op het onderste gedeelte om terug te gaan in de programmacyclus, bijvoorbeeld van P3-P2.

Hieronder vindt u een beschrijving van de voor uw hooroplossing beschikbare programma's.

In te vullen door de audicien:

Prg. 1: _____

Prg. 2: _____

Prg. 3: _____

Prg. 4: _____

Bij gebruik van twee toestellen

Om de bediening te vereenvoudigen kan de druktoets worden geprogrammeerd om, via de draadloze communicatie tussen de toestellen, ook het andere toestel naar hetzelfde programma te laten overschakelen. Dit heet binaurale coördinatie.

Volumeregelaar (optie)



De volumeregelaar op uw toestel kan worden geactiveerd.

Met de volumeregelaar kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Druk het bovenste deel van de toets kort in om het geluid **harder** te zetten.

Druk het onderste deel van de toets kort in om het geluid **zachter** te zetten.

U hoort een signaal als u het volume harder of zachter zet. Bij aanzetten staat het toestel op het gewenste volumeniveau. U hoort een signaal wanneer u de volumeregelaar zelf op het gewenste niveau instelt.

Bij gebruik van twee toestellen

Om de bediening te vereenvoudigen kan de druktoets worden geprogrammeerd om, via de draadloze communicatie tussen de toestellen, ook het andere toestel op hetzelfde volume in te stellen. Dit heet binaurale coördinatie.

Standby (optie)



Wanneer u de druktoets minimaal 3 seconden ingedrukt houdt, schakelt het toestel naar Standby.


Door de toets nogmaals kort in te drukken, schakelt u het toestel weer in.

U kunt de Standby-functie gebruiken om de microfoons in het toestel tijdelijk uit te zetten terwijl u het in heeft.

Opmerking: U zet het toestel op Standby door de boven- of de onderkant van de toets in te drukken.

WAARSCHUWING

Gebruik Standby niet om het toestel uit te zetten. In deze stand wordt er nog steeds stroom gebruikt.

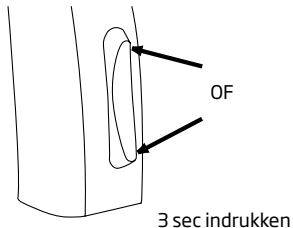



Kindveilige batterijlade (optie)



Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt.


De batterijlade vergrendelen: Zorg dat de lade volledig is gesloten. Gebruik een kleine schroevendraaier om de beveiligde schroef naar de vergrendelde positie te draaien.

De batterijlade ontgrendelen: Gebruik een kleine schroevendraaier om de beveiligde schroef naar de ontgrendelde positie te draaien.

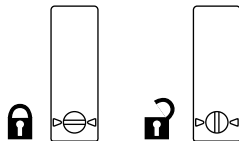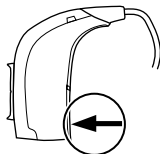

De batterijlade openen

De batterijlade kan alleen met een schroevendraaier worden geopend. Plaats een kleine schroevendraaier in de gleuf onderaan het hoortoestel en duw tegen de lade.

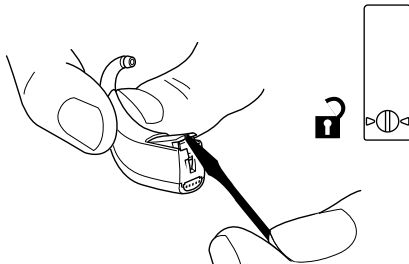

BELANGRIJK

Zorg dat de vergrendeling in de onvergrendelde positie staat voordat u probeert de batterijlade te openen. Overmatige kracht bij het openen van de batterijlade in de vergrendelde positie kan leiden tot permanente schade en de veiligheid van het toestel verminderen. Neem contact op met uw audicien als u vermoedt dat er overmatige kracht is gebruikt of de deur is beschadigd. Forceer de batterijlade niet voorbij de volledig geopende positie. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst. Overmatige kracht kan leiden tot schade aan de batterijlade zodat deze niet meer goed vergrendelt.

Luisterspoel (optie)



De luisterspoel is een ontvanger voor audiosignalen die door een ringleidingsysteem worden uitgezonden. De luisterspoel kan gebruikt worden bij telefoongesprekken en voor ringleidingen in theaters, kerken of collegezalen.

De luisterspoel wordt geactiveerd door met behulp van de druktoets naar het luisterspoelprogramma over te schakelen. Een aantal signalen geeft na inschakeling het luisterspoelprogramma aan.


Zie 'Programma's' voor de plaats van het luisterspoelprogramma.

AutoPhone (optie)

Uw hoorplossing kan worden voorzien van een AutoPhone-functie. Wanneer het toestel in de buurt is van een telefoonhoorn zal de AutoPhone een telefoonprogramma activeren. U hoort een aantal signalen zodra het telefoonprogramma is geactiveerd.

Na het beëindigen van het telefoongesprek keert het toestel terug naar het voorgaande programma.

Niet alle telefoons kunnen de AutoPhone activeren. Soms is een speciale magneet op de telefoonhoorn noodzakelijk. Volg voor het aanbrengen van de magneet de instructies van uw audicien.

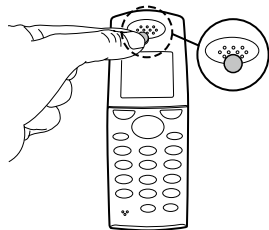

WAARSCHUWIING

Bij gebruik van een AutoPhone-magneet:

- Houd de magneet buiten bereik van kinderen en huisdieren. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken van een magneet.
- Draag de magneet niet in een borstzak en houd de magneet altijd 30 cm weg van actieve geïmplanteerde apparatuur. Gebruik de telefoon met magneet bij voorkeur aan de tegenoverliggende kant van een pacemaker of andere geïmplanteerde apparatuur.
- Houd de magneet 30 cm weg van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

DAI (Direct Audio Input)


Wanneer uw toestel door middel van een DAI-adaptor (accessoire) met een externe geluidsbron, zoals een mp3-speler of een handmicrofoon is gekoppeld, worden de signalen van deze apparaten rechtstreeks naar uw toestel gezonden.

Koppeling van de DAI-adaptor

Open de batterijlade en schuif de DAI-adaptor op het toestel.

Koppel het DAI-snoer aan de adaptor.

Na koppeling van de DAI-adaptor schakelt het toestel automatisch naar een combinatie van een DAI-programma met de toestelmicrofoon.

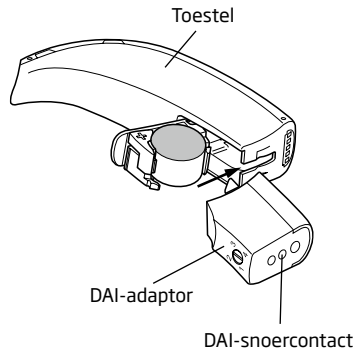

Als u alleen een DAI-programma wenst, kunt u met de druktoets naar het volgende programma overschakelen.

De twee nieuwe programma's worden automatisch achter de door uw audicien geprogrammeerde standaardprogramma's geplaatst.

BELANGRIJK


Bij koppeling van DAI met de op het elektriciteitsnet aangesloten apparatuur moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60601 of vergelijkbare veiligheidseisen.

FM

Met een FM-ontvanger (accessoire) krijgt het toestel rechtstreeks signalen van een externe draadloze FM-zender.

Koppeling van de FM-ontvanger

Open de batterijlade en schuif de FM-ontvanger op het toestel.

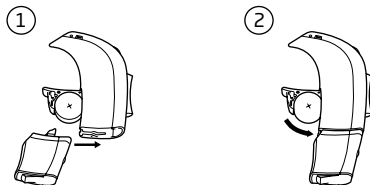

Wanneer de FM-ontvanger is gekoppeld, worden er twee door de audicien ingestelde FM-programma's automatisch na de standaardprogramma's toegevoegd.

Als de FM-ontvanger is gekoppeld en aan staat, schakelt het toestel automatisch naar een programma dat een combinatie van microfoon- en externe draadloze signalen van een FM-zender ontvangt.

Wanneer u aan alleen het FM-programma de voorkeur geeft, kunt u met behulp van de programmaschakelaar naar het volgende programma overschakelen.

Zolang de FM-ontvanger is gekoppeld, kan de druktoets van het toestel te allen tijde worden gebruikt om tussen standaard en FM-programma's te schakelen.

Raadpleeg de specifieke FM-handleiding voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de FM-ontvanger.

Onderhoud van het toestel

Uw gehoorgang produceert oorsmeer (cerumen) waardoor de geluids- of ventilatieopening verstopt kan raken. Wanneer u de richtlijnen in dit gedeelte volgt, voorkomt u vermindering van de geluidsprestaties.

Houd uw toestel bij het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet kan beschadigen als u het laat vallen.


Voordat u gaat slapen:

- Verwijder eventueel oorsmeer uit de openingen van het oorstukje. Reinig het oorstukje volgens de beschrijving op de volgende bladzijde.
- Open de batterijlade om binnenin verzameld vocht te laten verdampen.

Schoonmaken van uw hooroplossing

Gebruik voor het schoonmaken de speciale onderhoudsset.

MultiTool

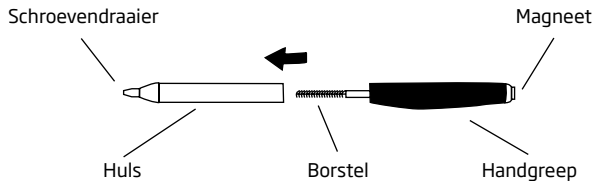


Veeg de buitenkant van het toestel schoon met een droge, zachte doek.

Vervang de borstel zonodig. Trek de borstel uit de handgreep en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep.

Dagelijks onderhoud met Mould

De Mould moet regelmatig worden gereinigd:

- Maak de ventilatie-opening schoon door het borsteltje licht draaiend door de opening te duwen.

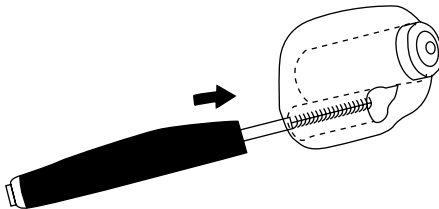

Het toestel en de Mould mogen **nooit** nat worden!

Vervangen van het cerumenfilter

1. Neem de filterhouder uit de verpakking. De filterhouder heeft twee pennen; één met het nieuwe filter, de andere werkt als verwijderaar.
2. Plaats de verwijderaar in de geluidsopening van de Mould.
3. Houd de verwijderaar recht en trek het gebruikte cerumenfilter voorzichtig naar buiten.
4. Draai de filterhouder 180°.
5. Druk het nieuwe filter in de geluidsopening en trek de filterhouder voorzichtig terug.
6. Gooi de gebruikte filterhouder weg.

Het cerumenfilter moet vervangen worden:

- Als u ziet dat het filter in de Mould verstopt is.
- Als het toestel anders klinkt dan normaal.

Gebruik alleen door uw audicien geleverde cerumenfilters.


Raadpleeg de verpakking van het cerumenfilter voor gedetailleerde instructies over de vervanging.

Dagelijks onderhoud met tips

Maak de luidspreker dagelijks schoon. Gebruik het doekje om het aanwezige oorsmeer weg te vegen.

De tip mag niet worden gereinigd. Vervang de bestaande tip regelmatig door een nieuwe, schone tip.




Het is aan te bevelen de tip tenminste één keer per maand of zoveel vaker als de audicien nodig acht, te vervangen.

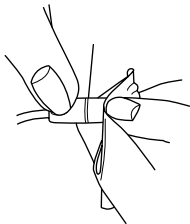

Vervangen van de tip

De tip is eenvoudig te vervangen.

Plaats een vingernagel aan de onderkant van de tip en trek de tip van het toestel.
Druk de nieuwe tip stevig op de luidspreker en controleer of hij stevig vast zit.

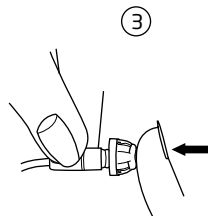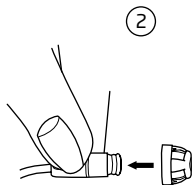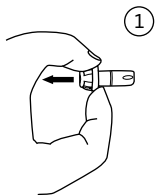

Aan het eind van de luidspreker, onder de tip, zit een wit cerumenfilter. Dit cerumenfilter voorkomt dat de luidspreker beschadigd raakt door stof of vuil. Neem, als het filter verstopt is, contact op met uw audicien voor vervanging.

BELANGRIJK

De tip is gemaakt van een zacht, medisch goedgekeurd rubberen materiaal. De tip veroorzaakt bij losraken van het toestel dan ook geen beschadigingen aan de gehoorgang. Probeer de tip voorzichtig uit het oor te halen en voorkom dat u de tip verder naar binnen duwt. Raadpleeg zonnodig uw audicien.

Vermijd hitte, vocht en chemicaliën

Leg uw toestel nooit in de buurt van open vuur, in een magnetron of in een in de zon geparkeerde auto. Vermijd vocht. Doe het uit bij douchen, als het hard regent en in vochtige ruimtes, zoals een stoombad of sauna.

Als uw toestel toch aan vocht heeft blootgestaan, kan dit een negatieve invloed hebben op de prestaties. U kunt het, na de batterij verwijderd te hebben, in een droog-etui leggen om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen. Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden afgeveegd.

Chemicaliën in cosmetica, zoals parfum, aftershave, insectenspray, haarlak of zonnebrandcrème, kunnen uw toestel beschadigen. Doe uw hooroplossing daarom even uit voordat u dergelijke producten gebruikt. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u uw toestel(len) weer in zet.

Gebruik van uw hooroplossing

Het kost tijd om aan het nieuwe geluid te wennen. Hoe lang dit duurt verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de mate van gehoorverlies en of u al eerder een hoorplossing heeft gedragen.

Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen

1. Thuis, in een rustige omgeving

Luister naar de verschillende achtergrondgeluiden in uw omgeving en probeer elk geluid te identificeren. Sommige geluiden kunnen anders klinken dan u gewend was, zodat u ze opnieuw moet leren herkennen. Op den duur zult u gewend raken aan de zachte geluiden in uw omgeving - raadpleeg uw audicien wanneer dit niet gebeurt.

Als u vermoeid raakt, kunt u het toestel even uit doen en een poosje rusten. Geleidelijk zult u leren het toestel langere perioden in te houden, zodat u er al snel de hele dag baat bij hebt.

2. Een gesprek met één persoon

Ga met uw gesprekspartner in een rustige omgeving zitten. Kijk de spreker aan, zodat u de gezichtsuitdrukkingen goed kunt zien. Spraak kan in het begin misschien wat anders klinken. Wanneer de hersenen eenmaal aan de nieuwe geluiden gewend zijn, zal het verstaan makkelijker worden.

3. Luisteren naar radio of TV

Begin met het luisteren naar het nieuws, de presentatoren spreken meestal duidelijk. Ga daarna pas luisteren naar andere programma's.

Wanneer u moeite heeft met het volgen van radio en televisie kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende hulpmiddelen.

4. Een gesprek met meerdere personen


In een gesprek met meerdere personen is er vaak veel achtergrondlawaai aanwezig. Probeer daarom uw volledige aandacht te richten op degene naar wie u wilt luisteren. Als u iets niet heeft verstaan kunt u gerust om herhaling vragen. Tenslotte mist iedereen weleens een woord.

5. Gebruik van een ringleiding in kerk, theater of bioscoop

Steeds meer kerken, theaters en openbare gebouwen hebben een ringleiding. Dit systeem zendt draadloos geluid uit dat door de luisterspoel van uw toestel wordt opgevangen. De aanwezigheid van een ringleiding wordt met een afbeelding aangegeven. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

6. Gebruik van de telefoon

Houd bij telefoneren de telefoonhoorn schuin tegen uw jukbeen, zodat het geluid van de telefoon rechtstreeks in de microfoonopeningen terecht komt. Zo zal het toestel niet fluiten en bent u er zeker van dat u het gesprek onder de beste omstandigheden kunt volgen. Wanneer u de telefoon op deze manier vasthoudt, moet u rechtstreeks in de microfoon van de telefoon praten om te zorgen dat uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn u ook goed kan verstaan.

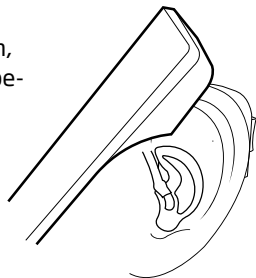

Wanneer u moeite heeft met telefoneren kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende hulpmiddelen.

Wanneer uw hooroplossing een programma heeft met luisterspoel (en uw telefoon is voorzien van een ingebouwde ringleiding) kunt u, om de weergave verder te verbeteren, overschakelen naar het luisterspoelprogramma.

Bedenk dat de luisterspoel storende geluiden, zoals fax, televisie, enz. kan opvangen. Zorg er daarom voor dat u bij gebruik van een luisterspoelprogramma altijd 2-3 meter van dergelijke apparatuur verwijderd bent.

7. Draadloze en mobiele telefoons

Uw toestel voldoet aan de meest strikte eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt voor gebruik met een hooroplossing. Gebruik de microfoonpositie, tenzij u een speciale 'lus' voor uw mobiele telefoon heeft.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over mobiel telefoongebruik.

Wanneer u moeite heeft met telefoneren via de mobiele telefoon kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende hulpmiddelen.

Gebruik uw hooroplossing de hele dag

De beste manier om beter te gaan horen is te oefenen totdat u uw persoonlijke hooroplossing de hele dag comfortabel kunt dragen. Onregelmatig gebruik zal meestal niet het volledige profijt opleveren.

Een hooroplossing kan uw gehoor niet herstellen, noch een gehoorverlies verbeteren of voorkomen. Het kan u echter wel helpen beter gebruik te maken van de hoormogelijkheden die u heeft. Gebruik altijd beide toestellen wanneer u er twee heeft. Kunnen horen met twee oren is net zo belangrijk als kunnen zien met twee ogen.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van twee toestellen:

- Beter kunnen horen waar geluiden vandaan komen.
- Beter kunnen verstaan in lawaaiige omstandigheden.
- Een 'voller' en aangenaamer geluidbeeld.

Oplossingen bij kleine problemen

Klacht	Oorzaak
Geen geluid	Lege batterij
	Verstopte geluidsopening
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening
	Vocht
	Lege batterij
Snerpend geluid	Het toestel zit niet goed in het oor
	Opgehoopt oorsmeer in de gehoorgang

Raadpleeg uw audicien als de bovenstaande oplossingen niet afdoende werken.

Oplossing	
Vervang de batterij	pg. 7 & 8
Reinig de Mould of vervang de tip	pg. 30 & 32
Overweeg vervanging van het cerumenfilter of de tip	pg. 31 & 33
Reinig de Mould of vervang de tip	pg. 30 & 32
Droog de batterij en het toestel met een doekje	pg. 35
Vervang de batterij	pg. 7 & 8
Zet het toestel opnieuw in het oor	pg. 11
Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts	

Internationale garantie

Oticon hooroplossingen hebben een fabrieksgarantie voor de eerste twaalf maanden. Deze garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten van het toestel, maar niet van accessoires, zoals batterijen, slangetjes, cerumenfilters, enz.

De garantie geldt niet voor schade, defecten of uitval, ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik, onzorgvuldigheid, reparatie door ongeautoriseerden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of zaken in het toestel of onjuiste instelling door de aanpasser.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw audicien kan een uitgebreider garantie hebben gegeven dan deze garantie. Raadpleeg voor meer informatie uw audicien.

Bij problemen met uw hooroplossing

Bij problemen kunt u het beste naar de audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar ter plekke worden verricht.

Oticon Garantiecertificaat

Naam:

Audicien:

Adres audicien:

Telefoon audicien:

Aankoopdatum:

Garantieperiode:

Maand:

Links:

Serienr.:

Rechts:

Serienr.:

Batterijtype: 312

Productgoedkeuring, voorzorgsmaatregelen en markeringen

Het toestel bevat een radiozender die gebruik maakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Het zendvermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van de hooroplossing is lager dan de elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeen lampen, computerschermen, afwasmachines, enz. Het toestel voldoet aan de internationale normering betreffende Electromagnetic Compability.

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Mobiele telefoon

Sommige slechthorenden hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun toestellen hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en toestellen niet compatibel zijn. Volgens de ANSI C63.19 normering (ANSI C63.19-2006 Amerikaanse nationale standaardmethode van metingen betreffende compatibiliteit tussen draadloze communicatie-apparatuur en hooroplossingen) kan de compatibiliteit tussen een bepaalde hooroplossing en mobiele telefoon worden voorspeld door de kwalificatie van de toestelimmunititeit op te tellen bij de kwalificatie van de emissies van de mobiele telefoon. Zo is bijvoorbeeld de gecombineerde kwalificatie van een toestel met een kwalificatie van 2 (M2/T2) en een telefoon met een kwalificatie van 3 (M3/T3) in totaal 5. Elke gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 biedt 'normaal gebruik'; een gecombineerde kwalificatie van 6 of meer levert 'uitstekende prestatie'

De immunititeit van dit toestel is M4/T4.

BELANGRIJK

De prestaties van individuele hooroplossingen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer deze hooroplossing daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aankoop van een nieuwe mobiele telefoon. Vraag voor meer informatie de leverancier van uw mobiele telefoon om het boekje 'Hearing instrument Compatibility with Digital Wireless Cell Phones.'

Het toestel bevat een module met:

FCC ID: U28FURIT03

IC: I350B-FURIT03

Het toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese industrie.

De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1. Het toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. Het toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur.

Veranderingen of modificaties die niet door Oticon zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming van de FCC om deze apparatuur te gebruiken in gevaar brengen.

Waarschuwingen

Lees de volgende waarschuwingen en inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw hooroplossing gaat gebruiken.

De toestellen en batterijen kunnen bij onjuist gebruik of inslikken gevaarlijk zijn. Dergelijke acties kunnen ernstig letsel of blijvende gehoorverlies veroorzaken of zelfs fataal zijn.

- De toestellen, onderdelen daarvan en batterijen zijn geen speelgoed en dienen buiten bereik te worden gehouden van ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze schade zou kunnen toebrengen.
- Vervang de batterij niet in het bijzijn van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Controleer uw medicijnen voordat u ze inneemt. Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen.

Waarschuwingen

- Stop uw toestel of batterijen nooit in uw mond, ze zijn glad en kunnen per ongeluk worden ingeslikt.
- De meeste hooroplossingen van Oticon kunnen worden geleverd met een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een toestel of batterij.

Waarschuwingen

Gebruik van uw hooroplossing

- De toestellen mogen alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en geadviseerd door de aanpasser. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Batterijgebruik

- Gebruik goede batterijen. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer batterijen nooit te verbranden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Waarschuwingen

Veiligheid

- Het geluid van een hooroplossing kan, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is, plotseling wegvallen. Houd daar rekening mee wanneer u deelneemt aan het verkeer, of u in een situatie bevindt waar waarschuwingssignalen belangrijk zijn.

Storing

- Uw toestel is op storing getest volgens de meest strenge internationale eisen. Door de steeds voortschrijdende technische ontwikkelingen worden echter voortdurend nieuwe producten geïntroduceerd, waardoor onvoorziene storing kan optreden. Voorbeelden hiervan zijn magnetrons, alarmsystemen in winkels, mobiele telefoons, faxapparatuur, PC's, röntgenapparatuur, CT-scanners, enz.
- Uw toestel voldoet aan de strengste eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Het toestel kan echter storing veroorzaken bij medische apparatuur. Een dergelijke storing kan ook worden veroorzaakt door radiosignalen, stroomstoringen, metaaldetectors op vliegvelden, elektromagnetische velden van medische apparatuur en elektrostatische ontladingen.

Waarschuwingen

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van een hooroplossing kan vermeerdering van oorsmeerproductie optreden.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Ga naar uw (KNO-)arts bij een van deze bijwerkingen.

Veiligheidseisen Direct Audio Input (DAI)

- De veiligheid van toestellen met DAI (Direct Audio Input) wordt bepaald door de externe geluidsbron. Bij koppeling aan op het elektriciteitsnet werkende apparatuur, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60601 of vergelijkbare veiligheidsnormen.

Waarschuwingen

Cerumenfilter

- Inspecteer uw hooroplossing altijd om er zeker van te zijn dat er geen ruimte bestaat tussen de MicroMould en de luidspreker.

Raadpleeg uw audicien bij twijfels of vragen over het gebruik of de vervanging van uw cerumenfilter.

Waarschuwing voor audicien en gebruiker

- Bij de keuze en aanpassing van een hooroplossing waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt, dient speciale aandacht te worden besteed aan een mogelijk risico op beschadiging van het restgehoor van de gebruiker.
- Het doosje waarin het toestel kan worden opgeborgen heeft een ingebouwde magneet. Draag dit doosje niet in uw borstzak of in de buurt van uw borst als u geïmplanteerde apparatuur zoals een pacemaker of defibrillator gebruikt.

Oticon verklaart hierbij dat de hooroplossing voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de Directive 1999/5/EC. Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE 0543 0682



Gooi, in vervand met
milieuvuiling, uw lege
batterijen niet bij het
huishoudelijk afval.



N1175

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively



10518400001

oticon
PEOPLE FIRST