

OTICON | **ConnectLine**
Mic



Gebruiksaanwijzing

oticon
PEOPLE FIRST

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe ConnectLine Mic. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe ConnectLine Mic te halen.

Voor eventuele vragen over het gebruik van uw ConnectLine Mic kunt u contact opnemen met uw gehoorspecialist.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

De Mic is bedoeld voor gebruik door een persoon die met een hoortoestelgebruiker praat, zodat de hoortoestelgebruiker die persoon beter hoort. De Mic stuurt de stem van de spreker rechtstreeks naar de hoortoestelgebruiker.

Inhoudsopgave

Over	
Inhoud pakket	6
Productoverzicht	7
Hoe de Mic werkt	8
Opladen/stroomindicator	10
Aan de slag	
Koppelen/eerste installatie (slechts één keer nodig)	12
Gebruik	
Starten/aanzetten/geluid van Mic hervatten	16
Geluid pauzeren	18
Geluid van Streamer Pro hervatten	20
Geluid controleren	22
Mic uitzetten	23
Waarschuwingen	
Geen speelgoed	24
Gebruik in vliegtuigen	24

Actieve implantaten	24
Niet blootstellen aan hoge temperaturen	25
Schoonmaken	25
Alleen opladen van UL/IEC-goedgekeurde apparatuur	25
Gebruik van halskoord	25
Explosieven	26
Producten voldoen aan R&TTE	26
Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie	26
Aanvullende informatie	
Garantiecertificaat	28
Internationale garantie	29
Belangrijke aanvullende informatie	32

Inhoud pakket

Mic



Draagzakje



Halskoord



Stroomvoorziening
(oplader)



Deze handleiding



**Stroomvoorziening zal
van land tot land verschillen.*

Productoverzicht




Statusindicator (oranje)

Microfooningang (stem)

Stroomindicator (groen)


Aan/uit-toets

Microfooningang
(lawaaidetector),
niet bedekken

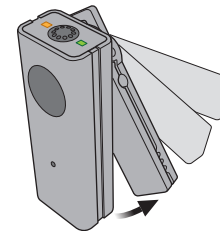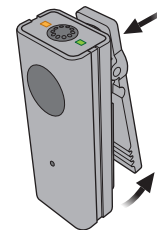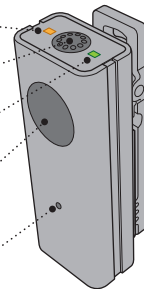


Hoe de Mic werkt

De Mic stuurt de stem van de spreker rechtstreeks naar de hoortoestelgebruiker.

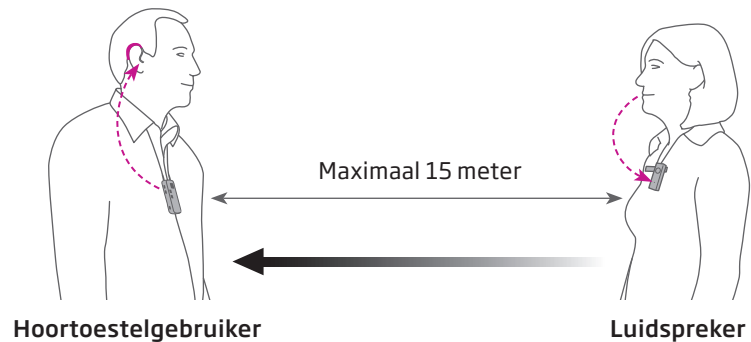

De Mic moet in de richting van de mond van de spreker wijzen op een afstand tussen de 10 en 20 cm.

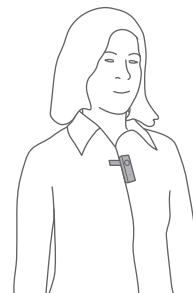

Met clip
gedragen



Met halskoord
gedragen




Verkeerd
gedragen


Opmerking: Een Mic werkt slechts met één Streamer tegelijkertijd

Opladen/stroomindicator

Om de Mic op te laden, sluit u de kabel van de stroomadapter aan op de mini USB-connector aan de onderkant van de Mic.

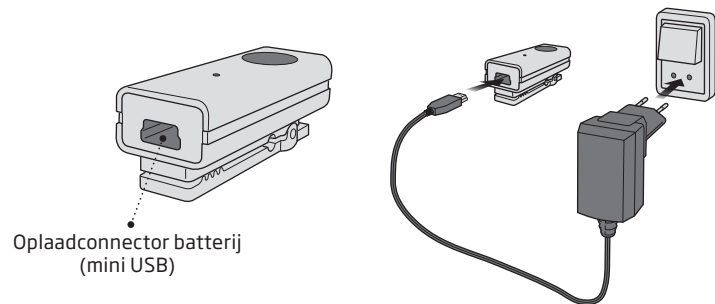

**Constant rood
lampje**

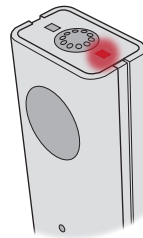


Batterij bijna leeg.
Maximaal 20 minuten
sprektyd resterend.

**Knipperend groen
lampje**



Opladen.

**Constant groen
lampje**

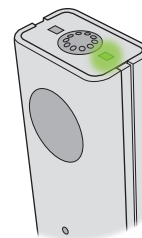

De Mic is na ongeveer 1,5
uur volledig opgeladen
en kan gedurende 5 uur
worden gebruikt indien
volledig opgeladen.

Koppelen/eerste installatie (slechts één keer nodig)

1. Streamer Pro in koppelingsstand



Houd de aan/uit-toets aan de bovenkant ingedrukt.




Houd ingedrukt tot het blauwe lampje knippert.

2. Mic in koppelingsstand



Houd de aan/uit-toets op de Mic 6 seconden ingedrukt tot het oranje lampje snel begint te knipperen.

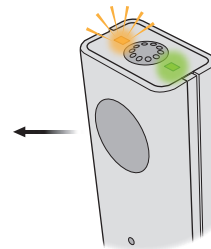

Het oranje lampje knippert snel in koppelingsstand.

3. Mic gekoppeld



Wacht ongeveer 1 minuut tot het oranje lampje op Streamer Pro en het oranje lampje op de Mic aan gaat.


Starten/aanzetten/geluid van Mic hervatten

1. Zorg ervoor dat Streamer Pro aan staat



Houd de aan/uit-toets aan de bovenkant ingedrukt totdat alle lampjes aan de voor- en bovenkant gaan knipperen om aan te geven dat Streamer Pro aan staat.

2. Mic starten / aanzetten

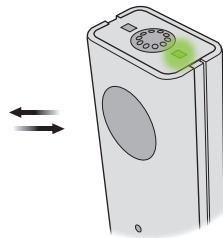

Druk de aan/uit-toets kort in.



Oranje lampje pulseert langzaam.


3. Geluid van Mic naar Streamer Pro




Oranje lampje op Streamer Pro en oranje lampje op Mic zijn aan.

Geluid pauzeren


a. Geluid van Mic pauzeren

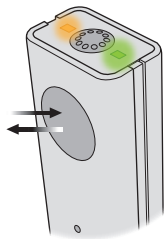

Aan/uit-toets kort indrukken.

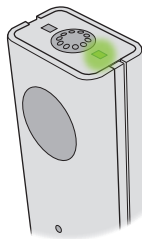

Oranje lampje op Mic gaat uit.

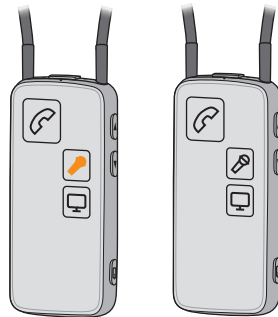

Oranje lampje op Streamer Pro gaat uit.


b. Geluid van Streamer Pro pauzeren



Mic-toets op Streamer Pro kort indrukken.




Oranje lampje op Streamer Pro gaat uit.

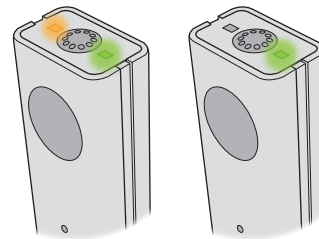

Oranje lampje op Mic gaat uit.


Geluid van Streamer Pro hervatten

1. Mic moet aan staan

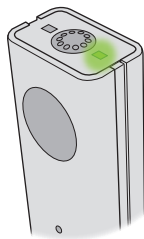

(Groen lampje is aan)

2. Geluid van Streamer Pro starten

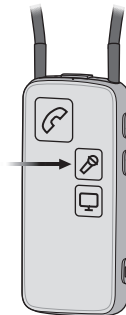


Mic-toets op Streamer Pro kort indrukken.




Oranje lampje op Streamer Pro pulseert langzaam.

3. Geluid van Mic naar Streamer Pro

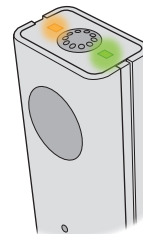


Na 2 seconden gaat het oranje lampje op de Mic aan.

Geluid controleren

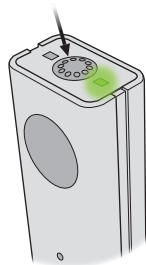

Tik op de bovenkant van de microfoon om te controleren of het geluid te horen is in de hoortoestellen.

Mic uitzetten

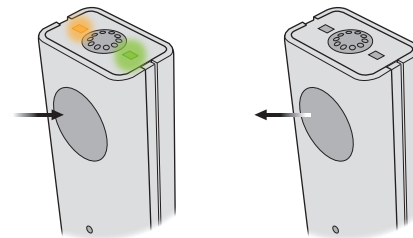

Houd twee seconden ingedrukt tot het groene lampje uit gaat.

Waarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw ConnectLine Mic gaat gebruiken. Het bevat belangrijke aanwijzingen en informatie over het gebruik van uw ConnectLine Mic.

Geen speelgoed

- De ConnectLine Mic is geen speelgoed en moet daarom buiten bereik worden gehouden van kinderen en ieder ander die onderdelen zou kunnen inslikken of zichzelf op een andere manier zou kunnen verwonden. Er moet speciaal worden gelet op de kleinere onderdelen om te voorkomen dat kinderen deze inslikken en erin stikken. Waarschuw onmiddellijk een arts als een onderdeel is ingeslikt.

Gebruik in vliegtuigen

- De ConnectLine Mic mag niet aan boord worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

- Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Uw ConnectLine Mic heeft een draadloze transmissie. Houd de microfoon minstens 15 cm verwijderd van het implantaat en draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons de richtlijnen van fabrikanten van implanterbare defibrillators en pacemakers te volgen.

- Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Niet blootstellen aan hoge temperaturen

- Stel uw ConnectLine Mic nooit bloot aan hoge temperaturen door hem in een oven of magnetron te plaatsen of door hem te verbranden. Hij kan ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Schoonmaken

- Oticon raadt aan dat u uw ConnectLine Mic regelmatig schoonmaakt met een vochtige doek zonder oplosmiddelen.
- Dompel de ConnectLine Mic niet onder in water of andere vloeistoffen.

Alleen opladen van UL/IEC-goedgekeurde apparatuur

- De veiligheid van het opladen van accu's met alleen de USB-kabel wordt bepaald door de externe apparatuur. Wanneer de USB-kabel is aangesloten op apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur UL goedgekeurd zijn, of voldoen aan IEC 60950, IEC-60065, IEC-60601 of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

Gebruik van halskoord

- De lanyards zijn zodanig ontworpen dat ze automatisch open gaan als ze ergens achter blijven hangen. Probeer een halskoord nooit in te korten of aan te passen. Een halskoord mag niet gebruikt worden door kinderen die minder wegen dan 11 kilogram.

Waarschuwingen

Explosieven

- De batterij van uw Mic heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. De Mic is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve atmosferen. Het is aan te bevelen uw Mic niet te gebruiken op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.

Producten voldoen aan R&TTE

- Als de ConnectLine Mic in Noorwegen wordt gebruikt, dient ervoor gezorgd te worden dat er geen radiotransmissie is binnen 20 km van het centrum van Ny Ålesund.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

- Verwijder uw Mic tijdens het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie.

Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: _____

Audicien: _____

Adres audicien: _____

Telefoon audicien: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

De fabrikant, Oticon, verleent de oorspronkelijke koper van dit product een beperkte garantie van één jaar.

Deze garantie treedt in werking op de oorspronkelijke aankoopdatum van dit apparaat en blijft vanaf die datum geldig gedurende één kalenderjaar.

Merk op dat er verlengde garanties van toepassing kunnen zijn in uw land. Neem contact op met uw plaatselijke gehoorspecialist voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Elk elektronisch onderdeel dat vanwege vakmanschaps-, productie- of ontwerpgebreken tijdens de garantietermijn niet goed functioneert bij normaal gebruik, zal worden gerepareerd of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid wanneer het wordt teruggestuurd naar het verkoop-punt. Het transport wordt betaald door de klant. Indien wordt vastgesteld dat reparatie niet mogelijk is, kan de gehele eenheid worden vervangen door een gelijkwaardige eenheid na onderling overleg tussen de gehoorspecialist en de klant.

Wat dekt deze garantie niet?

Deze éénjarige beperkte garantie dekt geen:

- Storingen als gevolg van een verkeerde behandeling, nalatigheid of ongeval.
- Randaccessoires vermeld in de product-brochure, wanneer deze producten meer dan 90 dagen na de oorspronkelijke aankoop worden teruggestuurd.
- Batterijen.
- Apparaten die worden aangesloten, gebruikt of ingesteld op een manier die niet overeenkomt met de meegeleverde instructies.
- Gevolgschade en schade als gevolg van belemmering of verlies van dit apparaat. Het exclusieve verhaal onder deze garantie is strikt beperkt tot reparatie of vervanging zoals hierin voorzien.

- Tijdens het transport beschadigde producten, tenzij onderzocht door de afzender en teruggezonden door de garantie-verlener met het onderzoeksrapport.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de bouw van een van haar apparaten zonder enige verplichting om eventuele wijzigingen aan te brengen op eerder gekochte eenheden. Deze garantie komt in de plaats van alle andere expliciete garanties van de fabrikant. Geen enkele vertegenwoordiger of andere persoon is gemachtigd om voor de fabrikant enige aansprakelijkheid te vertegenwoordigen of op zich te nemen in verband met verkoop of gebruik van dit product anders dan hierboven uiteengezet.

Als uw ConnectLine Mic service nodig heeft onder de voorwaarden van deze garantie, verpak het apparaat dan zorgvuldig om schade te voorkomen en stuur het terug naar uw verkooppunt. Gelieve een gedetailleerde beschrijving van het probleem, uw volledige naam, factuuradres en telefoonnummer op te geven.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw verkooppunt heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer informatie.

Belangrijke aanvullende informatie

De ConnectLine Mic bevat een radiozender die gebruik maakt van frequentiewissel-technologie die werkt in de 2,4 GHz ISM-band.

Het piekvermogen van de zender is minder dan 6 dBm en de antenne is een kleine PCB-antenne met een directionele gain van minder dan 2 dBi (dB over een isotropische of omni-directionele antenne).

Het zendvermogen van de ConnectLine Mic ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van de ConnectLine Mic is lager dan de onbedoelde elektromagnetische straling van bijvoorbeeld haardrogers, elektrische scheerapparaten, enzovoorts.

De ConnectLine Mic voldoet aan de internationale standaard betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.

VS en Canada

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn veel van de relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Dit toestel is gecertificeerd volgens:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentie-vrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform Deel 15 van de FCC regels. Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden tegen storing in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw audicien of een ervaren radio-/tv-technicus.

Hierbij verklaart Oticon A/S dat deze ConnectLine Mic voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.nl

169210NL / 14.09.16



Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.



E2831



169210NL / 14.09.16



0000169210000001

oticon
PEOPLE FIRST

169210NL / 14.09.16