

Gebruiksaanwijzing

Streamer Pro 1.3A

ConnectLine



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Inleiding

Dit boekje verstrekt advies over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe Streamer Pro. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe Streamer Pro optimaal benutten.

Voor vragen over het gebruik van uw Streamer kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje bevat de onderstaande navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Functies](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Streamer Pro is bedoeld voor gebruik door gebruikers van draadloze Oticon hoortoestellen. Het product is bedoeld voor gebruik met de gegeven hooroplossing. Streamer Pro is een communicatie-interface tussen het hoortoestel en andere apparaten zoals mobiele telefoons. Streamer Pro kan worden verbonden met een reeks externe (extra) apparaten zodat de hoortoestelgebruiker beter een televisie kan horen of kan communiceren via mobiele telefoons met Bluetooth, enz. Streamer Pro kan ook worden gebruikt als afstandsbediening waarmee u het volume van het hoortoestel kunt aanpassen en van programma's kunt wisselen op het hoortoestel.
Aanwijzingen voor gebruik	Geen aanwijzingen voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruikersomgeving	Binnen/buiten.
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.

Inhoudsopgave

Over	
Inhoud van de verpakking	6
Accessoires en reserveonderdelen	8
Overzicht van de Streamer	11
Aan de slag	
Gebruik van de Streamer met de neklus	12
Gebruik van de Streamer zonder de neklus	14
De Streamer AAN- en UITzetten	16
Afstandsbediening van het hoortoestel	18
Koppelen van de Streamer	20
Opladen van de Streamer	22
Gebruik	
Batterijwaarschuwing	24
Koppelingen wissen	28
Schoonmaken en onderhoud	31

Functies	
Primaire functies	32
Mobiele telefoon	33
ConnectLine telefoonoplossing	40
ConnectLine microfoon	42
ConnectLine televisieoplossing	44
ConnectLine app	46
Secundaire functies	47
Muziek of audiokabel	48
Headsetkabel	50
Draadloze muziek of audio	52
Headset - draadloos	54
Luisterspoel (ingebouwd)	56
FM-ontvanger (optioneel)	58
Waarschuwingen	
Waarschuwingen	60
Aanvullende informatie	
Gebruiksomstandigheden	64
Internationale garantie	65
Garantie	66
Technische informatie	67

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:



Streamer Pro
1.3A




Neklus - middellang



Neklus - lang

Dit boekje (gebruiksaanwijzing)

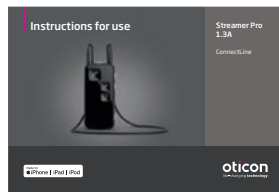

Doos 1



Oplader

Voeding verschilt van land tot land.

Doos 2

USB-oplaad-
kabel



3,5 mm mini-
jack stereokabel
voor mp3 of
muziek

3,5 mm headset-
splitserkabel voor
gebruik met pc's



Doos 3



Beschermhoes

Accessoires en reserveonderdelen

Beschermhoezen

Aanvullende beschermhoezen, donker- of lichtgrijs, zijn verkrijgbaar bij uw hoorzorgprofessional.




Beschermhoezen - enkele toets

Beschermhoezen, donker- of lichtgrijs, met één uitstekende toets, die 'blinde' bediening vergemakkelijkt, is verkrijgbaar bij uw hoorzorgprofessional.



Vervangende neklussen

Vervangende neklussen, zwart of wit, zijn verkrijgbaar in drie maten: kort (51 cm), middellang (66 cm) en lang (81 cm), bij uw hoorzorgprofessional.

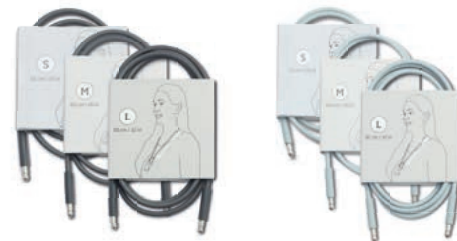

Riemclip


Een riemclip, zwart of wit, is verkrijgbaar bij uw hoorzorgprofessional.



BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Overzicht van de Streamer

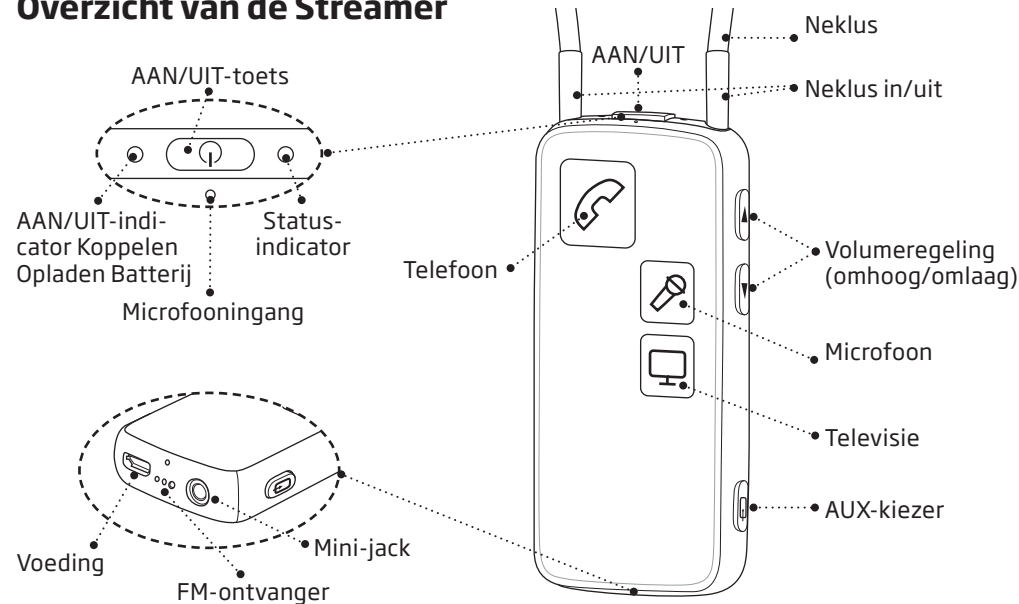

Gebruik van de Streamer met de neklus

De neklus is een integraal onderdeel van het elektronische systeem van Streamer. Deze wordt gebruikt als antenne om geluid naar uw hoortoestellen te sturen.

Voor een zo goed mogelijk geluid en een zo lang mogelijke streamingtijd moet de Streamer altijd worden gedragen met een van de meegeleverde neklussen. De Streamer wordt geleverd met twee neklussen, een lange en een middellange.



BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de neklus voorzichtig. Om verstikking te voorkomen laat de neklus automatisch los als deze ergens achter blijft haken. De neklus mag op geen enkele manier worden ingekort of gewijzigd, zoals een knoop erin maken om de lengte te verkorten. Als de neklus breekt, kan deze niet worden gerepareerd en moet deze onmiddellijk worden vervangen. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor vervanging.

Vastmaken van de neklus

De neklus klikt in de gaten bovenop de Streamer.


Let op: als u via de Streamer met iemand praat, is het belangrijk dat uw stem kan worden opgepikt door de ingebouwde microfoon aan de bovenkant.

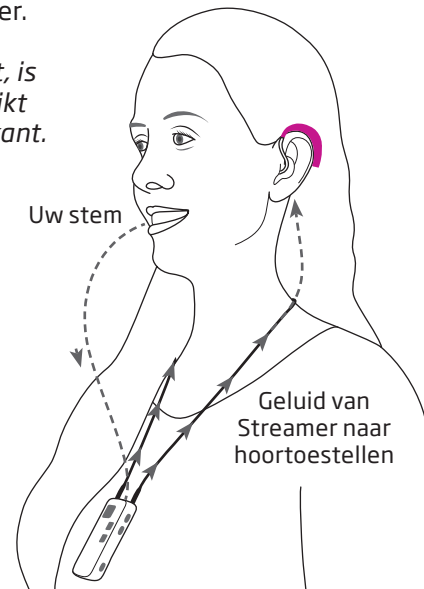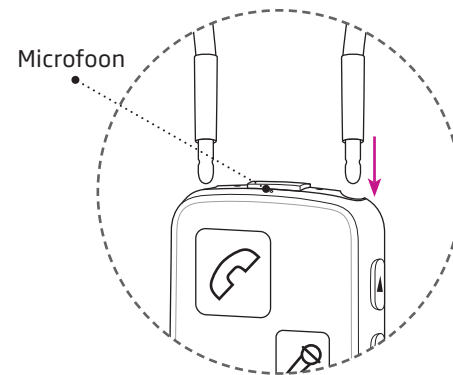

Gebruik van de Streamer zonder neklus

Bij gebruik van de Streamer zonder de neklus moet de afstand tot het hoortoestel minder dan een meter bedragen. U ervaart mogelijk wegvallen van het geluid, daarom raden we aan altijd de neklus te gebruiken.

Bij gebruik van de Streamer zonder de neklus wordt meer stroom verbruikt - de maximale streamingtijd wordt daardoor teruggebracht tot 5 uur op een volledige lading.

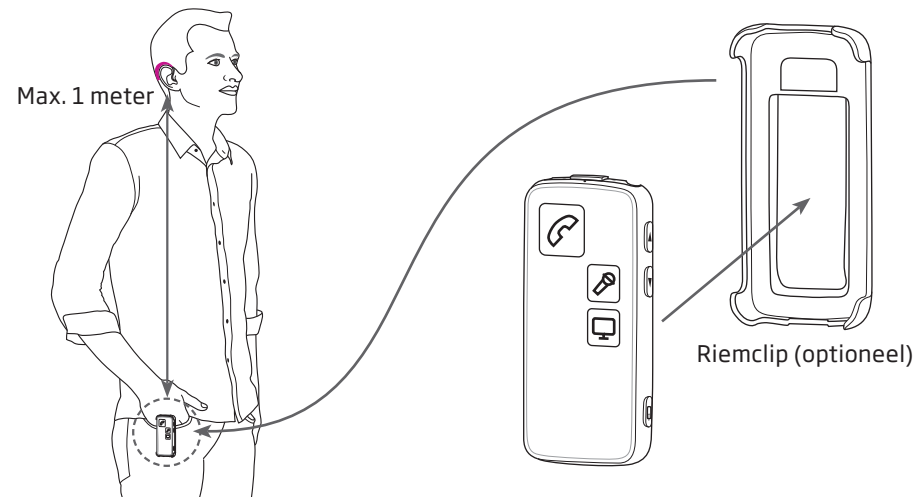

De Streamer AAN- en UITzetten

Aanzetten

Druk de AAN/UIT-toets bovenop de Streamer 2 seconden in tot alle lampjes aan de voorkant en bovenkant knipperen om aan te geven dat de Streamer is ingeschakeld.


Laat de AAN/UIT-toets los. De aan/uit-indicator bovenop de Streamer zou nu naar groen moeten gaan.

Als de Streamer niet wordt ingeschakeld, zorg dan dat deze wordt opgeladen.

Om de status van de Streamer te zien, drukt u kort op de AAN/UIT-toets.

Uitzetten

Houd de AAN/UIT-toets bovenop de Streamer 2 seconden ingedrukt tot de groene aan/uit-indicator uit gaat.

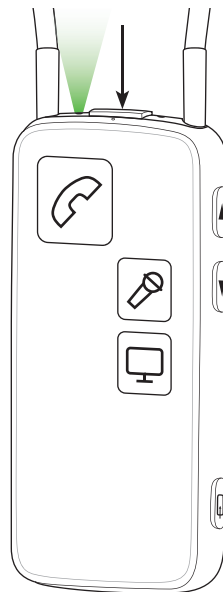

Status	Voorkant	Beschrijving
	 	De Streamer is uit
	 	Nadat u de AAN/UIT-toets 2 seconden heeft ingedrukt, gaan alle lampjes enkele seconden aan om aan te geven dat Streamer is ingeschakeld.
	 	De Streamer is nu ingeschakeld en klaar voor gebruik.

Afstandsbediening van het hoortoestel

Volume omhoog/omlaag

Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt het volume van de hoortoestellen overeenkomstig geregeld. U hoort korte 'tikjes' op uw hoortoestellen ter bevestiging.

Programma wisselen op de hoortoestellen


U kunt programma's omhoog of omlaag wisselen door langer dan een seconde op volume omhoog of omlaag te drukken. Het wisselen van het programma wordt aangegeven door een geluid op uw hoortoestellen.

De hoortoestellen dempen

U kunt het geluid van de hoortoestellen dempen door volume omhoog EN omlaag 1 seconde tegelijkertijd in te drukken.

BELANGRIJKE OPMERKING

De dempfunctie is alleen beschikbaar op de meest recente Oticon hoortoestellen. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie. Ook al is de Streamer uit, de afstandsbedieningsfunctie van de hoortoestellen werkt nog steeds.

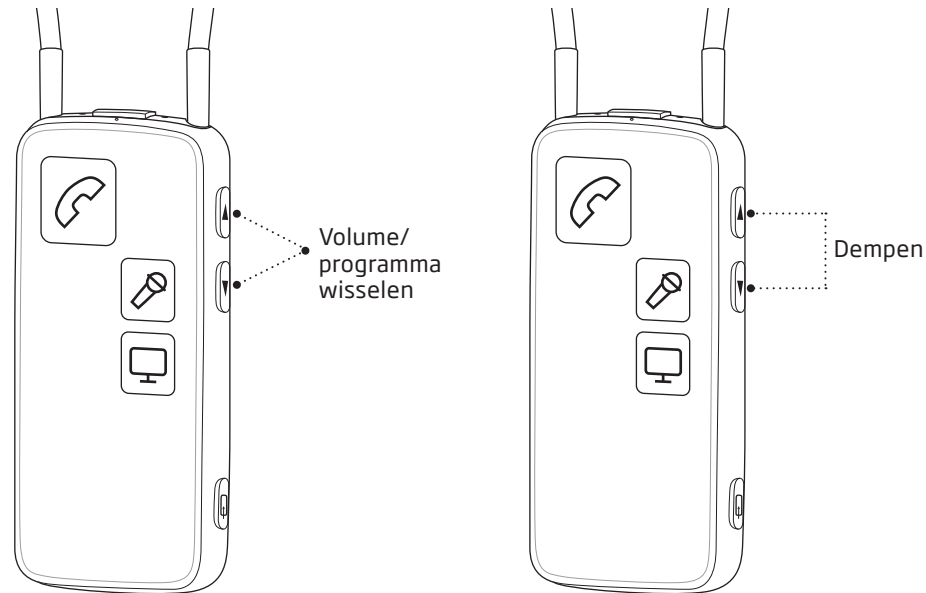


Koppelen van de Streamer

Voordat de Streamer met andere apparaten - zoals mobiele telefoons - kan worden gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld.

1. Zet de Streamer in de koppelingsmodus

Houd de AAN/UIT-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt tot de indicator blauw knippert.

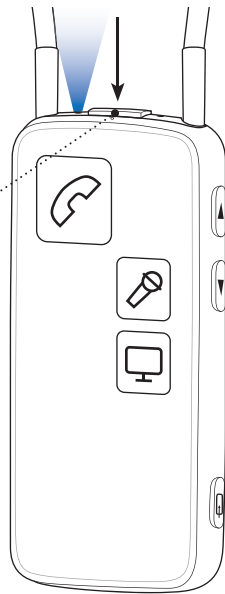


2. Zet het andere apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) in de koppelingsmodus.

Dit bevindt zich gewoonlijk in een instellingenmenu op uw telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld bij 'koppelen'.

3. Het andere apparaat (de mobiele telefoon) vraagt vaak om een pincode.

De pincode voor de Streamer is 0 0 0 0 (vier nullen).

4. Eenmaal gekoppeld toont de mobiele telefoon gewoonlijk een headsetpictogram; terwijl de koppelingsindicator van de Streamer constant blauw is.

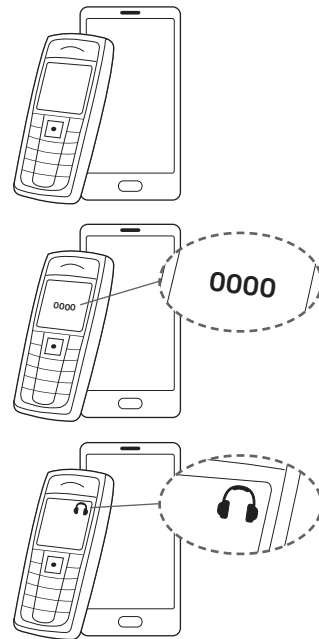


Opladen van de Streamer

De Streamer gebruikt een oplaadbare batterij. We raden u aan om de Streamer eenmaal per dag op te laden voor de best mogelijke prestaties.

Steek de kabel van de meegeleverde oplader in de micro-USB-aansluiting aan de onderkant van de Streamer **(A)**. Vergeet niet de oplader in een stopcontact te steken.

Als de Streamer is ingeschakeld, wordt het opladen aangegeven door een knipperende groene indicator bovenop. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de indicator constant groen.

Als de Streamer is uitgeschakeld, wordt het opladen aangegeven door een knipperende groene indicator bovenop. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de indicator uit.

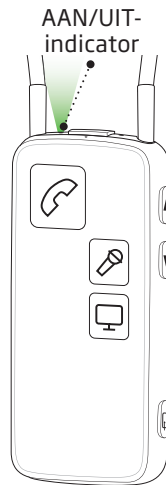


BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de meegeleverde originele 5,0 V/1 A adapter met CE- en veiligheidsmarkering voor het opladen van de Streamer.



Status	Voorkant	Beschrijving
 		Opladen - indien uitgeschakeld - de statusindicator knippert groen.
 		Opladen - indien ingeschakeld (of in gebruik) - de statusindicator wisselt tussen hard en zacht groen.

 Knipperen  Vervagen

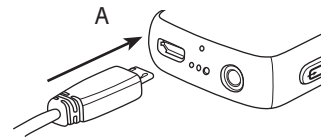


BELANGRIJKE OPMERKING

Tijdens het opladen hoort de oplaadindicator te branden zoals in dit boekje is beschreven. Als de oplaadindicator niet brandt zoals is beschreven, koppel het apparaat dan los van de oplader en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

Batterijwaarschuwing

De Streamer geeft een bijna lege batterij (ongeveer 20 minuten capaciteit over) aan met een constant rood lampje en een vrijwel lege batterij (ongeveer 5 minuten capaciteit over) met een knipperend rood lampje.

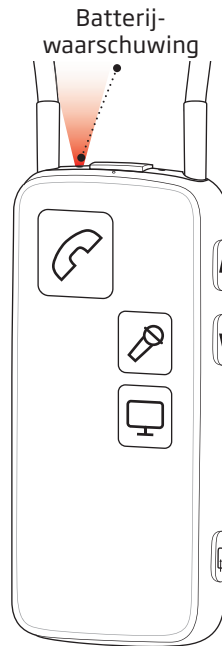

Status	Voorkant	Beschrijving
 		Batterij bijna leeg - nog 20 minuten capaciteit bij streamen naar hoortoestellen.
 		Batterij vrijwel leeg - nog 5 minuten capaciteit bij streamen naar hoortoestellen.

 Constant  Vervangen


BELANGRIJKE OPMERKING

Voorkom dat de batterij volledig leegraakt. Door de batterij opgeladen te houden blijft de capaciteit behouden. De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.

Batterijcapaciteit en oplaadtijd	
Batterijcapaciteit met neklus	Tot 10 uur typisch dagelijks gebruik: 2 uur telefoon, 6 uur tv en 2 uur stand-by.
Batterijcapaciteit zonder neklus	Tot 5 uur typisch gebruik: 1 uur telefoon, 3 uur tv en 1 uur stand-by.
Oplaadtijd van de batterij	2 uur voor een volledige lading, met de meegeleverde voeding.
Afstandsbediening	Als de Streamer uit staat, werkt de afstandsbedieningsfunctie van de hoortoestellen tot 6 maanden lang op één volledige lading.
Verwachte levensduur van de batterij	De Streamer-batterij gaat meer dan 2 jaar mee als deze eenmaal per dag volledig wordt opgeladen.

Koppelingen wissen

Als u problemen heeft met koppelingen, kunt u alle koppelingen wissen door de AAN/UIT-toets en de volume-omhoogtoets tegelijkertijd 3 seconden in te drukken.

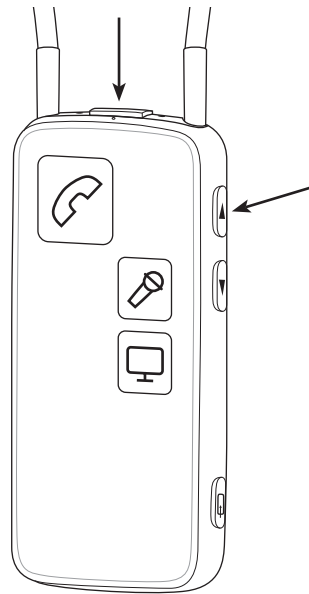

Status	Voorkant	Beschrijving
 		Streamer in koppelingsmodus
 		Koppelen voltooid
 		Streamer aan

 Constant  Knipperen

Statische elektriciteit

Als de Streamer wordt blootgesteld aan elektrostatische ontlading, oftewel statische elektriciteit, kan deze stoppen met streamen. De Streamer start opnieuw, waarna u uw streaming kunt hervatten.

Voor gedetailleerde informatie over het tot stand brengen van specifieke streamingverbindingen, zie “Functies” in deze gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud

De Streamer is een verzegeld apparaat dat weinig onderhoud vereist. Vuil, vocht en vet moeten worden verwijderd met een zachte, droge doek. Het wordt aanbevolen om de Streamer regelmatig schoon te maken. De microfooningang en de aansluitingen voor de audio-ingang, de neklus en opladen moeten vrij van vuil worden gehouden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, vochtige doek om de Streamer schoon te maken. De Streamer en de neklus mogen nooit worden gewassen of ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Primaire functies


De Streamer-gebruikersinterface is ontworpen om u het best mogelijke dagelijkse gebruik te bieden in de volgende situaties:

1. Gebruik van een mobiele telefoon via Bluetooth*.

Gebruik van de ConnectLine telefoonoplossing (apart verkrijgbaar) met een analoge vaste telefoon*.

2. Gebruik van een ConnectLine parttermicrofoon (apart verkrijgbaar), om de kans te vergroten dat u een gekozen spreker kunt horen op afstand of in zeer rumoerige situaties.


3. Gebruik van de ConnectLine televisieoplossing (apart verkrijgbaar) om het televisiegeluid draadloos naar uw hoortoestellen te verzenden*.

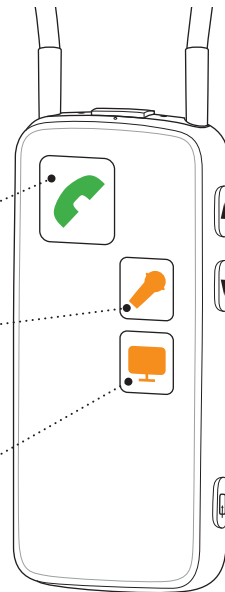

* De Streamer en de hoortoestellen veranderen in feite in een draadloze headset

Mobiele telefoon

Om gesprekken te kunnen ontvangen of voeren terwijl u de Streamer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de Streamer en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, ingeschakeld zijn en binnen bereik zijn (10 meter). Een mobiele telefoon geeft vaak met een klein headsetpictogram aan dat deze met de Streamer is verbonden.

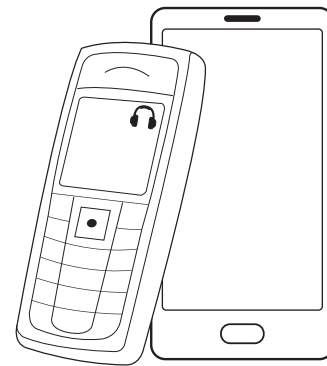


Een gesprek beantwoorden

Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt spreken.

Als uw mobiele telefoon overgaat, hoort u een melding op uw hoortoestellen. Tegelijkertijd knipperen de telefoontoets en de statusindicator op de Streamer groen.

Druk kort op de telefoontoets van de Streamer om het gesprek te beantwoorden. U hoort een korte bevestigingspiep op uw hoortoestellen. De telefoontoets en de statusindicator zijn nu constant groen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u simpelweg kort op de telefoontoets van de Streamer.

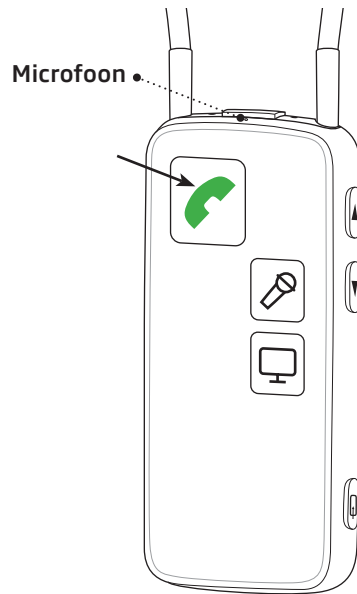

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Telefoontoets en statusindicator bovenop knipperen groen. U hoort een indicator van een inkomend gesprek op uw hoortoestellen.
  		Wanneer het gesprek is verbonden, hoort u een piep ter bevestiging dat het gesprek is beantwoord - u kunt nu luisteren naar en praten tegen de andere persoon.

 Constant  Knipperen


Bellen

Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt spreken.

Om te bellen, hoeft u alleen de mobiele telefoon te bedienen. U hoeft de Streamer niet te bedienen. Toets simpelweg het nummer in zoals gewoonlijk om te bellen - het gesprek wordt automatisch verbonden met uw Streamer.

De telefoontoets op de Streamer en de statusindicator bovenop worden groen en u hoort een bevestigingspiep op uw hoortoestellen die aangeeft dat het gesprek is verbonden via uw Streamer en hoortoestellen.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u simpelweg kort op de toets "gesprek beëindigen" op de telefoon of op de telefoontoets van de Streamer.

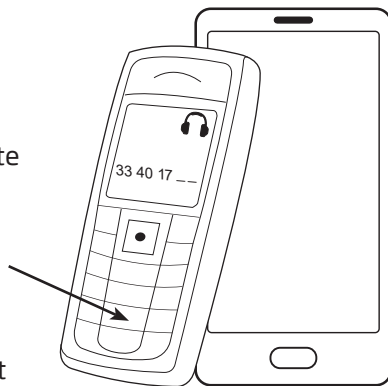

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Wanneer het gesprek is verbonden, hoort u een piep ter bevestiging dat het gesprek is verbonden - u kunt nu luisteren naar en praten tegen de andere persoon.

 Constant  Knipperen

Personalisering van functies van de mobiele telefoon

De volgende functies van de mobiele telefoon kunnen door uw hoorzorgprofessional worden in- of uitgeschakeld.

Gesprek weigeren - standaard ingeschakeld

Een inkomend gesprek kan worden geweigerd door kort op de volume-omlaagtoets op de Streamer te drukken.

Spraakkiezen - standaard ingeschakeld

Door kort op de telefoontoets te drukken, wordt spraakkiezen ingeschakeld (als uw mobiele telefoon dit ondersteunt en u zich niet binnen het bereik van een ConnectLine telefoonadapter bevindt).

Laatste nummer opnieuw kiezen - standaard ingeschakeld

Door de telefoontoets ingedrukt te houden, wordt het laatste nummer opnieuw gekozen (als uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Gesprek overdragen - standaard ingeschakeld

Door de telefoontoets ingedrukt te houden, wordt het gesprek terug overgedragen naar de mobiele telefoon.

Alle toetsen aan de voorzijde beantwoorden gesprekken - standaard ingeschakeld

Als dit is uitgeschakeld, beantwoordt alleen de telefoontoets op de Streamer gesprekken.


Inkomende (A2DP) verbindingen inschakelen - standaard uitgeschakeld

Indien ingeschakeld, kunnen andere apparaten zoals iPods, computers en mobiele telefoons audiostreaming activeren, bijvoorbeeld inkomende sms-meldingen of muziek gestart vanaf een gekoppelde en verbonden mobiele telefoon.

ConnectLine-telefoonoplossing


De Streamer kan ook worden gebruikt met een traditionele analoge vaste telefoon door gebruik te maken van een ConnectLine telefoonoplossing, die als aparte accessoire verkrijgbaar is.

Voor informatie over het gebruik van de ConnectLine telefoonoplossing wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine telefoonadapter wordt geleverd.

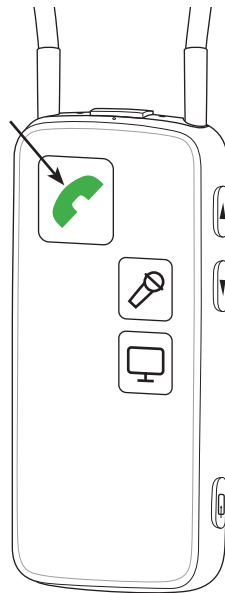

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Streamer verbonden - u kunt luisteren naar en praten tegen de andere persoon.


 Constant

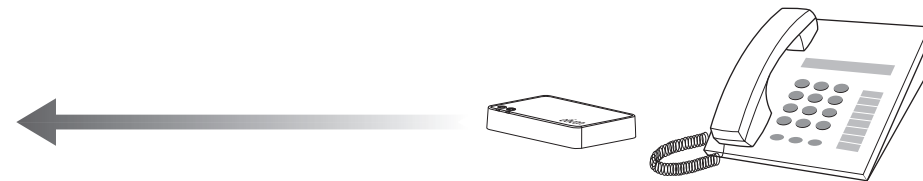

ConnectLine microfoon


Een ConnectLine microfoon is verkrijgbaar als aparte accessoire. Spraak van de drager van de microfoon wordt via de Streamer overgebracht naar de drager van de Oticon hoortoestellen.

Voor informatie over het gebruik van de ConnectLine microfoonoplossing wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine microfoon wordt geleverd.

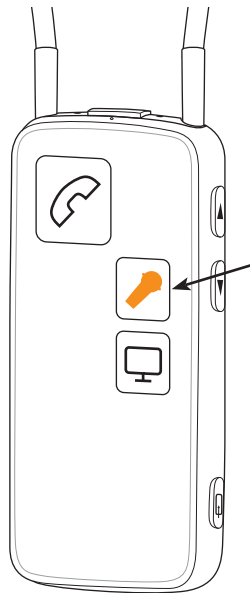

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Indien verbonden met de microfoon - u hoort het geluid van de microfoon op de hoortoestellen.


  Constant

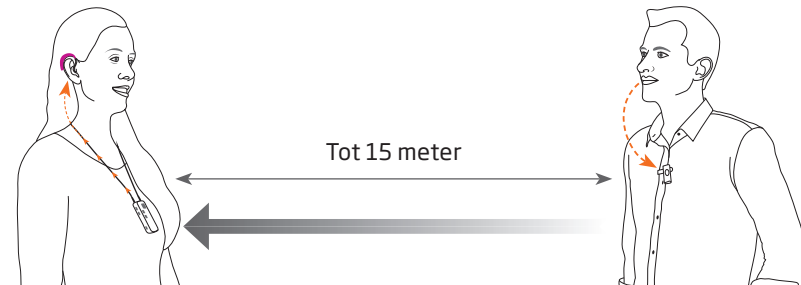

ConnectLine televisieoplossing


Een ConnectLine televisieoplossing is verkrijgbaar als aparte accessoire die het geluid van een televisie via de Streamer naar uw Oticon hoortoestellen zendt.

Voor informatie over het gebruik van de ConnectLine televisieoplossing wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij de ConnectLine televisieadapter wordt geleverd.

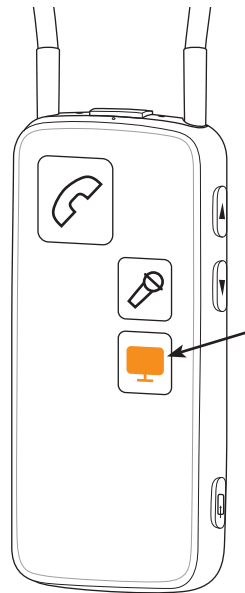

Status	Voorkant	
  		Streamer aan en gereed
  		Verbinden met de televisie
  		Streamer verbonden - geluid van televisie op hoortoestellen.

  Constant   Knipperen

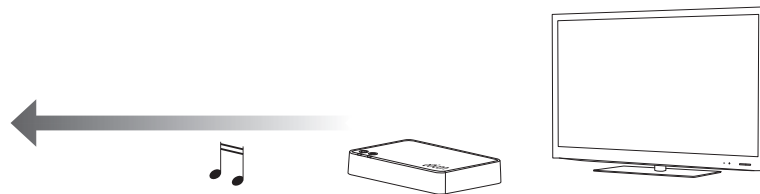

ConnectLine app

De app voor iPhone®, iPad®, iPod touch® en Android™-apparaten biedt een intuïtieve en discrete manier om de hoortoestellen en het ConnectLine systeem te bedienen. Ook biedt de app de mogelijkheid om de functies van het ConnectLine systeem aan te passen.

Verkrijgbaar in de App Store® en Google Play™.



Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.oticon.global/compatibility.


Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple-producten en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Hou er rekening mee dat gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.



Secundaire functies

De Streamer kan worden gebruikt met een breed scala aan standaard randapparatuur zoals mp3-spelers, computers, enz.

De volgende prioriteiten gelden.

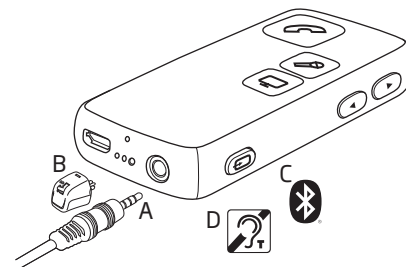


A	Prioriteit 1	Mini-jack in/uit (indien aangesloten)	Druk kort op de AUX-kiezer
B	Prioriteit 2	FM (indien aangesloten)	Druk kort op de AUX-kiezer
C	Prioriteit 3	Draadloos Bluetooth (ingebouwd)	Druk kort op de AUX-kiezer
D	Prioriteit 4	Ringleidingontvanger (ingebouwd)	Houd de AUX-kiezer 2 seconden ingedrukt

Muziek of audiokabel


Door de meegeleverde mini-jack kabel aan te sluiten kunt u naar muziek/audio luisteren van een breed scala aan apparaten.

Druk kort op de AUX-kiezer om naar audio van uw apparaat te luisteren. Het streamen begint automatisch als de kabel wordt aangesloten.

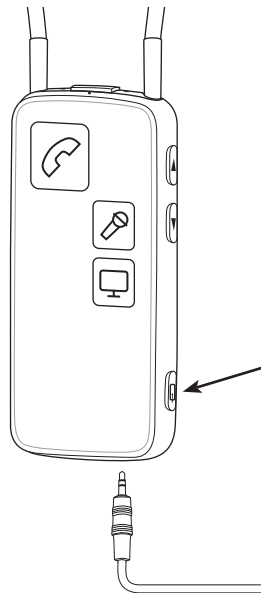

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		U hoort een bevestigingspiep op uw hoortoestellen gevolgd door het geluid van het apparaat

  Constant

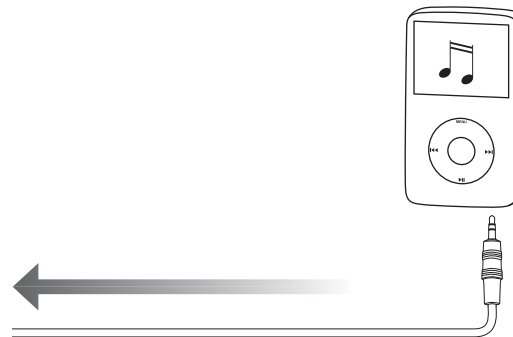


Headsetkabel

Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt spreken.

Door de meegeleverde mini-jack kabel en de meegeleverde headset-splitserkabel aan te sluiten, kunt u de Streamer als headset gebruiken op uw computer.

Druk kort op de AUX-kiezer om de headset-functie te gebruiken.

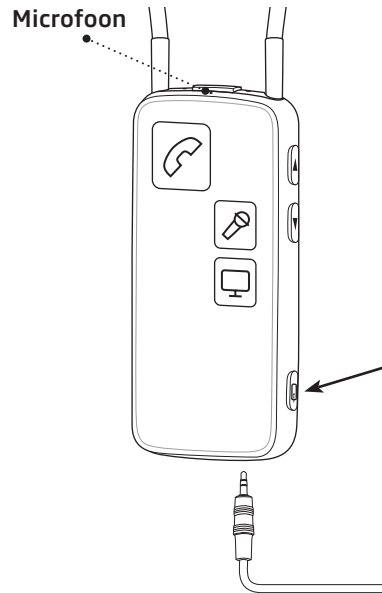

Status	Voorkant	Beschrijving
                         		


Draadloze muziek of audio

Om draadloos muziek of geluid te kunnen horen, bijvoorbeeld van een mp3-speler of een computer met ingebouwde Bluetooth, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is gekoppeld met uw Streamer, dat beide zijn ingeschakeld en binnen bereik zijn (< 10 meter).

Om naar muziek te luisteren, bijvoorbeeld vanaf een mobiele telefoon, drukt u op de AUX-kiezer voordat u de muzikspeler start.

Automatische verbindingen inschakelen - standaard uitgeschakeld

Indien ingeschakeld door uw hoorzorgprofessional, kunnen iPods, computers en mobiele telefoons automatisch audiostreaming activeren. Bijvoorbeeld inkomende sms-meldingen of muziek gestart vanaf een gekoppelde en verbonden mobiele telefoon.

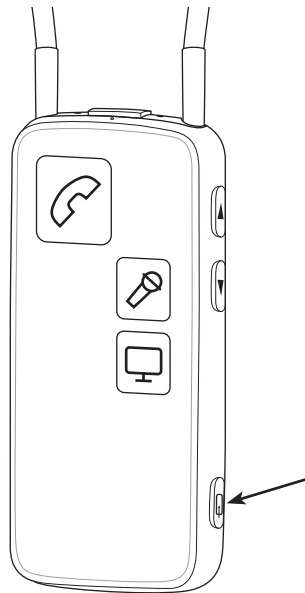

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Streamer maakt verbinding met muziek- of audioapparaat.
  		Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het geluid van het apparaat.

  Constant  Knipperen




Headset - draadloos

Zorg dat u in de microfoon van de Streamer kunt spreken.


Zorg bij koppelen met een computer dat de Streamer als headset wordt gekoppeld.

Om de headsetfunctie te gebruiken, wordt de gespreksbediening vanaf de computer uitgevoerd.

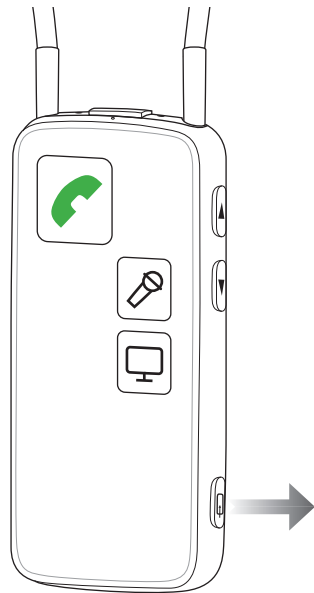

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Streamer maakt verbinding met muziek- of audioapparaat.
  		Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het geluid van het apparaat.

  Constant  Knipperen

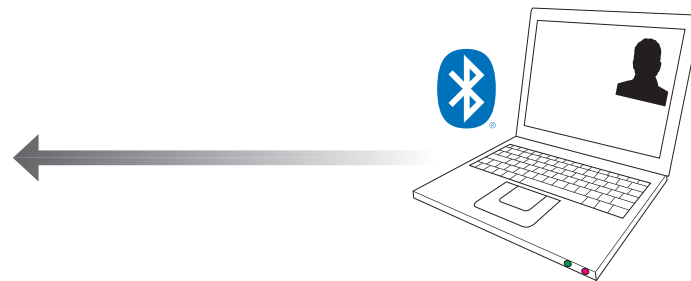


Luisterspoel (ingebouwd)

De Streamer heeft een ingebouwde ringleidingontvanger (luisterspoel).

Houd de AUX-kiezer 2 seconden ingedrukt om geluid te ontvangen van de ringleidingontvanger.

Let op: indien gewenst kan de bediening worden gewijzigd, zodat de luisterspoel met een korte druk op de toets kan worden geactiveerd.

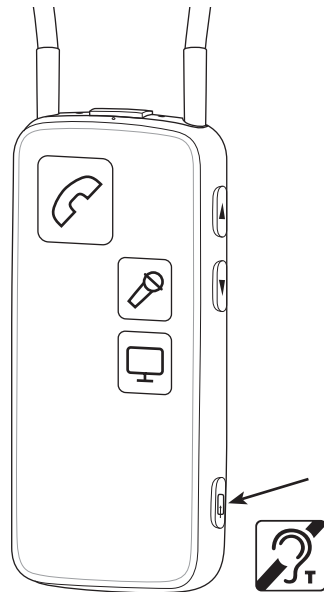

Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed
  		Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het geluid van het ringleidingsysteem.

  Constant

FM-ontvanger (optioneel)

Een FM-ontvanger kan worden aangesloten op de Europin-aansluiting aan de onderkant van de Streamer. De ontvanger wordt gebruikt om FM-signalen te ontvangen van een FM-zender, meestal gedragen door een leerkracht.

Sluit de FM-ontvanger simpelweg aan en druk kort op de AUX-knop. Wanneer de FM-zender en -ontvanger gesynchroniseerd zijn en op hetzelfde kanaal staan, wordt het FM-sigitaal ontvangen op de hoortoestellen.

Als uw FM-ontvanger een tuimelschakelaar heeft, zet deze dan in de OO-positie.



Status	Voorkant	Beschrijving
  		Streamer aan en gereed. FM-ontvanger ingeschakeld en gereed voor kanaalsynchronisatie.
  		Na verbinding hoort u een bevestigingspiep gevolgd door het geluid van het apparaat.

  Constant

BELANGRIJKE OPMERKING

Als FM-kanaalsynchronisatie vereist is, zorg dan dat de Streamer is ingeschakeld, maar dat er geen geluid naar de hoortoestellen wordt gestreamd.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw Streamer Pro gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw Streamer Pro tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Aansluiting op externe apparatuur

Veilig gebruik van de Streamer Pro bij rechtstreekse aansluiting op externe apparatuur met een AUX-inputkabel of een USB-kabel is afhankelijk van de externe signaalbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Oplaadbare accu

Probeer de Streamer nooit te openen; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.

Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden laat dit dan door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de batterijlade te openen.

De veiligheid van het opladen van batterijen via de USB-aansluiting wordt bepaald door de externe voedingsbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

De Streamer, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een batterij, hoortoestel of kleine onderdelen.

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw Streamer buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Gebruik van de Streamer met neklus

De neklus is zodanig ontworpen dat als deze tijdens het dragen per ongeluk ergens achter blijft haken, de neklus automatisch breekt. Probeer een neklus nooit in te korten of aan te passen. De neklus mag niet worden gebruikt voor kinderen die minder dan 11 kg wegen.

Hitte en chemicaliën

Stel de Streamer nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door deze te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. De Streamer mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven. Chemicaliën in cosmetica, haarlak,

parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen de Streamer beschadigen. Verwijder daarom altijd uw Streamer voordat u dergelijke producten aanbrengt en geef deze de tijd om te drogen.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw Streamer voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De Streamer kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Actieve implantaten

De Streamer Pro is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam. De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde

Waarschuwingen

veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Mogelijke bijwerkingen

De anti-allergene materialen in uw Streamer kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Gebruik in het verkeer

Het gebruik van de Streamer kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de Streamer gebruikt.

Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u deelneemt aan het verkeer.

Gebruik in vliegtuigen

Uw Streamer bevat Bluetooth. Uw Streamer mag niet worden gebruikt aan boord van een vliegtuig, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Explosieven

De Streamer is onder normale gebruiksomstandigheden veilig te gebruiken. De Streamer is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen.

Gebruik de Streamer daarom niet in omgevingen met een explosiegevaar, zoals mijnen, zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van ontvlambare anesthetica.

Storing

De Streamer is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de Streamer en andere apparaten (bijvoorbeeld

sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de Streamer en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik van accessoires van derden

Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels die door de fabrikant zijn geleverd. Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Opladen

Laad de Streamer elke 6 maanden op, om mogelijke batterijschade tijdens opslag te voorkomen.

Compatibiliteit mobiele telefoons

Zie www.oticon.global/compatibility voor een lijst van mobiele telefoons die uitgebreid zijn getest door Oticon en waarvan is vastgesteld dat ze op het moment van testen voldoen aan de minimeisen voor ConnectLine-compatibiliteit. Oticon is echter niet verantwoordelijk voor dergelijke compatibiliteit in het algemeen. Oticon is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor incompatibiliteit als gevolg van toekomstige updates van de mobiele telefoons, noch voor gevallen van incompatibiliteit die niet door deze tests worden gedekt en/of gevonden. Oticon is niet financieel verantwoordelijk voor vergoeding van mobiele telefoons die niet werken zoals verwacht. U wordt aangeraden de bovengenoemde lijst te raadplegen voordat u een nieuwe mobiele aanschaft.

Gebruiksomstandigheden

Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: +10 °C tot 45 °C Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -20 °C tot +60 °C Vochtigheid: < 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Internationale garantie

Uw apparaat valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven door de fabrikant voor een periode van 12 maanden na levering aan u. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Onder deze garantie kiest de fabrikant naar eigen goeddunken of het apparaat moet worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig model. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele

wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw Streamer Pro naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van garantieservice van de fabrikant. Uw hoorzorgprofessional kan kosten in rekening brengen voor zijn/haar diensten.

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorgprofessional: _____

Adres hoorzorgprofessional: _____

Telefoonnummer hoorzorgprofessional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Serienr.: _____

Technische informatie

Model	Streamer Pro 1.3
GTIN-nummer	05707131379399

De Streamer bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -15 dBµA/m op een afstand van 10 meter).

De Streamer bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van Bluetooth op 2,4 GHz. De radiozender is zwak en altijd lager dan 10mW, gelijk aan 10 dBm totaal uitgestraald vermogen.

De Streamer voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de Streamer zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de Technische gegevensbladen op www.oticon.global.

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor vergunningsvrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur, en
2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan Richtlijn (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen en afkortingen	
	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Richtlijn 2017/745 en 2017/746.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-voorschriften en richtlijnen.
	Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.
	Gebruik binnenshuis Alleen voor gebruik binnen.
	Dubbele isolatie Geeft aan dat de voeding een dubbele isolatie heeft. Dit betekent een zeer laag risico op enkele storingen.

	Made for Apple-badges Het apparaat is compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.
	Bluetooth-logo Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.
GTIN	Global Trade Item Number Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking op de firmware van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft betrekking op de hardware van de medische apparatuur.
	IMDA-label Singapore Het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en is compatibel met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en produceert geen radiofrequente storing voor andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels	
	Droog houden Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
	Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.
	Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Batterijrecyclingsymbool Li-on batterij recyclingsymbool
5,0 V  500 mA	Voedingsaansluiting Geeft de snelheid aan waarmee vermogen van de uitgang naar uw elektrisch apparaat wordt gestuurd.
	Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
	Japan TELEC-label Aanduiding voor gecertificeerde radioapparatuur.
	ICASA-label Zuid-Afrika Geeft aan dat het apparaat mag worden verkocht in Zuid-Afrika.

219931NL / 2020.06.19 / v1

219931NL / 2020.06.19 / v1



0000219931000001

oticon
life-changing **technology**