

Gebruiksaanwijzing

EduMic



Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe EduMic. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe EduMic optimaal benutten. Voor vragen over het gebruik van uw EduMic kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk (zie hieronder), zodat u eenvoudig door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Starten](#) | [Gebruik](#) | [Andere modi](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	EduMic is bedoeld als draadloze microfoon en zender voor spraak- en andere audiosignalen naar de hoortoestellen.
Aanwijzingen voor gebruik	Geen aanwijzingen voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruiksomgeving	Klassikaal / persoonlijk gebruik.
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.

Inhoudsopgave

Over

Inhoud van de verpakking	6
Aan de slag	7
Inleiding	8

Starten

Onderdelen en functies van de EduMic	10
Aan- en uitzetten van de EduMic	14
Microfoonmodus dempen	15
EduMic koppelen met hoortoestellen	16
EduMic koppelen met oplaadbare hoortoestellen	18
EduMic opladen	20

Gebruik

Batterijwaarschuwing	21
Batterijprestaties	22
Oplaadtijd	23
Koppelingsbeheer	24
Koppelingen wissen	25
Gebruik van de draaclip	26
Schoonmaken	27

Andere modi

Verbinden met externe geluidsbronnen	28
Verbinden met klassystemen	30
FM beschermhoes	33
Luisterspoelmodus openen	34

Waarschuwingen

Waarschuwingen	36
----------------	----

Aanvullende informatie

Gebruiksomstandigheden	39
Problemen oplossen	40
Garantie	43
Technische informatie	44

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:



EduMic



Verstelbaar draagkoord



3,5 mm jack kabel



FM-beschermhoes



Dit boekje
(gebruiksaanwijzing)



Wandlader
(verschilt van land tot land)




USB-oplaadkabel

Aan de slag

Voordat u de EduMic kunt gebruiken, moeten de EduMic en de hoortoestellen worden gekoppeld. De koppeling wordt opgeslagen, dus u hoeft slechts één keer te koppelen.

Ga naar www.oticon.global/compatibility voor meer informatie.

EduMic koppelen met hoortoestellen

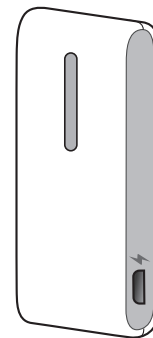

EduMic



Hoortoestellen


Zie pagina
16
of
18

Inleiding

De EduMic kan streamen naar Oticon hoortoestellen via 2,4 GHz technologie. De hoortoestellen ontvangen het gestreamde geluid in een speciaal EduMic programma.

Microfoonmodus

Wanneer u de EduMic inschakelt, licht een groene led op. Dit geeft aan dat de microfoonmodus is ingeschakeld. De EduMic microfoon pikt de stem van de spreker op en streamt het signaal naar elk aantal gekoppelde hoortoestellen. Op deze manier hebben hoortoestelgebruikers altijd duidelijk en consistente toegang tot de stem van de spreker en worden de negatieve effecten van lawaai en galm in de klas en de afstand tussen de hoortoestelgebruiker en de spreker overwonnen.

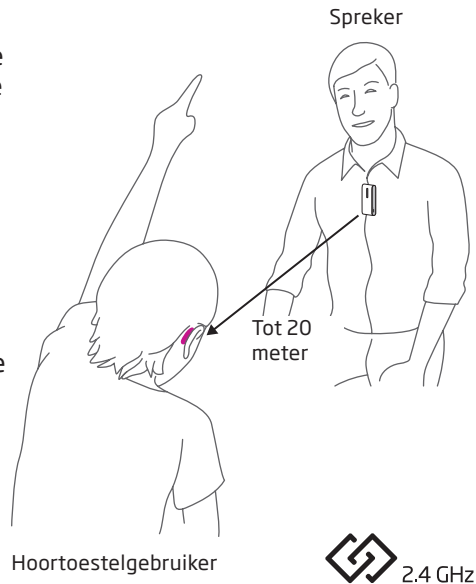

Een draadloze microfoon kan hoortoestelgebruikers van alle leeftijden helpen door rechtstreeks toegang tot een primaire spreker te bieden.

Modussen van de EduMic

De EduMic biedt vier schillende werkingsmodi:

- Microfoonmodus (20 m bereik)
- Jackmodus (20 m bereik)
- FM modus (3 m bereik)
- Luisterspoelmodus (3 m bereik)

Wanneer een jackkabel is aangesloten, staat de EduMic in de **jackmodus** en streamt deze audio van externe geluidsbronnen rechtstreeks naar de hoortoestellen.

Streamen in microfoon- en jackmodus is ontworpen voor 'one-to many communication'.



Wanneer een universele (FM) ontvanger is aangesloten, staat de EduMic in de **FM modus** en streamt deze audio van een draadloos klassysteem.

Wanneer de **luisterspoelmodus** is ingeschakeld, streamt de EduMic audio van een ringleidingsysteem.

Streamen in FM en luisterspoelmodus is ontworpen voor persoonlijk gebruik in een klaslokaal (FM modus) of in de openbare ruimte (luisterspoelmodus).

Bij gebruik in luisterspoel- en DAI modus, kan het geluid wegvallen. De EduMic wordt dan gereset en het gekozen luisterprogramma wordt kort daarna hervat.

Onderdelen en functies van de EduMic

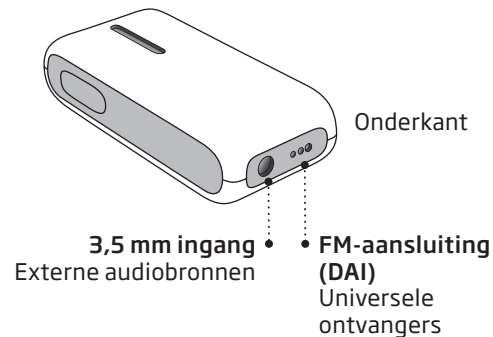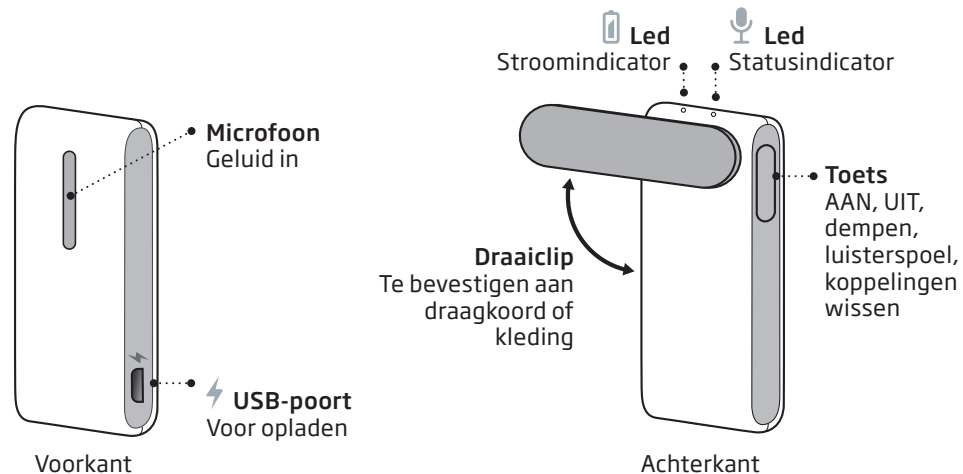

 Statusindicator		
	Blauw knipperend	Koppelen wordt uitgevoerd
	Wit	Starten
	Groen	AAN/microfoonmodus
	Groen knipperend	Microfoonmodus dempen
	Geel	Jack-/FM modus
	Geel knipperend	Jack-/FM modus dempen
	Rood	Koppelingen gewist
	Magenta	Luisterspoelmodus
	Magenta knipperend	Luisterspoelmodus dempen
 Stroomindicator		
	Wit	Starten
	Groen	Volledig opgeladen
	Geel knipperend	Opladen
	Rood knipperend	Batterij bijna leeg

Onderdelen en functies van het draagkoord



Gebruik van het draagkoord


Bij gebruik van de EduMic met het draagkoord, dient de afstand van de mond tot de bovenkant van de EduMic maximaal 20 cm te zijn.

1. Bevestig de clip aan de verstelbare adapter.
2. Hang het draagkoord om uw nek en pas de adapter aan voor de juiste afstand tot uw mond.

Tips:

Om lawaai in de hoortoestellen te verminderen, wordt het aanbevolen om de microfoon te dempen wanneer u deze hanteert voorafgaand aan gebruik.

De EduMic dient niet dichtbij sieraden of andere harde voorwerpen te worden gedragen.

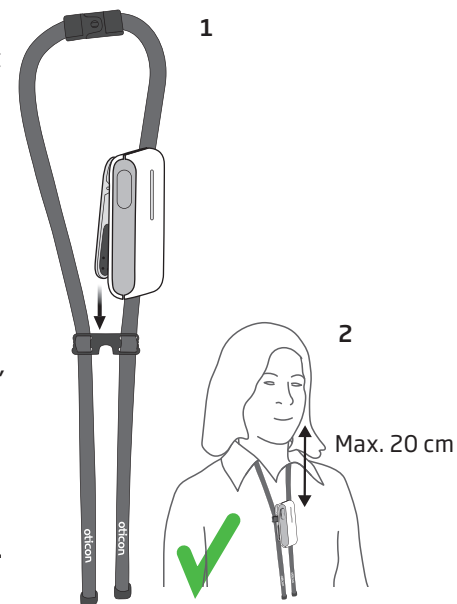

Aan- en uitzetten van de EduMic



AAN/microfoonmodus:

- Druk 2 seconden op de knop tot beide indicatoren WIT worden en laat de knop los. Wacht 10 seconden tot de statusindicator GROEN wordt. De EduMic is nu ingeschakeld en de microfoon is klaar voor gebruik.

UIT:

- Druk 2 seconden op de knop tot de statusindicator UIT gaat.

Microfoonmodus dempen

Gebruik de dempfunctie als u de audiostream van de EduMic moet dempen. Druk kort op de knop om de audiostream van de EduMic te dempen.



Dempen:

- Druk kort op de knop. De statusindicator knippert GROEN. De audiostream van de EduMic is nu gedempt.

Dempen opheffen:


- Druk nogmaals kort op de knop om het dempen op te heffen.

EduMic koppelen met hoortoestellen

Zorg dat de EduMic AAN is




Schakel de koppelingsmodus in op de hoortoestellen

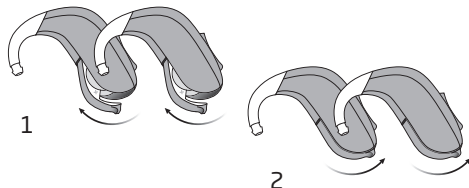

1. Zet de hoortoestellen UIT door de batterijlade te openen.
 2. Zet de hoortoestellen AAN door de batterijlade te sluiten.
- De hoortoestellen kunnen de volgende 3 minuten met de EduMic worden gekoppeld.

Koppel de hoortoestellen

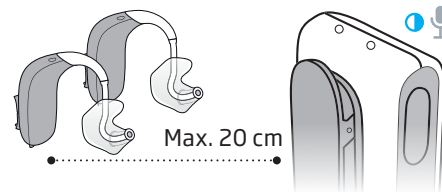

Plaats de hoortoestellen dichtbij de EduMic.

Het wordt aanbevolen om één set hoortoestellen per keer te koppelen.

De statusindicator knippert BLAUW terwijl het koppelen wordt uitgevoerd.

Klaar voor gebruik



De statusindicator stopt met BLAUW knipperen wanneer het koppelen is voltooid en wordt GROEN.

De EduMic is nu klaar voor gebruik met de hoortoestellen.

Herhaal deze stappen als meer sets hoortoestellen moeten worden gekoppeld.

EduMic koppelen met oplaadbare hoortoestellen

Zorg dat de EduMic AAN is



Schakel de koppelingsmodus in op de hoortoestellen

1. UIT
2. AAN




1. Zet de hoortoestellen UIT door 3 seconden op het onderste deel van de druktoets van de hoortoestellen te drukken.

2. Zet de hoortoestellen AAN door 2 seconden op het onderste deel van de druktoets van de hoortoestellen te drukken.

De hoortoestellen kunnen de volgende 3 minuten met de EduMic worden gekoppeld.

Koppel de hoortoestellen

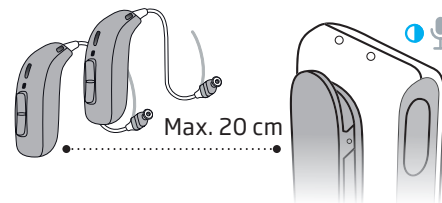

Plaats de hoortoestellen dichtbij de EduMic.

Het wordt aanbevolen om één set hoortoestellen per keer te koppelen.

De statusindicator knippert BLAUW terwijl het koppelen wordt uitgevoerd.

Klaar voor gebruik




De statusindicator stopt met BLAUW knipperen wanneer het koppelen is voltooid en wordt GROEN.

De EduMic is nu klaar voor gebruik met de hoortoestellen.

Herhaal deze stappen als er meer sets hoortoestellen moeten worden gekoppeld.

EduMic opladen


Aansluiten op stroombron

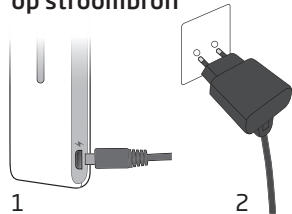

1. Steek de micro USB stekker in de oplaad-aansluiting van de EduMic.
2. Steek de wandlader in een stopcontact.


Of steek de USB oplaadkabel in een USB stroombron.

Opladen

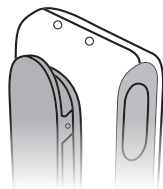

De stroomindicator knippert GEEL tijdens het opladen.


Opladen voltooid

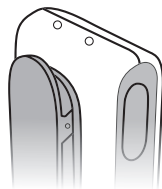

De stroomindicator wordt GROEN wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Batterijwaarschuwing

De stroomindicator knippert ROOD wanneer de batterij bijna leeg is. U heeft dan nog twee uur totdat de batterij leeg is.

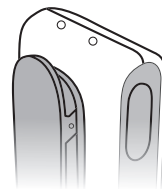

BELANGRIJKE OPMERKING

Bij het opladen hoort de oplaadindicator te branden zoals in dit boekje is beschreven. Als de oplaadindicator niet brandt zoals is beschreven, koppel het apparaat dan los van de oplader en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

Gebruik voor het opladen van de EduMic de meegeleverde originele USB kabel of voeding van 5,0 V / 1 A met CE-veiligheidskeurmerk.



Batterijprestaties

Een volledig opgeladen EduMic biedt u 10 uur gebruik. De dagelijkse prestaties van de batterij wisselen afhankelijk van uw specifieke gebruik van de EduMic. Het streamen van stereogeluid in de jackmodus bijvoorbeeld verbruikt meer stroom dan het streamen van uw stem in de microfoonmodus.

Als de batterij van de EduMic leeg is, sluit de EduMic dan aan op een stroombron om deze op te laden.

Voor optimale oplaadomstandigheden dient de kamertemperatuur +20 °C tot +30 °C te zijn.

Als u van mening bent dat de batterij niet naar verwachting presteert, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Oplaadtijd

Zorg dat u de EduMic volledig oplaadt voordat u deze voor het eerst gebruikt.

Wij raden aan de EduMic na gebruik 's nachts op te laden. Op die manier kunt u de dag beginnen met een volledig opgeladen EduMic.

De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit. Als de EduMic geheel leeg is, is de normale oplaadtijd:

2,5 uur	1 uur	0,5 uur
Volledig opgeladen	50% opgeladen	25% opgeladen

Het oplaadproces wordt automatisch gestopt wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laat de EduMic aangesloten op een stroombron wanneer u deze niet gebruikt.

Koppelingsbeheer

Om naar het gestreamde signaal van de EduMic te luisteren, moeten de hoortoestellen het EduMic programma gebruiken. Hier kan automatisch of handmatig voor worden gezorgd.

Automatische wisseling van hoortoestelprogramma

De EduMic kan tot 10 sets hoortoestelkoppelingen opslaan. Wanneer een of meer van deze sets hoortoestellen zich binnen 20 meter van de EduMic bevinden, schakelen deze automatisch over op het EduMic programma. Door de EduMic te dempen en het dempen weer op te heffen, initieert u ook een programmawisseling op de hoortoestellen.

Handmatige wisseling van hoortoestelprogramma

Wanneer de EduMic met meer dan 10 sets hoortoestellen is gekoppeld, worden niet alle koppelingen opgeslagen in de EduMic. In dat geval kunnen hoortoestelgebruikers handmatig naar het EduMic programma schakelen op hun hoortoestellen of op een persoonlijke afstandsbediening.

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen voor details over de functionaliteit van de specifieke hooroplossing.

Koppelingen wissen

Het is mogelijk om alle koppelingen te wissen van de EduMic wanneer deze niet langer nodig zijn. Door de hoortoestellen opnieuw te koppelen, zorgt u ervoor dat het programma automatisch wordt gewisseld op deze hoortoestellen.

Zorg dat de EduMic is ingeschakeld



Koppelingen wissen




Houd de knop 12 seconden ingedrukt tot de statusindicator ROOD wordt.

Alle hoortoestelkoppelingen worden gewist van de EduMic.

Gebruik van de draaiclip

Draag de EduMic bij gebruik in de microfoonmodus op de aangegeven wijze, in een verticale positie. De afstand van de mond tot de bovenkant van de EduMic dient maximaal 20 cm te zijn. De EduMic dient niet dichtbij sieraden of andere harde voorwerpen te worden gedragen.

Bevestig de EduMic aan uw kleding met de draaiclip

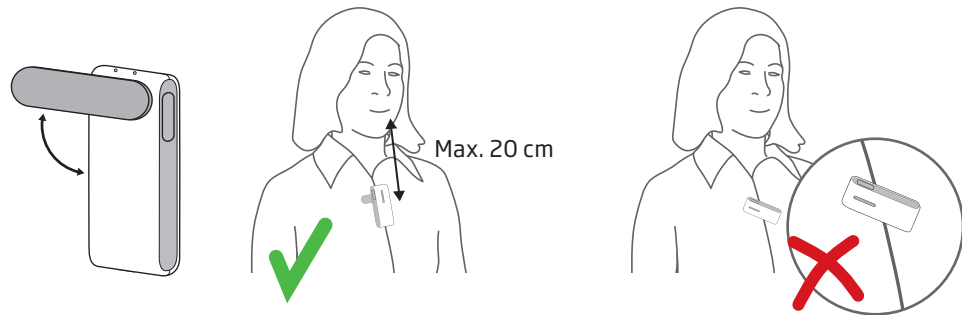

Schoonmaken

De EduMic is vochtafstotend, waardoor deze zeer eenvoudig schoon te maken is met een vochtige doek. Het wordt aanbevolen om de EduMic regelmatig schoon te maken.


BELANGRIJKE OPMERKING

De EduMic mag nooit worden gewassen of ondergedompeld in water, alcohol of andere sterke schoonmaakmiddelen.

Verbinden met externe geluidsbronnen

Via de 3,5 mm ingang kunt u de EduMic verbinden met externe geluidsbronnen zoals een geluidsveldsysteem, smartboards, pc's, tablets, enz.

Sluit de jackkabel aan

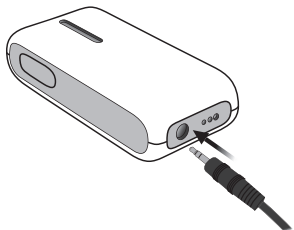

Sluit de jackkabel aan.

Sluit de jackkabel aan op de externe audiobron.

Zorg dat de EduMic AAN is.

Stekkermodus



Wanneer de jackkabel is aangesloten, is de statusindicator GEEL.

De EduMic microfoon is uitgeschakeld in de jackmodus.

Dempen/dempen opheffen




Druk kort op de knop om de audiostream van de EduMic te dempen.

De statusindicator knippert GEEL.

Druk nogmaals kort op de knop om het dempen op te heffen.

Terug naar microfoonmodus

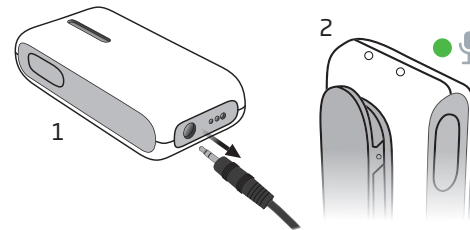

1. Ontkoppel de jackkabel van de EduMic.

2. De statusindicator wordt GROEN en de EduMic schakelt terug naar de microfoonmodus.

Verbinden met klassystemen

Voor het opzetten van het systeem is een FM-zender en een universele FM-ontvanger met een Europees aansluiting nodig.

Sluit de ontvanger aan



Sluit de ontvanger aan en zorg dat de EduMic AAN is.

Plaats de EduMic dichtbij de leerling (max. 3 meter)

Schakel de FM-zender in om het klas-systeem te activeren.

FM-modus



Wanneer de FM-ontvanger is aangesloten, is de statusindicator GEEL.

De EduMic microfoon is uitgeschakeld in de FM-modus.

Dempen/dempen opheffen




Druk kort op de knop om de audiostream van de EduMic te dempen.

De statusindicator knippert GEEL.

Druk nogmaals kort op de knop om het dempen op te heffen.

Terug naar microfoonmodus

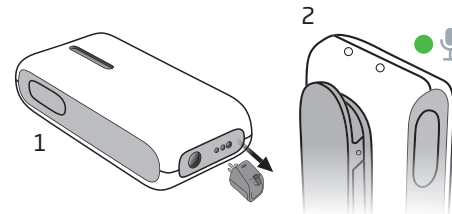

1. Ontkoppel de ontvanger van de EduMic.


2. De statusindicator wordt GROEN en de EduMic schakelt terug naar de microfoonmodus.

BELANGRIJKE OPMERKING

Zie voor details van de functionaliteit van uw specifieke klassysteem de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

FM-beschermerhoes

Wanneer een universele ontvanger is aangesloten op de EduMic, wordt het aanbevolen de meegeleverde witte rubberhoes te gebruiken om de ontvanger te beschermen tegen breken.

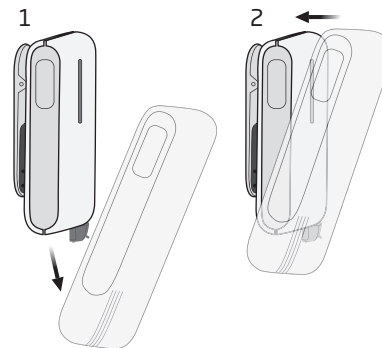

BELANGRIJKE OPMERKING

De FM-beschermerhoes dient niet te worden gebruikt in de microfoonmodus. De hoes vervormt het inkomende geluid.

Luisterspoelmodus openen



De luisterspoel biedt rechtstreeks toegang tot ringleidingssystemen die gewoonlijk te vinden zijn in theaters, kerken en collegezalen. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingssysteem aanwezig is.

Zorg dat de EduMic is uitgeschakeld



Luisterspoelmodus



Houd de knop 10 seconden ingedrukt tot de statusindicator MAGENTA wordt. De EduMic staat nu in de luisterspoelmodus en de EduMic microfoon is uitgeschakeld. Het werkingssbereik is 3 meter.

Dempen/dempen opheffen




Druk kort op de knop om de audiostream van de EduMic te dempen.

De statusindicator knippert MAGENTA.

Druk nogmaals kort op de knop om het dempen op te heffen.

Luisterspoelmodus verlaten

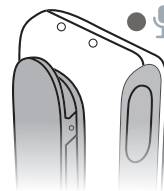

Druk 2 seconden op de knop tot de statusindicator uit is.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw EduMic gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw EduMic tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional lost problemen op en meldt deze indien relevant aan de fabrikant en/of de autoriteiten.

Gevaar voor stikken en inslikken van kleine onderdelen

De EduMic met daaraan bevestigde ontvanger dient buiten bereik te worden gehouden van kinderen en van iedereen die de ontvanger zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen. Waarschuw onmiddellijk een arts als een ontvanger is ingeslikt.

Explosieven

De EduMic is veilig te gebruiken onder normale gebruiksomstandigheden. De EduMic is niet getest op naleving van de internationale normen met betrekking tot explosieve omgevingen.

Gebruik de EduMic daarom niet in omgevingen met explosiegevaar, zoals mijnen, zuurstofrijke omgevingen of ruimtes waar ontvlambare verdoevingsmiddelen worden gebruikt.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder de EduMic voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De EduMic kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel de EduMic nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door deze te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. De EduMic mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen de EduMic beschadigen. Verwijder de EduMic daarom altijd voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u de EduMic weer gebruikt.

Storing

De EduMic is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de EduMic en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de EduMic en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruik in vliegtuigen

De EduMic bevat Bluetooth. De EduMic dient niet aan boord van een vliegtuig te worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

De EduMic is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Oplaadbare accu

Probeer de EduMic nooit te openen; hierdoor kan de batterij beschadigd raken. Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden laat dit dan door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de batterijlade te openen.

De veiligheid van het opladen van batterijen via de USB-aansluiting wordt bepaald door de externe voedingsbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Waarschuwingen

Aansluiting op externe apparatuur

Veilig gebruik van de EduMic bij aansluiting op externe apparatuur met een inputkabel is afhankelijk van de externe signaalbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Gebruik van accessoires van derden

Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels die door de fabrikant zijn geleverd. Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Gebruik van het draagkoord

Het draagkoord is zodanig ontworpen dat als het tijdens het dragen per ongeluk ergens achter blijft haken, het automatisch breekt. Probeer het draagkoord daarom nooit op ongeoorloofde wijze in te korten of aan te passen. Het draagkoord dient niet te worden gebruikt door kinderen jonger dan 36 maanden.

Opladen

Laad de EduMic elke 6 maanden op, om mogelijke batterijschade tijdens opslag te voorkomen.

Mogelijke bijwerkingen

De anti-allergene materialen in de EduMic kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Gebruik in verkeer

Het gebruik van de EduMic kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de EduMic gebruikt. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatie-apparatuur terwijl u deelneemt aan het verkeer.

Gebruiksomstandigheden

Luchtvochtigheid bij gebruik, opslag en transport:	15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Gebruikstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +30 °C Laad de EduMic op voordat u deze opbergt Laad de EduMic daarna elke 6 maanden op
Transporttemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verminderd geluid van de EduMic	De microfoonopening is afgedekt	Verplaats de EduMic, zodat deze niet door kleding wordt bedekt
	De EduMic bevindt zich te ver van de mond	Plaats de EduMic binnen 20 cm van uw mond
	De EduMic is weg van de mond gericht	Draai de EduMic in de richting van uw mond. Zie hoofdstuk: Dragen van de EduMic
Geen geluid van de EduMic	De hoortoestellen gebruik het EduMic programma niet	Demp de EduMic en hef het dempen op of koppel de hoortoestellen opnieuw met de EduMic
	Koppelen met de hoortoestellen mislukt	Vervang/laad de batterijen op om zeker te zijn dat de hoortoestellen stroom hebben en koppel opnieuw
De EduMic kan niet koppelen met hoortoestellen	Oticon Opn en Oticon Siya hoortoestellen zijn al gekoppeld met een andere EduMic	Wis alle koppelingen met deze EduMic en koppel met de juiste EduMic, omdat ze met slechts één EduMic gekoppeld kunnen zijn
	Hoortoestellen zijn gekoppeld met een andere EduMic die ingeschakeld is binnen een bereik van 20 m	Schakel de verbonden EduMic uit of wis alle koppelingen met deze EduMic om verbinding te maken met de juiste EduMic
Laagtonige ruis in jackmodus tijdens opladen	Opladen en luisteren naar audio van hetzelfde apparaat/pc wordt niet ondersteund	Laad de EduMic op met de wandlader
Knippert lichtblauw wanneer ik de EduMic probeer aan te zetten	De EduMic heeft geen stroom	Laad de EduMic op
Beide led-indicatoren knipperen ROOD	Systeemfout	Neem contact op met uw hoorzorgprofessional

Internationale garantie

Uw apparaat valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden vanaf de leverdatum. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. In het kader van deze garantie zal de fabrikant naar eigen goeddunken kiezen of hij het apparaat repareert of vervangt door een gelijkwaardig model. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele

wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van garantieservice van de fabrikant. Uw hoorzorgprofessional kan kosten in rekening brengen voor zijn diensten.

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorgprofessional: _____

Adres hoorzorgprofessional: _____

Telefoonnummer hoorzorgprofessional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Serienr.: _____

Technische informatie

De EduMic bevat een radiozendontvanger die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik, beide werkend op de 2,4 GHz ISM-band. De radiozender is zwak en altijd lager dan 50 mW, gelijk aan 17 dBm totaal uitgestraald vermogen.

De EduMic voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

Voor op het lichaam gedragen werking voldoet dit apparaat aan de FCC- en IC-RF-blootstellingslimieten en is het getest terwijl het in contact stond met het menselijk lichaam. Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

In verband met de beperkte ruimte op het apparaat zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

De EduMic bevat de software LittleFS © 2017, Arm Limited. Alle rechten voorbehouden. Bezoek de Support op www.oticon.global voor meer details.

Aanvullende informatie is te vinden in het Technisch gegevensblad op www.oticon.nl

De fabrikant verklaart hierbij dat deze EduMic voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit apparaat voldoet aan de EU-Richtlijn 2017/745 betreffende Medische hulpmiddelen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen	
	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan, zoals gedefinieerd in de EU-Richtlijnen 2017/745 en 2017/746.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan alle EU-voorschriften en -richtlijnen.
	Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.
	Dubbele isolatie Geeft aan dat de voeding van het product een dubbele isolatie heeft. Dit betekent een zeer laag risico op enkele storingen.
	Gebruik binnenshuis Geeft aan dat het product gekwalificeerd is voor gebruik binnenshuis.

	TwinLink 2,4 GHz Het apparaat bevat Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radiotechnologie voor draadloos streamen naar Oticon hoortoestellen met een 2,4 GHz ontvanger.
	Hoorlus Dit logo bevat het universele symbool voor hoorondersteuning. De "T" geeft aan dat een hoorlus is geïnstalleerd.

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels	
	Droog houden Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
	Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.
	Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Batterijrecyclingsymbool Li-onbatterijrecyclingsymbool
5,0 V  500 mA	Voedingsaansluiting Geeft de mate aan waarin stroom van de voeding naar uw apparaat wordt gestuurd.
	Firmware Gebruikte firmwareversie in het apparaat
	Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
	Zuid-Afrika ICASA label Geeft aan dat het apparaat een licentie heeft om verkocht te worden in Zuid-Afrika.

220015NL / 2020.03.13 / v1

220015NL / 2020.03.13 / v1



oticon
life-changing **technology**

220015NL / 2020.03.13/ v1