

Oticon | Ino

GEBRUIKSAANWIJZING

miniLIHO



oticon
PEOPLE FIRST

Dank u

dat u ons product heeft gekozen om beter te gaan horen.

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw nieuwe hooroplossing van de beste kwaliteit is.

Bovendien is het gebruik en onderhoud eenvoudig. Het is aan te bevelen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw toestel.

Uw hooroplossing is voorzien van de modernste technologie en maakt gebruik van de nieuwste inzichten.

Inhoud

Afbeelding miniLIHO	5a
Afbeelding miniLIHO Power met Power tip	5b
Afbeelding miniLIHO Power met Mould	5c
Vervangen van de batterij	7
Aan- en uitzetten van uw Ino miniLIHO	9
Links-/Rechtsmarkering	10
Inzetten van uw Ino miniLIHO	11
Druktoets	12
Programma's (optie)	14
Volumeregelaar (optie)	16
Dempen (optie)	17
Kindveilige batterijlade (optie)	19
AutoPhone (optie)	20
Onderhoud van de Ino	22
Onderhoud met Mould	24
Onderhoud met tips	26

Gebruik van uw Ino miniLIHO	30
Oplossingen bij kleine problemen	36
Oticon Garantiecertificaat	40
Waarschuwingen	53


BELANGRIJK

Lees dit boekje zorgvuldig voordat u uw Ino gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud.

WAARSCHUWING

De miniLIHO Power is een krachtig toestel. Voorkom dat iemand anders het gaat dragen; verkeerd gebruik kan permanent gehoorverlies veroorzaken.

Afbeelding miniLIHO

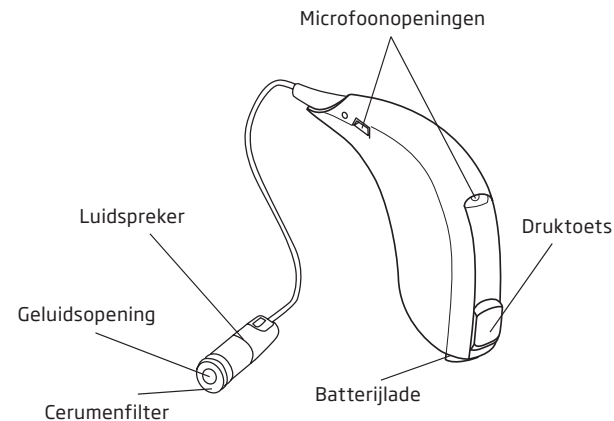



Uw oorstukje:

Open tip


6mm 

8mm 

10mm 

Micro/ Medium Mould 
 Plus tip 

Afbeelding miniLIHO Power met Power tip

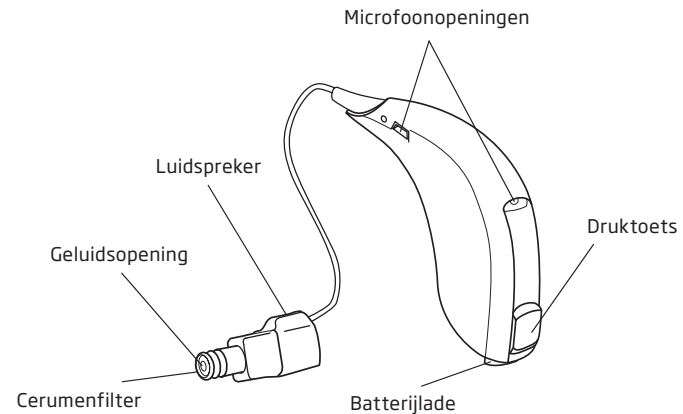


Uw Power tip
Power tips:

8mm 


10mm 

12mm 

Plus tip 

5b

Afbeelding miniLIHO Power met Mould

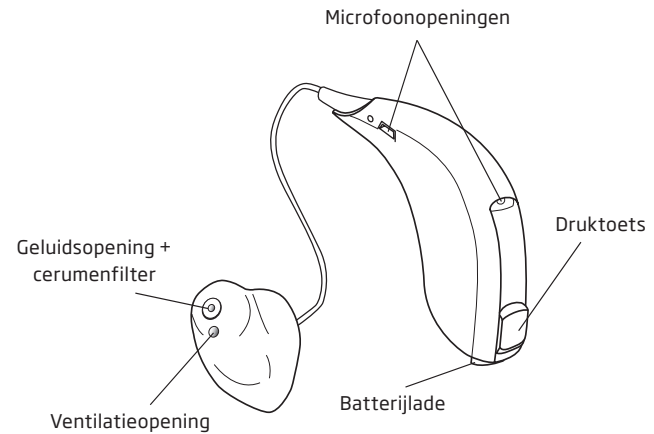



Vervangen van de batterij

Ino miniLIHO gebruikt batterijtype **312**. Bespreek met uw audicien welke batterij u het beste kunt gebruiken.

Een lege batterij moet altijd onmiddellijk worden vervangen.

Wanneer de batterijspanning laag is, hoort u twee signalen. U hoort deze waarschuwing als de batterij nog voor enkele uren stroom heeft. De waarschuwing wordt met regelmatige tussenpozen herhaald om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen.

Wanneer de batterij leeg is, gaat de Ino miniLIHO uit. U hoort eerst vier signalen voordat het toestel zich uitschakelt. Dit is geen defect.

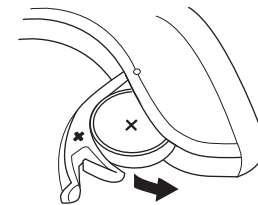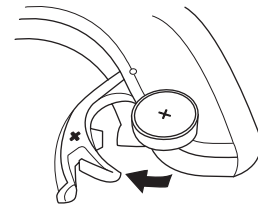


Vervangen van de batterij:

- Open de batterijlade door de verhoogde rand aan de onderkant van het toestel terug te duwen. Verwijder de oude batterij.
- Verwijder de sticker van de +-kant van de nieuwe batterij.
- Plaats de nieuwe batterij, zodat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken op de batterijlade. Sluit de batterijlade.

Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden verwijderd.

Na het vervangen van de batterij kan het enige seconden duren voordat de nieuwe batterij optimaal werkt.

Voor het verwisselen van de batterij kan de magneet aan het uiteinde van de MultiTool worden gebruikt.

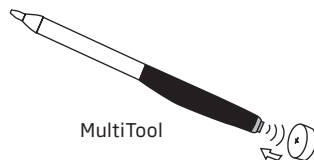

Aan- en uitzetten van uw Ino miniLIHO


U zet Ino **AAN** door de batterijlade (met batterij) volledig te sluiten. Na het sluiten van de batterijlade start het toestel met een melodie. Deze melodie geeft aan dat de batterij en het toestel werken.

Zet het toestel **UIT** door de batterijlade enigszins te openen totdat u een klik voelt.

Zet de batterijlade volledig open als u het toestel niet gebruikt.

BELANGRIJK

Open de batterijlade, met name 's nachts, zodat het eventueel binnenin verzamelde vocht kan verdampen.

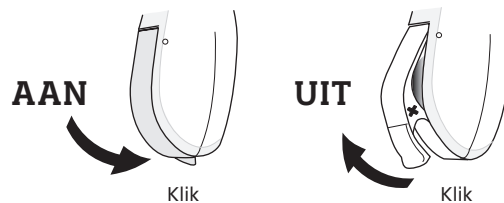


Links-/Rechtsmarkering

Uw hooroplossing wordt op uw specifieke gehoorverlies aangepast. Wanneer u twee Ino miniLIHO's gebruikt, is het linkertoestel misschien anders geprogrammeerd dan het rechter. Het is dus van belang om de toestellen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Voor eenvoudige herkenning van het linker- en rechtertoestel kan op de batterijlade een kleurcodering zijn aangebracht.

Een blauwe stip markeert het LINKER-toestel.
Een rode stip markeert het RECHTER-toestel.

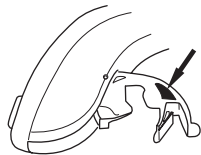


Inzetten van uw Ino miniLIHO

Zet de luidspreker met Mould of tip in het oor (1) en plaats vervolgens het toestel achter het oor (2).

Controleer of de luidspreker na plaatsing stevig en prettig in het oor zit.

De luidspreker moet zodanig geplaatst zijn dat de draad vlak langs de huid ligt.

Controleer bij gebruik van een grip aan de luidspreker of deze mooi in de oorschelp aansluit. Zie afbeeldingen 3 en 4.

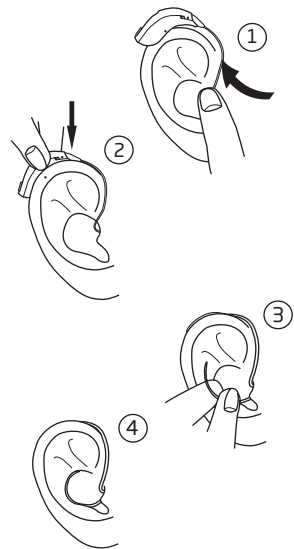


Druktoets

Uw Ino miniLIHO is voorzien van een druktoets.

U kunt u met de druktoets tussen de verschillende programma's schakelen.

Bij gebruik van twee Ino Pro toestellen kan de druktoets worden gebruikt voor programma- én volumeverandering.

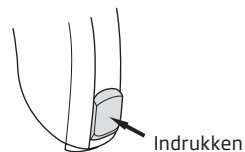

De druktoets van Ino miniLIHO kan voor één van de volgende functies worden geprogrammeerd.

Links	Rechts	
		Alleen programmaverandering: Kort indrukken voor programmaverandering.
		Alleen volumeverandering: * Kort indrukken voor volumeverandering.
		Zowel volume- als programmaverandering: * Kort indrukken voor volumeverandering. Lang (2 sec.) indrukken voor programmaverandering.

* bij gebruik van twee Ino Pro toestellen.

Gebruik van twee toestellen

Als u twee Ino Pro toestellen gebruikt verandert de druktoets van één toestel de status van beide. Dit betekent dat u bij verandering van het programma of volume van één toestel automatisch ook het programma of volume in het andere toestel verandert.





Dit wordt geprogrammeerd door uw audicien.

Programma's (optie)



U heeft de beschikking over maximaal vier verschillende voorkeursprogramma's.

U hoort een signaal bij het schakelen tussen de programma's.
Het aantal signalen geeft het gebruikte programma aan.

	Eén signaal, bij overschakelen naar programma 1
	Twee signalen, bij overschakelen naar programma 2
	Drie signalen, bij overschakelen naar programma 3
	Vier signalen, bij overschakelen naar programma 4

Druk de toets in om vooruit te schakelen in de programmacyclus, bijvoorbeeld van P1-P2.

Bij gebruik van twee Ino Pro toestellen:

Het toestel RECHTS schakelt vooruit in de programmeercyclus, bijvoorbeeld van P1-P2.
Het toestel LINKS schakelt terug in de programmeercyclus, bijvoorbeeld van P2-P1.

Hieronder vindt u een beschrijving van de voor u beschikbare programma's.

In te vullen door de audicien:

Prg. 1: _____

Prg. 2: _____

Prg. 3: _____

Prg. 4: _____

Volumeregelaar (optie)



Alleen bij gebruik van twee Ino Pro toestellen kan een volumeregeling worden geactiveerd. Met de druktoets kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Als u de toets van één van de toestellen indrukt wordt het volume van beide tegelijkertijd veranderd.

Druk de toets van het toestel RECHTS kort in om het volume te verhogen.
Druk de toets van het toestel LINKS kort in om het volume te verlagen.

Bij aanzetten staat het toestel op het voor u ingestelde volumenniveau.
U hoort een signaal wanneer u het ingestelde niveau weer hebt bereikt.


Dempen (optie)



Als u de druktoets minimaal 3 seconden ingedrukt houdt, schakelt het toestel naar de dempfunctie.

Door de toets nogmaals kort in te drukken, schakelt u het toestel weer in.

U kunt de dempfunctie gebruiken om het geluid tijdelijk niet te versterken als u het in heeft; bijvoorbeeld als u de toestellen uit het oor haalt.

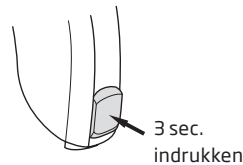

WAARSCHUWING


Gebruik de dempfunctie niet om het toestel uit te zetten. In deze stand wordt nog steeds stroom gebruikt.

Kindveilige batterijlade (optie)



Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De batterijlade kan alleen met de MultiTool geopend worden. Plaats de MultiTool in de uitsparing aan de zijkant en klap de batterijlade open.

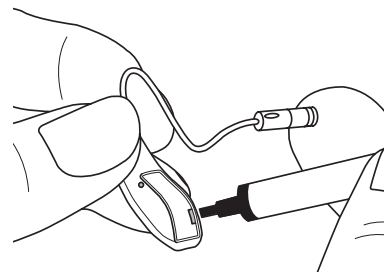


AutoPhone (optie)

Ino miniLIHO is voorzien van een AutoPhone-functie. Wanneer deze functie is ingeschakeld zal de afstelling van het toestel wijzigen als er een telefoonhoorn in de buurt van het toestel komt. U hoort een aantal signalen zodra het telefoonprogramma is geactiveerd.

Na het beëindigen van het telefoongesprek keert het toestel terug naar het voorgaande programma.

Niet alle telefoons kunnen de AutoPhone activeren. Soms is een speciale magneet op de telefoonhoorn noodzakelijk. Volg voor het aanbrengen van de magneet de instructies van uw audicien.

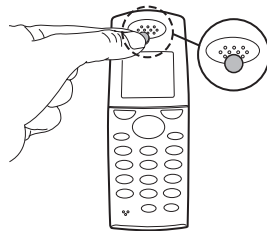

WAARSCHUWIING

Bij gebruik van een AutoPhone-magneet:

- Houd de magneet buiten bereik van kinderen en huisdieren. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken van een magneet.
- Draag de magneet niet in een borstzak en houd de magneet altijd 30 cm weg van actieve geïmplanteerde apparatuur. Gebruik de telefoon met magneet bij voorkeur aan de tegenoverliggende kant van een pacemaker of andere geïmplanteerde apparatuur.
- Houd de magneet 30 cm weg van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Onderhoud van Ino

Uw gehoorgang produceert oorsmeer (cerumen) waardoor de geluidsopening of de ventilatie-opening verstopt kan raken. Wanneer u de richtlijnen in dit gedeelte volgt, voorkomt u vermindering van de geluidsprestaties.

Houd uw toestel bij het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet kan beschadigen als u het laat vallen.


Voordat u gaat slapen:

- Verwijder eventueel oorsmeer uit de openingen van de Mould of tip. Reinig het volgens de beschrijving op de volgende bladzijde.
- Open de batterijlade om binnenin verzameld vocht te laten verdampen.

Schoonmaken van het toestel

Gebruik voor het schoonmaken de speciale onderhoudsset.

MultiTool

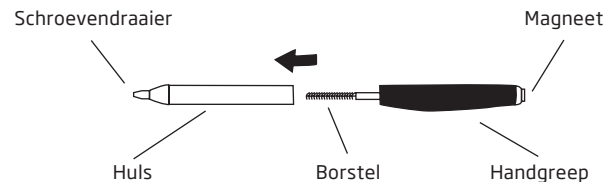


Veeg de buitenkant van het toestel schoon met een droge, zachte doek.

Vervang de borstel zonodig. Trek de borstel uit de handgreep en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep.

Onderhoud met Mould

De Mould moet regelmatig worden gereinigd:

- Maak de ventilatie-opening schoon door het borsteltje licht draaiend door de opening te duwen.

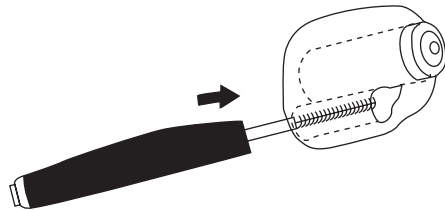

Het toestel en de Mould mogen nooit nat worden!

Vervangen van het cerumenfilter

1. Neem de filterhouder uit de verpakking. De filterhouder heeft twee pennen; één bevat het nieuwe filter, de andere functioneert als verwijderaar.
2. Plaats de verwijderaar in de geluidsopening van de Mould.
3. Houd de verwijderaar recht en trek het gebruikte cerumenfilter voorzichtig naar buiten.
4. Draai de filterhouder 180°.
5. Druk het nieuwe filter in de geluidsopening en trek de filterhouder voorzichtig terug.
6. Gooi de gebruikte filterhouder weg.

Het cerumenfilter moet vervangen worden:

- Als u ziet dat het filter in de Mould verstopt is.
- Als het toestel anders klinkt dan normaal.

Gebruik alleen door uw audicien geleverde cerumenfilters.


Raadpleeg de verpakking van het cerumenfilter voor gedetailleerde instructies over de vervanging.

Onderhoud met tips

Maak de luidspreker dagelijks schoon. Gebruik het doekje om het aanwezige oorsmeer weg te vegen.

De tip mag alleen met een droog doekje worden gereinigd. Vervang de bestaande tip regelmatig door een nieuwe, schone tip en controleer dagelijks of de tip nog goed op de luidspreker zit.


Vervang de tip tenminste één keer per maand, of zoveel vaker als de audicien nodig acht.

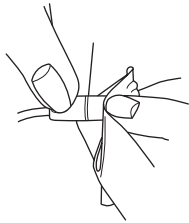

Vervangen van de tip

De tip is eenvoudig te vervangen.

Plaats uw vingernagel aan de onderkant van de tip en trek de tip van de luidspreker. Druk de nieuwe tip stevig op de luidspreker en controleer of hij stevig vast zit.

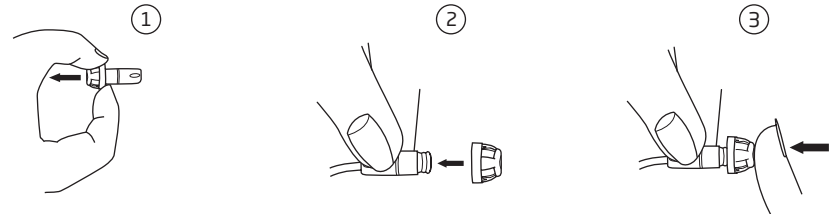

Aan het eind van de luidspreker, onder de tip, zit een wit cerumenfilter. Dit cerumenfilter voorkomt dat de luidspreker beschadigd raakt door stof of vuil. Neem, als het filter verstopt is, contact op met uw audicien voor vervanging.

BELANGRIJK

De tip is gemaakt van een zacht, medisch goedgekeurd siliconen materiaal. De tip veroorzaakt bij losraken van het toestel dan ook geen beschadigingen aan de gehoorgang. Probeer de luidspreker voorzichtig uit het oor te halen en voorkom dat u de tip verder naar binnen duwt. Raadpleeg zonnodig uw audicien.

Vermijd hitte, vocht en chemicaliën

Leg uw toestel nooit in de buurt van open vuur, in een magnetron of in een in de zon geparkeerde auto. Vermijd vocht. Doe het uit bij het douchen, als het hard regent en in vochtige ruimtes, zoals een badkamer, stoombad of sauna.

Als uw toestel toch aan vocht heeft blootgestaan, kan dit een negatieve invloed hebben op de prestaties. U kunt het, na de batterij verwijderd te hebben, in een droog-etui leggen om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen. Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden afgeveegd.

Chemicaliën in cosmetica, zoals parfum, aftershave, insectenspray, haarlak of zonnebrandcrème, kan de elektronica beschadigen. Doe uw toestel daarom even uit voordat u dergelijke producten gebruikt. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u ze weer in zet.

Gebruik van uw Ino miniLIHO

Het kost tijd om aan het nieuwe geluid te wennen. Hoe lang dit duurt verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de mate van gehoorverlies en hoeveel uur de toestellen per dag gedragen worden.

Mogelijk kan uw toestel met Streamer* worden gebruikt. Streamer* fungeert als afstandsbediening voor volume- en programmaveranderingen en kan een draadloze verbinding maken met de Oticon ConnectLine* accessoires.

Zes eenvoudige stappen om beter te gaan horen

1. Thuis, in een rustige omgeving

Luister naar de verschillende achtergrondgeluiden in uw omgeving en probeer elk geluid te identificeren. Sommige geluiden kunnen anders klinken dan u gewend was, zodat u ze opnieuw moet leren herkennen. Op den duur zult u gewend raken aan de zachte geluiden in uw omgeving - raadpleeg uw audicien wanneer dit niet gebeurt.

Als u vermoeid raakt, kunt u het toestel even uit doen en een poosje rusten. Geleidelijk zult u leren het toestel langere perioden in te houden, zodat u er al snel de hele dag baat bij hebt.

2. Een gesprek met één persoon

Ga met uw gesprekspartner in een rustige omgeving zitten. Kijk de spreker aan, zodat u de gezichtsuitdrukkingen goed kunt zien. Spraak kan in het begin misschien wat anders klinken. Wanneer de hersenen eenmaal aan de nieuwe geluiden gewend zijn, zal het verstaan makkelijker worden.

3. Luisteren naar radio of TV

Begin met het luisteren naar het nieuws, de presentatoren spreken meestal duidelijk. Ga daarna pas luisteren naar andere programma's.

Wanneer u moeite heeft met het volgen van radio en televisie kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende apparatuur.


** Optie alleen beschikbaar bij Ino Pro*

4. Een gesprek met meerdere personen

In een gesprek met meerdere personen is er vaak veel achtergrondlawaai aanwezig. Probeer daarom uw volledige aandacht te richten op degene naar wie u wilt luisteren. Als u iets niet heeft verstaan kunt u gerust om herhaling vragen. Tenslotte mist iedereen weleens een woord.

5. Gebruik van de telefoon

Houd bij telefoneren de telefoonhoorn schuin tegen uw jukbeen, zodat het geluid van de telefoon rechtstreeks in de microfoonopeningen terecht komt. Zo zal het toestel niet fluiten en bent u er zeker van dat u het gesprek onder de beste omstandigheden kunt volgen. Wanneer u de telefoon op deze manier vasthoudt, moet u rechtstreeks in de microfoon van de telefoon praten om te zorgen dat uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn u ook goed kan verstaan.

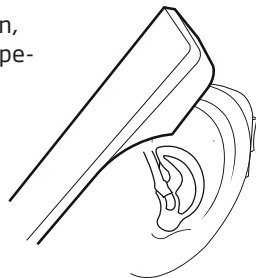

Wanneer u moeite heeft met telefoneren kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende apparatuur.

6. Draadloze en mobiele telefoons

Uw toestel voldoet aan de meest strikte eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt. Houd de telefoon zo dicht mogelijk bij de microfoons van uw toestel of gebruik speciale apparatuur voor het gebruik van een mobiele telefoon.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over mobiel telefoongebruik.

Wanneer u moeite heeft met telefoneren via de mobiele telefoon kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende apparatuur.

* Optie alleen beschikbaar bij Ino Pro

Gebruik uw hoorplossing de hele dag

De beste manier om beter te gaan horen is uw gehoor te trainen de hele dag naar het nieuwe geluid te luisteren met toestellen in. Onregelmatig gebruik zal meestal niet het volledige profijt opleveren.

We kunnen uw gehoor niet herstellen, noch een gehoorverlies verbeteren of voorkomen. We kunnen u echter wel helpen beter gebruik te maken van de hoormogelijkheden die u heeft. Gebruik altijd beide toestellen wanneer u er twee heeft. Kunnen horen met twee oren is net zo belangrijk als kunnen zien met twee ogen.

Oplossingen bij kleine problemen

Klacht	Oorzaak	Oplossing	
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij	pg. 7 & 8
	Verstopte geluidsopening	Reinig de Mould of vervang de tip	pg. 24 & 26
		Overweeg vervanging van het oorsmeerfilter of de tip	pg. 25 & 27
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Reinig de Mould of vervang de tip	pg. 24 & 26
	Vocht	Droog de batterij en het toestel met een doekje	pg. 29
	Lege batterij	Vervang de batterij	pg. 7 & 8
Snerpend geluid	Het toestel zit niet goed in het oor	Zet het toestel opnieuw in het oor	pg. 11
	Opgehoopt oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts	

Raadpleeg uw audicien als de bovenstaande oplossingen niet afdoende werken.

Internationale garantie

Oticon hoortoestellen hebben een beperkte fabrieksgarantie voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten van het toestel, maar niet van accessoires, zoals batterijen, slangetjes, cerumenfilters, enz.

De garantie geldt niet voor schade, defecten of uitval, ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik, onzorgvuldigheid, reparatie door ongeautoriseerden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of zaken in het toestel of onjuiste instelling door de aanpasser.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw audicien kan een uitgebreider garantie hebben gegeven dan deze garantie. Raadpleeg voor meer informatie uw audicien.

Bij problemen met uw toestel(len)

Bij problemen kunt u het beste naar de audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar ter plekke worden verricht.

Oticon Garantiecertificaat

Naam: _____

Audicien: _____

Adres audicien: _____

Telefoon audicien: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Links: _____ Serienr.: _____

Rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: 312 _____

Productgoedkeuring, voorzorgsmaatregelen en markeringen

Het toestel bevat een radiozender die gebruik maakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10m.

Het zendvermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van de hooroplossing is lager dan de elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeen lampen, computerschermen, afwasmachines, enz. Het toestel voldoet aan de internationale normering betreffende Electromagnetic Compability.

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Mobiele telefoon

Sommige hoortoestelgebruikers hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun hoortoestellen hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en hoortoestellen niet compatibel zijn. Volgens de ANSI C63.19 normering (ANSI C63.19-2006 Amerikaanse nationale standaardmethode van metingen betreffende compatibiliteit tussen draadloze communicatie-apparatuur en hoortoestellen) kan de compatibiliteit tussen een bepaald hoortoestel en mobiele telefoon worden voorspeld door de kwalificatie van de hoortoestelimmunitieit op te tellen bij de kwalificatie van de emissies van de mobiele telefoon. Zo is bijvoorbeeld de gecombineerde kwalificatie van een hoortoestel met een kwalificatie van 2 (M2/T2) en een telefoon met een kwalificatie van 3 (M3/T3) in totaal 5. Elke gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 biedt 'normaal gebruik'; een gecombineerde kwalificatie van 6 of meer levert 'uitstekende prestatie'

De immuniteit van dit hoortoestel is M4.

BELANGRIJK

De prestaties van individuele hoortoestellen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer dit hoortoestel daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aankoop van een nieuwe mobiele telefoon. Vraag voor meer informatie de leverancier van uw mobiele telefoon om het boekje 'Hearing instrument Compatibility with Digital Wireless Cell Phones.'

Het toestel bevat een module met:

FCC ID: U28FUNRI03

IC: I350B-FUNRI03

Het toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese industrie.

De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1. Het toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. Het toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur.

Veranderingen of modificaties die niet door Oticon zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming van de FCC om deze apparatuur te gebruiken in gevaar brengen.

Waarschuwingen

Lees de volgende waarschuwingen en inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw toestel(len) gaat gebruiken.

Toestellen en batterijen kunnen bij onjuist gebruik of inslikken gevaarlijk zijn. Dergelijke acties kunnen ernstig letsel of blijvende gehoorverlies veroorzaken of zelfs fataal zijn.

- Toestellen, onderdelen daarvan en batterijen zijn geen speelgoed en dienen buiten bereik te worden gehouden van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze schade zou kunnen toebrengen.
- Vervang de batterij niet in het bijzijn van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Controleer uw medicijnen voordat u ze inneemt. Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen.
- Stop uw toestel of batterijen nooit in uw mond, ze zijn glad en kunnen per ongeluk worden ingeslikt.

- De meeste toestellen van Oticon kunnen worden geleverd met een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een toestel of batterij.

Gebruik van een hooroplossing

- Toestellen mogen alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en geadviseerd door de aanpasser. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Batterijgebruik

- Gebruik goede batterijen. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer batterijen nooit te verbranden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Toestelstoring

- Het geluid van een toestel kan, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is, plotseling wegvallen. Houd daar rekening mee wanneer u deelneemt aan het verkeer of u in een situatie bevindt waar waarschuwingssignalen belangrijk zijn.

Storing

- Uw toestel is op storing getest volgens de strengste internationale eisen. Door de steeds voortschrijdende technische ontwikkelingen worden echter voortdurend nieuwe producten geïntroduceerd, waardoor onvoorziene storing in hoortoestellen kan optreden. Voorbeelden hiervan zijn magnetrons, alarmsystemen, mobiele telefoons, faxapparatuur, enz. Houd bij storing een paar centimeters afstand van het storende apparaat.
- Hoewel uw hoortoestel voldoet aan de strengste eisen van de International Electromagnetic Compatibility kan het storing veroorzaken bij medische apparatuur. Een dergelijke storing kan eveneens veroorzaakt worden door radiosignalen, stroomstoringen, metaaldetectoren op vliegvelden, elektromagnetische velden van medische apparatuur en elektrostatische ontladingen.

Elektronische implantaten

- Oticon adviseert om voor de zekerheid, net als bij gebruik van mobiele telefoons, de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen. Houd de toestellen altijd minstens 15 cm van een implantaat, draag ze bijvoorbeeld nooit in een borstzak.
- Raadpleeg bij een implantaat in het hoofd de fabrikant van het implantaat voor informatie over een mogelijk risico op storing.
- Het doosje waarin het hoortoestel kan worden opgeborgen heeft een ingebouwde magneet. Draag dit doosje niet in uw borstzak of in de buurt van uw borst als u geïmplanteerde apparatuur zoals een pacemaker of defibrillator gebruikt.

Explosieven

- De batterij van uw toestel heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. Het toestel is niet volgens internationale eisen op explosieve atmosferen getest. Het is aan te bevelen uw toestel niet te gebruiken op plaatsen waar gevaar op explosie bestaat.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

- Doe uw toestel uit tijdens het maken van bijvoorbeeld een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het toestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van een hooroplossing kan vermeerdering van oorsmeerproductie optreden.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Ga naar uw (KNO-)arts bij een van deze bijwerkingen.

Veiligheidseisen Direct Audio Input (DAI)

- De veiligheid van hooroplossingen met DAI (Direct Audio Input) wordt bepaald door de externe geluidsbron. Bij koppeling aan op het elektriciteitsnet werkende apparatuur, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60601 of vergelijkbare veiligheidsnormen.

Oorsmeerbeschermingsysteem

- Inspecteer altijd of er geen ruimte zit tussen de MicroMould en de luidspreker.

Raadpleeg uw audicien bij twijfels of vragen over het gebruik of de vervanging van uw cerumenfilter.

Waarschuwing voor audicien en gebruiker

- Bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt, dient speciale aandacht te worden besteed aan een mogelijk risico op beschadiging van het restgehoor van de toestelgebruiker.

110665NL / 2017.11.06

Oticon verklaart hierbij dat deze hooroplossing voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de Directive 2014/53/EU. Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

CE 0543 0682



Gooi, in vervand met milieuvuiling, uw lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.



NII75

110665NL / 2017.11.06

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively



0000110665000001

oticon
PEOPLE FIRST