

# Technische gegevens

## Oticon SmartCharger miniRITE R

De SmartCharger is ontworpen om zowel thuis als onderweg eenvoudig te gebruiken. Het deksel van de oplader dient als bescherming en opslag voor de hoortoestellen. En met de oplaadbare ingebouwde lithium-ionbatterij kan de SmartCharger als powerbank worden gebruikt wanneer er geen stopcontact beschikbaar is.

### Opladen

- Neem de hoortoestellen uit en plaats ze in de oplader.
- De hoortoestellen worden automatisch opgeladen wanneer ze in de oplader worden geplaatst en automatisch ingeschakeld wanneer ze uit de oplader worden genomen.
- Laad de hoortoestellen elke nacht op zodat ze volledig zijn opgeladen voor gebruik overdag.

### Gemakkelijk af te lezen

De gebruiker kan de oplaadstatus eenvoudig aflezen van de LED op het hoortoestel:

- Oranje = bezig met opladen
- Groen = volledig opgeladen

### Korte oplaadtijd

Als de hoortoestellen volledig leeg zijn, is de normale oplaadtijd:

- 3 uur = volledig opgeladen
- 1 uur = 50% opgeladen
- 0,5 uur = 25% opgeladen

### Productkenmerken

- Inductief opladen
- LED-lampje voor opladen en de status van het batterijniveau
- Magnetische aansluiting - hoortoestellen blijven in de oplaadpoorten zitten
- Afneembare voedingskabel
- Rubberen voetjes voor hoge stabiliteit
- Zachte, ronde vormen - eenvoudig schoon te maken



De SmartCharger is ontworpen voor het opladen van de miniRITE R. Deze is zowel thuis te gebruiken bij aansluiting op een voedingsbron of onderweg, met behulp van de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij als powerbank.

Ontworpen voor miniRITE R  
Oticon Real™  
Oticon More™  
Oticon Zircon  
Oticon Play PX



Voedingsstekker\*

**USB-kabel**  
Steek in de stekker



**Oplaadpoorten**  
Voor hoortoestellen bij opladen




**Indicator batterij**  
Geeft het batterijniveau/de oplaadstatus van de powerbank weer

\* Stekker varieert per land



<b>Technische gegevens: Oplader</b>	
Naam	Oticon SmartCharger miniRITE R
Ontworpen voor/compatibel met	Oticon Real™, Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniRITE R
Afmetingen	hoogte 76,4 mm / breedte 47,2 mm / lengte 95 mm
Gewicht	180 g
Kleur	Zwart
Voedingsstekker	USB A
Statusindicator	LED-lampje op de oplader wanneer deze op een stopcontact is aangesloten: Geeft de oplaadstatus van de powerbank aan. LED-lampje op de oplader wanneer deze is losgekoppeld van een voedingsbron: Geeft het batterijniveau van de powerbank aan. LED-lampje op de hoortoestellen bij opladen: geeft de oplaadmodus aan
Oplaadtijd van hoortoestellen	Maximaal 3 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +10°C tot +35°C Maximaal 4 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +5°C tot +10°C en +35°C tot +38°C
Oplaadtijd van de powerbankbatterij	Maximaal 4 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +10°C tot +35°C
Voedingsbron	Meegeleverde voedingsaansluiting
Ingangsspanning	5 V DC
Ingangsstroom	Max 1A
Kabel	Afneembare kabel, lengte 150 cm
Aangesloten op externe apparatuur	Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
<b>Gebruiksomstandigheden</b>	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +38°C Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -20°C tot +60°C Vochtigheid: 5% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa
<b>Technische gegevens: Voedingsaansluiting</b>	
Ingangsspanning	100-240 V AC
Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning	5 V DC
Uitgangsstroom	1 A

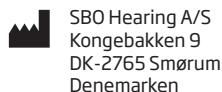

**Hoofdkantoor**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denemarken