

# Technische gegevens

## Charger 1.0 miniBTE R

De oplader is ontworpen om het dagelijks opladen te vergemakkelijken met een paar eenvoudige handelingen.

### Opladen

- Neem de hoortoestellen uit en plaats ze in de oplader - er hoeft geen deksel te worden geopend.
- De hoortoestellen worden automatisch opgeladen wanneer ze in de oplader worden geplaatst en automatisch ingeschakeld wanneer ze uit de oplader worden genomen.
- Laad de hoortoestellen elke nacht op zodat ze volledig zijn opgeladen voor gebruik overdag.

### Gemakkelijk af te lezen

De gebruiker kan de oplaadstatus eenvoudig aflezen van de led op het hoortoestel:

- Oranje = bezig met opladen
- Groen = Volledig opgeladen

### Korte oplaadtijd

Als de hoortoestellen volledig ontladen zijn, is de normale oplaadtijd:

- 3,5 uur = Volledig opgeladen
- 1 uur = 40% opgeladen
- 0,5 uur = 20% opgeladen

### Productkenmerken

- Inductief opladen
- Led-lampje AAN/UIT
- Magnetische aansluiting - hoortoestellen blijven in de oplaadpoorten zitten
- Vaste stroomkabel
- Rubberen voetjes voor hoge stabiliteit
- Zachte, ronde vormen - eenvoudig schoon te maken
- Inclusief zacht reisetui



De oplader is ontworpen voor het opladen van de miniBTE R. Het is gebaseerd op inductieve technologie en laadt de hoortoestellen binnen drie uur volledig draadloos op.


Ontworpen voor miniBTE R  
Oticon More™  
Oticon Zircon  
Oticon Play PX



\* Stekker varieert per land



<b>Technische gegevens: Oplader</b>	
Naam	Charger 1.0, Oticon miniBTE R
Ontworpen voor/compatibel met	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R
Afmetingen	Ø95 mm/totale hoogte van 39 mm
Gewicht	135 g
Kleur	Zwart
Voedingsstekker	USB A
Statusindicator	Led-lampje op oplader: Geeft status oplader AAN/UIT aan Led-lampje op hoortoestel bij opladen: Geeft de oplaadmodus aan
Oplaadtijd van hoortoestellen	Maximaal 3,5 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +10°C tot +35°C Maximaal 5 uur opladen, afhankelijk van de beginstatus van de batterij Temperatuur: +5°C tot +10°C en +35°C tot +40°C
Voedingsbron	Meegeleverde voedingsaansluiting
Ingangsspanning	5 V DC
Ingangsstroom	< 0,2 A (twee hoortoestellen opladen) <10 mA stand-by (geen hoortoestellen geplaatst)
Kabel	Vaste kabel, lengte 150 cm
Aangesloten op externe apparatuur	Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.
<b>Gebruiksomstandigheden</b>	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -25°C tot +70°C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa
<b>Technische gegevens: Voedingsaansluiting</b>	
Ingangsspanning	100 -240 V AC
Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning	5 V DC
Uitgangsstroom	1 A

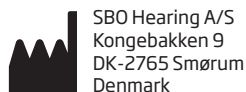

**Hoofdkantoor**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark