

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening 3.0



Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe Afstandsbediening 3.0. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe Afstandsbediening te halen.

Voor eventuele vragen over het gebruik van uw Afstandsbediening kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Afstandsbediening 3.0 is bedoeld om gebruikers van Oticon draadloze hoortoestellen te helpen bij het bedienen van de functies die door hun hooroplossing worden geleverd.
Aanwijzingen voor gebruik	Geen aanwijzingen voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruiksomgeving	Binnen / buiten.
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van uw hoortoestel.

Inhoudsopgave

Over

Inhoud van de verpakking	6
Productoverzicht	7

Aan de slag

Batterijen	8
Plaatsen van de batterijen	9
Koppelen met hoortoestellen	10

Gebruik

Bedieningsafstand	14
Bevestigingen	15
Programma veranderen	17
Volume wijzigen	18
Dempen	19
Opening voor koord	20
Onderhoud van uw Afstandsbediening	21

Waarschuwingen

Waarschuwingen	22
----------------	----


Aanvullende informatie

Gebruiksomstandigheden	26
Internationale garantie	27
Technische informatie	28

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

Afstandsbediening 3.0

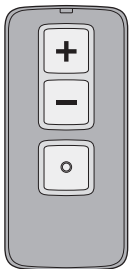

Batterijen





2 x AAAA

Dit boekje



Productoverzicht

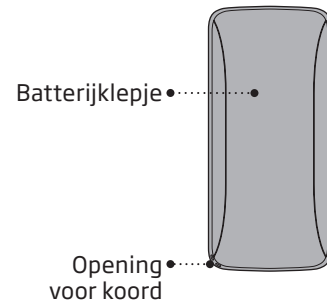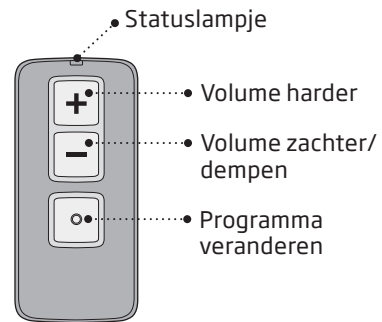

Batterijen


Om de Afstandsbediening te activeren, moet u twee AAAA-batterijen in de batterijlade plaatsen.

De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik. Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer eenmaal per jaar worden vervangen.

Forceer het batterijklepje niet. Als u kracht nodig heeft om het batterijklepje op zijn plaats te klikken, controleer dan eerst of deze wel goed zit. Plaats het klepje opnieuw zodat deze zonder kracht op zijn plaats kan worden geklikt.

Plaatsen van de batterijen


1 Oude batterij verwijderen

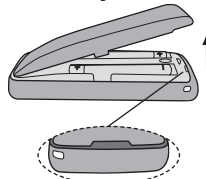

Open het batterijklepje voorzichtig.

Verwijder de gebruikte batterijen.


2 Nieuwe batterij plaatsen

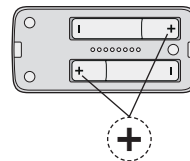

Plaats de nieuwe batterijen in de batterijlade.

Zorg dat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken in de batterijlade.

3 Sluiten

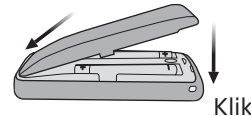

Plaats het batterijklepje terug.

Druk vervolgens het batterijklepje voorzichtig omlaag tot het op zijn plaats klikt.

Koppelen met hoortoestellen


De Afstandsbediening is een persoonlijk hulpmiddel voor gebruik met één paar hoortoestellen. De Afstandsbediening kan na het koppelen maximaal twee hoortoestellen tegelijkertijd bedienen.

Voordat de Afstandsbediening met uw hoortoestellen kan worden gebruikt, moeten de apparaten met elkaar worden gekoppeld.

U kunt ervoor kiezen om de Afstandsbediening met twee hoortoestellen tegelijk te koppelen of één voor één. U moet de koppelingsprocedure herhalen als u ervoor kiest uw hoortoestellen één voor één te koppelen.

De volgende pagina's tonen een voorbeeld van het koppelen van een hoortoestel met de Afstandsbediening.

1. Bereid u voor op het koppelen

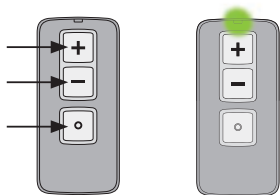

Houd alle drie de toetsen, (+), (-) en (o), 5 seconden ingedrukt. De status LED knippert tweemaal groen.

De status LED brandt ongeveer 10 seconden groen om te bevestigen dat de Afstandsbediening klaar is om te koppelen.

2. Zet de hoortoestellen in de koppelingsstand




Start de hoortoestellen opnieuw om de koppelingsstand te activeren.


Zie de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor het uit- en inschakelen van de hoortoestellen.

Wacht ongeveer 10 seconden tot de hoortoestellen volledig zijn ingeschakeld en een melodietje is afgespeeld om aan te geven dat ze aan zijn. De hoortoestellen blijven 3 minuten in de koppelingsstand.

3. Koppel de hoortoestellen

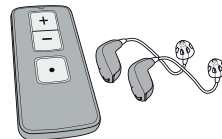

Plaats beide hoortoestellen binnen 20 centimeter van de Afstandsbediening.

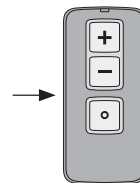


Druk kort op een willekeurige toets van de Afstandsbediening om deze automatisch te laten koppelen met de hoortoestellen.



Wanneer het koppelen is voltooid, brandt de status LED ongeveer 10 seconden groen.

Bedieningsafstand


Voor bediening van uw hoortoestellen houdt u de Afstandsbediening op maximaal 1,8 meter afstand van de hoortoestellen. Er is geen directe zichtlijn tussen de Afstandsbediening en de hoortoestellen nodig. Als u twee hoortoestellen met de Afstandsbediening heeft gekoppeld, dan worden beide toestellen tegelijk gewijzigd.

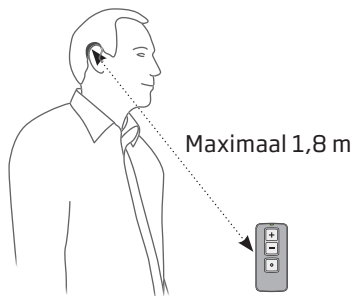

Bevestigingen

Visuele indicaties

De status LED gaat branden als op een toets wordt gedrukt.

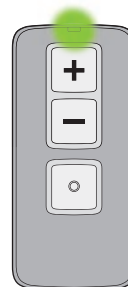

Auditieve indicaties

U hoort een geluid in uw hoortoestellen om te bevestigen dat de handeling is uitgevoerd.

Lage batterijspanning


Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert de status LED snel wanneer er een toets wordt ingedrukt. In dat geval dient u de batterijen zo spoedig mogelijk te vervangen.



Programma veranderen

U kunt de Afstandsbediening gebruiken om van programma te veranderen als uw hoorzorgprofessional meer dan één programma heeft geconfigureerd.

Druk kort op de "•"-toets op de Afstandsbediening om door de programma's van het hoortoestel te lopen. Elke keer dat u op de toets drukt, gaan de hoortoestellen verder naar het volgende programma.

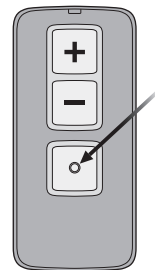

Druk om het programma te wijzigen


BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.


Volume wijzigen

U kunt de geluidsstrekte van uw hoortoestel aanpassen met de volumetoetsen op de Afstandsbediening.

U hoort een korte bevestiging in uw hoortoestellen als u het volume verhoogt of verlaagt.

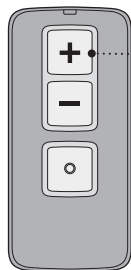

• Druk op "+" om het volume hoger te zetten (harder)

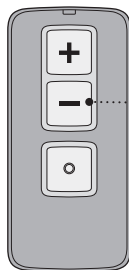


• Druk op "-" om het volume lager te zetten (zachter)

Dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om de hoortoestellen uit te zetten terwijl u ze draagt. Druk op de toets volume zachter en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de status LED uit gaat om de hoortoestellen te dempen.

Druk kort op een willekeurige toets op de Afstandsbediening om de demping van uw hoortoestellen op te heffen.

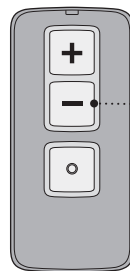

• Druk ongeveer 2 seconden


BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Opening voor koord

De Afstandsbediening heeft rechts onderaan een opening voor een koord.

Alle geschikte polskoorden kunnen gebruikt worden.

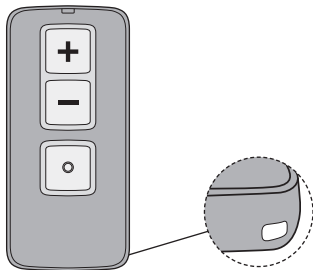

Onderhoud van uw Afstandsbediening

Als u de batterijen vervangt of de Afstandsbediening schoonmaakt, doe dat dan boven een zacht oppervlak om schade te voorkomen als u de Afstandsbediening laat vallen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de Afstandsbediening. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw Afstandsbediening gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw Afstandsbediening tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Gevaar van stikken en inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Uw Afstandsbediening, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een batterij, hoortoestel of kleine onderdelen.

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw Afstandsbediening buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Koordbevestiging

Als u een polskoord gebruikt, zorg dan dat deze ontworpen en geschikt is voor gebruik met de Afstandsbediening. Gebruik nooit een lanyard vanwege het risico op verstikking.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorgprofessional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en ontdoe u niet van de batterijen door ze te verbranden. Er is een risico dat de batterijen ontploffen.

Actieve implantaten

De Afstandsbediening is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo – SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam. De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Waarschuwingen

Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw Afstandsbediening voorafgaand aan het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De Afstandsbediening kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Mogelijke bijwerkingen

De anti-allergene materialen in uw Afstandsbediening kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Hitte en chemicaliën

Stel uw Afstandsbediening nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. Uw Afstandsbediening mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème of insectenspray kunnen uw Afstandsbediening beschadigen. Verwijder daarom altijd uw Afstandsbediening voordat u dergelijke producten aanbrengt en geef deze de tijd om te drogen.

Gebruik in het verkeer

Het gebruik van de Afstandsbediening kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de Afstandsbediening gebruikt.

Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.

Gebruik in vliegtuigen

De Afstandsbediening bevat Bluetooth. Uw Afstandsbediening mag niet aan boord van een vliegtuig worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Storing

Uw Afstandsbediening is grondig getest op storing volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw Afstandsbediening en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de Afstandsbediening en de storende apparatuur te vergroten.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5° C tot +40 °C Vochtigheid: 15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25 °C tot +70 °C Vochtigheid: 15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Internationale garantie

Uw Afstandsbediening valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande

garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw Afstandsbediening kunt u het beste naar uw hoorzorgprofessional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Model	RC-3A
Mechanische afmetingen	75,3 x 35 x 12 mm; gewicht 32,7 g (incl. batterijen)
Compatibiliteit	Oticon hoortoestellen met 2,4 GHz radiotechnologie
Type batterij	2 x AAAA
Levensduur batterij bij normaal gebruik	12 maanden
Gemiddeld transmissiebereik	Maximaal 1,8 m
Statusindicator	Groene LED
Frequentie	Vergunningsvrij 2,4 GHz (ISM-band)
Zendvermogen	Max. 10 dBm EIRP

De Afstandsbediening bevat een radiozondontvanger die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy (BLE). De radiozender is zwak en altijd lager dan 10 mW, gelijk aan 10 dBm totaal uitgestraald vermogen.

De Afstandsbediening voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

Voor gebruik op het lichaam voldoet dit apparaat aan de FCC en IC RF-blootstellingslimieten en is het getest terwijl het in contact stond met het menselijk lichaam. Het apparaat mag niet op een andere plaats worden geplaatst of samen met een andere antenne worden gebruikt.

In verband met de beperkte ruimte op de Afstandsbediening zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Aanvullende informatie is te vinden in het Technisch gegevensblad op www.oticon.global

VS en Canada

Dit apparaat is gecertificeerd volgens:

FCC-ID: 2ACAHREMCTR03
IC: 11936A-REMCTR03

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor vergunningvrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur, en
2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

De fabrikant verklaart hierbij dat deze Afstandsbediening voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



TA-2016/1771
GOEDGEKEURD



Complies with
IMDA Standards
DA103820



Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Duidt de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU Richtlijnen 2017/745 en 2017/746.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.



Bluetooth-logo

Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



2,4 GHz

2,4 GHz

Het apparaat bevat Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radiotechnologie voor draadloos streamen naar Oticon hoortoestellen met een 2,4 GHz ontvanger.



IMDA-label Singapore

Duidt aan dat het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing produceert voor andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.



ICASA-label Zuid-Afrika

Duidt aan dat het apparaat mag worden verkocht in Zuid-Afrika.

220042NL / 2020.02.28

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels



Droog houden

Duidt een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.



Waarschuwingssymbool

Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.



Serienummer

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Catalogusnummer

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Medisch hulpmiddel

Het apparaat is een medisch hulpmiddel.



Batterij

Geeft het type batterij en wijze van plaatsing aan.



Japan TELEC-symbool

Aanduiding voor gecertificeerde radioapparatuur.

220042NL / 2020.02.28



oticon
life-changing **technology**

220042NL / 2020.02.28