

BTE

Alta2
Nera2
Alta
Nera



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Model oversikt

Dette heftet gjelder for Oticon BTE i følgende høreapparat-familier og modeller:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 |
| ☐ Alta Pro | ☐ Nera Pro |
| ☐ Alta | ☐ Nera |

BTE er tilgjengelig i følgende tilpassningsnivå:

- ☐ Tilpassningsnivå 85
- ☐ Tilpassningsnivå 100 (Power instrument)

Innledning til dette heftet

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye høreapparat. Les gjennom heftet nøye, også **delen Advarsel**. Dette hjelper deg til å få mest mulig nytte av det nye høreapparatet ditt.

Din audiograf har programmert høreapparatet slik at det oppfyller dine behov. Har du spørsmål vennligst ta kontakt med din audiograf.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Alternativer | Advarsler | Mer informasjon |

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å finne frem i de ulike delene.

Bruksområder

Høreapparatet er ment å forsterke og overføre lyd til øret og dermed kompensere for nedsatt hørsel fra mild til alvorlig hørselstap. Høreapparatet er ikke beregnet for små barn < 36 måneder.

VIKTIG

Forsterkningen i høreapparatet er spesielt justert og optimalisert for hørselen din etter innstillinger fra din audiograf.

Innholdsfortegnelse 1/2

Om

Gjenkjenn modell og ørepropp til ditt høreapparat	10
BTE med hook og ørepropp	12
BTE med tynnslange (Corda miniFit)	14
Gjenkjenn venstre og høyre apparat	16
Batteri	17

Oppstart

Slå høreapparatet på og av	18
Når det er på tide å skifte ut batteri	19
Skifte batteriet	20

Håndtering

Stell av høreapparatet ditt	22
Multiverktøy for håndtering av batterier og rengjøring	23
Hook med ørepropp	24
Sett på apparatet med ørepropp	25
Rense øreproppen	26
Vaske øreproppen	27

Tynnslange (Corda miniFit)	28
Sett på apparatet med tynnslange	29
Rengjør tynnslangen	30
Standard ørepropper: dome eller Grip Tip	32
Bytte av dome eller Grip Tip	33
Tynnslange med mikropropp eller LiteTip	34
Vedlikehold av mikropropp eller LiteTip	35
Erstatt ProWax filter	36

Alternativer

Valgfrie funksjoner og tilbehør	38
Mute høreapparatet	39
Endre program	40
Endre volum	42
Barnesikret batteriskuff	44
Trådløst tilbehør	46
Andre alternativer (valgfritt)	48

Fortsetter på neste side

Innholdsfortegnelse 2/2

Advarsler

Advarsler	50
-----------	----


Mer informasjon

Feilsøkingssguide	56
Vannavstøtende	58
Bruksforhold	59
Garantisertifikat	60
Internasjonal garanti	61
Teknisk informasjon	62


Gjenkjenn modell og ørepropp til ditt høreapparat

Det finnes to ulike slangeløsninger og flere ulike ørepropper for ditt høreapparat. Vennligst identifiser din versjon og propp. Dette gjør det lettere for deg å navigere gjennom dette heftet.

- ☐ **BTE med hook og ørepropp**
Et apparat med hook benytter en standard ørepropp.

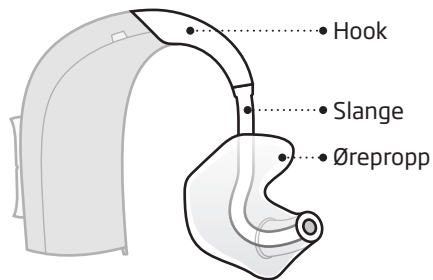

- ☐ **BTE med tynnslange (Corda miniFit)**

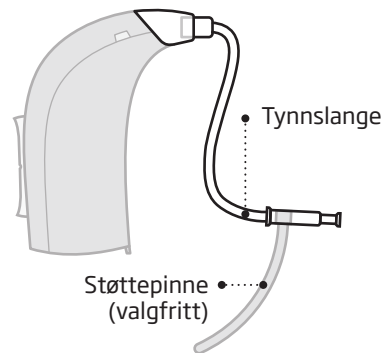

Ørepropper

Et apparat med en tynnslange har en av følgende ørepropper - dome, GripTip, mikropropp eller LiteTip.



- ☐ Dome (åpen dome vises)



- ☐ GripTip




- ☐ Mikropropp eller LiteTip


* For erstatning av dome eller Grip Tip se delen: Erstatt dome eller Grip Tip

BTE med hook og ørepropp

Hva den er

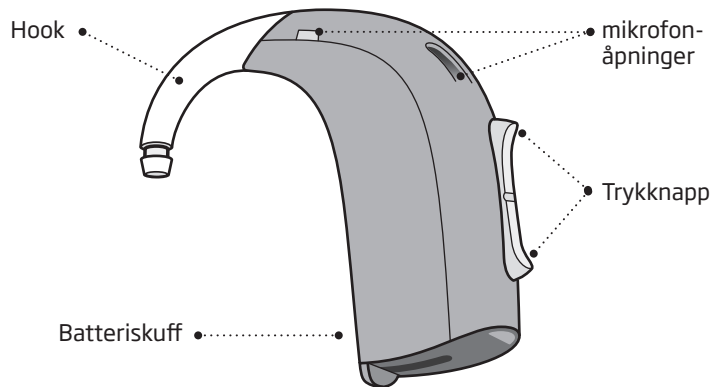


Hva den gjør

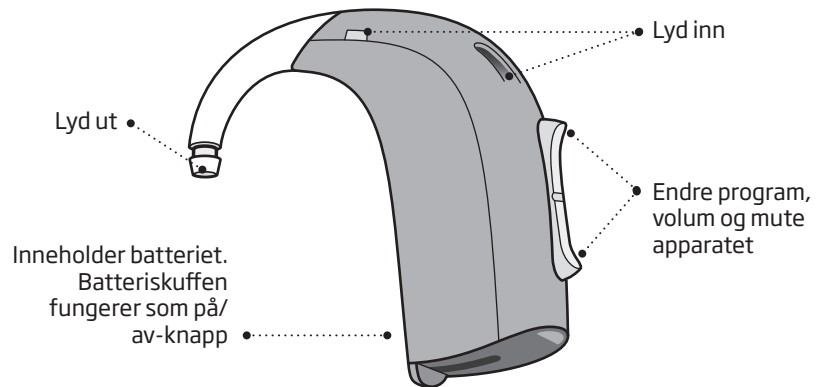


BTE med tynnslange (Corda miniFit)

Hva den er

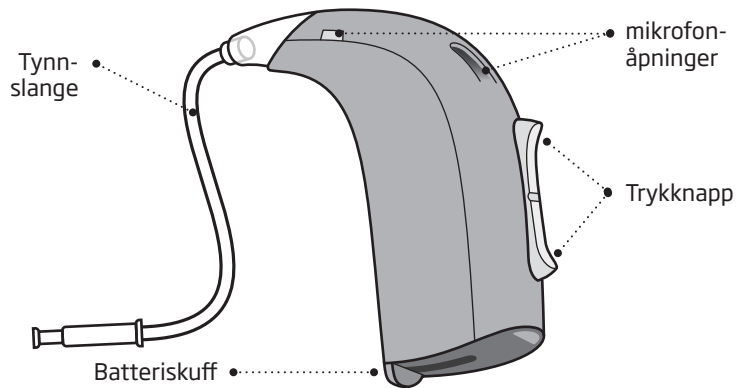


Hva den gjør

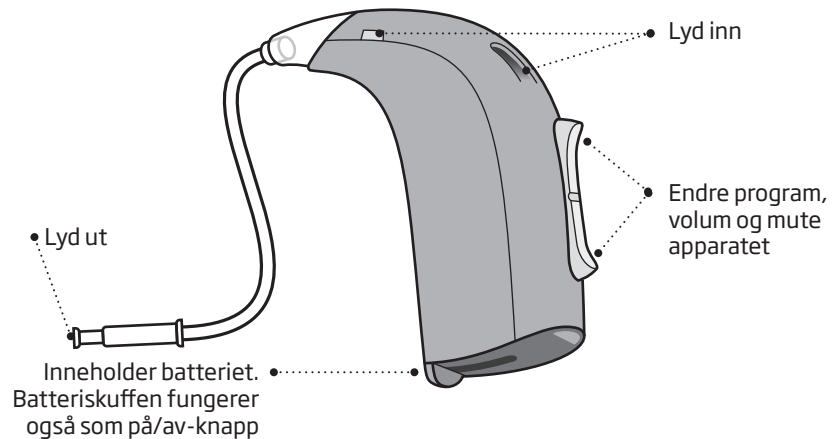


Gjenkjenn venstre og høyre apparat

Det er viktig å skille mellom venstre og høyre apparat, da de kan være ulikt programmert.

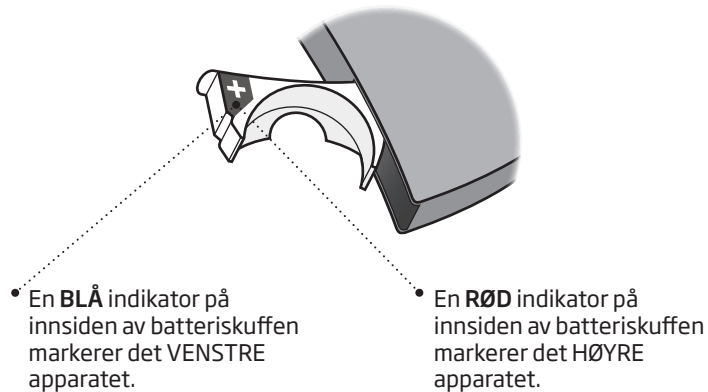

Batteri

Høreapparatet er et lite elektronisk apparat som bruker spesielle batterier. For å aktivere apparatet, må du først sette inn et nytt batteri i batteriskuffen. Se delen «Skifte batteriet».

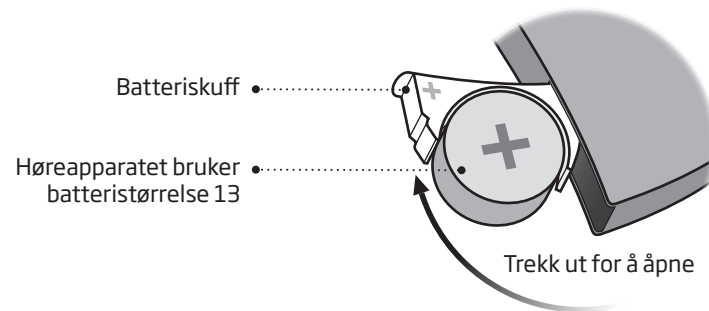


Slå høreapparatet på og av

Batteriskuffen brukes også til å slå høreapparatet på og av. For å bevare batteriet lengst mulig bør du slå av høreapparatet når du ikke bruker det.


Slå PÅ

Lukk batteriskuffen med batteriet på plass.

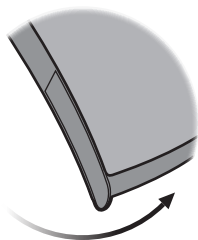

Slå AV

Åpne batteriskuffen

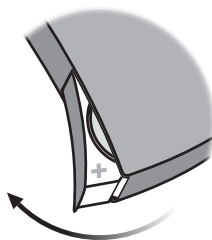

Når det er på tide å skifte ut batteri

Når det er på tide å skifte ut batteriet, høres to pip som gjentas i moderate intervaller til batteriet blir flatt.



To pip

= Batteriet er lavt



Fire pip


= Batteriet er tomt

Tips til vedlikehold av batteri

For å sikre deg at høreapparatet alltid fungerer, er det lurt å ta med reservebatterier eller skifte batteri før du går hjemmefra.


Skifte batteriet

1. Fjern

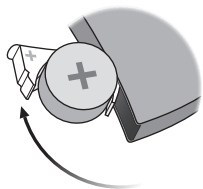


Åpne batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

2. Ta av

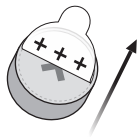


Fjern den påklistede etiketten fra + siden av det nye batteriet.

3. Sett inn

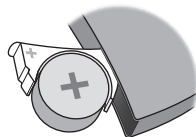

Sett inn det nye batteriet i batteriskuffen. Påse at + siden er vendt oppover.

4. Lukk

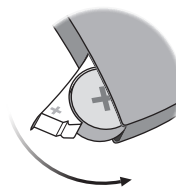

Lukk batteriskuffen. Apparatet spiller en melodi gjennom øreproppen. Hold proppen nærme øret ditt for å høre melodien.

Tips



Multiverktøyet kan brukes for å skifte batteri. Bruk den magnetiske enden for å fjerne og sette inn batterier.


Multiverktøyet får du av audiografen din.

Stell av høreapparatet ditt

Når du steller høreapparatet bør du holde det over en myk overflate for å unngå skade om du skulle miste det.

Rengjøring av mikrofonåpninger

Børst forsiktig vekk synlige tegn på skitt fra åpningene. Børst lett av overflaten. Påse at børsten ikke trykkes inn i åpningene.

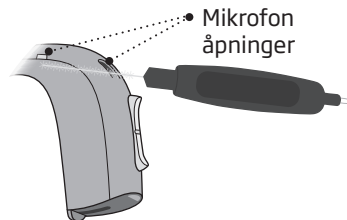


VIKTIG

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre apparatet. Selve høreapparatet må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker

Multiverktøy for håndtering av batterier og rengjøring

Multiverktøyet har en magnet som gjøre det enklere å skifte batteriet i høreapparatet. Det har også en børste og en ledningsløkke for rengjøring og fjerning av ørevoks.

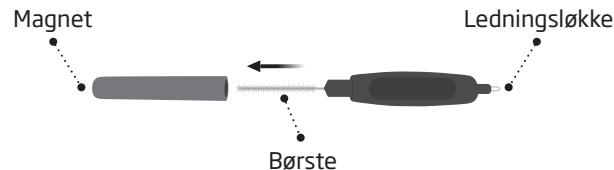

VIKTIG

Multiverktøyet har en innebygd magnet. Hold multiverktøyet minst 30 cm unna kredittkort eller annet magnetisk følsomt utstyr.

Hook med ørepropp

Les følgende sider hvis du har et høreapparat med hook og ørepropp.

Proppen er spesiallaget til deg for å passe til ditt øre.



Sett på apparatet med ørepropp

Trinn 1



Trekk forsiktig i øret og trykk øreproppen i retning av øregangen og vri det litt.


Trinn 2



Plasser høreapparatet bak øret.

Rense øreproppen

Øreproppen må rengjøres jevnlig. Bruk en myk klut til å tørke av overflaten på øreproppen. Bruk Multiverktøyets ledningsløkke til å rengjøre åpningen.

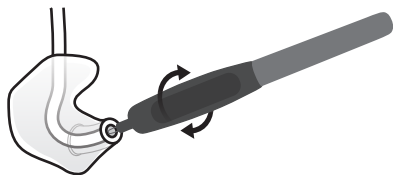

Skifte ut slangen

Slangen mellom øreproppen og apparatet må skiftes når den blir gul eller stiv. Ta kontakt med din audiograf for dette.

Vaske øreproppen

Trinn 1




Vær sikker på at du kan kjenne igjen hvilken ørepropp som tilhører hvilket apparat før du fjerner proppen fra apparatet.

Trinn 2



Ta av slangen og øreproppen fra hooken. Hold godt i hooken når du drar av slangen. Hvis ikke kan apparatet bli skadet.

Trinn 3

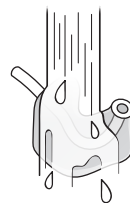


Vask øreproppen og slangen med mild såpe. Rengjør og tørk helt før du kobler til høreapparatet igjen.

Tynnslange (Corda miniFit)

Les følgende sider hvis apparatet ditt har en tynnslange (Corda miniFit) med dome, GripTip, mikropropp eller LiteTip.

Corda miniFit er en tynnslange som fører lyd inn i øret ditt. Tynnslangen må alltid brukes med en propp festet på den. Bruk bare deler som er laget for ditt høreapparat.

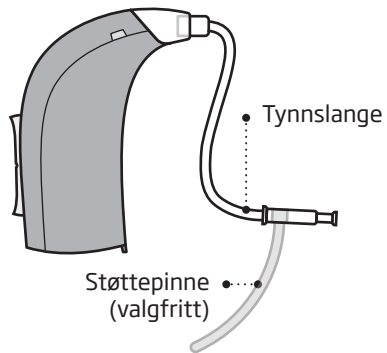


Sett på apparatet med tynnslange

Trinn 1




Plasser høreapparatet bak øret.

Trinn 2

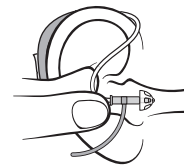

Hold bøyen på slangen mellom tommel og pekefinger. Slangen skal peke mot åpningen til øregangen.

Trinn 3

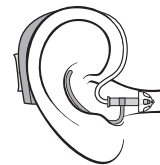


Skyv proppen inn i øregangen til tynnslangen ligger inntil siden på hodet ditt.

Rengjør tynnslangen


Tynnslangen bør rengjøres for å holde den fri for fuktighet og voks. Hvis den ikke rengjøres, kan den bli blokkert av voks, noe som fører til at lyden ikke kommer ut.

Trinn 1

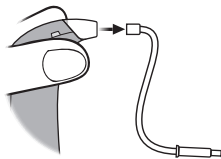


Trekk tynnslangen av høreapparatet.

Trinn 2

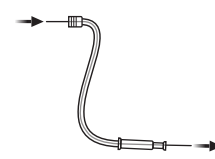

Trykk rengjøringsverktøyet hele veien gjennom tynnslangen.


Trinn 3

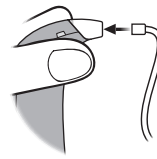

Koble tynnslangen på høreapparatet igjen.

Standard ørepropper: dome eller Grip Tip

Både domer og Grip Tip er laget av et mykt gumminmateriale. Det finnes fire ulike type domer. Sjekk domens type og størrelse nedenfor.

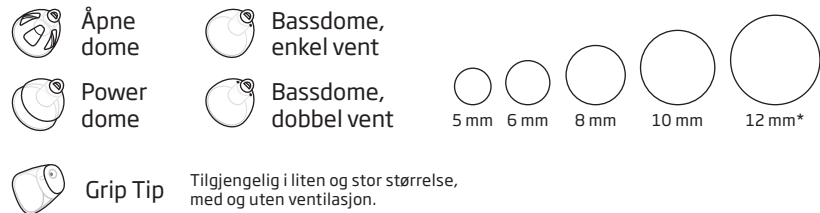


* Ikke for åpen dome

VIKTIG

Hvis øreproppen ikke er på høyttaleren når den fjernes fra øret, kan den fortsatt være i øregangen. Kontakt din audiograf for ytterligere instruksjoner.

Bytte av dome eller Grip Tip

Standard øreplugg (Dome eller Grip Tips) må ikke rengjøres. Hvis Domen/Grip Tip er fylt med voks, erstattes den med en ny en (typisk ukentlig). Grip Tips bør skiftes minst en gang i måneden.

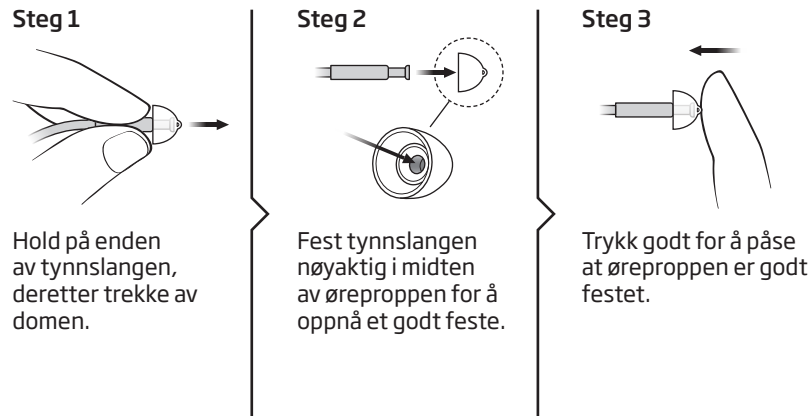

Tynnslange med mikropropp eller LiteTip

Les følgende sider hvis du har en mikropropp eller LiteTip. Mikropropp og LiteTip er spesiallaget øret ditt.



• Mikropropp




• LiteTip

Vedlikehold av mikropropp eller LiteTip

Proppen bør rengjøres jevnlig.

Voksfilteret i proppen bør erstattes når det er tett eller når høreapparatet ikke fungerer som normalt.

Bruk bare voksfiltrene som du har fått av audiografen din.

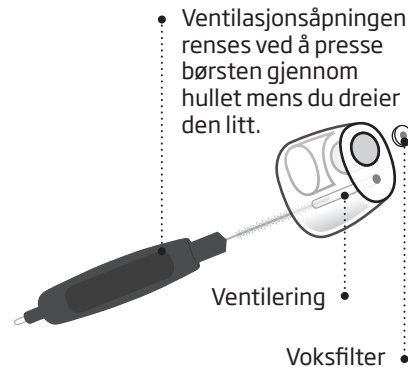


VIKTIG

Bruk alltid samme type voks filter som opprinnelig ble levert med høreapparatet. Hvis du er i tvil om bruk eller utskifting av voks filtre, ta kontakt med din audiograf.


Erstatt ProWax filter

1. Verktøy

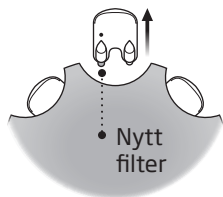

Ta verktøyet ut fra beholderen. Verktøyet har to ender, en tom til fjerning, og en med et nytt voksfilter.

2. Fjern

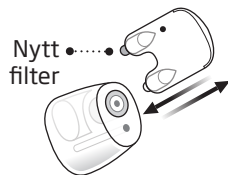

Trykk den tomme enden inn i voksfilteret i høyttaleren og trekk det ut.

3. Sett inn



Sett inn det nye voksfilteret ved bruk av den andre enden, fjern verktøyet og kast det.

Valgfrie funksjoner og tilbehør


Funksjoner og tilbehør beskrevet på følgende sider er valgbare. Ta kontakt med audiografen din for å finne ut hvordan høreapparatet ditt er programmert.

Hvis du opplever vanskelige lyttesituasjoner, kan et spesialprogram være behjelpelig. Dette programmeres av audiografen din.

Skriv ned lyttesituasjoner der du kanskje trenger hjelp.

☐ Mute høreapparatet

Bruk mute-funksjonen hvis du vil koble ut lyden i høreapparatet mens du har det på.

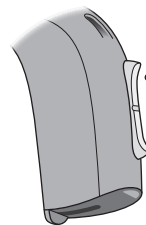


Trykk lenge på knappen for å dempe apparatet. For å reaktivere høreapparatet trykker du kort på knappen igjen.

VIKTIG

Ikke bruk mute-funksjonen som en av-bryter, ettersom høreapparatet fremdeles bruker strøm fra batteriet i denne modusen.

☐ Endre program

Ditt høreapparat kan ha opptil 4 forskjellige programmer. Dette programmeres av audiografen din.

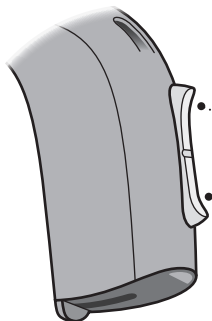

Trykk opp eller ned for å skifte programmer

Vær oppmerksom på at du kan endre mellom program fortløpende - både opp og ned i programrekken. Hvis du f.eks. vil gå fra program 1 til 4, kan du trykke på ned-knappen én gang i stedet for å trykke på opp-knappen 3 ganger.

Fylles ut av audiografen din

Program	Lyden du hører når det er aktivert	Når skal den brukes
1	 «1 pip»	
2	 «2 pip»	
3	 «3 pip»	
4	 «4 pip»	

Skifte program:

☐ VENSTRE


☐ HØYRE

☐ Kort trykk

☐ Langt trykk

☐ Endre volum

Trykknappen lar deg justere volumet.
Du hører et klikk når du øker eller reduserer volumet.

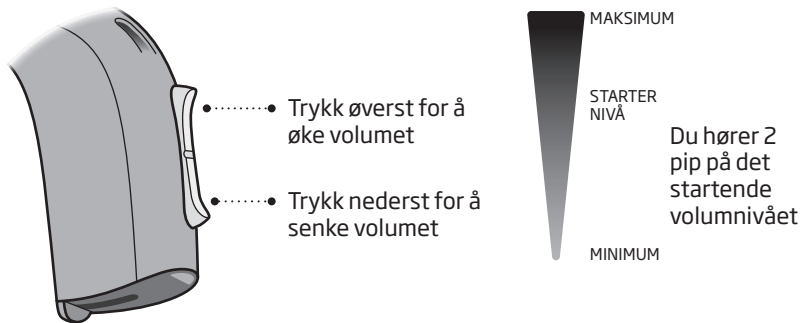


Fylles ut av audiografen din

Endre volum	☐ VENSTRE	☐ HØYRE	☐ Kort trykk
-------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------


Rask tilbakestilling

Dersom du ønsker å gå tilbake til standardinnstillingene som ble programmert av audiografen din, er det bare å åpne og lukke batteriskuffen.

Åpne

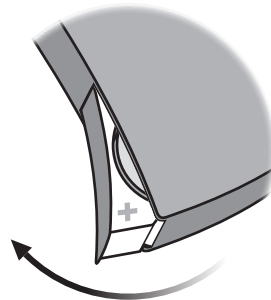

Lukk

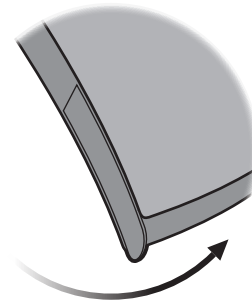

☐ Barnesikret batteriskuff


For å holde batteriene utenfor rekkevidde av små barn og personer med lærevansker, anbefales det på det sterkeste å bruke en barnesikker batteriskuff. Bruk en liten skrutrekker til å låse og åpne skuffen.

VIKTIG

Unngå for stor kraft når du åpner batteriskuffen når den er i låst posisjon. Ikke tving batteriskuffen lenger opp enn til åpen posisjon. Kontroller at batteriet er satt inn riktig.


Ta kontakt med audiografen din hvis du mistenker at barnesikringen og låsefunksjonen er skadet.

Låse opp batteriskuffen

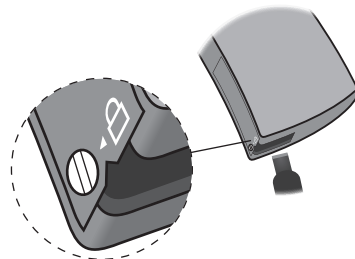

Bruk skrutrekkeren for å sette skruen i åpen posisjon (vertikal). Sett skrutrekkeren inn i åpningen på enden av høreapparatet og skyv til skuffen åpner seg.

Lukk batteriskuffen

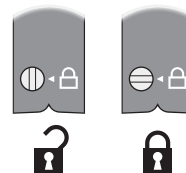

Sørg for at skuffen er helt lukket. Vri skruen til låst posisjon (horisontal).

Trådløst tilbehør

En rekke apparater kan tilkobles det trådløse høreapparatet ditt som en utvidelse av bruksområdet.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine er en produktserie som lar deg motta lydsignaler fra TV, telefoner, musikkspillere, datamaskiner eller ekstern mikrofon trådløst gjennom høreapparatet ditt.

☐ **Fjernkontroll**

Fjernkontrollen gir tilgang til å endre program eller justere volumet i høreapparatene.

☐ **FM**

Høreapparatet ditt kan tilkobles et FM-system. FM-systemet lar deg motta tale- eller lydsignaler uten bakgrunnsstøy direkte i høreapparatet fra en bestemt sender.

For nærmere opplysninger om trådløst tilbehør, spør audiografen din eller besøk **www.oticon.no**

Andre alternativer (valgfritt)



☐ **Telespole**

hjelper deg til å høre bedre når du har en telefon med innebygd slynge eller når du er i bygninger med teleslyngesystemer, slik som teater, kirke eller undervisningsrom. Dette symbolet eller et lignende tegn vises der en teleslynge er installert.



☐ **Autophone**

er et program som aktiveres automatisk når telefonen din har en innebygget teleslynge (se ovenfor). En magnet må festes på telefonen din ved siden av lydutgangen.

☐ **Direct Audio Input (DAI)**

lar høreapparatet ditt motta signaler direkte fra eksterne kilder, slik som TV, radio, musikkavspillere, osv. DAI-adapteren installeres på apparatet ditt og kobles til en ekstern lydkilde via en kabel.

For nærmere opplysninger om disse alternativene, spør audiografen din eller besøk **www.oticon.no**

VIKTIG

Når DAI er koblet til en lydkilde som er plugget i et vegguttag må lydkilden samsvare med IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhetsstandard.

Advarsler

Du bør for personlig sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk bli fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker høreapparatet.

Merk at et høreapparat ikke vil gi tilbake normal hørsel, og det vil ikke forhindre eller forbedre hørselsproblemer som er forårsaket av organiske forhold. Merk også at i de fleste tilfeller, vil ujevn bruk av et høreapparat gjøre at brukeren ikke vil ha full nytte av det.

Ta kontakt med din audiograf dersom du opplever at høreapparatet oppfører seg uvant eller annerledes.

Bruk av høreapparat

- Høreapparater skal alltid brukes i henhold til bruksanvisningen og alltid justeres av din audiograf. Feilaktig bruk kan resultere i plutselig og permanent hørselstap.
- La aldri andre bruke høreapparatene dine fordi feil bruk kan forårsake permanent hørselsskade for dem.

Fare for kvelning og svelging av batterier

- Høreapparatet, dets deler og batterier er ikke leketøy og må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade seg selv.

- Batterier har av og til blitt tatt for å være tabletter. Kontroller derfor medisinen din nøye før du svelger noen piller.
- De fleste høreapparater kan leveres med barnesikret batteriluke ved forespørsel. Dette anbefales på det sterkeste for babyer, små barn og mennesker med lærevansker.
- Barn under 36 måneder må alltid bruke en barnesikret batteriluke. Hør med din audiograf om dette.

Hvis et batteri eller høreapparat svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.

Batteribruk

- Bruk alltid batteri som er anbefalt av audiografen. Batterier med dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skade på høreapparatet.
- Prøv aldri å lade opp eller brenne batteriene. Det er risiko for at batteriene kan eksplodere.

Advarsler

Feilfunksjon

- Vær oppmerksom på muligheten for at høreapparatet ditt kan slutte å fungere uten forvarsel. Tenk på dette når du er avhengig av varsellyder (f.eks. når du er i trafikken). Høreapparatet kan slutte å virke, f.eks. hvis batteriet er flatt eller at fukt og ørevoks tetter igjen slangene.

Aktive implantater

- Det må utvises forsiktighet med aktive implantater. Et generelt råd er å følge retningslinjene som anbefales av produsentene til implanterbare defibrillatorer og pacemakere når det gjelder bruk sammen med mobiltelefoner og magneter.
- Autophone-magneten og multiverktøyet (som har en innebygd magnet) bør være mer enn 30 cm unna implantatet, f.eks. ikke ha det i en brystlomme.

- Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, ta kontakt med produsenten av den implanterbare enheten for å få informasjon om risikoen for forstyrrelser.

Røntgen, CT, MR, PET-skanning og elektroterapi

- Ta av høreapparatet under f.eks. røntgen, CT / MR / PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da høreapparatet kan ta skade om den eksponeres for sterke felt.

Varme og kjemikalier

- Høreapparatet må aldri utsettes for sterk varme f. eks etterlates inne i en bil som står parkert i solen.
- Høreapparatet må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i andre ovner.
- Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade høreapparatet. Fjern alltid høreapparatet før du bruker slike produkter, og la slike produkter tørke før du bruker høreapparatet igjen.

Advarsler

Power-apparat

- Forsiktighet bør utøves ved valg, tilpassing og bruk av høreapparater som har et maksimalt lydtrykk som overstiger 132 dB SPL (IEC 711) fordi det kan medføre risiko for skade på den resterende hørsel til brukeren av høreapparatet.

Se baksiden av dette heftet for å få informasjon om apparatet ditt er et power-apparat.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater, ørepropper og domer kan forårsake en økt dannelse av ørevoks.
- De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i høreapparater kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.

Oppsøk lege hvis disse tilstandene oppstår.

Interferens

- Høreapparatet har blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Likevel, kan interferens oppstå mellom høreapparatet og andre enheter (f. eks noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer og andre enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom høreapparatet og enheten som skaper interferens.

Tilkobling til eksternt utstyr

- Sikkerheten av høreapparatet når du er koblet til eksternt utstyr (via AUX inngang kabel, via USB-kabel eller direkte), bestemmes av eksternt utstyr. Når du er koblet til eksternt utstyr koblet til et strømuttak, må dette utstyret i samsvar med IEC-60065, IEC-60950 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Feilsøkingssguide

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ingen lyd	Utgått batteri	Skift batteriet
	Tett slange eller ørepropper (propp, dome, GripTip, mikropropp eller LiteTip)	Rengjør øreproppen
		Rengjør Corda miniFit (tynnslange), skift ut domen eller GripTip, eller skift ut voksfilteret
Periodevis eller redusert lyd	Tett lydutgang	Rengjør øreproppen
	Fuktighet	Rengjør Corda miniFit (tynnslange), skift ut domen eller GripTip, eller skift ut voksfilteret
		Tørk over batteriet med en tørr klut og/eller tørk slangen
		Skifte batteriet
		Kontakt din audiograf eller ØNH-lege for hjelp
Hyling/piping	Proppen til høreapparatet er satt inn feil	Plasser proppen på nytt (ørepropp, dome, GripTip, mikropropp eller LiteTip)
	Ørevoks i øregangen	Få øregangen undersøkt av legen din

Hvis ingen av forslagene over løser problemet, spør audiografen om hjelp.

Vannavstøtende

Høreapparatet er vannavstøtende, ikke vanntett. Hvis høreapparatet ditt kommer i kontakt med vann og slutter å virke, følg disse retningslinjene:

1. Tørk forsiktig av evt. vann
2. Åpne batteriskuffen, fjern batteriet og tørk forsiktig bort evt. vann i batteriskuffen.
3. La høreapparatet tørke med batteriluken åpen i ca. 30 minutter
4. Sett inn et nytt batteri

VIKTIG

Ikke bruk høreapparatet når du dusjer eller deltar i aktiviteter med vann.
Ikke senk høreapparatet ned i vann eller andre væsker.

Bruksforhold

Driftsforhold	Temperatur: +1°C til +40 °C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagrings- og transportforhold	Temperatur og fuktighet bør ikke overskride følgende grenser i lengre perioder under transport og lagring: Temperatur: -25°C til +60°C Relativ fuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Garantisertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Audiografens adresse: _____

Audiografens telefon: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Modell venstre: _____ Serienr.: _____

Modell høyre: _____ Serienr.: _____

Internasjonal garanti

Høreapparatet ditt dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve høreapparatet, men ikke tilbehør slik som batterier, slanger, voksfilter, osv. Garantien dekker IKKE feil som oppstår grunnet misbruk, feilbehandling, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av uautorisert personell, fysiske endringer i øret ditt, at det blir utsatt for etsende væske, skade forårsaket av fremmedlegeme i apparatet eller feiljusteringer, da dette kan tilsidesette garantien. Denne garantien påvirker ikke nasjonale lovgivninger angående forbrukerkjøp.

Din lokale Oticon-forhandler kan derfor ha innført en garanti som går utover den internasjonale. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta høreapparatet ditt med til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og innstillinger på stedet.

Teknisk informasjon

Høreapparatet inneholder en radiosender som benytter en magnetisk induksjonsteknologi med kort rekkevidde som virker på 3,84 MHz. Den magnetiske feltstyrken til senderen er $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ @ 10 m.

Høreapparatet er i samsvar med internasjonale standarder for radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

På grunn av begrenset størrelse på apparatet, er alle relevante merkinger å finne i dette dokumentet.

USA og Canada

Høreapparatet inneholder to radiomoduler med følgende ID sertifiseringsnummer:

FCC ID: U28FU2BTERIT
IC: 1350B-FU2BTERIT

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
2. Denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Mer informasjon: www.oticon.no

Dette klasse B digitale apparatet oppfyller kanadisk ICES-003.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av

og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med produsenten eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp.

Herved erklærer Oticon at dette produktet er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 2014/53/EU.

CE 0543



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos:



Produsert av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global



IP58

Power-instrument ☐ Ja ☐ Nei				
Oversikt over høreapparatinnstillingene				
Venstre		Høyre		
☐ Ja	☐ Nei	Volumkontroll	☐ Ja	☐ Nei
☐ Ja	☐ Nei	Programendring	☐ Ja	☐ Nei
☐ Ja	☐ Nei	Mute	☐ Ja	☐ Nei
Volumkontrollindikator				
☐ På	☐ Av	Piper ved min/maks volum	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klikkelyd ved volumendring	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pipelyd ved ønsket volum	☐ På	☐ Av
Batteriindikatorer				
☐ På	☐ Av	Advarsel ved lavt batteri	☐ På	☐ Av

151117NO / 2017.08.11

151117NO / 2017.08.11



oticon
PEOPLE FIRST

151117NO/201708.11