

# Bruksanvisning

## Fjernkontroll 2.0



## Innledning til dette heftet

Dette heftet gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder den nye fjernkontrollen din. Les nøye gjennom heftet, inkludert delen «**Advarsler**». Dette hjelper deg med å få mest mulig ut av den nye fjernkontrollen din.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av fjernkontrollen, kontakt din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Advarsel | Mer informasjon |

## Tiltenkt bruk

<b>Tiltenkt bruk</b>	Fjernkontroll 2.0 lar brukere endre program eller justere volumet i Oticon trådløst høreapparat.
<b>Indikasjoner for bruk</b>	Ingen indikasjoner for bruk.
<b>Tiltenkt bruker</b>	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
<b>Brukermiljø</b>	Innendørs/utendørs.
<b>Kontraindikasjoner</b>	Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. Ønsker du mer informasjon, les delen <b>Advarsler</b> .
<b>Kliniske fordeler</b>	Se høreapparatets kliniske fordeler.

# Innholdsfortegnelse

## Om

Innhold i pakken	6
Produktoversikt	7

## Oppstart

Batterier	8
Sett inn batterier	9

## Håndtering

Bruksområde	10
Bekreftelser	11
Bytte program	12
Justere volum	13
Mute*	14
Stroppehull	15
Vedlikehold av fjernkontrollen	16

## Advarsler

Advarsler	17
-----------	----


## Mer informasjon

Bruksforhold	20
Teknisk informasjon	22


## Innhold i pakken

Pakken inneholder følgende elementer:

Fjernkontroll 2.0

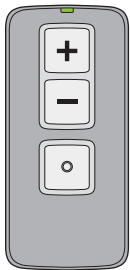



Batterier

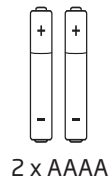

Dette heftet



## Produktoversikt

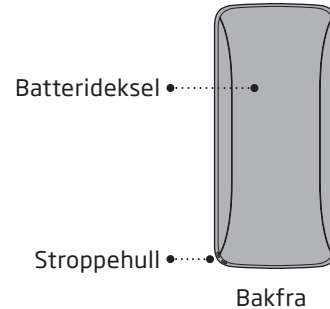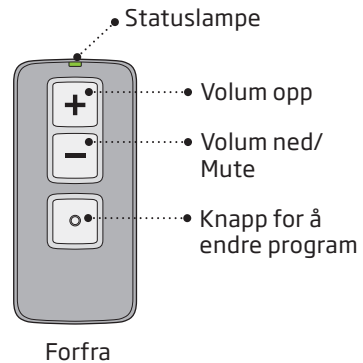

## Batterier


For å aktivere fjernkontrollen må du sette inn to AAAA-batterier i batterirommet.

Batterienes levetid avhenger av bruksforholdene. Vanlig bruk krever at batteriene skiftes omtrent en gang årlig.

Batteridekselet skal ikke plasseres med kraft. Dersom du må bruke kraft for å lukke dekselet, sjekk om det er satt på riktig, og flytt på det slik at det klikker enkelt tilbake på plass.

## Sett inn batterier


### 1 Fjern

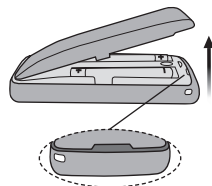

Åpne batteridekselet forsiktig.

Fjern brukte batterier.


### 2 Sett inn

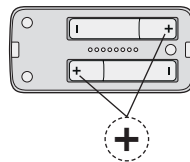

Sett inn de nye batteriene inn i batteriskuffen.

Pass på at «+»-tegnet på batteriet samsvarer med «+»-tegnet i batterirommet.

### 3 Lukk

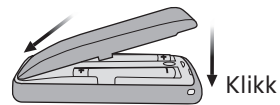

Sett inn batteridekselet på toppen.

Press så batteridekselet forsiktig ned til det klikker på plass.

## Bruksområde

Med fjernkontrollen kan du styre høreapparatene fra en avstand på opptil 1 meter.

Det er ikke nødvendig å ha fri bane mellom fjernkontrollen og høreapparatene.

Hvis du bruker høreapparat på begge ørene, justerer fjernkontrollen begge samtidig.




## Bekreftelser

### Synlige indikasjoner

Statuslampen indikerer bruken av fjernkontrollen. Den blinker etter hvert knappetrykk.

### Lavt batterinivå

Statuslampen blinker langsomt (én gang hvert 2. sekund) når batteriene må skiftes ut. Fjernkontrollen vil ikke fungere før batteriene er skiftet ut. Om det skjer skift batteriene så raskt som mulig.

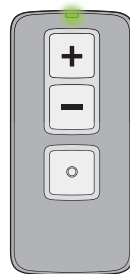

## Bytte program


Du kan bruke Fjernkontroll for å endre programmet, dersom høreapparatet ditt har mer enn et program. Kort trykk på “•” knappen på Fjernkontrollen for å gå igjennom høreapparat programmene. For hvert trykk går høreapparatet videre til neste program.



For å gå tilbake til program 1 og originale voluminnstillinger, trykk og hold inne “•” knappen i 3-4 sekunder.

## Justere volum

Med fjernkontrollen kan du justere volumet på høreapparatet med volumkontrollknappene.

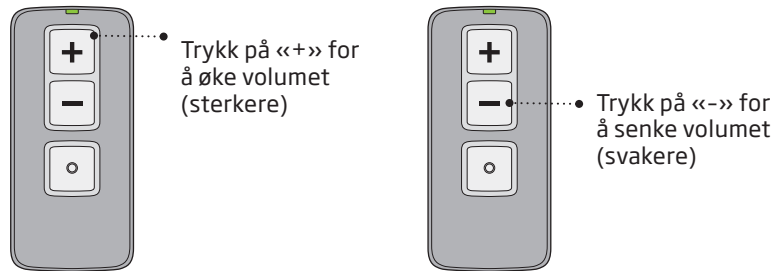


### VIKTIG

Se bruksanvisningen til høreapparatet hvis du ønsker detaljer om ditt spesifikke høreapparats funksjoner.

## Mute\*

Bruk mute-funksjonen hvis du vil koble ut lyden i høreapparatet mens du har det på.

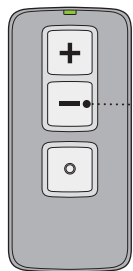

- Trykk og hold inne volumknappen i 3-4 sekunder.


Trykk kort på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen for å skru på lyden i høreapparatene igjen.

\* Mute-funksjonen er kun tilgjengelig i kombinasjon med visse typer trådløse høreapparater. For mer informasjon, ta kontakt med din audiograf.  
Merk: Høreapparatets mute-funksjon skrur ikke av høreapparatet. Åpne høreapparatets batteriluke for å skru det av.

## Stroppehull

Fjernkontrollen har et stroppehull i nedre høyre hjørne.

Alle passende håndstropper kan brukes.

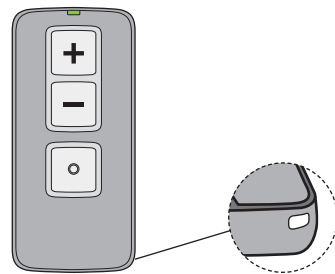



## Vedlikehold av fjernkontrollen

Hold fjernkontrollen over en myk overflate når du skrifter batteri eller rengjør den, for å unngå å skade den hvis du mister den.

### VIKTIG

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre fjernkontrollen med. Selve høreapparatet må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker.

## Advarsler

For din personlige sikkerhet og for å sikre korrekt bruk bør du gjøre deg helt kjent med de generelle advarslene nedenfor før du bruker fjernkontrollen.

Kontakt hørselsekspert hvis du opplever at fjernkontrollen oppfører seg uvant, eller alvorlige hendelser med fjernkontrollen under bruk eller på grunn av bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med å håndtere problemene og om relevant med å rapportere til produsenten og/eller nasjonale myndigheter.

### Batteribruk

Bruk alltid batteri som er anbefalt av audiografen. Batterier med dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skade på høreapparatet.

Prøv aldri å lade opp eller brenne batteriene. Det er risiko for at batteriene kan eksplodere.

### Bruk av stropper

Hvis du bruker en håndstropp, sørg for at den er laget for og passer til slik bruk. Bruk aldri en nakkestropp, ettersom dette kan føre til kvelning.

### Fare for kvelning og risiko for å svelge batterier og andre smådeler

Fjernkontrollen, fjernkontrollens deler og fjernkontrollens batterier er ikke leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn og andre som kan tenkes å komme til å svelge disse delene eller på annen måte skade seg selv.

*Hvis et batteri, et høreapparat eller en liten del svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig.*

### Krysskontroll

Fjernkontrollen må oppbevares utilgjengelig for barn og andre som kan tenkes å ta kontroll over funksjonaliteten, for å sikre din personlige sikkerhet og unngå feil bruk.

## Advarsler

### Mulige bivirkninger

De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i fjernkontrollen, kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.

Oppsøk lege hvis slike tilstander oppstår.

### Aktive implantater

Fjernkontrollen er grundig testet og karakterisert med hensyn til virkninger på menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio - SAR), industert elektromagnetisk effekt og spenninger inn i menneskers kropp. Eksponeringsverdiene er godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, industert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp definert i standardene for menneskelig helse og sameksistens med aktive medisinske implantater, som pacemakere og hjertestartere.

### Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi og operasjon

Ta av deg fjernkontrollen under f.eks. røntgen, CT-/MR-/PET-skanning, elektroterapi eller operasjon siden den kan bli skadet om den blir eksponert for sterke elektromagnetiske felt.

### Bruk i trafikken

Du kan bli distraherert når du bruker fjernkontrollen. Vær oppmerksom på omgivelsene rundt deg når du bruker fjernkontrollen. Vennligst referer til nasjonale lover om bruk av kommunikasjonsenheter i trafikken.

### Varme og kjemikalier

Fjernkontrollen må aldri utsettes for sterk varme, f.eks. ved å etterlates inni en bil som står parkert i solen.

Fjernkontrollen må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller andre ovner.

Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade fjernkontrollen. Ta alltid av deg fjernkontrollen før du bruker slike produkter, og la produktet tørke før du setter fjernkontrollen tilbake på plass.

### Interferens

Fjernkontrollen er grundig testet med hensyn til interferens i henhold til de strengeste internasjonale standarder.

Likevel kan interferens mellom fjernkontrollen og andre enheter (f.eks. enkelte mobiltelefoner, amatørradioenheter, butikkalarmsystemer og andre trådløse enheter) forekomme. Hvis interferens oppstår, øk avstanden mellom fjernkontrollen og enheten som forårsaker interferensen.

## Bruksforhold

<b>Driftsforhold</b>	Temperatur: +10 °C til +45°C Fuktighet: < 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
<b>Transport og oppbevaringsforhold</b>	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring.  Temperatur: -20°C til +70°C Fuktighet: < 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

## Internasjonal garanti

Enheten din dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke tilbehør som f.eks. batterier, kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker IKKE problemer som oppstår som følge av feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av en uautorisert part, at enheten er blitt utsatt for etsende væske, skade som følge av at fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til denne garantien vil produsenten velge etter eget skjønn å reparere enheten eller erstatte den med en tilsvarende modell. Denne garantien

påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan derfor ha innført en garanti som går utover denne begrensede garantien. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

### Hvis du trenger hjelp

Ta med enheten din til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet. Audiografen din kan hjelpe deg med å få garantiservice fra produsenten. Audiografen din kan kreve et gebyr for deres tjenester.

## Teknisk informasjon

Modellnavn	RC-2A
------------	-------

Fjernkontrollen inneholder en radiotransceiver som benytter en magnetisk induksjonsteknologi med kort rekkevidde som virker på 3,84 MHz. Styrken på senderens magnetiske felt er veldig svakt, og er alltid under 15 nW (typisk under -15 dB $\mu$ A/m på 10-meters avstand).

Fjernkontrollen samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

På grunn av begrenset plass på fjernkontrollen, er relevante godkjenningstempler å finne i dette dokumentet.

For bruk på kroppen, oppfyller denne enheten FCC og IC RF eksponeringsgrenser og har blitt testet i kontakt med menneskekroppen. Enheten må ikke være samlokalisert eller bruk sammen med noen annen antenne eller sender.

Ytterligere informasjon finnes i tekniske datablad på [www.oticon.global](http://www.oticon.global).

### USA og Canada

Denne enheten er sertifisert under:

FCC ID: ZCAHREMCTRO1  
IC: 11936A-REMCTRO1

### Merk

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs standarder.

### Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
2. Denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

### Merk

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Herved erklærer produsenten at denne Fjernkontrollen 2.0 (RC-2A) er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EF.

Dette medisinske utstyret samsvarer med forskriften om medisinsk utstyr (EU) 2017/745.



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra produsenten.



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark



Complies with  
IMDA Standards  
DA103820

## Beskrivelse av symbolene benyttet i dette heftet



### Advarsler

Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.



### Produsent

Enheden er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv 2017/745 og 2017/746.



### CE-merke

Denne enheten samsvarer med alle påkrevde EU-forskrifter og direktiver.



### Elektronisk avfall (WEEE)

Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).



### Merke for regulatorisk overholdelse (RCM)

Enheden samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.



### Singapore IMDA-merke

Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre autoriserte radiokommunikasjonsnettverk.

## Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene

	<b>Holdes tørr</b> Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.
	<b>Advarselssymbol</b> Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.
	<b>Katalognummer</b> Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	<b>Serienummer</b> Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
	<b>Medisinsk utstyr</b> Denne enheten er et medisinsk utstyr.
	<b>Batteri</b> Angir type og batteriinnsettingsmodus.
	<b>Brasil ANATEL-etikett</b> Indikerer at enheten er sertifisert og homologert i Brasil.

219951NO / 2020.03.30 / v1

219951NO / 2020.03.30 / v1



**oticon**  
life-changing **technology**