


Ustawianie i podłączanie



Bądź w kontakcie

Oticon ConnectLine ułatwia kontakty z ludźmi oraz dostęp do informacji i rozrywki

Ten przewodnik objaśnia, jak używać ConnectLine i przedstawia korzyści, jakie ConnectLine oferuje na co dzień. Przewodnik prezentuje wszystkie rozwiązania ConnectLine.

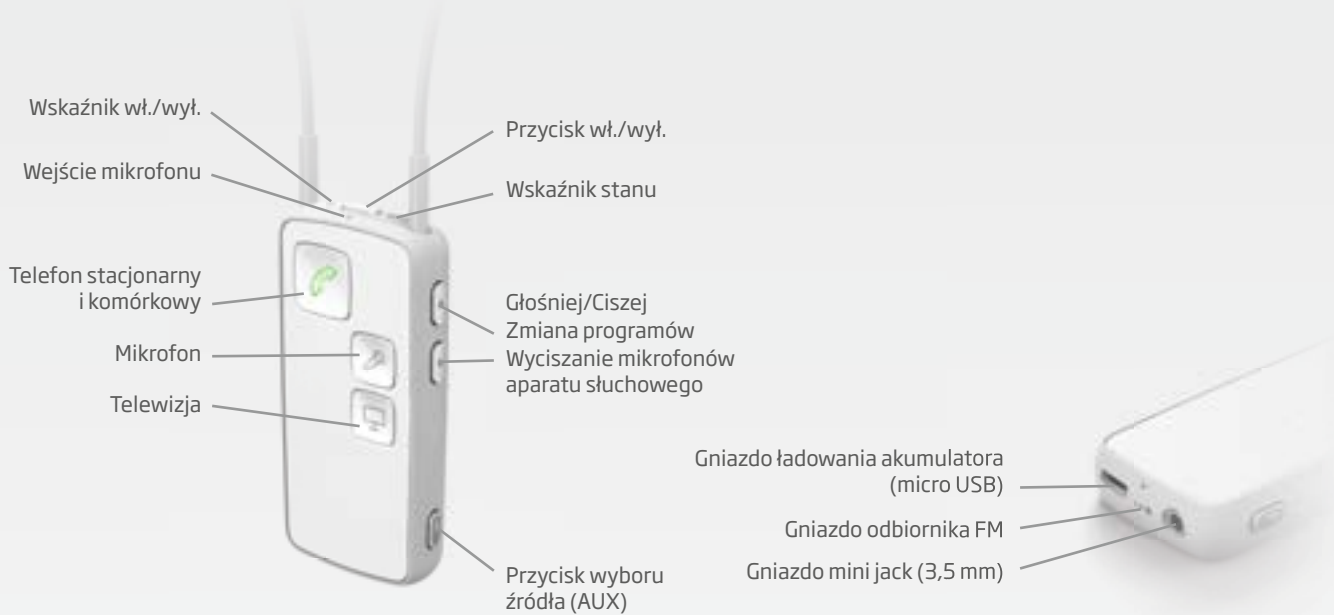

		 Nowość							
Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Aplikacja	Telewizja	Muzyka	Komputer	Mikrofon	Pętla indukcyjna	System FM	Zdalne sterowanie
► 4	► 6	► 10	► 14	► 16	► 18	► 20	► 22	► 24	► 26



ConnectLine Telefon przełamuje bariery w codziennej komunikacji



Adapter ConnectLine Telefon 2.0 współpracuje z telefonem stacjonarnym, zmieniając aparaty słuchowe w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, dzięki czemu użytkownik nie musi podchodzić do telefonu, aby odebrać połączenie.

Zasada działania

Adapter telefoniczny instaluje się równolegle do istniejącego telefonu stacjonarnego (istniejących telefonów stacjonarnych). Adapter pracuje jako interfejs pomiędzy telefonem stacjonarnym a Streamerem Pro. Dzięki bezprzewodowemu zasięgowi do 30 metrów użytkownik może usłyszeć i odebrać połączenie z niemalże każdego pomieszczenia w domu.

Jako część systemu ConnectLine adapter telefoniczny działa bezprzewodowo i równocześnie z innymi rozwiązaniami ConnectLine, np. do telefonów komórkowych, telewizora czy z Mikrofonem ConnectLine. Dlatego, jeśli telefon zadzwoni podczas oglądania telewizji, wystarczy nacisnąć przycisk telefonu na Streamerze, a dźwięk telewizora zostanie automatycznie wyciszony, aby użytkownik mógł odebrać połączenie.*

* Wymagany adapter ConnectLine TV.

Telefon stacjonarny – adapter Telefon 2.0



Instalacja



Kabel telefoniczny (dołączony do zestawu).



Odłącz kabel linii telefonicznej od telefonu lub stacji bazowej telefonu bezprzewodowego.



Podłącz kabel do gniazda „IN” adaptera telefonicznego.



Podłącz kabel telefoniczny (w zestawie) do gniazda „OUT” adaptera.



Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do telefonu (lub stacji bazowej).

Parowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z adapterem telefonicznym ConnectLine oba urządzenia muszą zostać sparowane.



Upewnij się, że adapter telefoniczny jest włączony (wskaźnik zasilania świeci stale na zielono).



Wprowadź Streamer w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przez 5-6 sekund przycisk wł./wył. w górnej części Streamera, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.



Umieść Streamer na adapterze telefonicznym – parowanie trwa około 20-60 sekund. Parowanie jest zakończone, gdy wskaźnik zasilania w adapterze telefonicznym oraz wskaźnik wł./wył. na Streamerze zaczną świecić stale na niebiesko.

► Uwaga:

Parowanie przeprowadza się tylko raz. Zazwyczaj nie trzeba go powtarzać.

Wykonywanie połączenia



Naciśnij przycisk telefonu znajdujący się z przodu Streamera, aż podświetli się na zielono. W aparatach słuchowych usłyszysz dźwięk informujący o zmianie programu, a następnie sygnał wybierania.



Wykonaj połączenie ze swojego telefonu tak jak zwykle (gdy połączenie jest rozpoczęte, można odłożyć słuchawkę telefonu – połączenie będzie realizowane przez Streamer).



Podczas rozmowy wskaźnik stanu oraz wskaźnik wł./wył. w górnej części Streamera świecą stale na zielono. Aby zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć krótko przycisk telefonu na Streamerze.



Gdy telefon dzwoni, przycisk telefonu oraz wskaźniki w górnej części Streamera migają na zielono. W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał połączenia przychodzącego.



Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk telefonu na Streamerze. Usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie głos rozmówcy.

Podczas rozmowy wskaźnik stanu oraz wskaźnik wł./wył. w górnej części Streamera świecą stale na zielono.

Większy komfort korzystania z telefonów komórkowych z ConnectLine

Zasada działania

Użytkownik może odbierać połączenia przychodzące, naciskając przycisk telefonu na Streamerze Pro; głos rozmówcy jest przesyłany do aparatów słuchowych.

Parowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z telefonem komórkowym oba urządzenia muszą zostać sparowane. Zazwyczaj parowanie przeprowadza się raz.

Telefon komórkowy – połączenie bezprzewodowe



Wprowadź Streamer w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przez pięć sekund przycisk wł./wyl. w górnej części Streamera, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

Wprowadź telefon komórkowy w tryb parowania (zwykle dostępny w menu ustawień telefonu). Zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego, np. z rozdziałem „Parowanie”. Zazwyczaj telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN. Kod PIN Streamera to 0 0 0 0 (cztery zera).

Zwykle po sparowaniu w telefonie komórkowym pojawi się ikonka słuchawek; w tym samym czasie wskaźnik parowania na Streamerze będzie świecił stale na niebiesko. Często mała ikonka słuchawek w telefonie komórkowym będzie informować o połączeniu ze Streamerem.

Wykonywanie połączenia





Żałóż Streamer na szyję i sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty np. ubraniem. Upewnij się, że możesz mówić do mikrofonu Streamera.

Aby zadzwonić, wystarczy korzystać z telefonu komórkowego. Nie trzeba operować Streamerem. Wprowadź numer - połączenie jest automatycznie przełączane na Streamer. Usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie rozmówcę.

Podczas rozmowy wskaźnik stanu oraz wskaźnik wł./wyl. w górnej części Streamera świecą na zielono. Aby zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć krótko przycisk kończenia rozmowy w telefonie komórkowym lub przycisk telefonu na Streamerze.

Odbieranie połączenia

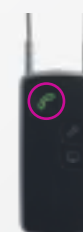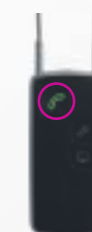

Żałóż Streamer na szyję i sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty np. ubraniem. Upewnij się, że możesz mówić do mikrofonu Streamera.

Gdy zadzwoni telefon komórkowy, w aparatach słuchowych usłyszysz sygnał, a przycisk telefonu oraz wskaźnik na Streamerze będą migać na zielono.

Aby odebrać telefon komórkowy, należy nacisnąć krótko przycisk telefonu na Streamerze. Aby zakończyć połączenie, wystarczy ponownie nacisnąć krótko przycisk telefonu na Streamerze. Nie trzeba używać telefonu komórkowego.

► Uwaga:

Aby odrzucić połączenie, należy krótko nacisnąć przycisk zmniejszania głośności na Streamerze.



Telefon komórkowy – połączenie przewodowe



Instalacja

► **Uwaga:**
Nie wszystkie telefony wykorzystują taką samą konfigurację złączy pin i poziomów sygnału. Streamer Pro został sprawdzony pod kątem współpracy z telefonami o specyfikacji podobnej do iPhone'a firmy Apple.



Kabel stereo mini jack (3,5 mm) – dostępny ze Streamerem Pro.



Włóż kabel mini jack do gniazda mini jack telefonu komórkowego.



Włóż drugi koniec do gniazda mini jack Streamera. Po podłączeniu kabla przesyłanie rozpocznie się automatycznie.

Wykonywanie połączenia



Założ Streamer na szyję i sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty np. ubraniem. Upewnij się, że możesz mówić do mikrofonu Streamera.



Upewnij się, że połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, naciśnij krótko przycisk wyboru źródła (AUX), aby połączyć na nowo.




W telefonie komórkowym wybierz numer. Połączenie jest automatycznie przełączane do aparatów słuchowych za pośrednictwem Streamera. Aby zakończyć połączenie, w telefonie komórkowym naciśnij przycisk kończenia rozmowy.

Odbieranie połączenia

► **Uwaga:**
Podczas korzystania z przewodowego połączenia ze Streamerem Pro przycisk telefonu na Streamerze nie jest podświetlony. Streamer i aparaty słuchowe łączą się tak jak podstawowy przewodowy zestaw słuchawkowy. Aby odrzucić połączenie, użyj telefonu komórkowego.



Założ Streamer na szyję i sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty np. ubraniem. Upewnij się, że możesz mówić do mikrofonu Streamera.

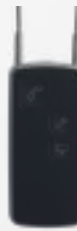

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk odbierania w telefonie komórkowym. Upewnij się, że zakończyć połączenie, naciśnij przycisk kończenia rozmowy w telefonie komórkowym.



Aplikacja ConnectLine



Więcej informacji dotyczących instalowania i używania aplikacji ConnectLine można znaleźć na stronie oticon.com/app.

Na stronie zamieszczone są interaktywne przewodniki w formie iPaper:



przewodnik do
aplikacji ConnectLine na
urządzenia
iPhone®, iPad®
oraz iPod touch®



przewodnik do
aplikacji ConnectLine na
smartfony i tablety
z systemem Android™



Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Aplikacja ConnectLine dla urządzeń iPhone, iPad i iPod touch działa na iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPadzie Air, iPadzie mini z wyświetlaczem Retina, iPadzie mini, iPadzie (3. i 4. generacji), iPadzie 2 i iPodzie touch (5. generacji) i wymaga Streamera Pro 1.2 App lub nowszej wersji.
Podczas instalacji aplikacji ConnectLine na iPadzie, należy szukać aplikacji dla iPhone'a w App Store.
Aplikacja ConnectLine dla smartfonów i tabletów z systemem Android wymaga wersji Streamera Pro z firmware 1.3 lub nowszym.
Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności można znaleźć na stronie www.oticon.com/app.



Optymalne wrażenia przy oglądaniu telewizji z adapterem ConnectLine TV

Wysokiej jakości dźwięk z telewizora jest przesyłany bezprzewodowo do aparatów słuchowych przez Streamer Pro, co oznacza, że poziom głośności telewizora może pozostać na poziomie odpowiadającym innym domownikom.

Zasada działania

Adapter TV jest podłączony do analogowego wyjścia audio telewizora. Adapter ma zasięg około 10 metrów (w zależności od mebli, położenia). Aby słuchać telewizji, wystarczy nacisnąć przycisk telewizora na Streamerze.

Jako część systemu ConnectLine adapter TV jest połączony przez funkcję AutoConnect. Adapter działa bezprzewodowo i równocześnie z innymi rozwiązaniami, np. do telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego, odtwarzacza muzyki.



Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Telewizja

Instalacja

Adapter telewizyjny podłączony do zasilania i TOSLINK



Adapter telewizyjny z zasilaniem i wtyczką mini jack



1. Kabel TOSLINK
Znajdź gniazdo wyjściowe TOSLINK w telewizorze.



2. Kabel RCA
Znajdź gniazda wyjścia audio (zwykle znajdują się z tyłu telewizora). Podłącz podwójny wtyk RCA (czerwony i biały) do gniazda z tyłu odbiornika (zwykle oznaczone jako Audio Out).



3. Gniazdo słuchawkowe (mini jack)



Podłącz wtyk RCA do gniazda słuchawkowego.



Znajdź złącze słuchawek w telewizorze i podłącz.

4. Kabel SCART



Podłącz RCA do SCART.



Upewnij się, że dostępne jest wyjście audio ze SCART. Znajdź gniazdo SCART w telewizorze i podłącz.

Uwaga:
Sygnał wyjściowy w telewizorze może zależeć od ustawień dźwięku. Informacje na ten temat można znaleźć w menu ustawień dźwięku telewizora.

Parowanie



Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z adapterem telewizyjnym ConnectLine oba urządzenia muszą zostać sparowane.

Wprowadź Streamer w tryb parowania: naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. przez około pięć sekund, aż wskaźnik wł./wył. zacznie migać na niebiesko.

Adapter TV automatycznie wykryje, gdy Streamer jest w trybie parowania. Umieść Streamer blisko adaptera TV.

Parowanie jest zakończone, gdy wskaźnik w górnej części Streamera świeci stale na niebiesko, a wskaźnik stanu na pomarańczowo.

Korzystanie



Aby słyszeć dźwięk z telewizora, naciśnij przycisk TV na Streamerze; przycisk podświetli się na pomarańczowo.

W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał zmiany programu, a następnie dźwięk z telewizora.

Wskaźnik wł./wył. w górnej części Streamera świeci na zielono, a wskaźnik stanu na pomarańczowo.



Bezprzewodowe i przewodowe połączenia z wieloma odtwarzaczami muzyki i innymi źródłami audio przez Streamer Pro

Muzyka i audio są przesyłane wprost do aparatów słuchowych.

Zasada działania

Za pośrednictwem dołączonego kabla mini jack dźwięk z większości źródeł audio może być przesłany ze Streamera do aparatów słuchowych. Przy połączeniach bezprzewodowych Streamer Pro łączy się bezpośrednio z większością urządzeń audio wyposażonych w Bluetooth.

Parowanie – bezprzewodowo

Gdy Streamer Pro jest po raz pierwszy używany z urządzeniem muzycznym, oba urządzenia muszą być sparowane. Umieść urządzenia obok siebie.

► Uwaga:

Jeśli muzyka jest odtwarzana z telefonu komórkowego już sparowanego ze Streamerem, nie trzeba powtarzać parowania, aby odtwarzać muzykę.

Muzyka – połączenie bezprzewodowe i przewodowe



Wprowadź Streamer Pro w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk wł./wyl. przez pięć sekund, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

Wprowadź odtwarzacz MP3 w tryb parowania. Tę funkcję można zwykle znaleźć w menu ustawień odtwarzacza. MP3 może wymagać podania kodu PIN. Kod PIN Streamera to 0 0 0 0 (cztery zera).

Korzystanie – bezprzewodowo



Upewnij się, że urządzenie muzyczne jest w trybie Bluetooth. Włącz muzykę.

Naciśnij przycisk wyboru źródła (AUX), aby rozpocząć (rozpocząć ponownie lub wstrzymać) odtwarzanie muzyki.

W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie muzykę. Wskaźnik stanu w górnej części Streamera świeci na pomarańczowo, a wskaźnik wł./wyl. na zielono.

Instalacja – przewodowo



Włóż dołączony do zestawu kabel mini jack do gniazda w odtwarzaczu MP3.

Włóż drugi koniec do gniazda mini jack w dolnej części Streamera. Po podłączeniu kabla przesyłanie rozpocznie się automatycznie.*



Włącz MP3, aby rozpocząć odtwarzanie. Po podłączeniu kabla w aparatach słuchowych usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie dźwięk z odtwarzacza.

Wskaźnik stanu w górnej części Streamera świeci na pomarańczowo, a wskaźnik wł./wyl. na zielono.

Naciśnij przycisk wyboru źródła (AUX), aby przerwać lub rozpocząć ponownie odtwarzanie muzyki.

► Uwaga:

Jeżeli Streamer jest sparowany z telefonem komórkowym lub telefonem stacjonarnym (telefon stacjonarny wymaga adaptera telefonicznego ConnectLine), zostaniesz poinformowany o przychodzących połączeniach telefonicznych podczas słuchania muzyki i audio.

* Protetyk słuchu może wyłączyć tę funkcję, jeśli nie chcesz, aby przesyłanie następowało automatycznie po podłączeniu kabla.



Coraz więcej osób używa komputerów do rozmów wideo, wideokonferencji, oglądania filmów i in.

ConnectLine oferuje dwa proste sposoby bezpośredniego połączenia z komputerem, tak że dźwięk jest przesyłany bezpośrednio do aparatów słuchowych użytkownika, zapewniając wyraźną, łatwą rozmowę i słuchanie przez komputer.

Zasada działania

Po połączeniu Streamera Pro z komputerem – bezprzewodowo przez adapter USB lub za pośrednictwem kabla – dźwięk jest przesyłany do aparatów słuchowych.

Instalacja – przez adapter

Oticon zaleca bezprzewodowe rozwiązanie - łatwy w użyciu adapter USB firmy Sennheiser (BTD800), dostępny w Oticon lub w sprzedaży internetowej przez Sennheiser, albo innych dostawców.

Gdy Streamer jest po raz pierwszy używany z adapterem, oba urządzenia muszą być sparowane.



Wprowadź Streamer w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk wł./wył. w górnej części Streamera przez 5-6 sekund, aż zaczną migać niebieski wskaźnik.



Podłącz adapter USB do komputera.

Gdy adapter jest podłączony po raz pierwszy, zostanie automatycznie wprowadzony

w tryb parowania (migający wskaźnik czerwony/niebieski). Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi Sennheiser.

► Uwaga:

By w pełni wykorzystać możliwości zestawu, na komputerze należy zainstalować program „Headsetup” firmy Sennheiser.

Korzystanie – przez adapter


Połączenie z komputerem jest nawiązywane po podłączeniu adaptera do komputera.

► Uwaga:

Korzystając z komputera do rozmów wideo, upewnij się, że mówisz do otworu mikrofonu Streamera. Korzystając z komputera do odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk wyboru źródła (AUX) na Streamerze, aby połączyć (Instrukcja obsługi „Jak korzystać - przewodowo”).

► Uwaga:

Upewnij się, że BTD 800 jest wybraną kartą dźwiękową w aplikacji do rozmów wideo.

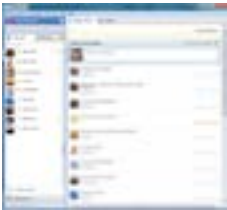

Uruchom aplikację do rozmowy wideo w komputerze. Po podłączeniu usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie dźwięk z komputera.



Jeśli chcesz się połączyć, naciśnij przycisk telefonu na Streamerze.



Wskaźnik stanu oraz wskaźnik wł./wył. w górnej części Streamera świecą na zielono.

Instalacja – przewodowo

Streamer Pro można połączyć z komputerem na dwa sposoby, w zależności od komputera.



Kabel stereo mini jack (3,5 mm) - dostępny ze Streamerem Pro.



Podłącz kabel stereo mini jack do komputera.



Drugi koniec kabla podłącz do wejścia/wyjścia mini jack w dolnej części Streamera.



Kabel rozdzielający - dostępny ze Streamerem Pro.



Podłącz kabel rozdzielający do wejścia mikrofonu (różowe)/wyjścia audio (zielone) w komputerze.



Drugi koniec podłącz do kabla stereo mini jack.



Podłącz kabel stereo mini jack do wejścia/wyjścia mini jack w dolnej części Streamera.


Korzystanie – przewodowo

Połączenie z komputerem jest nawiązywane natychmiast po podłączeniu kabla stereo mini jack do komputera i Streamera. Streamer automatycznie rozpoczyna przesyłanie.*

Połączenie jest potwierdzone sygnałem zmiany programu w aparatach słuchowych.

Używając komputera do rozmów wideo, upewnij się, że mówisz do otworu mikrofonu Streamera.

** Protetyk słuchu może wyłączyć tę funkcję, jeśli nie chcesz, aby przesyłanie następowało automatycznie po podłączeniu kabla.*

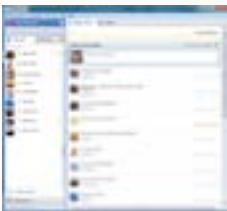

Uruchom aplikację na komputerze.



Wskaźnik stanu w górnej części Streamera świeci na pomarańczowo, a wskaźnik wł./wył. na zielono.



Jeśli chcesz się rozłączyć, naciśnij przycisk wyboru źródła (AUX) na Streamerze.



Dyskretny Mikrofon ConnectLine łączy się bezpośrednio ze Streamerem Pro

Mikrofon umożliwia prowadzenia prywatnej rozmowy z wybraną osobą w trudnych warunkach akustycznych.

Zasada działania

Mikrofon ConnectLine przesyła głos rozmówcy wprost do aparatów słuchowych użytkownika. Rozmówca nosi mały, dyskretny Mikrofon przypięty do ubrania. Aby zapewnić lepsze rozumienie mowy, otaczający hałas zostaje „odfiltrowany”. Mikrofon ma bezprzewodowy zasięg do 15 metrów.



Mikrofon

Parowanie

Przed pierwszym użyciem Streamera Pro z Mikrofonem ConnectLine oba urządzenia muszą zostać sparowane. Zazwyczaj parowanie przeprowadza się raz.



Umieść Streamer i Mikrofon blisko siebie.

Wprowadź Streamer w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk wł./wyt. w górnej części Streamera przez pięć sekund, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

Wprowadź Mikrofon w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk wł./wyt. przez sześć sekund, aż pomarańczowy wskaźnik zacznie szybko migać.

Odczekaj minutę, aż wskaźniki stanu Streamera i Mikrofonu będą świecić na pomarańczowo.

Korzystanie



► Uwaga:

Gdy Mikrofon jest włączony, Streamer będzie automatycznie odbierał sygnał. Nie trzeba naciskać przycisku mikrofonu na Streamerze. Naciśnij przycisk mikrofonu, jeśli chcesz rozłączyć i ponownie połączyć Mikrofon podczas rozmowy.

Włącz Mikrofon i upewnij się, że jest skierowany w stronę ust rozmówcy w odległości 10-20 cm.

Kiedy Mikrofon jest włączony, wskaźnik stanu świeci na pomarańczowo.

Gdy Streamer Pro odbiera dźwięk z Mikrofonu, przycisk mikrofonu na Streamerze jest podświetlony na pomarańczowo.



Łatwy dostęp do systemów pętli induktofonicznych w teatrach, salach wykładowych itp.

Zasada działania
Streamer Pro ma wbudowaną cewkę telefoniczną. Oznacza to, że użytkownik ma dostęp do systemów pętli induktofonicznych.

Pętla induktofoniczna



Ustawienie

Parowanie ani instalacja nie są wymagane przed użyciem.

► **Uwaga:**
Domyślnie odbiornik pętli induktofonicznej jest aktywowany przez długie naciśnięcie (2 sekundy) przycisku wyboru źródła (AUX). Protetyk słuchu może zmienić to ustawienie tak, by aktywacja następowała po krótkim naciśnięciu.

Korzystanie




► **Uwaga:**
Jeśli Streamer jest sparowany z telefonem komórkowym, podczas połączenia z systemem pętli induktofonicznej zostaniesz poinformowany o przychodzącym połączeniu telefonicznym.

Aby odbierać dźwięk z odbiornika pętli induktofonicznej, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru źródła (AUX) przez około 2 sekundy. Aby przerwać, naciśnij przycisk krótko.

Usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie dźwięk z pętli.

Wskaźnik stanu w górnej części Streamera świeci się na pomarańczowo, a wskaźnik wł./wył. na zielono.

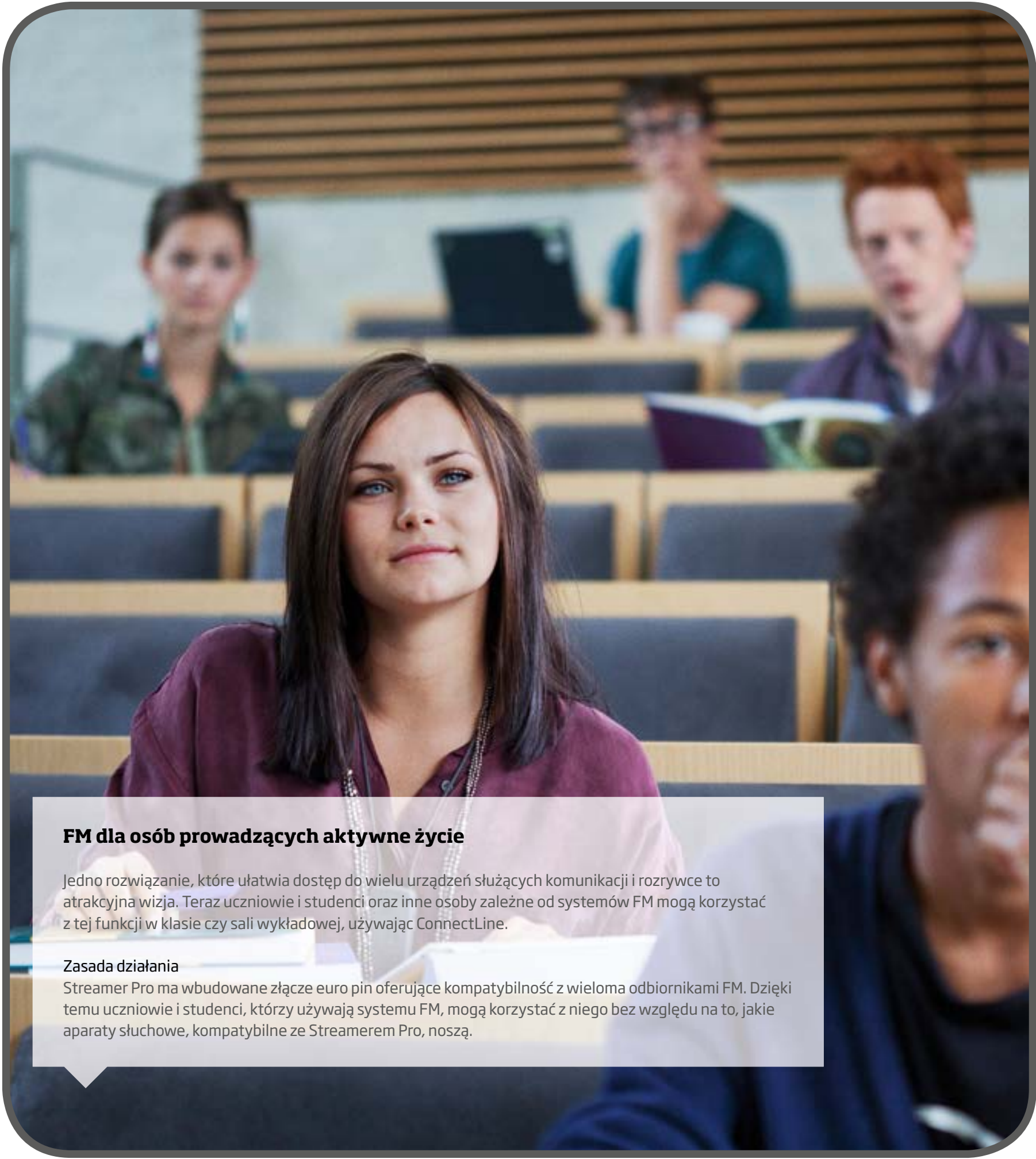

FM dla osób prowadzących aktywne życie

Jedno rozwiązanie, które ułatwia dostęp do wielu urządzeń służących komunikacji i rozrywce to atrakcyjna wizja. Teraz uczniowie i studenci oraz inne osoby zależne od systemów FM mogą korzystać z tej funkcji w klasie czy sali wykładowej, używając ConnectLine.

Zasada działania

Streamer Pro ma wbudowane złącze euro pin oferujące kompatybilność z wieloma odbiornikami FM. Dzięki temu uczniowie i studenci, którzy używają systemu FM, mogą korzystać z niego bez względu na to, jakie aparaty słuchowe, kompatybilne ze Streamerem Pro, noszą.

Ustawienie



Przed użyciem nie jest wymagana instalacja ani parowanie. Może natomiast być konieczna synchronizacja kanałów między odbiornikiem i nadajnikiem FM.

Jeśli wymagana jest synchronizacja kanału, naciśnij krótko przełącznik wyboru źródła (AUX), aż wyłączy się pomarańczowy wskaźnik, następnie zsynchronizuj urządzenia. Po zakończeniu synchronizacji naciśnij ponownie przycisk AUX.

Korzystanie




Podłącz odbiornik FM i naciśnij krótko przycisk wyboru źródła (AUX).

Ustaw przełącznik odbiornika na pozycję 00. Włączy się czerwony wskaźnik odbiornika.



Po podłączeniu usłyszysz sygnał potwierdzający, a następnie dźwięk z nadajnika FM.

Wskaźniki w górnej części Streamera świecą stale na zielono i pomarańczowo.

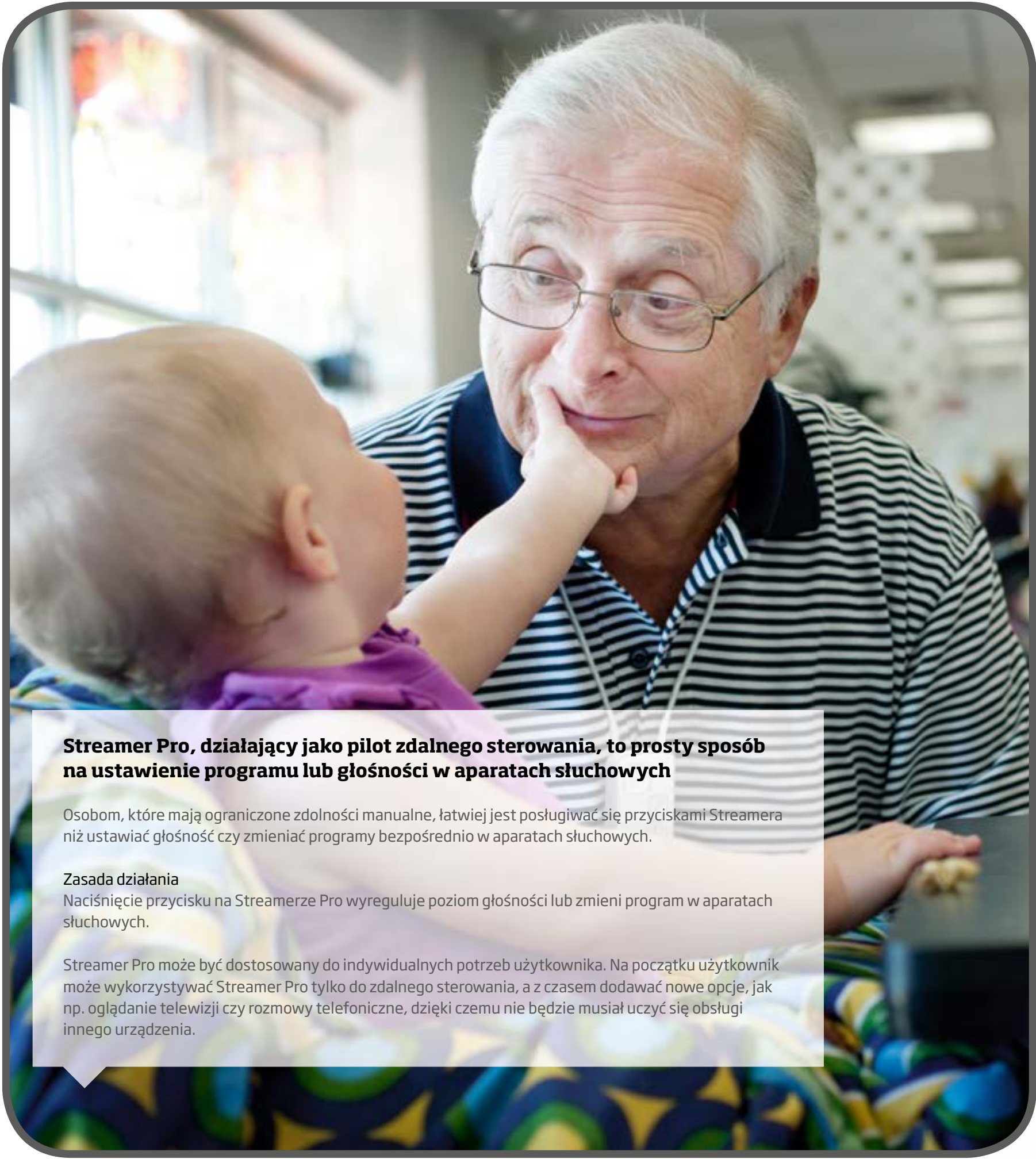

Streamer Pro, działający jako pilot zdalnego sterowania, to prosty sposób na ustawienie programu lub głośności w aparatach słuchowych

Osobom, które mają ograniczone zdolności manualne, łatwiej jest posługiwać się przyciskami Streamera niż ustawiać głośność czy zmieniać programy bezpośrednio w aparatach słuchowych.

Zasada działania

Naciśnięcie przycisku na Streamerze Pro wyreguluje poziom głośności lub zmieni program w aparatach słuchowych.

Streamer Pro może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na początku użytkownik może wykorzystywać Streamer Pro tylko do zdalnego sterowania, a z czasem dodawać nowe opcje, jak np. oglądanie telewizji czy rozmowy telefoniczne, dzięki czemu nie będzie musiał uczyć się obsługi innego urządzenia.

Zdalne sterowanie



Parowanie



Zanim użytkownik zacznie korzystać ze Streamera, protezyk słuchu musi sparować go z aparatami słuchowymi.

Korzystanie



Regulacja głośności
Krótkie naciśnięcie przycisku Głośniej lub Ciszej wyreguluje odpowiednio poziom głośności w aparatach słuchowych. W aparatach słuchowych usłyszysz dźwięki potwierdzające zmianę.

Zmiana programu
Programy zmienia się na kolejny/poprzedni, naciskając i przytrzymując przycisk Głośniej lub Ciszej przez dłużej niż sekundę. W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał potwierdzający zmianę.

Wyciszanie aparatów słuchowych podczas przesyłania
Aparaty słuchowe wycisza się, naciskając jednocześnie przycisk Głośniej ORAZ Ciszej przez 1 sekundę.

Wyciszanie aparatów słuchowych, gdy funkcja przesyłania nie jest wykorzystywana
Aparaty słuchowe wycisza się, naciskając jednocześnie przycisk Głośniej ORAZ Ciszej przez 1 sekundę (dotyczy aparatów Oticon Alta i nowszych).

► **Uwaga:**
Mimo, że Streamer jest wyłączony, funkcja zdalnego sterowania będzie nadal działać.

People First

People First to nasza obietnica,
by dawać ludziom możliwość
swobodnej komunikacji,
naturalnych kontaktów
i aktywnego uczestnictwa.