

Informacje techniczne

Oticon SmartCharger miniBTE R

SmartCharger została opracowana tak, by była łatwa w użyciu zarówno w domu, jak i w podróży. Pokrywa chroni aparaty podczas ładowania i przechowywania. Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwala na korzystanie ze SmartCharger jako powerbanku, gdy nie ma dostępu do źródła zasilania.

Ładowanie

- Po zdjęciu z uszu aparaty słuchowe wkłada się do gniazd ładowania w ładowarce.
- Aparaty słuchowe zaczynają się ładować automatycznie po włożeniu do ładowarki i wyłączają się automatycznie po wyjęciu z ładowarki.
- Aparaty ładuje się co noc, by rano były w pełni naładowane i gotowe do używania w ciągu dnia.

Czytelne komunikaty

Wskaźniki LED aparatów słuchowych informują użytkownika o stanie ładowania:

- pomarańczowy = trwa ładowanie
- zielony = całkowicie naładowany

przewód USB

- podłączany do zasilacza lub źródła zasilania



gniazda ładowania
- tu umieszcza się aparaty słuchowe na czas ładowania

Krótki czas ładowania

Gdy akumulatory aparatów słuchowych są całkowicie rozładowane, standardowy czas ładowania to:

- 3,5 godz. = naładowane do pełna
- 1 godz. = naładowane w 40%
- 0,5 godz. = naładowane w 20%

O produkcie

- ładowanie indukcyjne
- wskaźnik świetlny (LED) - informacja o stanie ładowania i poziomie akumulatora ładowarki
- połączenie magnetyczne - stabilna pozycja aparatów słuchowych w gniazdach ładowania
- odłączany przewód zasilający
- gumowe nóżki zapewniające stabilność
- łagodnie zaokrąglony kształt - łatwe czyszczenie



zasilacz*



wskaźnik stanu akumulatora
- wyświetla stan ładowania powerbanku/ poziom akumulatora powerbanku


*Zasilacz może się różnić w zależności od kraju.



SmartCharger służy do ładowania aparatów słuchowych miniBTE R w domu - po podłączeniu do źródła prądu, lub poza domem - za pomocą wbudowanego akumulatora litowo-jonowego ładowarki służącej jako powerbank.

Do aparatów miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

| Dane techniczne: Ładowarka | |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa | Oticon SmartCharger miniBTE R |
| Do używania z/kompatybilna z | Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R |
| Wymiary | Wysokość 76,4 mm / szerokość 47,2 mm / długość 95 mm |
| Masa | 180 g |
| Kolor | Obudowa - czarna, płytką górną - szara |
| Wtyczka przewodu zasilania | USB A |
| Wskaźnik stanu | Wskaźnik świetlny (LED) ładowarki, gdy jest podłączona do źródła zasilania: wskazuje stan ładowania powerbanku. Wskaźnik świetlny (LED) ładowarki, gdy nie jest podłączona do źródła zasilania: wskazuje poziom akumulatora powerbanku. Wskaźnik świetlny (LED) aparatu słuchowego podczas ładowania: wskazuje tryb ładowania. |
| Czas ładowania aparatów słuchowych | Maks. 3,5 godziny ładowania w zależności od początkowego stanu akumulatora. Temperatura: od +10°C do +35°C (od +50°F do +95°F) Maks. 5 godzin ładowania w zależności od początkowego stanu akumulatora. Temperatura: od +5°C do +10°C (od +41°F do +50°F) i od +35°C do +38°C (od +95°F do +100°F) |
| Czas ładowania akumulatora powerbanku | Maks. 4 godziny ładowania w zależności od początkowego stanu akumulatora. Temperatura: od +10°C do +35°C (od +50°F do +95°F) |
| Źródło zasilania | Dołączony zasilacz |
| Napięcie wejściowe | 5 V DC |
| Prąd wejściowy | Maks. 1 A |
| Przewód | Odłączany przewód, długość 150 cm |
| Podłączanie do urządzeń zewnętrznych | W przypadku podłączenia do urządzenia zewnętrznego zasilanego z sieci (podłączonego do gniazdka ściennego) urządzenie to musi być zgodne z normą IEC 62368-1 lub równoważnymi normami bezpieczeństwa. |
| Warunki używania | |
| Warunki pracy | Temperatura: od +5°C do +38°C (od +40°F do +100°F) Wilgotność: od 5% do 93% wilgotności względnej, bez skraplania |
| Warunki przechowywania i transportu | Temperatura: od -20°C do +60°C (do -4°F do +140°F) Wilgotność: od 5% do 93% wilgotności względnej, bez skraplania |
| Ciśnienie atmosferyczne | od 700 hPa do 1060 hPa |
| Dane techniczne: Zasilacz | |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V AC |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 5 V DC |
| Prąd wyjściowy | 1 A |

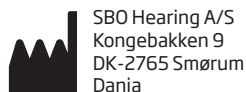

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania

Siedziba główna
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania