

TV Adapter 3.0



Bedienungsanleitung

oticon
PEOPLE FIRST

Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege des TV Adapters 3.0. Bitte machen Sie sich mit dem gesamten Inhalt dieser Anleitung vertraut, insbesondere mit dem Abschnitt „Warnhinweise“. Damit stellen Sie sicher, dass Sie alle Möglichkeiten des TV Adapters nutzen können.

Wenn Sie Fragen zum Gebrauch oder zur Pflege des TV Adapters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

| **TV Adapter** | [Installation](#) | [Täglicher Gebrauch](#) | [Warnhinweise](#) | [Zusätzliche Informationen](#) |

Über die Menüleiste gelangen Sie schnell und bequem zu den gewünschten Abschnitten.

Dieses Produkt ist hergestellt mit der Lizenz der Dolby Laboratories.

*Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories.

Indikation für den Einsatz

Der TV Adapter 3.0 wird eingesetzt, um den Ton von einem Fernseher oder einem anderen elektronischen Audiogerät kabellos an Oticon-Hörsysteme mit 2,4 GHz-Funktechnologie zu übertragen.

Der TV Adapter kann von Kindern (ab einem Alter von 36 Monaten) und Erwachsenen in Verbindung mit ihrer Hörlösung verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Info

Packungsinhalt	6
TV Adapter Überblick	8

Installation

Installation	10
Platzierung des TV Adapters	11
Verbindung des TV Adapters zum Netzstrom	12
Verbindung des TV Adapters mit dem Fernseher	14
Verbindung über TOSLINK	16
Verbindung über RCA	18
Verbindung über Klinkeadapter	20
Verbindung über SCART-Adapter	22
Kopplung des TV Adapters mit den Hörsystemen	24

Täglicher Gebrauch

Übertragung des Fernsehtons starten	26
Übertragung des Fernsehtons stoppen	27
Lautstärke mit den Hörsystemen regeln	28

Übertragung des Fernsehtons mit der Fernbedienung für die Hörsysteme starten	30
Übertragung des Fernsehtons mit der Fernbedienung stoppen	31
Lautstärke mit der Fernbedienung regeln	32
Lautstärke mit der Fernbedienung stummschalten	33
Übertragung des Fernsehtons mit der Oticon ON App starten	34
Übertragung des Fernsehtons mit der Oticon ON App stoppen	35
Lautstärke mit der Oticon ON App regeln	36
Lautstärke mit der Oticon ON App stummschalten	37
Mehrere Nutzer	38
Nutzer/Kopplungen entfernen	39
Reinigung und Pflege	

Warnhinweise

Warnhinweise	42
--------------	----

Zusätzliche Informationen

Technische Daten	44
Internationale Garantie	48

Packungsinhalt

Im Lieferumfang des TV Adapters sind die folgenden Teile enthalten:



TV Adapter



Diese Anleitung

Box 1



Netzstecker

Box 2



RCA-Kabel



Klinkenadapter

Box 3



TOSLINK


TV Adapter 3.0 Überblick

Zustand	Power-Anzeige	TV-Status-Anzeige
TV Adapter AN, keine Hörsysteme gekoppelt		
Kopplung abgeschlossen (30 Sekunden Dauerlicht)		
TV Adapter AN, kein Streaming/keine Übertragung		
RCA-Kabel angeschlossen und Streaming/Übertragung		
Kein RCA/Audio-Eingang		
TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming/Übertragung (digital)		
TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming/Übertragung (ungültiges Signal)*		
Fehlermeldung**		

Kein Licht
 Blinken
 Pulsieren
 Konstant

* Versuchen Sie es mit einem anderen Eingang

** Kontaktieren Sie bitte Ihren Hörakustiker

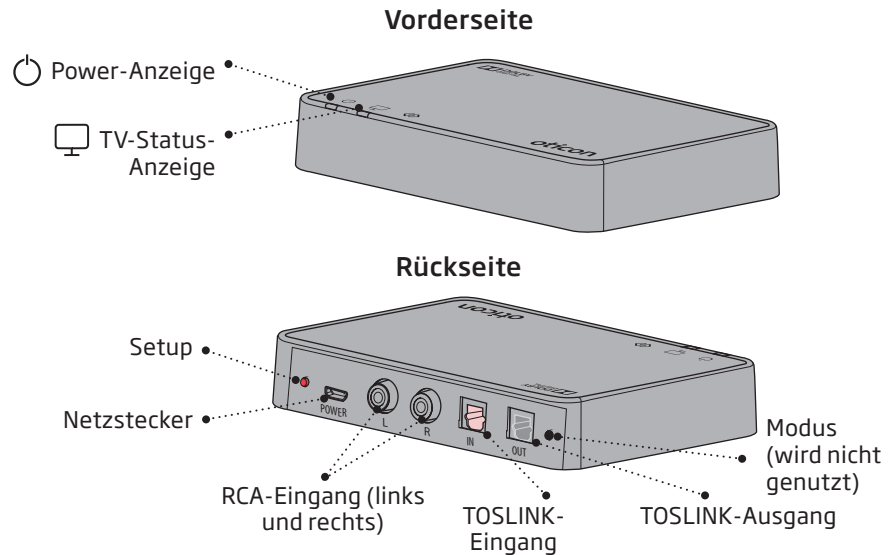

Mehr Informationen: www.oticon.de/connectivity

Installation


Erstmaliger Gebrauch des TV Adapters

Bevor Ihre Hörsysteme den Fernsehton empfangen können, muss der TV Adapter an den Fernseher und das Stromnetz angeschlossen sowie mit Ihren Hörsystemen gekoppelt werden.

Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den TV Adapter in Betrieb nehmen.

Platzierung des TV Adapters

Platzieren Sie den TV Adapter in der Nähe des Fernsehers - horizontal mit Sichtverbindung zu den Hörsystemen.

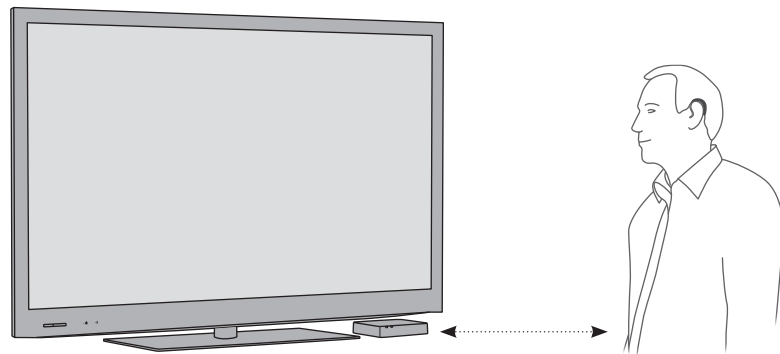


Verbindung des TV Adapters zum Netzstrom

Verbinden Sie zunächst den TV Adapter mit dem Netzstrom.

Nutzen Sie den Netzstecker aus der Verpackung 1.

1. Stecken Sie das Netzkabel in den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des TV Adapters (A).
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose (B).
3. Überprüfen Sie, ob der TV Adapter eingeschaltet ist. Nach einigen Sekunden pulsieren beide Anzeigen auf dem TV Adapter (C). Dies ist der Hinweis, dass nun die Kopplung mit den Hörsystemen ansteht (siehe Seite 24).

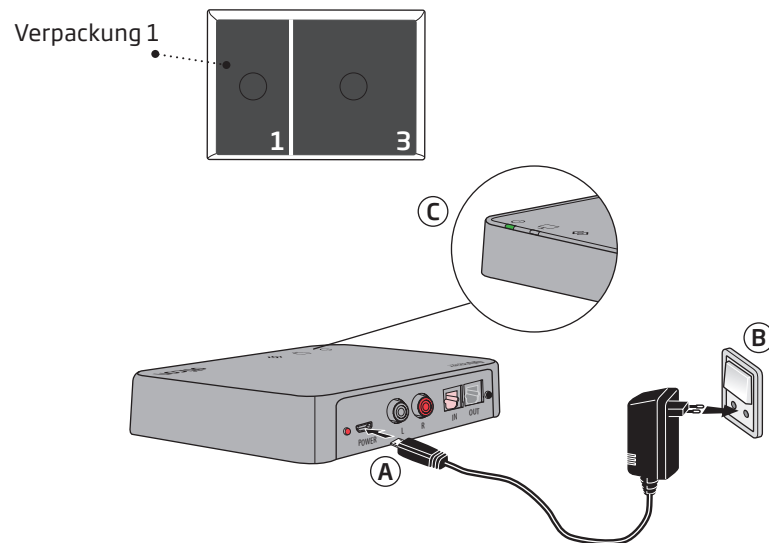

Verbindung des TV Adapters mit dem Fernseher

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, den TV Adapter mit dem Fernseher zu verbinden.


Anschluss	Seite
TOSLINK. Entweder Digital Stereo (PCM) oder Dolby® Digital	16
RCA-Ausgang (L+R)	18
Klinken-Ausgang (üblicherweise der Kopfhörerausgang)	20
SCART-Ausgang (L+R)	22

*Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories.


Wir empfehlen die Verbindung über TOSLINK. Hier ist die Kompatibilität mit Dolby und die allgemeine Qualität am besten.

Eine Lösung, die für Ihren Fernseher passt, finden Sie auf den nächsten Seiten.


TOSLINK (S. 16)

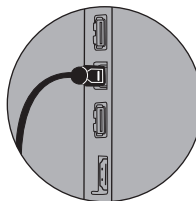


RCA (S. 18)

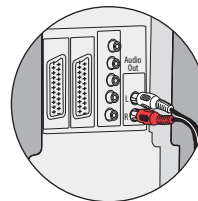

Klinke (S. 20)

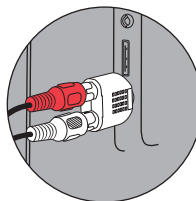

SCART (S. 22)

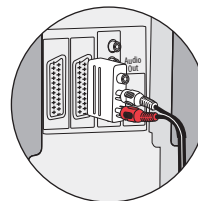


Mehr Informationen: www.oticon.de/connectivity

Verbindung über RCA

1. Nutzen Sie das RCA-Kabel aus der Verpackung mit der Nummer 2 (A).
2. Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem RCA-Ausgang am Fernseher (B).
(Dieser Ausgang ist normalerweise mit „L - R AUDIO OUT“ gekennzeichnet und befindet sich meist auf der Rückseite des Fernsehers oder am Bedienfeld auf der Vorderseite).
3. Stecken Sie das RCA-Kabel in den RCA-Eingang (C) auf der Rückseite des TV Adapters.
4. Ausführliche Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit Ihren Hörsystemen finden Sie auf Seite 24.


Hinweis: Möglicherweise muss Ihr Fernseher so konfiguriert werden, dass am RCA-Ausgang das richtige Audioformat verfügbar ist.

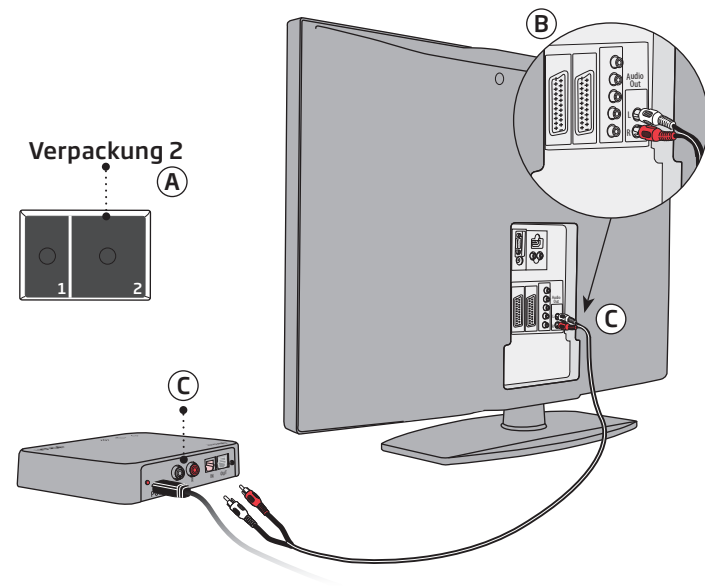

Verbindung über Klinkenadapter

1. Den Klinkenadapter finden Sie in der Verpackung mit der Nummer 2 (A).
2. Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem Klinkenadapter (B).
3. Schließen Sie den Klinkenadapter am Fernseher an, normalerweise am Kopfhörerausgang des Fernsehers (B).
4. Schließen Sie das RCA-Kabel am RCA-Eingang des TV Adapters an (C).
5. Ausführliche Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit Ihren Hörsystemen finden Sie auf Seite 24.

Hinweis: Es kann sein, dass die Lautsprecher des Fernsehers stumm geschaltet werden, wenn Sie den Kopfhörerausgang benutzen. In diesem Fall empfangen Sie den Fernsehton nur in den Hörsystemen über den TV Adapter.

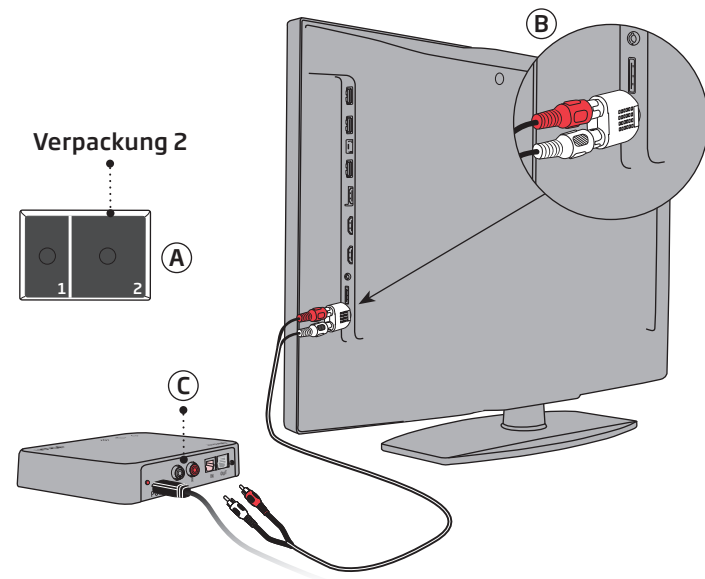


Verbindung über SCART-Adapter

1. Nutzen Sie den SCART Adapter* (A).
2. Verbinden Sie den roten und weißen Stecker des RCA-Kabels mit den entsprechenden Buchsen am SCART-Adapter (B).
3. Stecken Sie den SCART-Adapter in den SCART-Anschluss des Fernsehers (C).
4. Schließen Sie das RCA-Kabel am RCA-Eingang (D) des TV Adapters an.
5. Ausführliche Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit Ihren Hörsystemen finden Sie auf Seite 24.

Hinweis: Möglicherweise ist die Audioausgabe am SCART-Anschluss abhängig von der am Fernseher ausgewählten Quelle. Beispiel: Einige Fernseher stellen den Fernsehton nur über den SCART-Ausgang bereit (es erfolgt dann z. B. keine Audiowiedergabe über einen angeschlossenen DVD-Player).

* Der SCART-Adapter ist ein Zubehörteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Sie erhalten einen SCART-Adapter im Fachhandel.

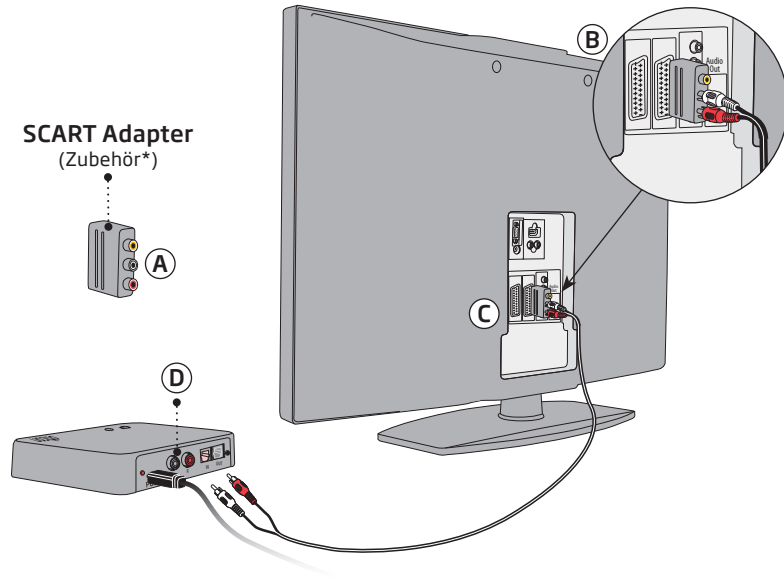

Kopplung des TV Adapters mit den Hörsystemen


Bevor Sie Ihre Hörsysteme das erste Mal mit dem TV Adapter nutzen können, müssen Sie die Hörsysteme mit dem TV Adapter koppeln.

Die Kopplung erfolgt einmalig und dauert etwa 20 bis 60 Sekunden.

Hinweis: Sie können diesen TV Adapter 3.0 mit jeder beliebigen Anzahl von Hörsystemen koppeln. Jeder Nutzer hört dann den gleichen Ton. Ausführlichere Informationen finden Sie auf Seite 38.


WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihrer Hörsysteme finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

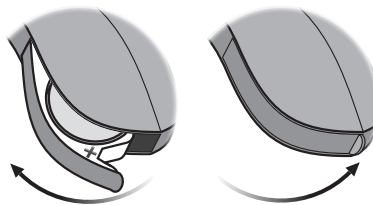

Stellen Sie sicher, dass der TV Adapter eingeschaltet ist.

Öffnen und schließen Sie das Batteriefach Ihrer Hörsysteme. Die Hörsysteme sind jetzt für 3 Minuten zur Kopplung bereit.

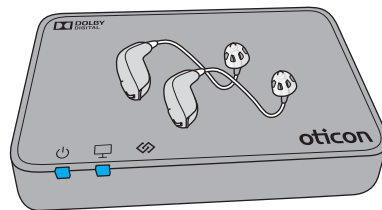

Platzieren Sie beide Hörsysteme auf dem TV Adapter oder in dessen Nähe (max. 30 cm entfernt).

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Power-Anzeige und die TV-Status-Anzeige für ca. 30 Sekunden konstant blau leuchten.

TV Adapter	Beschreibung
	Kopplung abgeschlossen

Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Hörsysteme starten

Sobald der TV Adapter mit den Hörsystemen gekoppelt wurde, kann dieser als zusätzliches Programm in Ihren Hörsystemen ausgewählt werden. Um die Übertragung zu starten, betätigen Sie den Programmtaster am Hörsystem und schalten in das TV Adapter Programm.

Dieses Programm befindet sich hinter den Standardprogrammen. D.h. die Position ist abhängig von den Programmen, die bereits in den Hörsystemen verfügbar sind.


Bei Auswahl des TV Adapter Programms hören Sie einen speziellen Info-Ton, der sich von den anderen Tönen in Ihrem Hörsystem unterscheidet.

WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihrer Hörsysteme finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.


Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Hörsysteme stoppen

Sie beenden automatisch die Übertragung des Fernsehtons, wenn Sie in ein anderes Programm wechseln.

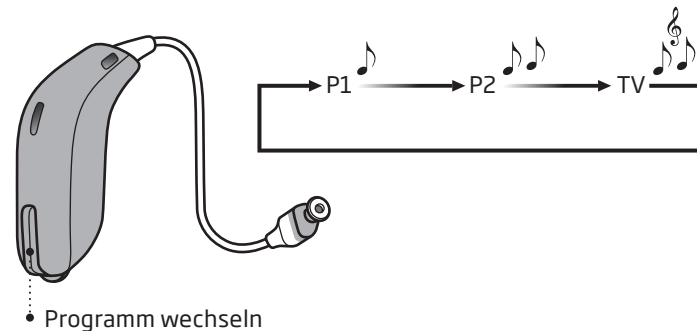

Lautstärke mithilfe der Hörsysteme regeln

Verwenden Sie den Taster an einem Hörsystem, um die Lautstärke des TV-Signals in beiden Hörsystemen zu steuern. Sie schalten lauter, indem Sie einmal kurz am rechten Hörsystem drücken. Sie schalten leiser, wenn Sie kurz die Taste am linken Hörsystem drücken. Durch wiederholtes kurzes Drücken des jeweiligen Tasters können Sie die Lautstärke je nach Bedarf anpassen.

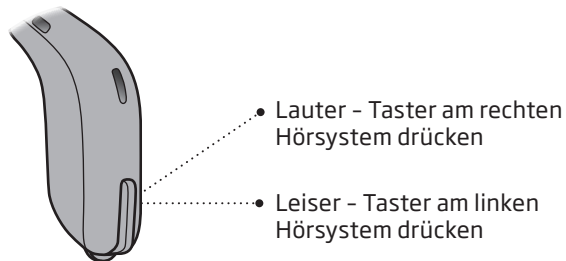

Hinweis: Die Lautstärke in den Hörsystemen wird nicht durch Lautstärkeregelungen über die Fernbedienung des Fernsehers beeinflusst.

WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihrer Hörsysteme finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Hörsysteme-Fernbedienung starten

Die Fernbedienung (Remote Control 3.0) ist ein optionales Zubehör für Ihre 2,4 GHz-Hörsysteme.


Sobald ein TV Adapter mit Ihren Hörsystemen gekoppelt wurde, kann dieser als Programm ausgewählt werden. Um die Übertragung zu starten, betätigen Sie den Programmtaster der Fernbedienung und schalten in das TV Adapter Programm.

Dieses Programm befindet sich hinter den Standardprogrammen. D.h. die Position ist abhängig von den Programmen, die bereits in den Hörsystemen verfügbar sind.

Bei Auswahl des TV Adapter Programms hören Sie einen speziellen Info-Ton, der sich von den anderen Tönen in Ihrem Hörsystem unterscheidet.

Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Hörsysteme-Fernbedienung stoppen


Um die Übertragung des Fernsehtons zu beenden, wechseln Sie mit der Fernbedienung einfach in ein anderes Programm.

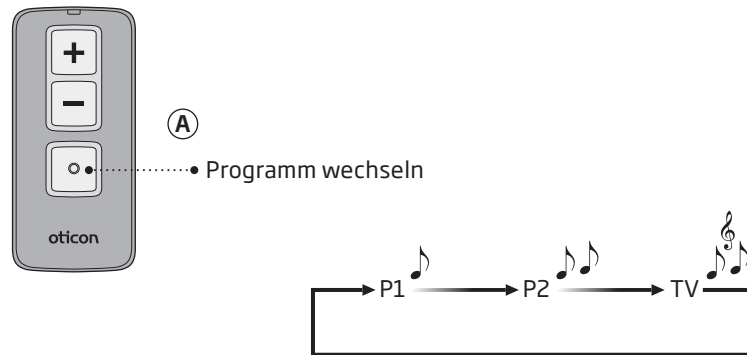

Mehr Informationen: www.oticon.de/connectivity

Lautstärke mithilfe der Hörsysteme- Fernbedienung regeln

Verwenden Sie die Lautstärketaster auf der Fernbedienung, um die Lautstärke des TV-Signals in beiden Hörsystemen zu steuern.

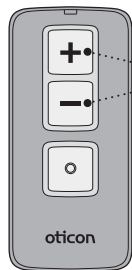


- Sie regeln die Lautstärke, indem Sie (wiederholt) kurz auf die „+“-Taste (lauter) oder auf die „-“-Taste (leiser) drücken.

Hinweis: Die Lautstärke in den Hörsystemen wird nicht durch Lautstärkeregelungen am Fernseher beeinflusst.

Stummschalten mit der Fernbedienung

Beim Fernsehen können Sie die Hörsysteme-Mikrofone ausschalten, um nur das TV-Signal zu hören.

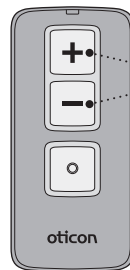

- Halten Sie die Leiser-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Hörsysteme-Mikrofone stumm geschaltet sind. Es ertönt ein Info-Ton.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie kurz eine beliebige Taste.

Hinweis: Die Regelung der Lautstärke und die Stummschaltung sind optional und können durch Ihren Hörakustiker für Sie personalisiert werden.

Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Oticon ON App starten

Die Oticon ON App ist ein optionales Zubehör zu Ihren 2,4 GHz-Hörsystemen. Die App arbeitet mit iPhone®, iPad®, iPod touch® und Android™ Geräten.




- Sobald ein TV Adapter mit Ihren Hörsystemen gekoppelt wurde, kann dieser als Programm in Ihren Hörsystemen ausgewählt werden. Er wird in der Oticon ON App als verfügbare Audioquelle angezeigt. Um den Fernsehton zu hören, wählen Sie einfach das TV-Symbol in der App aus.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Übertragung des Fernsehtons mithilfe der Oticon ON App stoppen

Um die Übertragung des Fernsehtons zu beenden, wechseln Sie über die App einfach in ein anderes Programm.

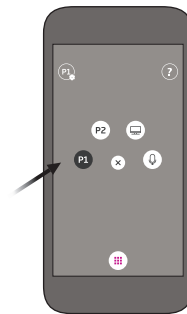

Mehr Informationen: www.oticon.de/connectivity


Lautstärke mit der Oticon ON App regeln

Streichen Sie irgendwo auf dem Display mit dem Finger nach oben (lauter) oder unten (leiser), um die Lautstärke einzustellen.



Stummschalten mithilfe der Oticon ON App

Beim Fernsehen können Sie die Hörsysteme-Mikrofone ausschalten, um nur das TV-Signal zu hören.

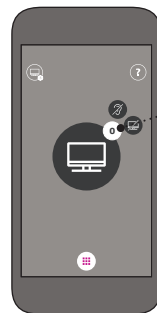

- Klicken Sie auf die Lautstärkeanzeige, um die Umgebungsgeräusche stummzuschalten. Sie hören einen Bestätigungston, der darauf hinweist, dass die Mikrofone in den Hörsystemen jetzt stummgeschaltet sind.

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf die Lautstärkeanzeige oder streichen auf dem Display mit dem Finger nach oben oder unten, um die Lautstärke zu regeln.

Mehrere Nutzer


Über nur einen TV Adapter können zeitgleich mehrere Nutzer den Ton des Fernsehers empfangen.


Koppeln Sie die entsprechenden Hörsysteme mit dem TV Adapter gemäß den Hinweisen auf Seite 24.


Hörsysteme/Kopplungen entfernen

Um gekoppelte Hörsysteme von Ihrem TV Adapter zu trennen, führen Sie einen Reset des Systems durch (alle Hörsysteme werden getrennt). Dann koppeln Sie die erforderlichen Hörsysteme erneut.

1. System zurücksetzen: Halten Sie die Setup-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt
2. Die Farbe der Anzeigen wechselt auf Blau, wenn keine Hörsysteme mehr gekoppelt sind
3. Koppeln Sie die erforderlichen Hörsysteme erneut (siehe Seite 24)

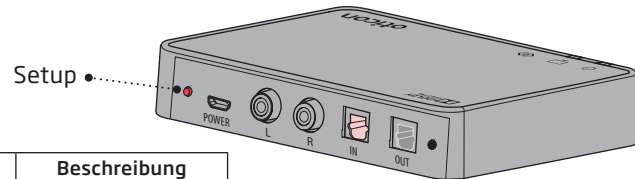

TV Adapter	Beschreibung
	Keine Kopplung

 Farbwechsel

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den TV Adapter mit einem weichen, trockenen Tuch.

WICHTIGER HINWEIS

Der TV Adapter darf keinesfalls gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Warnhinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwendung mit den Warnhinweisen und dem gesamten Inhalt dieser Anleitung vertraut, bevor Sie Ihren TV Adapter zum ersten Mal benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, wenn Ihr TV Adapter nicht erwartungsgemäß funktioniert oder reagiert.

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Ihr TV Adapter und dessen kleinteiliges Zubehör sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen aufbewahrt werden, die diese Teile verschlucken oder sich auf andere Weise damit verletzen können. Beim Verschlucken von Geräteteilen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Brandrisiko

- Die Spannungsquelle in Ihrem TV Adapter reicht nicht aus, um unter normalen Bedingungen ein Feuer zu verursachen.

Interferenzen

- Ihr TV Adapter wurde nach den strengsten internationalen Standards auf mögliche Interferenzen getestet. Es können jedoch Interferenzen mit Ihrem TV Adapter und anderen Geräten auftreten (z. B. mit Mobiltelefonen, CB-Funkgeräten oder anderen kabellosen Geräten). Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen dem TV Adapter und der Störquelle.

Verbindung mit externen Geräten

- Der sichere Gebrauch des TV Adapters mit einem AUX-Eingangskabel wird durch die externe Signalquelle bestimmt. Bei Verbindung des Eingangskabels mit einem netzbetriebenen Gerät muss dieses Gerät den Standard IEC-62368 (oder IEC-60065, IEC-60950 bis Juni 20, 2019) oder vergleichbare Sicherheitsnormen erfüllen.

Technische Daten

Modellbezeichnung	TVA3
Betriebsbedingungen	Temperatur: +5 °C bis +40 °C Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 %, nicht kondensierend Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten. Temperatur: -25 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 %, nicht kondensierend

Der TV Adapter enthält einen Funk-Transceiver, der Bluetooth Low Energy (BLE) und eine proprietäre Kurzstrecken-Funktechnologie einsetzt, die beide im 2,4 GHz ISM-Band arbeiten. Der Funksender ist schwach und arbeitet immer unterhalb von 50 mW, was einer Gesamtstrahlleistung von 17 dBm entspricht. Der TV Adapter erfüllt die internationalen Normen bezüglich Funksendern, elektromagnetischen Verträglichkeit und der Belastung des Menschen durch elektromagnetische Funkwellen.

Aufgrund der geringen Baugröße des TV Adapters sind alle für die Zulassung notwendigen Kennzeichnungen in diesem Dokument abgedruckt. Dieses Gerät hat folgende Zertifikate:

USA und Canada

Dieses Gerät ist zertifiziert unter:

FCC ID: ZACAHTVA3
IC: 11936A-TVA3

Das Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Normen und RSS-210 der kanadischen Industrie.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät erzeugt keine gesundheitsgefährdenden Interferenzen.
2. Dieses Gerät muss auch unter Einfluss von unerwünschten Frequenzen funktionieren.

Hinweis:

Jegliche Änderungen oder Maßnahmen, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass für den Benutzer die Genehmigung zum Betrieb des Gerätes erlischt.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht dem kanadischen ICES-003.

Hinweis: *In Tests wurde bestätigt, dass das Gerät die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Normen erfüllt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um angemessenen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Störungen in Wohnbereichen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht entsprechend der Vorschriften installiert und genutzt, kann es Störungen der Radiokommunikation verursachen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in einzelnen Installationsfällen zu Störungen kommen kann. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Anwender versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen abzustellen:*

- Empfangsantenne neu ausrichten oder umsetzen.
- Entfernung zwischen diesem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Dies Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an dem nicht der Radio- oder Fernsehempfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Rat fragen.

Radiofrequenz-Strahlenexposition Information:

Dieses Gerät entspricht den FCC- und IC-Strahlungsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort angebracht oder zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Internationale Garantie

Ihr TV Adapter verfügt über eine auf zwölf Monate befristete internationale Garantie auf Material und Ausführung vom Zeitpunkt der Lieferung an. Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich nur auf Herstellungs- und Materialdefekte der Fernbedienung an sich, nicht jedoch auf Batterien, Kabel, Netzteile usw. Probleme, die durch falsche/unsachgemäße Handhabung oder Pflege, übermäßigen Gebrauch, Unfälle, Reparaturen durch Unbefugte, Verwendung unter hoher Korrosionsbelastung, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät oder fehlerhafte Einstellungen entstehen, sind durch die eingeschränkte Garantie NICHT abgedeckt oder können zu deren Verlust führen.

Service

Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Wünschen am besten an Ihren Hörakustiker. Dieser kann viele technische Schwierigkeiten sofort beheben oder einen autorisierten Reparaturbetrieb einschalten.

191519DE / 2018.05.08



Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Geräte.

Hiermit erklärt Oticon, dass dieser TV Adapter die wesentlichen Anforderungen und anderen zutreffenden Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.



Die Konformitätserklärung erhalten Sie beim Hersteller.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark
www.sbohearing.com

191519DE / 2018.05.08



oticon
PEOPLE FIRST