

Fjärrkontroll 2.0



Bruksanvisning

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## **Avsedd användning**

Med Fjärrkontroll 2.0 kan du byta program eller justera volymen i dina trådlösa hörapparater. Den fungerar med Oticons hörapparater och är speciellt lämplig för hörapparater utan tryckknapp.

## **Så här använder du din fjärrkontroll på bästa sätt**

I den här bruksanvisningen kan du läsa om hur du använder din fjärrkontroll.

### **VIKTIGT**


Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda fjärrkontrollen. Den innehåller förklaringar och viktig information om användning och skötsel av din fjärrkontroll och batterier.

## Innehållsförteckning

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Vad finns i förpackningen?                | 6  |
| Produktöversikt                           | 7  |
| Sätta i och byta batterier                | 8  |
| Räckvidd                                  | 10 |
| Beskrivning av statusindikatorns signaler | 11 |
| Så här byter du program                   | 12 |
| Så här justerar du volymen                | 13 |
| Aktivera "Tyst läge" i hörapparaterna     | 14 |
| Inaktivera "Tyst läge" i hörapparaterna   | 15 |
| Här hittar du hål för handrem             | 16 |
| Skötselråd                                | 17 |
| Varningar                                 | 18 |
| Viktig tilläggsinformation                | 22 |

## Vad finns i förpackningen?

Fjärrkontroll 2.0

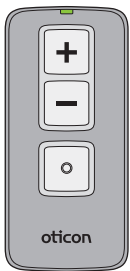

Batterier





2 x AAAA

Denna bruksanvisning



## Produktöversikt

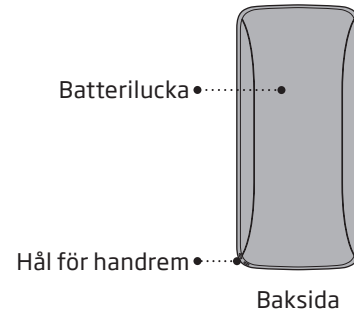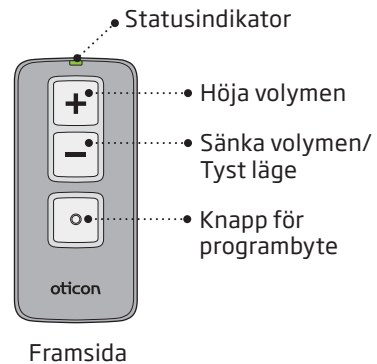

## Sätta i och byta batterier



Ett uttjänt batteri ska genast tas ut och kasseras enligt gällande miljöbestämmelser.

Fjärrkontrollen drivs med två alkaliska AAAA-batterier.

Sätta i nya batterier:

Öppna batteriluckan försiktigt.

Se till att symbolen "+" på batteriet matchar symbolen "+" i batterifacket.

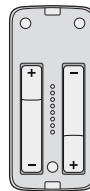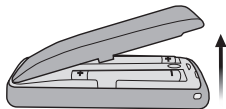

Placera batterierna i batterifacket. Se till att polerna är rättvända.



Sätt tillbaka batteriluckan och tryck försiktigt tills den klickar till.

### VIKTIGT


Använd aldrig för mycket kraft för att stänga batteriluckan. Om det är svårt att stänga batteriluckan, kontrollera att den sitter korrekt och tryck sedan försiktigt tills det klickar till. Batteritiden varierar beroende på användning.

## Räckvidd

Med fjärrkontrollen kan du styra dina hörapparater på upp till en meters avstånd.

Det behövs inte fri sikt mellan fjärrkontrollen och hörapparaterna.

Om du har två hörapparater, styr fjärrkontrollen båda hörapparaterna samtidigt.

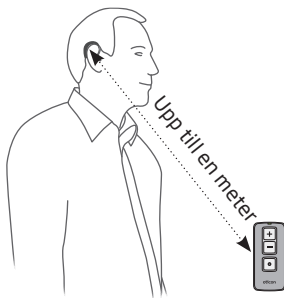


## Beskrivning av statusindikatorns signaler

Statusindikatorn visar fjärrkontrollens status.  
Den blinkar vid varje knapptryckning.

Statusindikatorn blinkar långsamt (en gång varannan sekund när batterierna behöver bytas).


Fjärrkontrollen fungerar inte förrän batterierna har bytts ut.

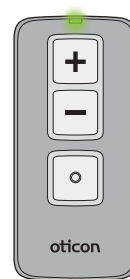

## Så här byter du program

Du växlar mellan hörapparaternas program genom att trycka på "•"-knappen.


Vid varje tryck aktiveras nästa program i cykeln.

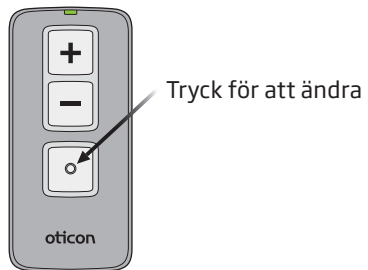


För att återgå till ursprungliga program - och volyminställningar, tryck och håll in "•"-knappen i 3-4 sekunder.

## Så här justerar du volymen

Med fjärrkontrollen kan du justera volymen i hörapparaterna med hjälp av volymknapparna.

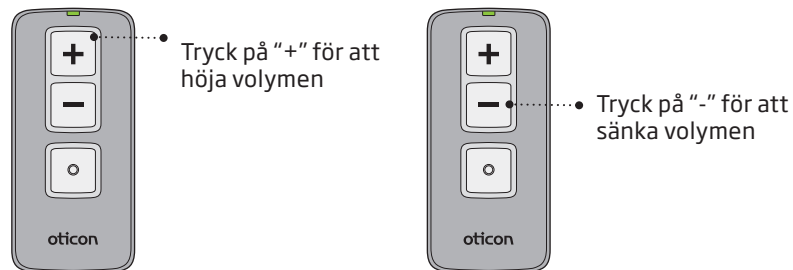

## Aktivera "Tyst läge" i hörapparaterna\*

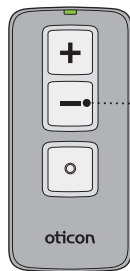

• Tryck och håll in  
"Volym ner"-knappen  
i 3-4 sekunder.

\* Funktionen "Tyst läge" finns endast tillgänglig i Oticons trådlösa hörapparater från år 2013 eller senare.  
För mer information, kontakta din audionom.

## Inaktivera "Tyst läge" i örapparaterna

Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen  
för att inaktivera "Tyst läge" i hörapparaterna.

### VIKTIGT


"Tyst läge" betyder inte att hörapparaten är avstängd.  
Öppna batteriluckan för att stänga av hörapparaten.



## Här hittar du hål för handrem

Fjärrkontrollen har ett hål i underkant för att fästa handrem.

Vilken lämplig handrem som helst kan användas.

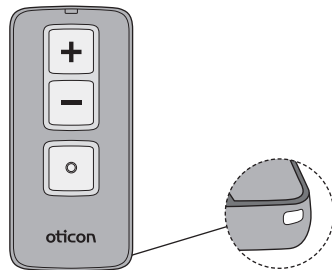

## Skötselråd

- Vid byte av batteri eller rengöring av fjärrkontrollen, håll den över ett mjukt underlag för att undvika skada om du skulle råka tappa den.
- Rengör fjärrkontrollen regelbundet med en torr tygtrasa eller pappersduk.
- Låt inte fjärrkontrollen bli blöt.
- Försök inte torka fjärrkontrollen med en hårtork, i en mikrovågsugn eller med någon annan värmekälla.

### VIKTIGT

Fjärrkontrollen får inte utsättas för extrem hetta, lämna den t.ex. inte i en parkerad bil i solen.

## **Varningar**

Du bör sätta dig in i följande allmänna varningar för Fjärrkontroll 2.0 och innehållet i denna bruksanvisning innan du använder fjärrkontrollen.

### **Kvävningsrisk**

Fjärrkontrollen är inte en leksak och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och andra som skulle kunna svälja delar eller skada sig på annat sätt. Var extra försiktig med de minsta delarna för att undvika att barn sväljer dem och kvävs.

*Om en del har svalts, uppsök läkare omedelbart.*

### **Batterianvändning**

- Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.
- Ett uttjänt batteri ska bytas ut så snart som möjligt.
- Försök aldrig ladda upp engångsbatterier. De kan explodera och orsaka allvarlig skada.
- Kassera aldrig batterier genom att bränna dem. Det finns en risk för att de kan explodera och orsaka allvarlig skada.

### **Aktiva implantat**

Iakta försiktighet och att följ riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefon. Om du har ett aktivt implantat, förvara fjärrkontrollen på minst 15 cm avstånd från implantatet.

### **Explosionsrisk**

Strömkällan i fjärrkontrollen alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand vid normal användning. Fjärrkontrollen har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder fjärrkontrollen i miljöer där explosionsrisk föreligger.

## **Varningar**

### **Utsätt inte fjärrkontrollen för hetta**

Utsätt inte fjärrkontrollen för hetta genom att t.ex. placera den i ugnen, mikrovågsugnen eller genom att bränna den. Det finns en risk för att den kan explodera och orsaka allvarlig skada.

### **Rengöring och underhåll**

Regelbunden rengöring med en torr trasa utan rengöringsmedel rekommenderas.

Fjärrkontrollen får inte utsättas för eller rengöras med rengöringskemikalier eller alkohol. Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada fjärrkontrollen. Du ska

alltid ta bort fjärrkontrollen innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder fjärrkontrollen.

Sänk inte ner fjärrkontrollen i vatten eller andra vätskor

### **Användning av handrem**

Om du använder en handrem, kontrollera att den lämpar sig för ändamålet. Använd inte en halsrem pga. strypningsrisken.

### **Röntgen, datortomografi och elektroterapi**

Bär inte fjärrkontrollen vid röntgen, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi.

### **Användning i bilar**

Om du använder fjärrkontrollen under bilkörning kan du bli distraherad. Om trafiksituation eller lagar kräver det, sväng av och parkera bilen innan du använder fjärrkontrollen.

### **Användning på flygplan**

Fjärrkontrollen får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen uttryckligen godkänt detta.

### **Miljöskydd**

Tänk på miljön, kassera inte din fjärrkontroll eller batterier i hushållssoporna. Återvinn fjärrkontrollen och batterier enligt lokala föreskrifter eller lämna in dem hos din audionom. Kontakta din audionom för mer information.

## Viktig tilläggsinformation

Fjärrkontrollen använder induktiva signaler för att överföra kommandon till hörapparaterna.

Det har förekommit oro för att denna signal skulle kunna störa medicinska enheter som exempelvis pacemakers, även om risken för detta är mycket liten.

Som en extra försiktighetsåtgärd rekommenderar vi pacemakeranvändare att inte bära och använda fjärrkontrollen i en bröstficka eller runt halsen.

Störningsvärdena från fjärrkontrollen ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering.

Som en jämförelse är strålningen från fjärrkontrollen lägre än den oönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Fjärrkontrollen är utformad för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

### USA och Kanada

På grund av det begränsade utrymmet på fjärrkontrollen så återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

### Denna enhet är certifierad enligt:

FCC ID: 2ACAHREMCTRO1  
IC: 11936A-REMCTRO1

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

### Användande har följande två förbehåll:

1. Denna utrustning orsakar ej skadlig störning.
2. Denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

**Obs:** Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att uppstå för en specifik installation.

Härmed deklarerar SBO Hearing A/S att denna fjärrkontroll överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 2014/53/EU. Överensstämmelsedeklaration finns hos SBO Hearing A/S.



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark  
[www.sbohearing.com](http://www.sbohearing.com)

175476SE / 2018.02.26



Avfall från all elektronisk  
utrustning ska hanteras  
enligt lokala föreskrifter.



N1175

CE 0682

175476SE / 2018.02.26



oticon  
PEOPLE FIRST