

BTE

Alta2
Nera2
Ria2
Alta
Nera
Ria



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Modellöversikt

Bruksanvisningen avser följande hörapparatsmodeller:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro | ☐ Ria2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 | ☐ Ria2 |
| ☐ Alta Pro | ☐ Nera Pro | ☐ Ria Pro |
| ☐ Alta | ☐ Nera | ☐ Ria |

Bakom-örat-apparater är tillgängliga med följande högtalarenheter:

- ☐ Högtalarenhet 85
- ☐ Högtalarenhet 100 (Power-apparater)

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | Komma igång | Hantering | Alternativ | Varningar | Övrig information |

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten som gör det lättare att hitta det du söker.

Bruksanvisning

Hörapparaterna är avsedda att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed kompensera för din hörselnedsättning. De passar för milda till måttliga hörselnedsättningar. Hörapparaterna är inte avsedda för spädbarn/barn < 36 månader.

VIKTIGT!

Hörapparaternas förstärkning är unikt inställd och anpassad till din hörsel under den anpassning som din audionom utförde.

Innehållsförteckning 1/2

Om

Identifiera modell och insats	10
BTE med slangfäste och individuell insats	12
BTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)	14
Identifiera höger och vänster hörapparat	16
Batteri	17

Komma igång

Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna	18
Dags att byta batteri	19
Byta batteri	20

Hantering

Skötsel av dina hörapparater	22
Verktyg för batteribyte och rengöring	23
Slangfäste med individuell insats	24
Sätta hörapparat med individuell insats på plats	25
Rengöra insatsen	26

Tvätta insatsen	27
Tunn ljudslang (Corda miniFit)	28
Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats	29
Rengöra tunn ljudslang	30
Standardinsatser: dome och GripTip	32
Byta dome eller Grip Tip	33
Tunn ljudslang med MicroMould eller LiteTip	34
Sköta MicroMould eller LiteTip	35

Alternativ

Tillvalsfunktioner och tillbehör	36
"Tyst läge"	37
Byta program	38
Justera volym	40
Petsäkert batterifack	42
Trådlösa tillbehör	44
Övriga alternativ	46

Innehållsförteckning 2/2

Varningar

Varningar	48
-----------	----


Övrig information

Felsökningsguide	54
Vattenresistens	56
Hanteringsanvisningar	57
Garantibevis	58
Internationell garanti	59
Teknisk information	60


Identifiera modell och insats

Det finns två olika tillbehör och olika insatser som klassificerar din hörapparatmodell. Identifiera ditt tillbehör och din insats. Det gör det lättare för dig att finna de delar i bruksanvisningen som är relevanta för dig.

- ☐ **BTE med slangfäste och individuell insats**
En hörapparat med slangfäste har alltid en individuell insats.

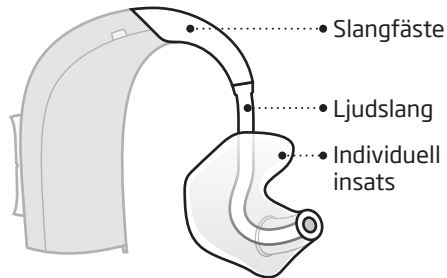

- ☐ **BTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)**

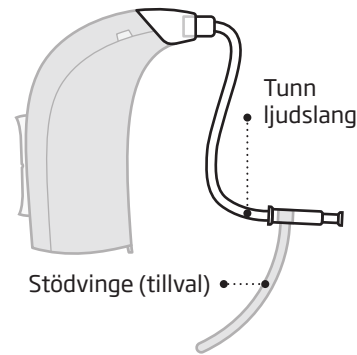



Insatser

En hörapparat med en tunn ljudslang har något av följande insatser: Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.



- ☐ Dome (öppen dome visas)
- ☐ GripTip
- ☐ MicroMould eller LiteTip

* Mer information om byte av dome och GripTip finns i avsnittet: Byta dome och GripTip

BTE med slangfäste och individuell insats

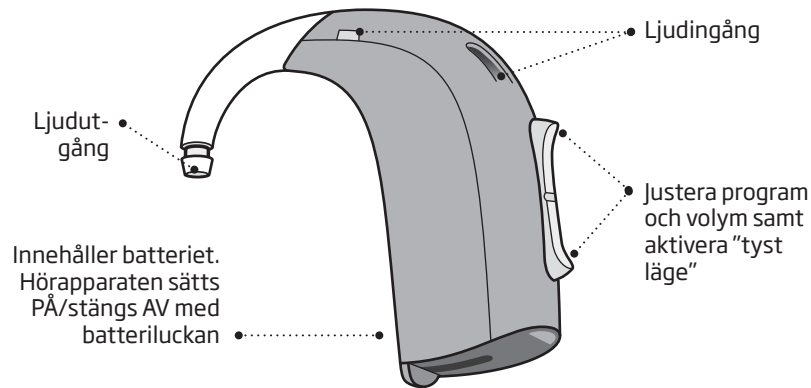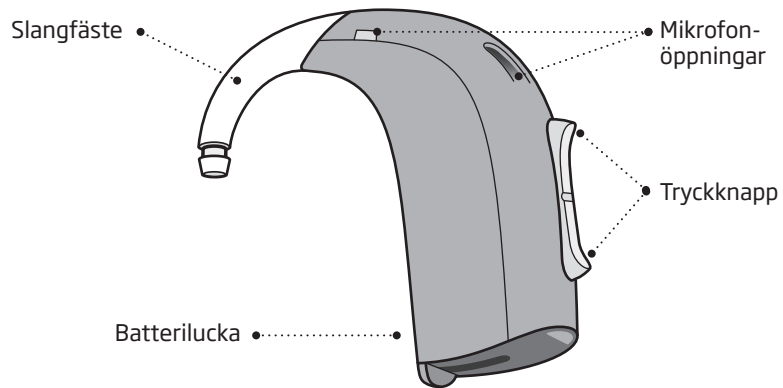


BTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)

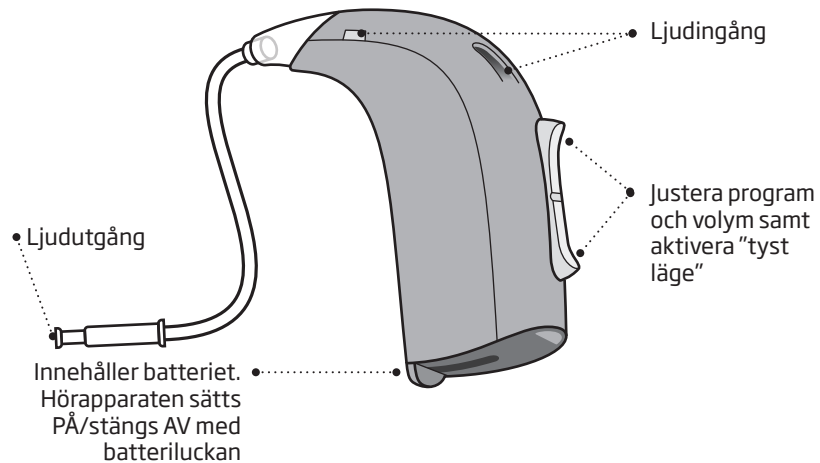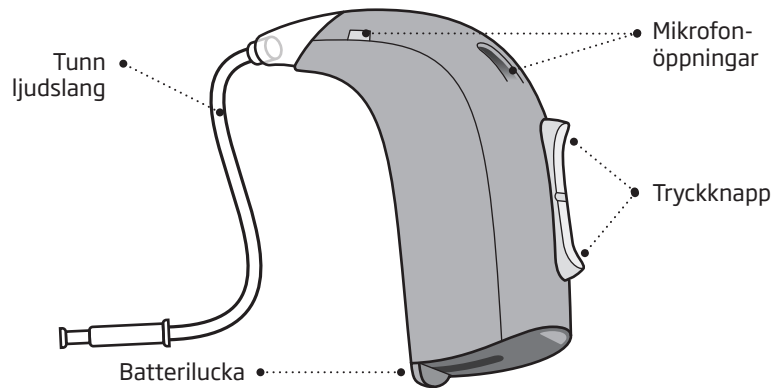


Identifiera höger och vänster hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara programmerade på olika sätt.

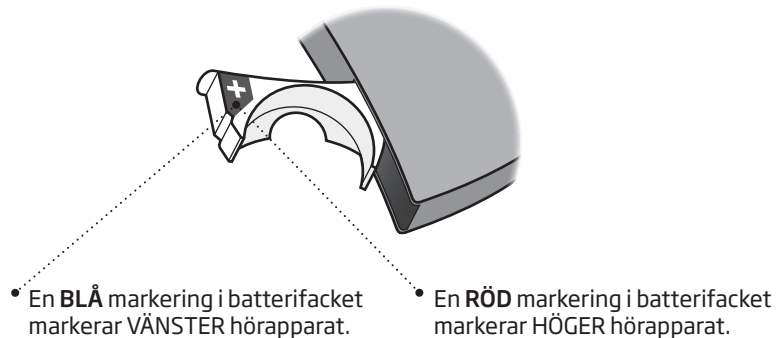

Batteri


Dina hörapparater är en känslig elektronisk enhet som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ en hörapparat genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Byta batteri".

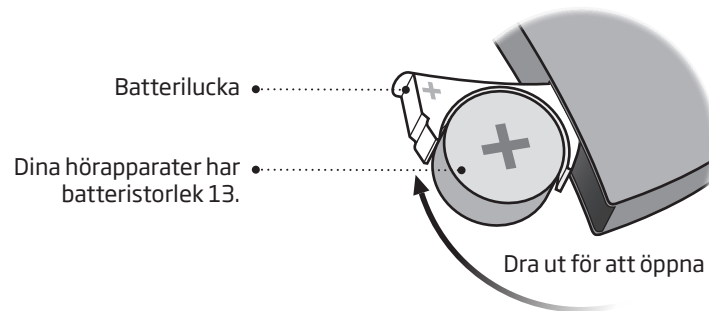


Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna

Batteriluckan används även för att sätta PÅ och stänga AV en hörapparat. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att hörapparaten är avstängd när du inte använder den.

Sätta PÅ
Stäng
batteriluckan
med batteriet
på plats.

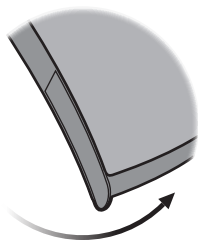

Stänga AV
Öppna
batteriluckan

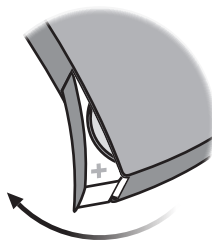

Dags att byta batteri

När det har blivit dags att byta batteriet hör du två pipsignaler med jämna mellanrum, tills batteriet är tomt.



Två pipsignaler
= Batteriet håller på att tömmas




Fyra pipsignaler
= Batteriet är tomt

Tips för batteriskötsel

För att vara säker på att hörapparaten alltid fungerar, ta alltid extra batterier med dig eller byt batterier innan du går hemifrån.


Byta batteri

1. Ta bort

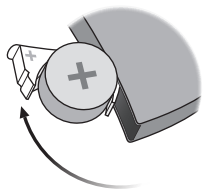


Öppna batteriluckan helt. Ta ut det gamla batteriet.

2. Ta fram

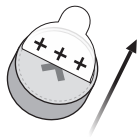


Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.

3. Sätt in

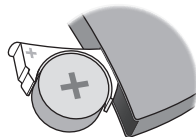


Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Se till att + sidan är vänd uppåt.

4. Stäng

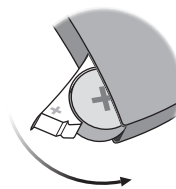

Stäng batteriluckan. Hörapparaten spelar en liten melodi för att indikera att den är PÅ. Håll insatsen nära örat för att höra melodin.

Tips

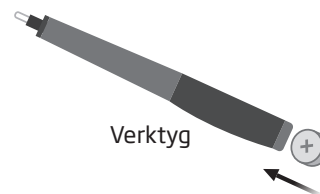

Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta bort och sätta i batterier.


Verktyget tillhandahålls av din audionom.

Skötsel av dina hörapparater

När du hanterar hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengöra mikrofonöppningarna

Borsta försiktigt bort allt synligt skräp från mikrofonöppningarna. Borsta ytan varsamt. Tryck inte in borsten i öppningarna.

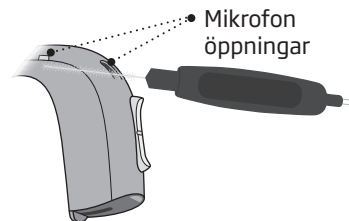


VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparaten. Hörapparaten får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Verktyg för batteribyte och rengöring

Verktøget innehåller en magnet som underlättar byte av batteri. Det har även en borste och en ögla för rengöring och avlägsnande av öronvax. Tala med din audionom om du behöver ett nytt verktyg.

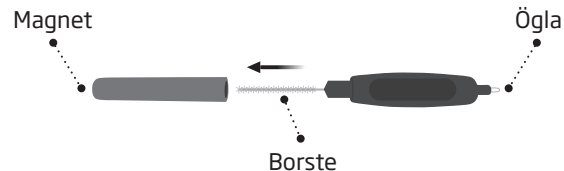

VIKTIGT!

Verktøget har en inbyggd magnet. Håll verktøget på minst 30 cm avstånd från föremål känsliga för magnetfält.

Slangfäste med individuell insats

Läs igenom de följande sidorna om du har en hörapparat med ett slangfäste och en individuell insats.

Insatsen är baserad på ett avtryck av ditt öra.



Sätta hörapparat med individuell insats på plats

Steg 1



Dra försiktigt örat uppåt och för in insatsen i samma riktning som hörselgången med en aning vridande rörelse.


Steg 2



Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Rengöra insatsen

Individuella insatser ska rengöras regelbundet: Använd en mjuk trasa att torka av utsidan på insatsen. Använd verktygets trådögla för att rengöra öppningen.

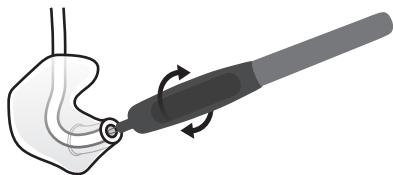

Byta ljudslang

Ljudslangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel. Fråga din audionom om du tycker det är svårt.

Tvätta insatsen

Steg 1




Se till att du vet vilken insats som hör till vilken hörapparat innan du tar av dem från hörapparaterna.

Steg 2



Koppla bort ljudslangen och insatsen från slangfästet. Ta ett stadigt grepp om slangfästet när ljudslangen dras ut. Annars kan hörapparaten skadas.

Steg 3

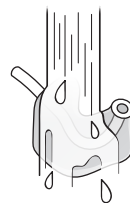


Tvätta insatsen och slang med en mild tvål. Skölj och låt torka helt innan du sätter på delarna på hörapparaten igen.

Tunn ljudslang (Corda miniFit)

Läs igenom de följande sidorna om dina hörapparater har tunn ljudslang (Corda miniFit) med Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.

Corda miniFit är en tunn ljudslang som leder ljudet till dina öron. Använd aldrig ljudslangen utan tillhörande insats. Använd endast reservdelar som är avsedda för dina hörapparater.

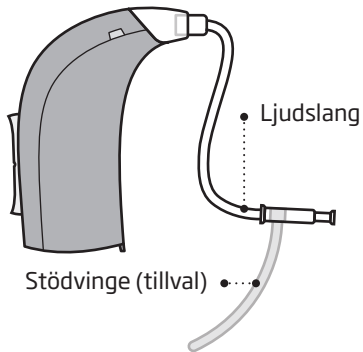


Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats

Steg 1




Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Steg 2

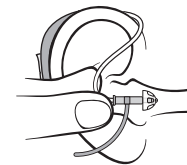

Fatta ljudslangens böj mellan tumme och pekfinger. Domen ska vara vänd mot hörselgångens öppning.

Steg 3

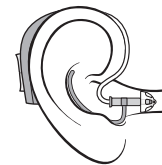


Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången tills ljudslangen ligger mot sidan av ditt huvud.

Rengöra tunn ljudslang


Rengör ljudslangen för att hålla den fri från fukt och vax. Om den inte rengörs kan den täppas igen och hindra ljudet.

Steg 1

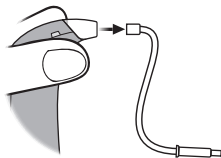


Dra ut ljudslangen från hörapparaten.

Steg 2

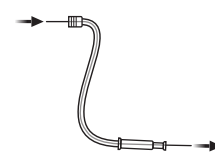

För rengöringsverktyget hela vägen genom ljudslangen.


Steg 3

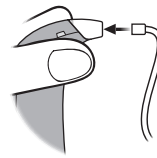

Tryck fast ljudslangen på hörapparaten.

Standardinsatser: dome och GripTip

Både domer och GripTip är tillverkade av mjukt gummi. Det finns fyra typer av domer. Kontrollera din typ av dome och storlek nedan.

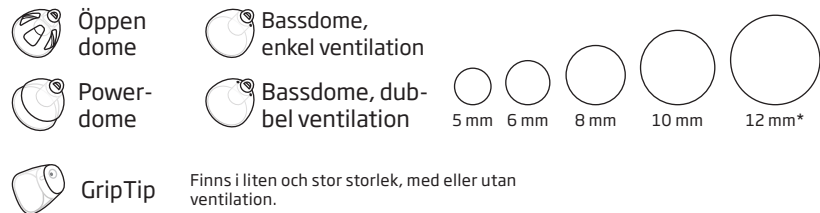

* ej för Öppen dome


VIKTIGT!

Om insatsen inte sitter på högtalarenheten när den tas ut ur örat, kan den ha fastnat i hörselgången. Rådgör med din audionom.

Byta dome eller Grip Tip


Rengör inte domer/GripTip. Om insatsen är fylld med vax, ska den bytas ut mot en ny. GripTip ska bytas ut minst en gång i månaden och domer minst två gånger i månaden.

Steg 1

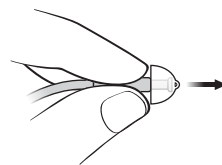


Fatta högtalarenheten och dra därefter av insatsen.

Steg 2

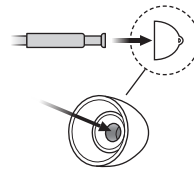

För in högtalarenheten i den nya insatsen så att den sitter fast.

Steg 3

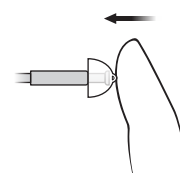

Tryck till ordentligt för att säkerställa att insatsen sitter stadigt.

Tunn ljudslang med MicroMould eller LiteTip

Läs igenom de följande sidorna om du har MicroMould eller LiteTip. MicroMould och LiteTip är individuellt anpassade till dina öron.



• MicroMould



• LiteTip


Sköta MicroMould eller LiteTip

Individuella insatser bör rengöras regelbundet.

Vaxfiltret för insatser ska bytas ut när det har täppts igen eller när hörapparaten inte låter som vanligt.

Använd de vaxfilter som rekommenderas av din audionom.

- Ventilationsöppningen rengörs med verktygets borste genom att det skjuts in i den och vrids försiktigt.

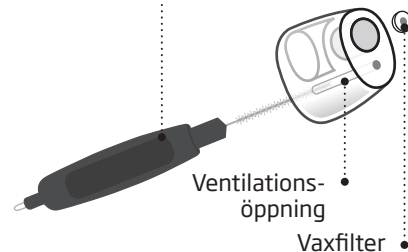

VIKTIGT!

Använd alltid samma typ av vaxfilter som levererades med hörapparaten. Om du har några frågor om användning eller byte av vaxfilter, kontakta din audionom.

Tillvalsfunktioner och tillbehör


De funktioner och tillbehör som beskrivs på följande sidor är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever det besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

Skriv ner de lyssningssituationer du tycker är besvärliga.

☐ "Tyst läge"

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaten.

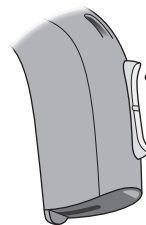


Håll in tryckknappen (tills mikrofonen stängs av) för att aktivera "tyst läge". Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström.

□ Byta program

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom.

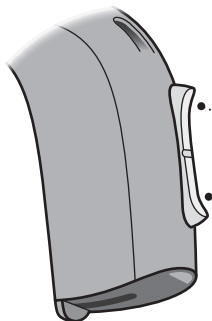

Tryck uppåt eller nedåt mellan program

Du kan växla mellan program - både uppåt och nedåt bland de olika programmen. Om du till exempel vill gå från program 1 till 4, kan du trycka en gång på nedåt i stället för att trycka tre gånger på uppåt.

Fylls i av din audionom

Program	Ljud du hör efter aktivering	Lämpliga användningstillfällen
1	 "1 pipsignal"	
2	 "2 pipsignaler"	
3	 "3 pipsignaler"	
4	 "4 pipsignaler"	

Programbyte:

☐ VÄNSTER


☐ HÖGER

☐ Kort tryck

☐ Långt tryck

☐ Justera volym

Du kan justera volymen med tryckknappen.
När du höjer eller sänker volymen kommer du höra klickljud.

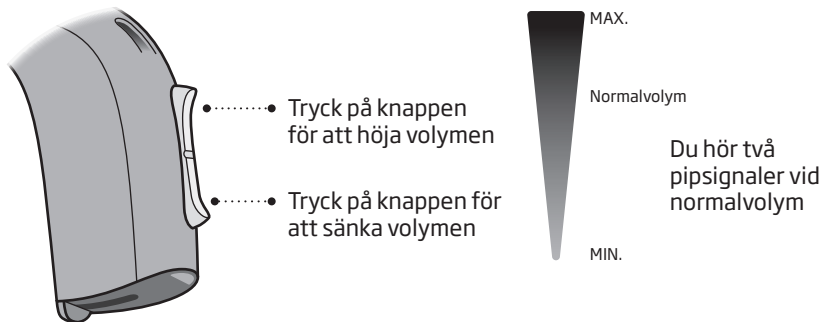


Fylls i av din audionom

Volymjustering	☐ VÄNSTER	☐ HÖGER	☐ Kort tryck
----------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------


Snabbåterställning

Om du vill återgå till de standardinställningar i hörapparaten som din audionom har programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckan.

Öppen

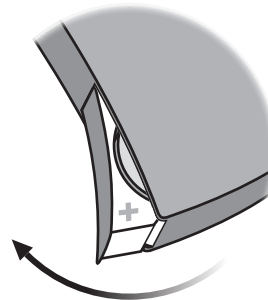

Stäng

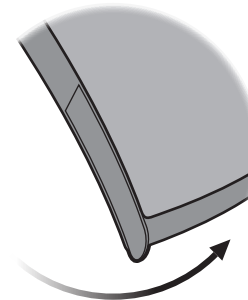

□ Petsäkert batterifack


För att hålla batteriet utom räckhåll för spädbarn, småbarn och personer med kognitiva funktionshinder, bör ett petsäkert batterifack användas. Använd en liten skruvmejsel för att låsa och låsa upp batteriluckan.

VIKTIGT!

Använd inte våld för att öppna en låst batterilucka. Tryck inte upp batteriluckan förbi fullt öppet läge. Var noga med att sätta i batteriet på rätt sätt.


Kontakta din audionom om du misstänker att låsfunktionen inte fungerar korrekt.

Låsa upp batteriluckan

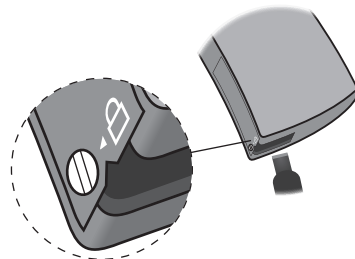

Använd skruvmejseln för att vrida skruven till upplåst läge (vertikalt). Sätt in skruvmejseln i skåran nedtill på hörapparaten och tryck upp luckan.

Låsa batteriluckan

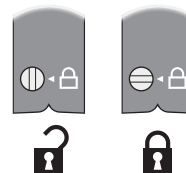

Kontrollera att batteriluckan är ordentligt stängd. Vrid skruven till låst läge (horisontellt).

Trådlösa tillbehör

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen din vardag.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine är en serie produkter som överför ljud från t.ex. TV, telefon, musikspelare, dator eller extern mikrofon till dina hörapparater.

☐ **Fjärrkontroll**

Med fjärrkontrollen kan du byta program eller justera volymen i dina hörapparater.

☐ **FM**

Dina hörapparater kan anslutas till ett FM-system. FM-systemet gör det möjligt att höra tal eller andra önskade ljud direkt i hörapparaterna utan störande bakgrundsljud och buller.

För mer information om trådlösa tillbehör, kontakta din audionom eller besök **www.oticon.se**.

Övriga alternativ



☐ **Telespole**

hjälper dig att höra bättre när du använder en telefon med en inbyggd teleslinga eller i lokaler med teleslinga, t.ex. teatrar och föreläsningssalar. Denna symbol eller en liknande symbol visas där en teleslinga är installerad.



☐ **Autotelefon**

Autotelefon är ett program som aktiveras automatiskt om din telefon har en inbyggd teleslinga (se ovan). En magnet måste placeras bredvid telefonens ljudutgång.

Ljudkontakt (DAI)

låter din hörapparat ta emot signaler via sladd, direkt från externa ljudkällor som t.ex. TV, radio, musikspelare osv. En DAI-adapter behövs då, vilken monteras på dina hörapparater.

För mer information om dessa alternativ, vänligen kontakta din audionom eller besök **www.oticon.se**.

VIKTIGT!

När DAI-adaptorn är ansluten till en elnätsansluten ljudkälla, måste denna ljudkälla efterleva IEC-60065, IEC-60601 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Varningar

Du bör läsa följande allmänna varningar innan du använder dina hörapparater för din personliga säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning.

Tänk på att hörapparaterna inte återställer din normala hörsel och att de varken förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning beroende på organiska orsaker. Dessutom måste hörapparaterna generellt användas med regelbundenhet för att du ska få full nytta av dem.

Rådfråga din audionom om dina hörapparater inte fungerar som förväntat.

Använda hörapparater

- Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.
- Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom felaktig användning kan leda till permanent hörselskada.

Kvävningsrisk och risk för att svälja batterier

- Hörapparater, deras delar samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

- Batterier kan förväxlas med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.
- De flesta hörapparater kan levereras med petsäkert batterifack som tillval, vilket rekommenderas om hörapparaterna ska användas av ett barn eller av en person med kognitivt funktionshinder.
- Barn yngre än 36 månader måste alltid ha petsäkert batterifack. Prata med din audionom om de olika alternativen som finns.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Batterianvändning

- Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.
- Försök aldrig ladda batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Varningar

Bristfällig funktion

- Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

Aktiva implantat

- Iakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner och magneter.
- Magneten till din fasta telefon (om du använder Autotelefon-funktionen) samt verktyget (som har en inbyggd magnet) bör alltid hållas på minst 30 cm avstånd från implantatet.
- Om du har ett aktivt hjärnimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

- Avlägsna hörapparaterna före röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi osv. eftersom de kan skadas av att utsättas för starka fält.

Värme och kemikalier

- Hörapparaterna får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.
- Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.
- Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder hörapparaterna igen.

Varningar

Power-hörapparater

- Extra varsamhet bör iakttas vid anpassning och användning av hörapparater för vilka max. ljudstyrka överstiger 132 dB SPL (IEC 711) eftersom de kan skada en användares återstående hörsel.

För information om huruvida din hörapparat är en Power-hörapparat, se sista sidan i denna bruksanvisning.

Eventuella biverkningar

- Hörapparater, insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.
- Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta läkare vid eventuella problem.

Störningar

- Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstöldlarm och andra enheter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet mellan hörapparaterna och den störande enheten.

Anslutning till extern utrustning

- Säkerheten för hörapparaten när den är ansluten till extern utrustning (via AUX-ingång kabel, via USB-kabel eller direkt), avgörs av den externa utrustningen. Vid anslutning till extern utrustning som är ansluten till ett vägguttag, måste denna utrustning överensstämma med IEC-60065, IEC-60950 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet slut	Byt ut batteriet
	Igentäppt ljudslang eller insats (Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip)	Rengör individuell insats
		Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome eller GripTip eller byt vaxfilter
Tillfälligt eller svagt ljud	Igentäppt ljudutgång	Rengör individuell insats
		Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome eller GripTip eller byt vaxfilter
	Fukt	Torka av batteriet med en torr trasa och/eller torka slangen
	Batteriet slut	Byt ut batteriet
	Igensatt filter i slangfästet	Kontakta din audionom
Tjutande ljud	Hörapparatsens insats är inte rätt placerad i örat	Igentäppt insats (Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip)
	Vax i hörselgången	Låt en läkare undersöka örat

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vattenresistens

Dina hörapparater är vattenresistenta, inte vattentäta. Om en hörapparat kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, följ dessa riktlinjer:

1. Torka försiktigt bort allt vatten
2. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet och torka försiktigt bort eventuellt vatten i batteriluckan.
3. Låt hörapparaten torka med batteriluckan öppen i cirka 30 minuter.
4. Sätt i ett nytt batteri.

VIKTIGT!

Bär inte hörapparater när du t.ex. duschar eller deltar vid vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller andra vätskor.

Hanteringsanvisningar

Drift	Temperatur: +1°C till +40°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga följande gränser under längre perioder vid transport och förvaring. Temperatur: -25°C till +60°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens

Garantibevis

Användare: _____

Audionom: _____

Klinikens adress: _____

Klinikens telefonnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell vänster: _____ Serienummer: _____

Modell höger: _____ Serienummer: _____

Internationell garanti

Dina hörapparater har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaterna, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av icke auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av dina öron eller om enheterna utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan

ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBµA/m vid 10 m.

Hörapparaten efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

USA och Kanada

Hörapparaten innehåller en radiomodul med följande certifierings- ID-nummer:

FCC ID: U28FU2BTERIT
IC: 1350B-FU2BTERIT

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

Användande har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Mer information: www.oticon.se

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Notera: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för digitala enheter av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta tillverkaren eller en utbildad radio / TV-tekniker för att få hjälp.

Oticon deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU.

CE 0543



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:



Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global



IP58

Beskrivning av symboler som används i detta häfte	
	Varningar Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, som definierat i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
	CE-märkning 0543 Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. De fyra siffrorna anger identifikationsnummer på det anmälda organet.
	Elavfall (WEEE) Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Hörapparat-användare kan även returnera elektronisk avfall till sin audionom för bortskaffande. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Efterlevnad av regler och föreskrifter (RCM-märkning) Enheten uppfyller kraven avseende elsäkerhet, elektromagnetisk strålning och radiofrekvenser för enheter som säljs i Australien och Nya Zeeland.
	IP-kod Anger skyddsklass avseende skadlig inträngning av vatten och partiklar i enlighet med EN 60529:1991/A1:2002. IP6X indikerar sammantaget dammskydd. IPX8 indikerar skyddet mot effekterna av kontinuerlig nedsänkning i vatten.

Beskrivning av symboler som används på förpackningens regelefterlevnadsdekal	
	Skyddas från fukt Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.
	Försiktighetssymbol Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppmärksamheter.
	Katalognummer Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicinska enheten.
	Serienummer Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av en specifik medicinsk enhet.

Power-hörapparat ☐ Ja ☐ Nej				
Översikt för hörapparaternas inställningar				
Vänster			Höger	
☐ Ja	☐ Nej	Volymkontroll	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programbyte	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Tyst läge	☐ Ja	☐ Nej
Volymkontroll				
☐ På	☐ Av	Pip vid min-/maxvolym	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klick vid volymjustering	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pip vid normal volym	☐ På	☐ Av
Indikeringar för batteri				
☐ På	☐ Av	Varning för svagt batteri	☐ På	☐ Av

151116SE / 2019.01.09

151116SE / 2019.01.09



oticon
PEOPLE FIRST

151116SE / 2019.01.09