

Alta2 | Nera2 | Ria2

BRUKSANVISNING

miniBTE



Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | Komma igång | Hantering | Alternativ | Varningar | Tillbehör |

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten som gör det lättare att hitta det du söker.

## Bruksanvisning

Hörapparaten är avsedd för att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed kompensera din hörselnedsättning. Den passar för milda till moderata hörselnedsättningar.

### VIKTIGT!

Hörapparatens förstärkning är unikt inställd och anpassad till din hörsel under den anpassning som din audionom utförde.

## Innehållsförteckning

|                    |                                                    |    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|
| <b>Om</b>          | Identifiera modell och insats                      | 6  |
|                    | miniBTE med slangfäste och Individuell insats      | 8  |
|                    | miniBTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)         | 10 |
|                    | Identifiera höger och vänster hörapparat           | 12 |
|                    | Batteri                                            | 13 |
| <b>Komma igång</b> | Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna                  | 14 |
|                    | Dags att byta batteri                              | 15 |
|                    | Byta batteri                                       | 16 |
| <b>Hantering</b>   | Skötsel av dina hörapparater                       | 18 |
|                    | Slangfäste med individuell insats                  | 20 |
|                    | Sätta hörapparater med individuell insats på plats | 21 |
|                    | Rengöra insatsen                                   | 22 |
|                    | Tvätta insatsen                                    | 23 |
|                    | Tunn ljudslang (Corda miniFit)                     | 24 |
|                    | Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats     | 25 |
|                    | Rengöra tunn ljudslang                             | 26 |


|                   |                                             |    |
|-------------------|---------------------------------------------|----|
|                   | Tunn ljudslang med dome eller GripTip       | 28 |
|                   | Byta dome eller GripTip                     | 29 |
|                   | Tunn ljudslang med MicroMould eller LiteTip | 30 |
|                   | Sköta MicroMould eller LiteTip              | 31 |
| <b>Alternativ</b> | Tillvalsfunktioner och tillbehör            | 32 |
|                   | ”Tyst läge” (tillval)                       | 33 |
|                   | Byta program (tillval)                      | 34 |
|                   | Justera volym (tillval)                     | 36 |
|                   | Petsäkert batterifack (tillval)             | 38 |
|                   | Trådlösa tillbehör (tillval)                | 40 |
|                   | Autotelefon (tillval)                       | 41 |
| <b>Varningar</b>  | Varningar                                   | 42 |
| <b>Tillbehör</b>  | Felsökningsguide                            | 48 |
|                   | Vattenresistens                             | 50 |
|                   | Garantibevis                                | 52 |
|                   | Internationell garanti                      | 53 |
|                   | Mobiltelefon                                | 54 |
|                   | Teknisk information                         | 56 |

## Identifiera modell och insats

Det finns två olika tillbehör och olika insatser som klassificerar din hörapparatmodell. Identifiera ditt tillbehör och din insats. Det gör det lättare för dig att finna de delar i bruksanvisningen som är relevanta för dig.

### ☐ **miniBTE med slangfäste och individuell insats**


En hörapparat med slangfäste har en individuell insats.

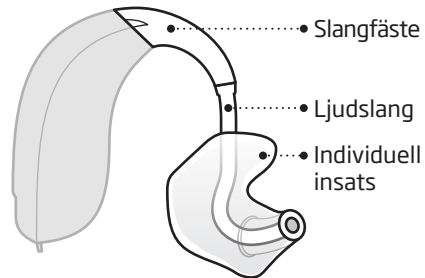



### ☐ **miniBTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)**

En hörapparat med en


tunn ljudslang har någon av följande insatser: Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.

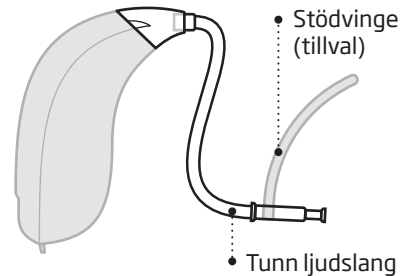

## miniBTE med slangfäste och Individuell insats

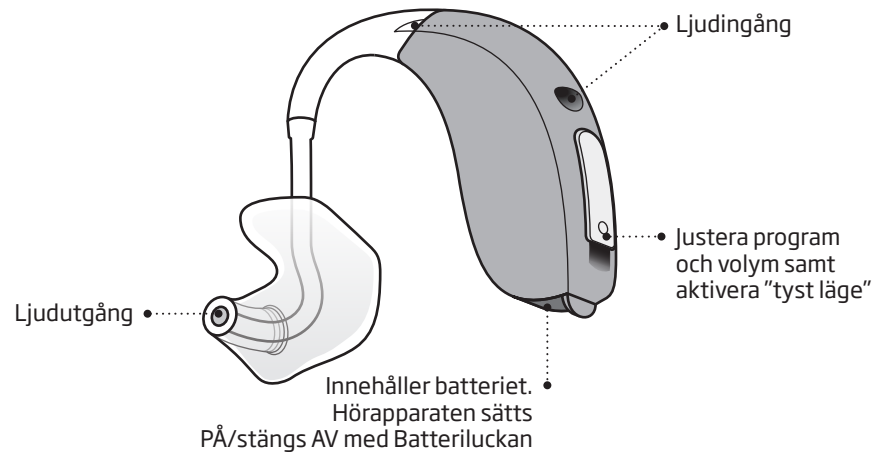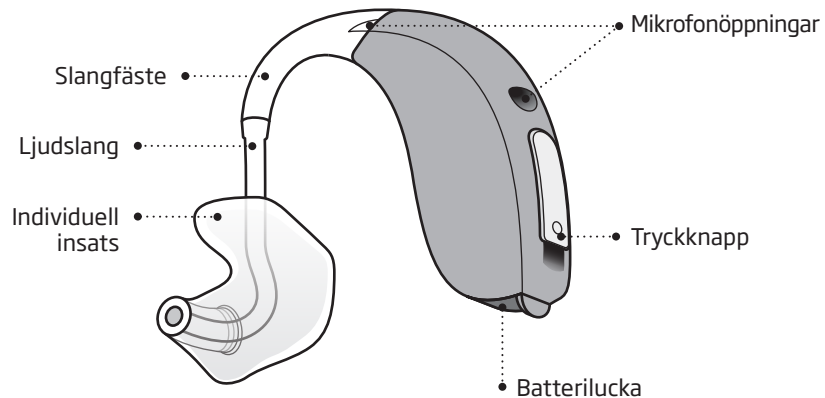


## miniBTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)

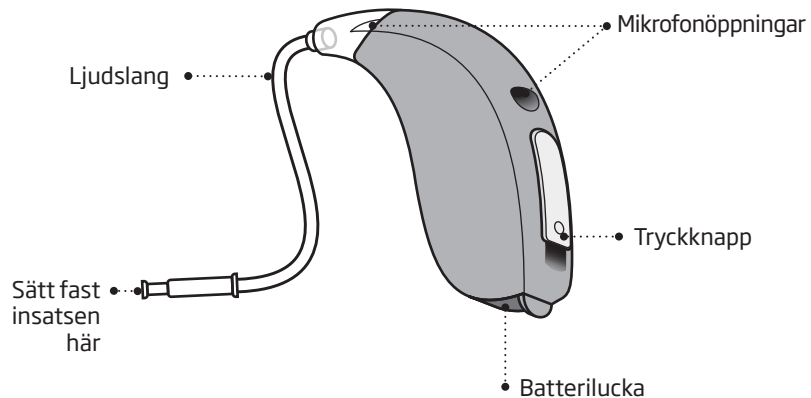


## Identifiera höger och vänster hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara programmerade på olika sätt.

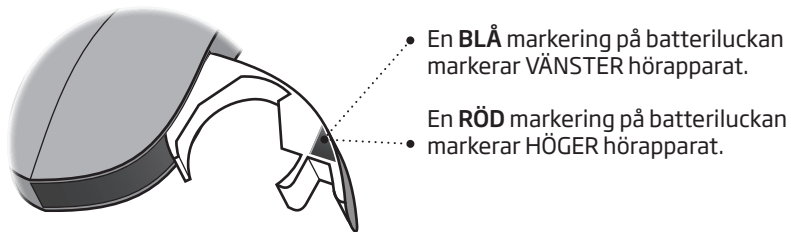

## Batteri


Dina hörapparater har känslig elektronik som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ hörapparaten genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Byta batteri".

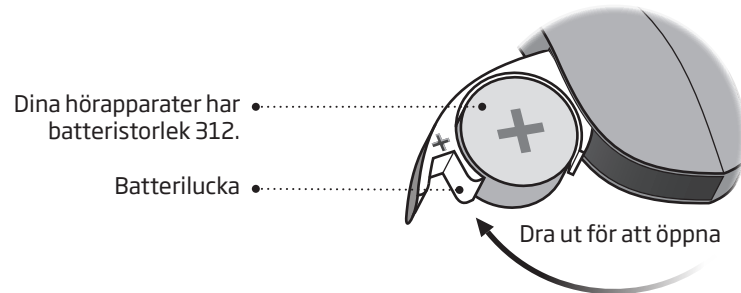


## Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna

Batteriluckan används även för att sätta PÅ och stänga AV en hörapparat. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att hörapparaterna är avstängda när du inte använder dem.

**Sätta PÅ**  
Stäng  
batteriluckan  
med batteriet  
på plats.

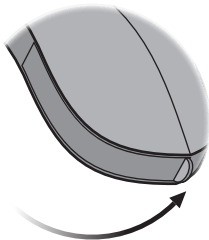

**Stänga AV**  
Öppna  
batteriluckan

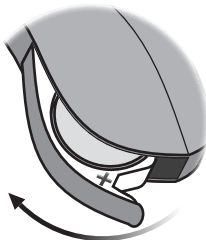

## Dags att byta batteri

När det har blivit dags att byta batteri hör du två pipsignaler med jämna mellanrum, tills batteriet är tomt.



**Två pipsignaler**  
= Batteriet är nästan tomt




**Fyra pipsignaler**  
= Batteriet är tomt

### Tips för batteriskötsel

För att vara säker på att hörapparaterna alltid fungerar, ha alltid med dig extra batterier eller byt innan du går hemifrån.


## Byta batteri

### 1. Ta bort

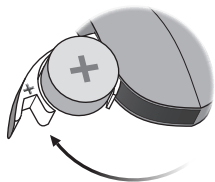


Öppna batteriluckan helt. Ta ut det gamla batteriet.

### 2. Ta fram

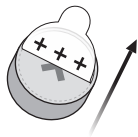


Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.

### 3. Sätt in

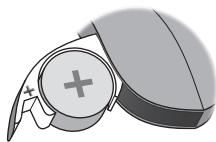


Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Se till att +sidan är vänd uppåt.

### 4. Stäng

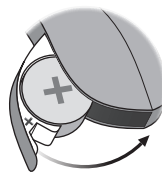

Stäng batteriluckan. Hörapparatens spelar en liten melodi för att indikera att den är PÅ. Håll insatsen nära örat för att höra melodin.

### Tips

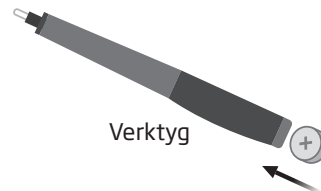

Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta ut och sätta i batterier.


Verktyget tillhandahålls av din audionom.

## Skötsel av dina hörapparater

När du hanterar hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

### Rengöra mikrofonöppningarna

Borsta försiktigt bort allt synligt skräp från mikrofonöppningarna. Borsta ytan varsamt. Kontrollera att borsten är ren och tryck inte in den i öppningarna.

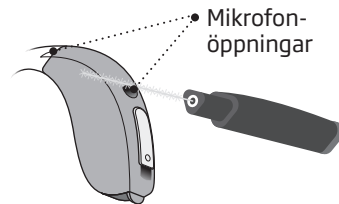


### VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparaten. Hörapparaten får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

## Verktyget


Verktyget har en borste och en ögla som används för att rengöra insatsen från vax. Du kan köpa nya borstar hos din audionom eller på Oticons webbshop: <http://shop.oticon.se>.

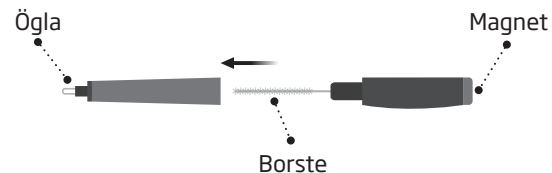

## Slangfäste med individuell insats

Läs igenom de följande sidorna om du har en hörapparat med ett slangfäste och en individuell insats.

Insatsen är anpassad för dig och passar i ditt öra.

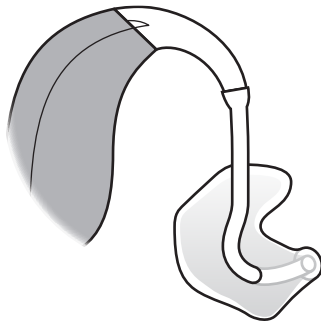

## Sätta hörapparater med individuell insats på plats

Steg 1



Dra försiktigt örat uppåt och för in insatsen i samma riktning som hörselgången med en aning vridande rörelse.


Steg 2



Placera hörapparaten bakom ditt öra.

## Rengöra insatsen

Individuella insatser bör rengöras regelbundet. Använd en mjuk trasa att torka av utsidan på insatsen. Använd verktygets trådögla för att rengöra öppningen.

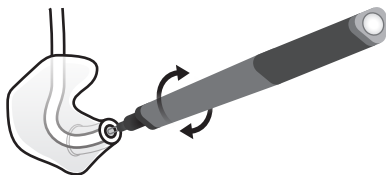

## Byta ljudslang

Ljudslangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel. Fråga din audionom om du tycker att det verkar svårt.

## Tvätta insatsen

### Steg 1




Se till att du vet vilken insats som hör till vilken hörapparat innan du tar av dem från hörapparaterna.

### Steg 2



Koppla bort slangen och insatsen från slangfästet. Ta ett stadigt grepp om slangfästet när ljudslangen dras ut. Annars kan hörapparatens skadas.

### Steg 3

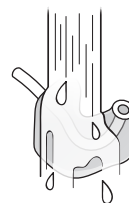


Tvätta insats och ljudslang med en mild tvål. Skölj och låt torka helt innan du sätter på delarna på hörapparatens igen.

## Tunn ljudslang (Corda miniFit)


Läs igenom de följande sidorna om dina hörapparater har tunn ljudslang (Corda miniFit) med Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.

Corda miniFit är en tunn ljudslang som leder ljudet till dina öron. Använd aldrig ljudslangen utan tillhörande insats. Använd endast reservdelar som är avsedda för dina hörapparater.

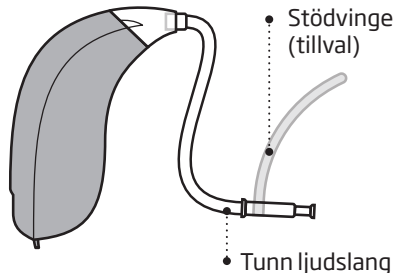


## Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats

### Steg 1

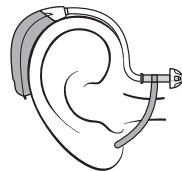

Placera hörapparaten bakom ditt öra.

### Steg 2

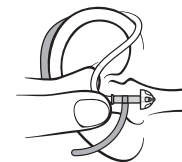

Fatta den tunna ljudslangens böj mellan tumme och pekfinger. Insatsen ska vara vänd mot hörselgångens öppning.

### Steg 3




Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången tills den tunna ljudslangen ligger mot sidan av ditt huvud.

## Rengöra tunn ljudslang


Rengör den tunna ljudslangen för att hålla den fri från fukt och vax. Om du inte rengör den kan den täppas igen och hindra ljudet.

**Steg 1**

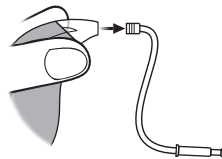


Dra ut den ljudslangen från hörapparaten.

**Steg 2**

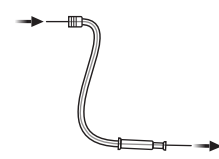

För rengöringsverktyget hela vägen genom den ljudslangen.


**Steg 3**

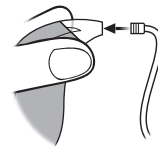

Tryck fast ljudslangen på hörapparaten.

## Tunn ljudslang med dome eller GripTip

Domer och GripTip är tillverkade av ett mjukt material. Det finns fyra olika typer av domer. Kontrollera din dometyp och storlek nedan.

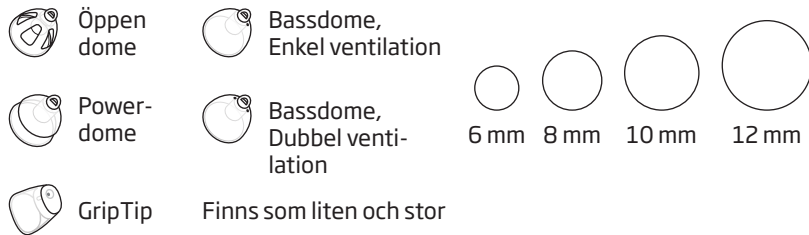


### VIKTIGT!

Om domen inte sitter på ljudslangen när den tas ut ur örat, kan den fortfarande vara kvar i hörselgången. Rådgör med din audionom.

## Byta dome eller GripTip

Rengör inte själva domen eller GripTip. När insatsen är mer eller mindre fylld med vax, ska den bytas ut.

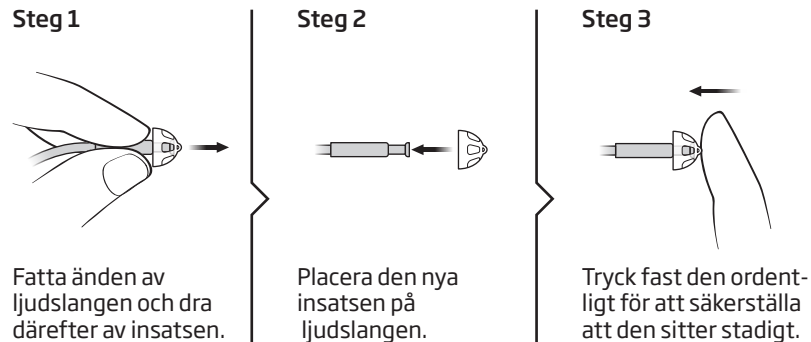

## Tunn ljudslang med MicroMould eller LiteTip

Läs följande sidor om du använder MicroMould eller LiteTip.  
MicroMould och LiteTip är individuellt anpassade till din öron.



• MicroMould




• LiteTip

## Sköta MicroMould eller LiteTip

Individuella insatser bör rengöras regelbundet.

Vaxfiltret för insatser ska bytas ut när det har täppts igen eller när hörapparaten inte låter som vanligt.

Använd de vaxfilter som rekommenderas av din audionom.

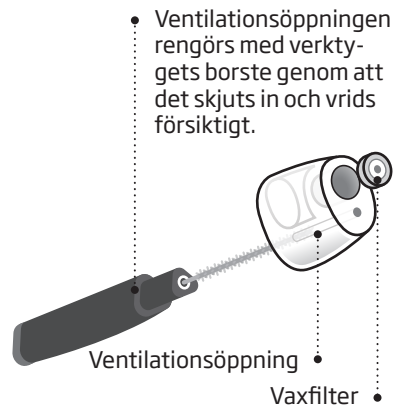

## Tillvalsfunktioner och tillbehör

De funktioner och tillbehör som beskrivs på de följande sidorna är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever att det är besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

*Skriv ner de lyssningssituationer som du tycker är besvärliga.*

---

---

---

### ☐ "Tyst läge" (tillval)

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna.




- Håll in tryckknappen (tills mikrofonen stängs av) för att aktivera "tyst läge". Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

#### VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström.

## ☐ **Byta program** (tillval)

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom.

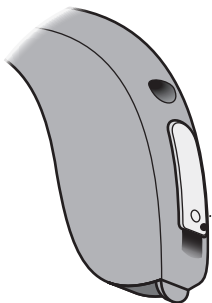

- Tryck på knappen för att byta program.

Om du har två hörapparater går HÖGER hörapparat framåt från exempelvis program 1 till 2 och VÄNSTER hörapparat går bakåt från exempelvis program 4 till 3.

## Fylls i av din audionom

| Program | Ljud du hör efter aktivering                                                                        | Lämpliga användningstillfällen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       |  "1 pipsignal"   |                                |
| 2       |  "2 pipsignaler" |                                |
| 3       |  "3 pipsignaler" |                                |
| 4       |  "4 pipsignaler" |                                |

Programbyte:

☐ VÄNSTER

☐ HÖGER

☐ Kort tryck

☐ Långt tryck

## □ Justera volym (tillval)


När du har två hörapparater kan du justera volymen för båda öron med tryckknappen. När du höjer eller sänker volymen kommer du höra klickljud.




## Snabbåterställning

Om du vill återgå till de hörapparaternas standardinställningar som din audionom programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckorna.

### Öppen

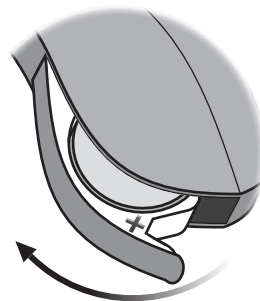

### Stäng

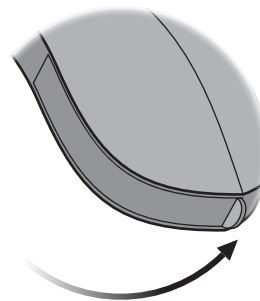

## ☐ **Petsäkert batterifack** (tillval)


För att hålla batteriet utom räckhåll för spädbarn, småbarn och personer med kognitiva funktionshinder, bör ett petsäkert batterifack användas. Använd en liten skruvmejsel för att öppna batteriluckan.

### **VIKTIGT!**

Tvinga inte upp batteriluckan med våld. Tryck inte upp batteriluckan förbi fullt öppet läge. Var noga med att sätta i batteriet på rätt sätt.

Kontakta din audionom om du misstänker att låsfunktionen inte fungerar korrekt.

## Öppna och stäng batteriluckan

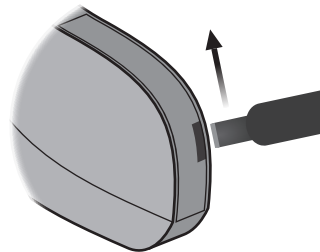

För in skruvmejseln i skåran på baksidan av hörapparaten. Stäng batteriluckan med hjälp av fingrarna. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt stängd.

## ☐ **Trådlösa tillbehör** (tillval)

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen i din vardag.

### **ConnectLine**

ConnectLine är en serie produkter som ger dig tillgång till ljudet från t.ex. TV, mobiltelefon, dator eller extern mikrofon till dina hörapparater.

### **Fjärrkontroll**

Med fjärrkontrollen kan du byta program eller justera volymen i dina hörapparater.

## ☐ **Autotelefon** (tillval)



### **Autotelefon**

är ett program som aktiveras automatiskt om din telefon har en inbyggd teleslinga. En magnet måste placeras bredvid telefonens ljudutgång. Autotelefon aktiverar ett speciellt telefonprogram i dina hörapparater.

## **Varningar**

Du bör läsa följande allmänna varningar innan du använder dina hörapparater för din personliga säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning.

Rådfråga din audionom om dina hörapparater inte fungerar som förväntat.

### **Använda hörapparaterna**

- Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

- Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom ett felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

### **Kvävningsrisk & risk för att svälja batterier**

- Hörapparater, deras tillbehör samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och alla som kan få för sig att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

- Det har hänt att batterier har förväxlats med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.
- De flesta hörapparater kan levereras med en petsäker batterilucka som tillval. Detta rekommenderas om hörapparater ska användas av ett barn eller person med kognitivt funktionshinder.
- Barn yngre än 36 månader måste alltid ha petsäker batterilucka. Detta alternativ finns för BTE, miniBTE, RITE och miniRITE.

*Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.*

### **Batterianvändning**

- Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.
- Försök aldrig ladda upp batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

## **Varningar**

### **Bristfällig funktion**

- Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

### **Aktiva implantat**

- Iakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner.
- Om du har ett aktivt implantat, förvara hörapparaten på minst 15 cm avstånd från implantatet. Om du har en Autotelefonmagnet eller verktyget (med inbyggd magnet), håll dem på minst 30 cm avstånd från implantatet. Du ska t.ex. inte bära dem i bröstfickan.

- Om du har ett aktivt hjärtimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

### **Explosionsrisk**

- Strömkällan i dina hörapparater alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand, vid normal användning. Hörapparaterna har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder dina hörapparater i miljöer där explosionsrisk föreligger.

### **Röntgen, datortomografi och elektroterapi**

- Använd inte dina hörapparater vid exempelvis röntgen, datortomografi, elektroterapi eller medicinska ingrepp, eftersom hörapparaterna kan skadas av denna typ av utrustning.

## **Varningar**

### **Undvik värme och kemikalier**

- Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.
- Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.
- Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter hörapparaterna på plats igen.

### **Eventuella biverkningar**

- Hörapparater, individuella insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.
- Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan ovanlig åkomma.

*Kontakta en läkare vid eventuella problem.*

### **Störningar**

- Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Trots detta kan störningar uppstå mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, andra personers elektroniska utrustning eller larmsystem i butiker). Om detta inträffar, öka avståndet mellan dina hörapparater och den störande enheten.

## Felsökningsguide

| Problem                      | Möjlig orsak                                                               | Lösning                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inget ljud                   | Batteriet slut                                                             | Byt batteri                                                           |
|                              | Igentäppt ljudslang eller insats (dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip) | Rengör individuell insats                                             |
|                              |                                                                            | Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome, GripTip eller vaxfilter |
| Tillfälligt eller svagt ljud | Igentäppt ljudutgång                                                       | Rengör individuell insats                                             |
|                              |                                                                            | Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome, GripTip eller vaxfilter |
|                              | Fukt                                                                       | Torka av batteriet med en torr trasa och/eller torka av ljudslangen   |
|                              | Batteriet slut                                                             | Byt batteri                                                           |
|                              | Igensatt vaxfilter i slangfästet                                           | Kontakta din audionom                                                 |
| Tjutande ljud                | Hörapparaters insats är inte rätt placerad i örat                          | Igentäppt insats (Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip)            |
|                              | Vax i hörselgången                                                         | Låt läkare undersöka örat                                             |

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

## Vattenresistens

Dina hörapparater är vattenresistenta, inte vattentäta. Om en hörapparat kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, följ dessa riktlinjer:

1. Torka försiktigt bort allt vatten
2. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet och torka försiktigt bort eventuellt vatten i batteriluckan.
3. Låt hörapparaten torka med batteriluckan öppen i cirka 30 minuter.
4. Sätt i ett nytt batteri.

### VIKTIGT!

Bär inte hörapparater när du t.ex. duschar eller deltar vid vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller andra vätskor.

## Garantibevis

Köpare: \_\_\_\_\_

Hörselklinik/audionom: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Garantiperiod: \_\_\_\_\_ Månad: \_\_\_\_\_

Modell vänster: \_\_\_\_\_ Serienummer: \_\_\_\_\_

Modell höger: \_\_\_\_\_ Serienummer: \_\_\_\_\_

Batteristorlek: \_\_\_\_\_

## Internationell garanti

Din hörapparat har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan

ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

### Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

## Mobiltelefon

Vissa hörapparat användare upplever brummande ljud i hörapparaterna när en mobiltelefon används. Detta tyder på att mobiltelefonen och hörapparaterna inte är kompatibla. Enligt standarden ANSI C63.19 (ANSI C63.19-2007 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids) kan kompatibiliteten mellan en viss typ av hörapparat och mobiltelefonen uppskattas genom att addera rankningen för hörapparatens immunitet med rankningen för mobiltelefonens emissioner. Om en hörapparats rankning är 2 (M2/T2) och

mobiltelefonens rankning är 3 (M3/T3) så kommer detta att resultera i ett kombinerat resultat på 5. Ett kombinerat resultat motsvarande 5 ger tillräcklig immunitet för "normal användning", ett resultat på 6 eller bättre indikerar "utmärkt funktion".

Immuniteten för den här hörapparaten är M4. Mätmetoden som används för att få fram rankningen är baserad på bästa tillgängliga informationen men det finns ingen garanti på att alla användare kommer att vara nöjda.

### VIKTIGT!

Det kan variera hur hörapparater fungerar med olika mobiltelefoner. Prova dina nya hörapparater tillsammans med din mobiltelefon så att du vet hur de fungerar ihop. Om du köper en ny mobiltelefon, säkerställ då att den fungerar med dina hörapparater före köp.

Om du behöver ytterligare vägledning, kontakta din mobiltelefonleverantör för information om trådlös kommunikation mellan mobiltelefoner och hörapparater.

## Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBμA/m vid 10 m.

Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från hörapparaterna lägre än den öönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Hörapparaterna är utformade för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Hörapparaterna innehåller en modul enligt följande specifikation:

FCC ID: U28FU2MBTE  
IC: 1350B-FU2MBTE

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-regelverket samt RSS-210 of Industry Canada.

Användande har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Mer information: [www.oticon.se](http://www.oticon.se)

Oticon deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EC.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
www.oticon.com

CE 0543 0682



151970SE / 01.15

| Översikt för hörapparaternas inställningar |                              |                           |                             |                              |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Vänster                                    |                              |                           | Höger                       |                              |  |
| <input type="checkbox"/> Ja                | <input type="checkbox"/> Nej | Volymkontroll             | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Ja                | <input type="checkbox"/> Nej | Programbyte               | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Ja                | <input type="checkbox"/> Nej | Tyst läge                 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> No  |  |
| Volymkontroll                              |                              |                           |                             |                              |  |
| <input type="checkbox"/> På                | <input type="checkbox"/> Av  | Pip vid min-/maxvolym     | <input type="checkbox"/> På | <input type="checkbox"/> Av  |  |
| <input type="checkbox"/> På                | <input type="checkbox"/> Av  | Klick vid volymjustering  | <input type="checkbox"/> På | <input type="checkbox"/> Av  |  |
| <input type="checkbox"/> På                | <input type="checkbox"/> Av  | Pip vid normal volym      | <input type="checkbox"/> På | <input type="checkbox"/> Av  |  |
| Indikeringar för batteri                   |                              |                           |                             |                              |  |
| <input type="checkbox"/> På                | <input type="checkbox"/> Av  | Varning för svagt batteri | <input type="checkbox"/> På | <input type="checkbox"/> Av  |  |

151970SE / 01.15

## People First

People First är vår ledstjärna  
som handlar om att ge människor  
kraft att kommunicera och leva aktivt



0000151970000001

**oticon**  
PEOPLE FIRST