

# Tekniskt datablad

## Charger 1.0 miniRITE R

Laddaren är avsedd för att underlätta daglig laddning av hörapparater med några få enkla steg.

### Laddning

- Ta av dig hörapparaterna och placera dem i laddaren - ingen lucka behöver öppnas.
- Hörapparaterna börjar laddas automatiskt när de placeras i laddaren och slås automatiskt på när de tas ur laddaren.
- Ladda hörapparaterna varje natt så att de alltid är fulladdade för användning på dagen.

### Tydliga indikatorer

Hörapparaternas LED-indikator underlättar avläsning av laddningsstatusen:

- Orange / Röd\* = Laddar
- Grön = Full laddning

### Kort laddningstid

Om hörapparaternas batterier är helt urladdade är normal laddningstid:

- 3 h = Full laddning
- 1 h = 50 % laddning
- 0,5 h = 25 % laddning

### Produktfakta

- Induktiv laddning
- LED-indikator för ström AV/PÅ
- Magnetisk anslutning - hörapparaterna sitter kvar i laddningsportarna
- Fast elkabel
- Gummifötter för högre stabilitet
- Mjuka och runda kanter - lätt att rengöra
- Mjuk resepåse ingår



Laddaren är tillverkad för laddning av miniRITE R. Den är baserad på induktiv teknologi och laddar hörapparaterna helt och trådlöst på tre timmar.

Tillverkad för miniRITE R  
Oticon More™  
Oticon Opn S™  
Oticon Opn Play™  
Oticon Ruby




\* Orange eller röd beroende på hörapparatsmodell.

\*\* Elkontakten varierar från land till land.



<b>Tekniska data: Laddare</b>	
Namn	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Tillverkad för/Kompatibel med	Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™ och Oticon Ruby: miniRITE R
Mått	Ø95 mm /total höjd 39 mm
Vikt	135 g
Färg	Svart
Elkontakt	USB A
Statusindikator	Laddarens LED-indikator: Indikerar laddarens AV/PÅ-status LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar laddningsläget
Hörapparaternas laddningstid	Max 3 timmar beroende på batteriets status (Temperatur: +10 °C till +35 °C) Max 4 timmar beroende på batteriets status (Temperatur: +5 °C till +10 °C and +35 °C till +40 °C)
Strömkälla	Medföljande strömförsörjningsenhet
Ingångsspänning	5 V DC
Ingångsström	< 0.2 A (laddning av två hörapparater) <10 mA viloläge (inga anslutna hörapparater)
Elkabel	Fast kabel, längd 150 cm
Anslutning till extern utrustning	När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
<b>Användningsförhållanden</b>	
Driftförhållanden	Temperatur: +5 °C till +40 °C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur: -25 °C till +70 °C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Atmosfärskt tryck	700 hPa till 1060 hPa
<b>Tekniska data: Strömförsörjningsenhet</b>	
Ingångsspänning	100 -240 V AC
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsström	1 A

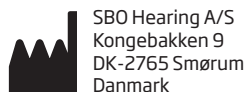

**Huvudkontor**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark