

Tekniskt datablad

Oticon SmartCharger miniRITE R

SmartCharger är utformad för användning både hemma och på resande fot. Laddarens lock fungerar som skydd och förvaring för hörapparaterna och det laddbara inbyggda litiumjonbatteriet gör att SmartCharger fungerar som en power bank när ingen annan strömförsörjning finns att tillgå.

Laddning

- Ta av dig hörapparaterna och placera dem i laddaren.
- Hörapparaterna börjar laddas automatiskt när de placeras i laddaren och slås automatiskt på när de tas ur laddaren.
- Ladda hörapparaterna varje natt så att de alltid är fulladdade för användning på dagen.

Lätt att läsa av

Hörapparaternas LED-indikator visar laddningsstatus:

- Orange = Laddar
- Grön = Fulladdad

Kort laddningstid

Om hörapparaternas batterier är helt urladdade är normal laddningstid:

- 3 h = Full laddning
- 1 h = 50 % laddning
- 0,5 h = 25 % laddning

Produktfakta

- Induktiv laddning
- LED-indikator för laddning och batterinivå
- Magnetisk anslutning - hörapparaterna sitter kvar i laddningsportarna
- Borttagbar laddkabel
- Gummifötter för ökad stabilitet
- Mjuka och runda kanter - lätt att rengöra



Oticon SmartCharger är utformad för att ladda miniRITE R, antingen hemma ansluten till elnätet eller på resan genom att använda det inbyggda laddbara litiumjonbatteriet som power bank.

Designad för Oticon More™ miniRITE R

USB-sladd
Anslut till USB-port



Laddningsportar
För hörapparater vid laddning



Strömadapter*




Batteriindikator
Visar laddningsstatus för power bank samt batterinivån i power bank

*Strömadaptern varierar från land till land



Tekniska data: Laddare	
Namn	Oticon SmartCharger miniRITE R
Tillverkad för/Kompatibel med	Oticon More miniRITE R
Mått	Höjd 76,4 mm/Bredd 47,2 mm/längd 95 mm
Vikt	180 g
Färg	Svart
Elkontakt	USB A
Statusindikator	LED-lampa på laddaren när den är ansluten till en strömfkälla: Indikerar laddningsstatus för power bank. LED-lampa på laddaren när den inte är ansluten till en strömfkälla: Indikerar batterinivån på power bank. LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar laddningsläge
Hörapparaternas laddningstid	Max 3 timmar beroende på batteriets laddningsnivå Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F) Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +5 °C till +10 °C (+41 °F till +50 °F) och +35 °C till +38 °C (+95 °F till +100 °F)
Laddningstid för power bank-batteri	Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)
Strömkälla	Medföljande strömförsörjningsenhet
Ingångsspänning	5 V DC
Ingångsström	Max 1A
Sladd	Avtagbar sladd, längd 150 cm
Anslutning till extern utrustning	När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
Användningsförhållanden	
Driftförhållanden	Temperatur: +5 °C till +38 °C och +40 °F till +100 °F) Luftfuktighet: 15 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande
Förvaring och transport	Temperatur: -20 °C till +60 °C och -4°F till +140 °F) Luftfuktighet: 15 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck	700 hPa till 1060 hPa
Tekniska data: Strömadapter	
Ingångsspänning	100 -240 V AC
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsström	1 A

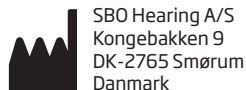

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark

Huvudkontor
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark