

Tekniskt datablad

Oticon SmartCharger miniBTE R

SmartCharger är en portabel laddare utformad för användning både hemma, under resa eller då du är på språng. Laddarens lock fungerar som skydd och förvaring för hörapparaterna och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet gör att den fungerar som en powerbank när ingen annan strömförsörjning finns.

Laddning

- Ta av dig hörapparaterna och sätt dem i laddaren.
- Hörapparaterna börjar laddas automatiskt när de placeras i laddaren och slås automatiskt på när de tas ur.
- Ladda hörapparaterna varje natt så att de alltid är fulladdade för användning dagtid.

Tydliga indikatorer

Hörapparaternas LED-indikator underlättar avläsning av laddningsstatus:

- Orange = Laddar
- Grön = Helt laddad

Kort laddningstid

Om hörapparaternas batterier är helt urladdade är normal laddningstid:

- 3,5 h = Full laddning
- 1 h = 40% laddning
- 0,5 h = 20% laddning

Produktfakta

- Induktiv laddningsenhet
- LED-indikator för laddningsstatus och batterinivå
- Magnetisk anslutning - hörapparaterna sitter kvar i laddningsportarna
- Utbytbar kabel för strömkälla
- Gummiskydd undertill för bättre stabilitet
- Mjuka och runda kanter - lätt att rengöra



SmartCharger är avsedd för laddning av miniBTE R, antingen i hemmet ansluten till elnätet eller då du är på språng. Laddaren har ett inbyggt litiumjonbatteri viket gör att den kan användas som powerbank.

Avsedd för miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

Kabel med USB-port
För strömkälla



Laddningsportar
För laddning av hörapparater




Strömadapter*



LED-Indikator
Indikerar laddningsstatus
samt batterinivå för powerbank

*Typ av strömadapter samt elkontakt varierar från land till land

Teknisk data: Laddare (portabel)	
Namn	Oticon SmartCharger miniBTE R
Tillverkad för/Kompatibel med	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX miniBTE R
Mått	Höjd 76,4 mm/Bredd 47,2 mm/längd 95 mm
Vikt	180 g
Färg	Svart med grå topplatta
Strömadapter	USB A
LED indikator	LED-indikatorn på laddaren när den är ansluten till strömförsörjning: Indikerar laddningsstatus LED-indikator på laddaren när den är frånkopplad strömförsörjning: Indikerar batterinivån LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar status på batteriets kapacitet
Hörapparaternas laddningstid	Max 3,5 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F) Max 5 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +5 °C till +10 °C (+41 °F till +50 °F) och +35 °C till +38 °C (+95 °F till +100 °F)
Laddningstid för batteri (Power bank)	Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)
Strömkälla	Medföljande strömadapter
Ingångsspänning	5 V DC
Ingångsström	Max 1A
Kabel	Avtagbar/utbytbar sladd, längd 150 cm
Anslutning till extern utrustning	När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
Användningsförhållanden	
Driftförhållanden	Temperatur: +5 °C till +38 °C (+40 °F till +100 °F) Luftfuktighet: 5 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande
Förvarning och transport	Temperatur: -20 °C till +60 °C (-4°F till +140 °F) Luftfuktighet: 5 - 93% relativ fuktighet, ej kondenserande
Atmosfäriskt tryck	700 hPa till 1060 hPa
Tekniska data: Strömadapter	
Ingångsspänning	100 -240 V AC
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsström	1 A

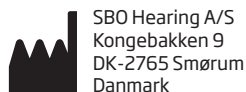

Huvudkontor
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark