

BRUKSANVISNING

BTE13 SP



Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | Komma igång | Hantering | Alternativ | Varningar | Övrig information |

Bruksanvisningen har en innehållsförteckning med sex avsnitt som gör det lättare att hitta det du söker.

Avsedd användning

Hörapparaterna är avsedda för att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed kompensera din hörselnedsättning. De är avsedda för spädbarn, barn och vuxna med grav till svår hörselnedsättning.

VIKTIGT!

Hörapparaternas förstärkning anpassades individuellt till din hörsel i samband med den anpassning din audionom utförde.



Innehållsförteckning

Om	Produktöversikt	6
	Identifiera vänster och höger hörapparat	8
	Batteristorlek 13	9
Komma igång	Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna	10
	Dags att byta batteri	11
	Så här byter du batteri	12
Hantering	Skötsel av dina hörapparater	14
	Slangfäste med individuell insats	16
	Sätta hörapparater med individuell insats på plats	17
	Sätta hörapparater med individuell insats och SmartFit™ Trainer på plats	18
	Rengöra insatsen	20
	Tvätta insatsen	21
Alternativ	Tillvalsfunktioner och tillbehör	22
	”Tyst läge” (tillval)	23
	Byta program (tillval)	24

	Justera volym	26
	Volymkontroll och ConnectLine (tillval)	28
	Petsäkert batterifack (tillval)	31
	Trådlösa tillbehör (tillval)	33
	Ljudkontakt - DAI (tillval)	34
	FM (tillval)	36
	Övriga alternativ (tillval)	38
	Tabell för ljudsignaler och visuell indikator (LED)	40
Varningar	Varningar	42
Övrig information	Felsökningsguide	48
	Vattenresistens (IP58)	50
	Hanteringsanvisning	51
	Garantibevis	52
	Internationell garanti	53
	Mobiltelefon	54
	Teknisk information	56


Produktöversikt

Hörapparatens delar

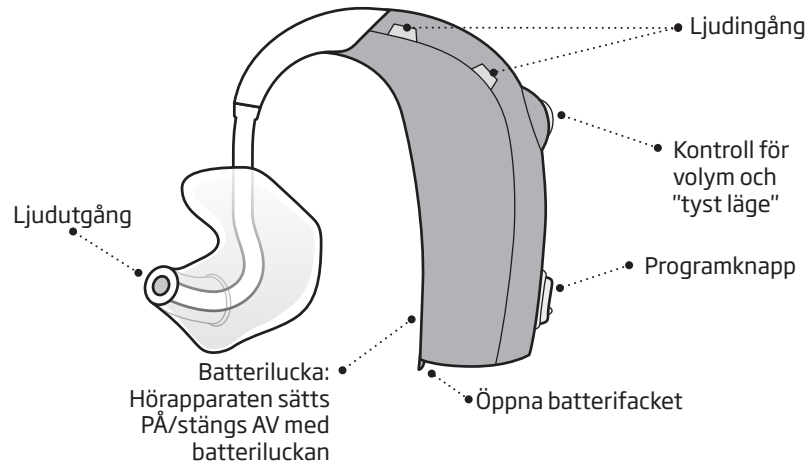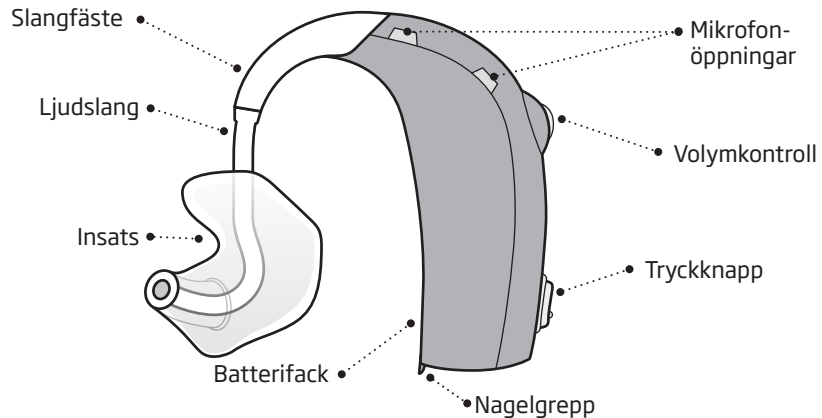


Identifiera vänster och höger hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara programmerade på olika sätt.

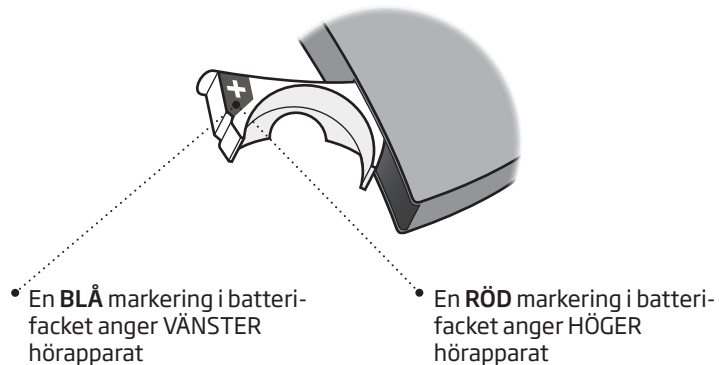


Batteristorlek 13

Dina hörapparater är känsliga elektroniska enheter som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ hörapparaterna genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Så här byter du batteri".

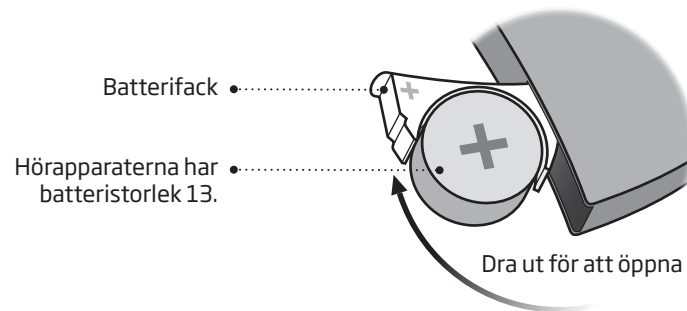


Så här byter du batteri

1. Ta ut

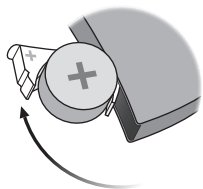


Öppna batterifacket helt. Ta ut det gamla batteriet.

2. Ta fram

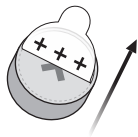

Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.


3. Sätt in

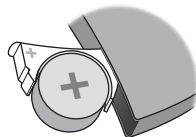

Sätt in det nya batteriet i batterifacket.

Sätt in batteriet ovanifrån, INTE från sidan. Se till att +sidan är vänd uppåt


4. Stäng

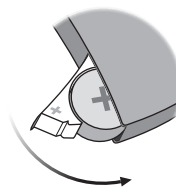

Stäng batterifacket. Hörapparaten spelar en liten melodi för att indikera att den är PÅ.

Håll insatsen nära örat för att höra melodin.

Tips

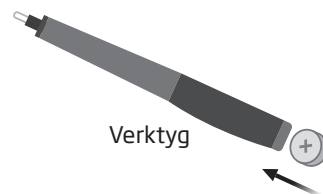


Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta ut och sätta i batterier.

Skötsel av dina hörapparater

När du hanterar hörapparaterna bör du hålla dig över något mjukt så de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengöra mikrofonöppningarna

Borsta försiktigt bort allt synligt skräp från mikrofonöppningarna. Borsta ytan varsamt. Tryck inte in borsten i öppningarna.

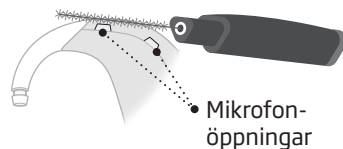


VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparaterna. De får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Verktyget

Verktyget har en borste och en ögla som används för att rengöra insatsen från vax. Du kan köpa nya borstar hos din audionom eller i Oticons webbshop: <http://shop.oticon.se>.

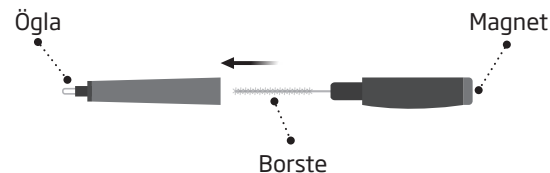


VIKTIGT!

Verktyget har en inbyggd magnet. Håll verktyget på minst 30 cm avstånd från kreditkort och andra föremål som är känsliga för magnetfält.

Slangfäste med individuell insats

Insatsen är individuellt anpassad för dig och ditt öra.

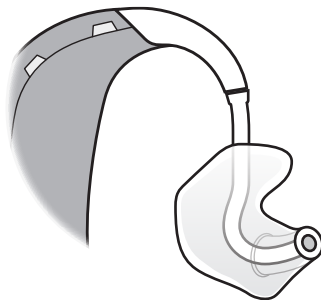

Sätta hörapparater med individuell insats på plats

Steg 1



Dra försiktigt örat uppåt och för in insatsen i samma riktning som hörselgången med en aning vridande rörelse.

Steg 2



Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Sätta hörapparater med individuell insats och SmartFit™ Trainer på plats

Dina hörapparater kan ha SmartFit™ Trainer, ett hjälpmedel för att placera insatsen korrekt.

LED-indikatorn kommer lysa i upp till 20 sekunder när systemet kontrollerar insatsens placering. Om insatsen INTE placerats korrekt blinkar LED-indikatorn snabbt.


Om detta sker, stäng av och sätt på hörapparaten igen samt försök placera insatsen på nytt.

Om det inte går att placera insatsen utan att indikatorn blinkar kan det bero på att insatsen behöver bytas ut.

Din audionom kan aktivera eller inaktivera SmartFit™ Trainer.

Rengöra insatsen

Individuella insatser ska rengöras regelbundet. Använd en mjuk trasa för att torka av insatsens utsida. Använd verktygets ögla för att rengöra öppningen.

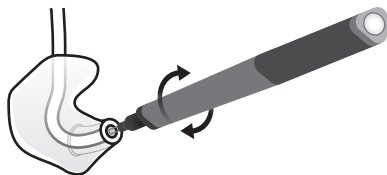

Byta ljudslang

Ljudslangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel. Fråga din audionom om du tycker det verkar svårt.

Tvätta insatsen

Steg 1




Se till att du vet vilken insats som hör till vilken hörapparat innan du tar av dem från hörapparaterna.

Steg 2



Koppla bort slangen och insatsen från slangfästet. Ta ett stadigt grepp om slangfästet när ljudslangen dras ut. Annars kan hörapparatens skadas.

Steg 3

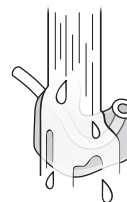

Tvätta insatsen och ljudslangen med vatten och mild tvål. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka delarna på hörapparatens.

Tillvalsfunktioner och tillbehör

De funktioner och tillbehör som beskrivs på följande sidor är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever att det är besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

Skriv ner de lyssningssituationer som du tycker är besvärliga.

☐ "Tyst läge" (tillval)

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna. Om LED-indikatorn är aktiverad kommer den indikera aktuellt program.




Håll in tryckknappen (tills mikrofonen stängs av) för att aktivera "tyst läge". Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström när "tyst läge" är aktiverat.

☐ Byta program (tillval)

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom. När FM, DAI eller Streamer används, läggs ytterligare två program till automatiskt.

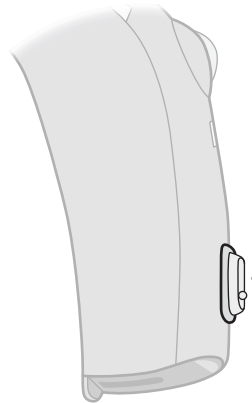

Tryck på knappen för att byta program.

Om du har två hörapparater, går HÖGER hörapparat framåt från t.ex. program 1 till 2, medan VÄNSTER hörapparat går bakåt från t.ex. program 4 till 3.

Fylls i av din audionom

Program	Ljud du hör efter aktivering	Lämpliga användningstillfällen
1	 "1 pipsignal"	
2	 "2 pipsignaler"	
3	 "3 pipsignaler"	
4	 "4 pipsignaler"	

Programbyte:

☐ VÄNSTER

☐ HÖGER

☐ Kort tryck


☐ Långt tryck

Obs, LED-lampan (om aktiverad) anger även aktivt program.

Justera volym

Om volymkontrollen är aktiverad kan du justera volymen när du önskar, t.ex. i olika lyssningssituationer.

Volymkontrollen har fyra volymnivåer och ett "klickläge".

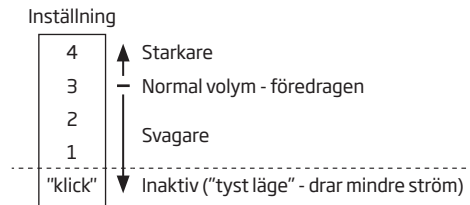

Normal volym är 3. När hörapparaten ställs in på normal volym hörs två korta pipsignaler.



Använd volymkontrollen för att aktivera "tyst läge" genom att vrida ner volymen förbi 1 tills det hörs ett klick. Du avaktiverar "tyst läge" genom att vrida upp volymen igen.

VIKTIGT!

Använd inte volymkontrollens klickläge för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström när "tyst läge" är aktiverat.

☐ **Volymkontroll och ConnectLine** (tillval)

Hörapparaternas volymkontroller måste var inställd mellan 1 och 4 då du använder Oticon Streamer som fjärrkontroll eller för telefonsamtal och överföring av ljud från olika ljudkällor. Ljudöverföring kan inte göras när volymkontrollen är i "klickläget".

Om du använder Streamern för att justera volymen i dina hörapparater, kommer den faktiska volymen inte stämma med indikeringarna på volymkontrollen. Om du vrider volymkontrollen till "klickläget" och sedan tillbaka till 1-4-intervallet eller stänger AV och sätter PÅ hörapparaterna så återställs volymen till den nivå som indikeras på volymkontrollen.


När du justerar volymen till önskad nivå blinkar LED-indikatorn och två pipsignaler hörs (om denna funktion är aktiverad).

Vid ljudöverföring justeras volymen med Streamern oberoende av volymkontrollens inställning.


Snabbåterställning

Om du vill återgå till hörapparaternas standardinställningar, som din audionom programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckorna.

Öppna

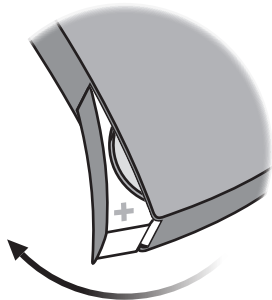

Stäng

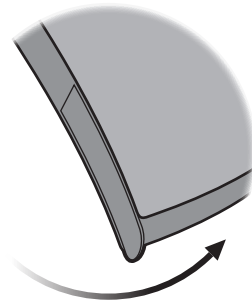

Observera att volyminställningen inte ändras vid snabbåterställning.

☐ Petsäkert batterifack (tillval)


För att hålla batteriet utom räckhåll för spädbarn, småbarn och personer med kognitiva funktionshinder, bör ett petsäkert batterifack användas. Använd en liten skruvmejsel för att låsa och låsa upp batterifacket.

VIKTIGT!

Använd inte våld för att öppna ett låst batterifack. Tryck inte upp batteriluckan förbi fullt öppet läge. Var noga med att sätta i batteriet på rätt sätt.


Kontakta din audionom om du misstänker att låsfunktionen inte fungerar korrekt.

Låsa upp batterifacket

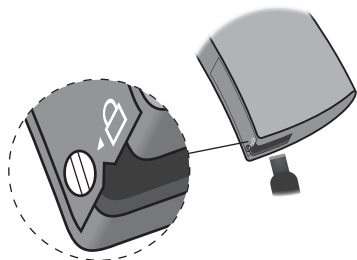

Använd en skruvmejsel för att vrida skruven till upplåst läge (vertikalt). Sätt in skruvmejseln i skåran nedtill på hörapparaten och tryck upp luckan.

Låsa batterifacket

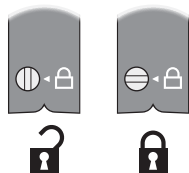

Kontrollera att batteriluckan är ordentligt stängd. Vrid skruven till låst läge (horisontellt).

☐ Trådlösa tillbehör (tillval)

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen din vardag.

ConnectLine

ConnectLine är en serie produkter som ger dig tillgång till ljudet från t.ex. TV, mobiltelefon, dator eller extern mikrofon. Du kan höra ljudet trådlöst eller via sladd, i dina hörapparater.

Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du byta program, justera volymen eller aktivera "tyst läge".

☐ Ljudkontakt - DAI (tillval)


Med DAI kan dina hörapparater ta emot ljud via sladd, direkt från externa ljudkällor som t.ex. TV, radio, musikspelare osv. En DAI-adapter behövs då, vilken monteras på dina hörapparater.

För mer information om dessa alternativ, tala med din audionom eller besök **www.oticon.se**.

VIKTIGT!


När DAI-adaptern är ansluten till en elnätsansluten ljudkälla, måste denna efterleva EN 60950-1, EN 60065 eller motsvarande säkerhetsstandarder. Den externa signalkällan avgör säkerheten för hörapparater med DAI.

Anslutning av DAI-adaptern

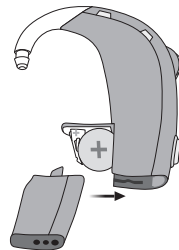

Öppna batteriluckan och skjut in DAI-adaptern i skåran på botten av hörapparaten.

Sätt därefter in ljudsladden i adaptern.

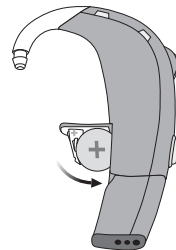


När du kopplar på DAI-adaptern kommer hörapparaten automatiskt att kombinera ljudet från hörapparatsens mikrofon och ljudet via DAI-anslutningen. Om du vill stänga av hörapparatsens mikrofonljud och enbart lyssna via DAI-adaptern kan du gå till nästa program genom att trycka på tryckknappen.


☐ **FM** (tillval)

Dina hörapparater kan anslutas till ett FM-system som gör det möjligt att höra tal eller andra önskade ljud direkt i hörapparaterna, utan störande bakgrundsljud och buller.

Ansluta en FM-mottagare

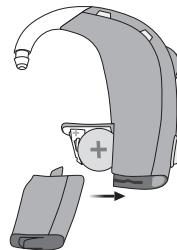

Börja med att öppna batteriluckan. För in FM-mottagaren i hörapparatens fäste nedtill.

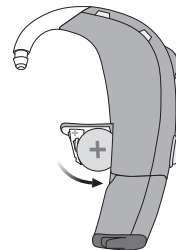

När FM-mottagaren är ansluten, växlar hörapparaten automatiskt till ett program som tar emot ljudsignaler från en extern trådlös FM-sändare.

☐ **Övriga alternativ** (tillval)



Telespole

Telespolen hjälper dig att höra bättre när du använder en telefon med en inbyggd teleslinga eller i lokaler med teleslinga, t.ex. teatrar och föreläsningssalar. Denna eller en liknande symbol visas där en teleslinga är installerad.



Autotelefon

Funktionen Autotelefon kan automatiskt aktivera ett telefonprogram i hörapparaten, om din telefon har en dedikerad magnet. Magneten måste placeras bredvid telefonens ljudutgång.

Tabell för ljudsignaler och visuell indikator (LED)

Program	Ljudsignaler	Indikator (LED)
Program 1		
Program 2	 	
Program 3	  	
Program 4	   	
FM eller DAI + mikrofon	 	
FM eller DAI	 	

Volym	Ljudsignaler	Indikator (LED)
Normal volym	 	
Maxvolym	  	
Lägsta volym	  	

Varningar	Ljudsignaler	Indikator(LED)
Varning för svagt batteri	 	
Batteriet är urladdat	   	

SmartFit™ Trainer	Ljudsignaler	Indikator (LED)
Korrekt placerad insats		
Placera om insatsen		

Varningar

Du bör läsa följande allmänna varningar innan du använder dina hörapparater för din personliga säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning.

Tänk på att hörapparaterna inte återställer din normala hörsel och att de varken förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning som beror på organiska förhållanden. Dessutom måste hörapparaterna oftast användas regelbundet för att användaren ska få full nytta av dem.

Rådfråga din audionom om dina hörapparater inte fungerar som förväntat.

Använda hörapparaterna

- Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.
- Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom ett felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

Kvävningsrisk & risk för att svälja batterier

- Hörapparater, deras tillbehör samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

- Det har hänt att batterier har förväxlats med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.
- De flesta hörapparater kan levereras med petsäkert batterifack som tillval. Detta rekommenderas om hörapparater ska användas av ett barn eller av en person med kognitivt funktionshinder.
- Barn yngre än 36 månader måste alltid ha petsäkert batterifack. Detta alternativ finns för BTE, miniBTE, RITE och miniRITE.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Batterianvändning

- Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.
- Försök aldrig ladda upp batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Varningar

Bristfällig funktion

- Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

Aktiva implantat

- Iakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implantaterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner och magneter.

- Dina hörapparater har trådlös överföring. Se till att du alltid har minst 15 cm mellan dina hörapparater och ditt implantat och bär dem inte i bröstfickan.
- När hörapparaterna placerats korrekt i örat, se till att implantatet är på minst 15 cm avstånd.
- Magneten till din fasta telefon (om du använder den funktionen) samt verktyget (som har en inbyggd magnet) bör alltid hållas på minst 30 cm avstånd från implantatet.

- Om du har ett aktivt hjärtimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Explosionsrisk

- Strömkällan i dina hörapparater alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand, vid normal användning. Hörapparaterna har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder dina hörapparater i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

- Använd inte dina hörapparater vid exempelvis röntgen, datortomografi, elektroterapi eller medicinska ingrepp, eftersom hörapparaterna kan skadas av denna typ av utrustning.

Varningar

Undvik värme och kemikalier

- Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.
- Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.
- Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och likande produkter kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter hörapparaterna på plats igen.

Power-hörapparater

- Detta är Power-hörapparater och extra varsamhet bör iakttas vid anpassning och användning av hörapparater för vilka max. ljudstyrka överstiger 132 dB SPL (IEC 711) eftersom de kan skada en användares återstående hörsel.

Eventuella biverkningar

- Hörapparater, individuella insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.
- Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan ovanlig åkomma.

Kontakta en läkare vid eventuella problem.

Störningar

- Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Trots detta kan störningar uppstå mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, andra personers elektroniska utrustning eller larmsystem i butiker). Om detta inträffar, öka avståndet mellan dina hörapparater och den störande enheten.

Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet slut	Byt ut batteriet
	Igentäppt ljudslang eller insats	Rengör individuell insats
Tillfälligt eller svagt ljud	Igentäppt ljudutgång	Rengör individuell insats
	Fukt	Torka av batteriet med en torr trasa och/eller torka av ljudslangen
	Batteriet slut	Byt ut batteriet
	Igensatt vaxfilter i slangfästet	Kontakta din audionom
Tjutande ljud	Hörapparatens insats är inte rätt placerad i örat	Sätt tillbaka insatsen
	Vax i hörselgången	Låt läkare undersöka örat

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vattenresistens (IP58)

Dina hörapparater är vattenresistenta, vilket innebär att de är utformade för att klara de flesta situationer i vardagen. Tack vare detta behöver du inte oroa dig för svett eller för att bli blöt i regnet. Om en hörapparat kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, följ dessa riktlinjer:

1. Torka försiktigt bort allt vatten
2. Öppna batterifacket, ta ut batteriet och torka försiktigt bort eventuellt vatten i batterifacket.
3. Låt hörapparaten torka med batterifacket öppet i cirka 30 minuter.
4. Sätt i ett nytt batteri.

VIKTIGT!

Bär inte hörapparater när du t.ex. duschar eller deltar i vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller andra vätskor.

Hanteringsanvisning

Drift	Temperatur: +1°C till +40°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Temperatur: -25°C till +60°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens

Garantibevis

Användare: _____

Hörselklinik/audionom: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell vänster: _____ Serienummer: _____

Modell höger: _____ Serienummer: _____

Batteristorlek: _____

Internationell garanti

Din hörapparat har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan ha en garanti som

sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Mobiltelefon

Vissa hörapparat användare upplever brummande ljud i hörapparaterna när en mobiltelefon används. Detta tyder på att mobiltelefonen och hörapparaterna inte är kompatibla.

Standarden ANSI C63.19 bestämmer förutsägbarheten för kompatibilitet mellan en specifik hörapparat och en mobiltelefon genom att addera det numeriska värdet på rankningen av hörapparatsens immunitet med det numeriska värdet på rankningen av mobiltelefonens emissioner. En summa på 4 skulle indikera att kombinationen av den trådlösa enheten och hörapparaten är användbar; en kombinerad rankning som motsvarar minst 5 skulle tillhandahålla normal användning; en

kombinerad rankning på minst 6 skulle indikera en utmärkt prestanda.

Alla hörapparater har akustisk koppling, men det är endast de större hörapparaterna som har det fysiska utrymmet för telespolekoppling (induktiv). Dessa två typer av koppling har olika rankningsskalor (M1-M4 för akustisk koppling respektive T1-T4 för telespolekoppling) och därmed är båda rankningarna relevanta när man förutser kompatibiliteten för en specifik hörapparat.

För en hörapparat med både akustisk koppling och telespolekoppling med en rankning på M4/T2 och med en telefonrankning på M3/T3), blir den

kombinerade rankningen 7 (M4 + M3) för den akustiska kopplingen och 5 (T2 + T3) för telespolekopplingen. Enligt riktlinjerna ovan är alltså båda typer av koppling acceptabla, och den akustiska kopplingen indikerar en utmärkt prestanda, medan telespolekopplingen indikerar normal användning.

Mätmetoden som används för att få fram rankningen är baserad på bästa tillgängliga informationen men det finns ingen garanti på att alla användare kommer att vara nöjda.

Immuniteten för den här hörapparaten är M4/T4.

VIKTIGT!

Det kan variera hur hörapparater fungerar med olika mobiltelefoner. Prova dina nya hörapparater tillsammans med din mobiltelefon så att du vet hur de fungerar ihop. Om du köper en ny mobiltelefon, säkerställ då att den fungerar med dina hörapparater före köp.

Om du behöver ytterligare vägledning, kontakta din mobiltelefonleverantör för information om trådlös kommunikation mellan mobiltelefoner och hörapparater.

Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBμA/m vid 10 m.

Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från hörapparaterna lägre än den öönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Hörapparaterna är utformade för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

Ytterligare information finns i produktinformationsbladet på www.oticon.se.

Hörapparaterna innehåller en modul enligt följande specifikation:

FCC ID: U28FU2SP
IC: 1350B-FU2SP

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-regelverket samt RSS-210 of Industry Canada.

Användande har följande två förbehåll:
1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.

2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka öönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Mer information: www.oticon.se

Oticon deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EC.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.



Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.com

161863SE / 10.15

CE 0543 0682



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



E2831

IP58

Översikt för hörapparaternas inställningar					
Vänster			Höger		
☐ Ja	☐ Nej	Volymkontroll	☐ Ja	☐ Nej	
☐ Ja	☐ Nej	Programbyte	☐ Ja	☐ Nej	
☐ Ja	☐ Nej	Tyst läge	☐ Ja	☐ Nej	
Volymkontroll					
☐ På	☐ Av	Pip vid min-/maxvolym	☐ På	☐ Av	
☐ På	☐ Av	Klick vid volymjustering	☐ På	☐ Av	
☐ På	☐ Av	Pip vid normal volym	☐ På	☐ Av	
Indikeringar för batteri					
☐ På	☐ Av	Varning för svagt batteri	☐ På	☐ Av	
☐ På	☐ Av	Byt batteri	☐ På	☐ Av	
☐ På	☐ Av	Återinför insats	☐ På	☐ Av	

161863SE / 10.15

People First

People First är vår ledstjärna
som handlar om att ge människor
kraft att kommunicera och leva aktivt



0000161863000001

oticon
PEOPLE FIRST