

# Kullanım kılavuzu

miniRITE R

Oticon More™



Made for  
iPhone | iPad | iPod

**oticon**  
life-changing technology

## Modele genel bakış

Bu kitapçık aşağıdaki işitme cihazı modellerinde Oticon More™ ürün ailesi için geçerlidir:

### FW 1

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon More 1 miniRITE R | 05714464006465 |
| <input type="checkbox"/> Oticon More 2 miniRITE R | 05714464006472 |
| <input type="checkbox"/> Oticon More 3 miniRITE R | 05714464006489 |

Üstteki modellerde aşağıdaki hoparlörler kullanılabilir:

- ☐ Hoparlör 60
- ☐ Hoparlör 85
- ☐ Hoparlör 100 (Çok güçlü cihaz)
- ☐ Power kalıp hoparlör 100 (Çok güçlü cihaz)
- ☐ Power kalıp hoparlör 105 (Çok güçlü cihaz)

## Bu kitapıa giriş

Bu kitapık, yeni işitme cihazınızın kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. Lütfen **Uyarılar** bölümünü de dahil ederek, bu kitapığı dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bu, işitme cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

İşitme uzmanı (işitme cihazı uzmanı, odyolog, odyometrist, KBB doktoru ve işitme cihazı dağıtıcısı), işitme duyusunun profesyonel olarak değerlendirilmesinde, işitme cihazlarının seçilmesinde, uygulanmasında ve dağıtılmasında ve işitme kaybı olan kişilerin rehabilitasyonu konusunda yetkinliği kanıtlanmış ve bu konularda eğitim almış kişidir.

İşitme uzmanının eğitimi, ulusal veya bölgesel düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir.

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapık, farklı bölümlerinde gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

| **Hakkında** | Başlangıç | Kullanım | Seçenekler | Tinnitus | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

## Kullanım amacı

|                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kullanım amacı          | Bu işitme cihazı sesi yükseltmek ve kulağa iletmek için tasarlanmıştır.                                                                                                                                    |
| Kullanım Endikasyonları | Çift taraflı veya tek taraflı bireysel frekans konfigürasyonu ile çok hafif'ten (16 dB HL*) ileri (95 dB HL*) derecede işitme kaybına kadar olan sensörinöral, iletim veya mikst tipi işitme bozuklukları. |
| Hedef kullanıcı         | İşitme cihazı kullanan işitme kayıplı kişi ve bu kişilerle ilgilenen kişiler. İşitme cihazının ayarlanmasından sorumlu olan işitme uzmanı.                                                                 |
| Hedef kullanıcı grubu   | Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar.                                                                                                                                                                    |
| Kullanım ortamı         | Kapalı ve açık ortamlar.                                                                                                                                                                                   |
| Kontraendikasyonlar     | 36 aydan küçük bebekler için uygun değildir. Aktif implant kullanıcıları, işitme cihazı kullanırken özel bir özen göstermelidir. Daha fazla bilgi için <b>Uyarılar</b> bölümünü okuyun.                    |
| Klinik yararlar         | İşitme cihazı, yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla daha iyi konuşma anlayışı sağlayarak, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.                                                                  |

\*Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği asha.org tarafından, 0.5, 1 ve 2 kHz saf ses ortalaması kullanılarak belirlendiği gibidir.

### ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında İşitme Uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme kapasitenize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

## Özet

### Şarj

İşitme cihazını her gece şarj ettiğinizden emin olun. İşitme cihazındaki LED ışık işitme cihazı şarj olurken **TURUNCU**, tamamen şarj olduğunda **YEŞİL** renge dönecektir.

İşitme cihazının tamamen şarj olması üç saat sürer.

### AÇ/KAPAT

İşitme cihazını şarj cihazından çıkardığınızda AÇIK konuma gelir.  
İşitme cihazını şarj cihazına yerleştirdiğinizde KAPALI konuma gelir.

İşitme cihazı şarj bağlantı noktasına yerleştirildiğinde şarj cihazını her zaman bir güç kaynağına bağlı durumda tuttuğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının KAPALI konuma alınmasıyla işitme cihazı AÇILACAK ve pili kullanmaya başlayacaktır.

## İçindekiler tablosu

### Hakkında

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| İşitme cihazınız, hoparlörünüz ve kulaklığınız | 12 |
| İşitme cihazı                                  | 14 |

### Başlangıç


|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Şarj süresi                                             | 16 |
| Pil performansı                                         | 17 |
| Şarj cihazını kullanarak işitme cihazını AÇMA/KAPATMA   | 18 |
| Basma düğmesini kullanarak işitme cihazını AÇMA/KAPATMA | 19 |
| Pil zayıf bildirimi                                     | 20 |
| Sol ve sağ işitme cihazını tanımlama                    | 21 |
| İşitme cihazını takma                                   | 22 |

# İçindekiler tablosu

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Kullanım</b>                                     |    |
| Temizleme                                           | 24 |
| Standart kulaklıkları değiştirme                    | 26 |
| ProWax miniFit filtresi                             | 28 |
| Özel kulaklıkları temizleme                         | 30 |
| ProWax filtresini değiştirme                        | 31 |
| İşitme cihazını saklama                             | 32 |
| Uçak modu                                           | 34 |
| <b>Seçenekler</b>                                   |    |
| İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar                 | 36 |
| Ses seviyesini değiştirme                           | 37 |
| Program değiştirme                                  | 38 |
| İşitme cihazınızı sessize alma                      | 40 |
| İşitme cihazının iPhone, iPad ve iPod ile kullanımı | 41 |
| İşitme cihazının Android cihazlar ile kullanımı     | 42 |
| Eşleştirme ve uyumluluk                             | 43 |
| Kablosuz aksesuarlar ve diğer seçenekler            | 44 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Tinnitus</b>                          |    |
| Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı)    | 46 |
| Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarları | 48 |
| Kullanım süresi sınırlaması              | 50 |
| Tinnitus SoundSupport uyarıları          | 53 |
| <b>Uyarılar</b>                          |    |
| Genel uyarılar                           | 54 |
| <b>Daha fazla bilgi</b>                  |    |
| Sorun Giderme                            | 60 |
| Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)         | 64 |
| Kullanım koşulları                       | 65 |
| Teknik bilgi                             | 66 |
| Garanti                                  | 73 |
| Kişisel işitme cihazı ayarlarınız        | 74 |
| Ses ve LED ışık göstergeleri             | 77 |

## İşitme cihazınız, hoparlörünüz ve kulaklığınız

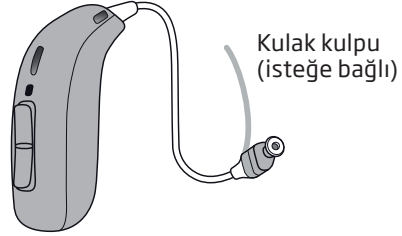

İşitme cihazı aşağıdaki hoparlörlerden birini kullanır:

**Standart hoparlörler**

60


85

100

**Power flex kalıp hoparlörler**

100

105

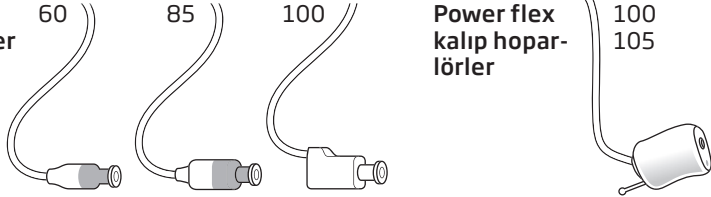

Hoparlörler aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:

### Standart kulaklıklar



☐ OpenBass kubbe



☐ Bas kubbe, çift havalandırma deliği



☐ Power kubbe



☐ Grip Tip

Küçük ve büyük, sol ve sağ, havalandırma delikli veya deliksiz olarak kullanılabilir.

### Özel kulaklıklar



☐ Mikro kalıp



☐ Lite Uç




☐ VarioTherm® mikro kalıp



☐ VarioTherm® Lite Uç

VarioTherm®, Dreve'nin tescilli ticari markasıdır.

### Kubbe boyutları

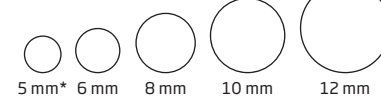

\*Sadece hoparlör 60 için OpenBass kubbe olarak

### Not

Kubbenin değiştirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için **Standart kulaklıkları değiştirme** bölümüne bakın.

# İşitme cihazı

## Nedir ve ne yapar





## Şarj süresi

İlk kullanımdan önce işitme cihazınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun.

İşitme cihazınızı her gece şarj edin. Bu sayede güne tam şarjlı bir işitme cihazı ile başlayabilirsiniz. İşitme cihazınızın pil şarjı tamamen tükendiye, normal şarj süresi:

| 3 saat        | 1 saat     | 0,5 saat   |
|---------------|------------|------------|
| Tam şarj olur | %50 şarjlı | %25 şarjlı |

Pil tamamen şarj olduğunda, şarj işlemi otomatik olarak durur. Kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazını şarj cihazında bırakın ve şarj cihazını her zaman bir güç kaynağına bağlı durumda tutmayı unutmayın.

Şarj süresinin, kalan pil kapasitesine göre ve sol / sağ işitme cihazı arasında değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Şarj cihazınızın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için şarj cihazı Kullanım kılavuzuna bakın.

## Pil performansı

Günlük pil performansı, kullanım tarzınıza ve işitme cihazı ayarlarına göre değişiklik gösterir.

Örneğin TV, cep telefonu veya bağlantı cihazlarından ses akışı günlük pil performansını etkileyebilir.

İşitme cihazınızın pili biterse, şarj cihazına yerleştirerek şarj ettiğinizden emin olun. İşitme cihazının yeniden başlatılmasının kullanım süresini uzatmayacağını unutmayın.

En iyi şarj koşulları için oda sıcaklığının +10°C ile +35°C (50°F ile 95°F) aralığından olduğundan emin olun.

İşitme cihazınızın şarjı gün boyu yetmiyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

## Şarj cihazını kullanarak işitme cihazını AÇMA/ KAPATMA

İşitme cihazınız şarj cihazından çıkarıldığında otomatik olarak AÇIK konuma gelir.

İşitme cihazı LED ışığı yaklaşık altı saniye sonra **YEŞİL** renge dönerek, kullanım için hazır olduğunu doğrular. İşitme cihazınızın ayarlarına bağlı olarak bir açılış müziği de duyabilirsiniz.


İşitme cihazınız şarj cihazına yerleştirildiğinde otomatik olarak KAPALI konuma geçer ve şarj olmaya başlar. İşitme cihazı LED ışığı **TURUNCU** renge döner.

### ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazı şarj bağlantı noktasına yerleştirildiğinde, şarj cihazını her zaman bir güç kaynağına bağlı durumda tuttuğunuzdan emin olun. Şarj cihazının KAPALI konuma alınmasıyla işitme cihazı AÇILACAK ve pili kullanmaya başlayacaktır.

## Basma düğmesini kullanarak işitme cihazını AÇMA/ KAPATMA

İşitme cihazı Basma düğmesi kullanılarak AÇIK/ KAPALI konuma getirilebilir.

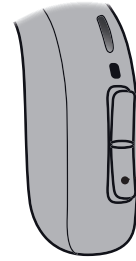

### AÇMAK için

Basma düğmesinin alt kısmını yaklaşık iki saniye basılı tutun. Düğmeyi bırakın ve işitme cihazı LED ışığının **YEŞİL** renge dönmesini bekleyin. İşitme cihazınız şimdi AÇIK konumdadır. İşitme cihazlarınızın ayarlarına bağlı olarak, bir açılış müziği duyabilirsiniz.

### Kapatmak için

Basma düğmesinin alt kısmını, işitme cihazı LED ışığı **TURUNCU** renge dönünceye kadar üç saniye basılı tutun. İşitme cihazı azalan dört ton sesi çalar. Basma düğmesini bıraktığınızda, işitme cihazı KAPALI konuma geçer.

Ton sesleri hakkında bilgi için **Ses ve LED ışık göstergeleri** bölümüne bakın.

## Pil zayıf bildirimi

Pil zayıfladığında, üç farklı sinyal sesi duyarsınız. Bu ses size pilin yaklaşık iki saat sonra biteceğini bildirir.

Sinyal sesleri 30 dakikada bir tekrarlanır. Pil bitmeden hemen önce azalan dört ton sesi duyarsınız.

İşitme cihazınıza ses akışı varsa (örn. TV veya cep telefonundan), üç farklı sinyal sesi duyduğunuzda pilin yaklaşık bir saat sonra biteceğini unutmayın.

Pil performans süresini artırmak için tüm ses akışlarını durdurduğunuzdan emin olun.

Üç farklı sinyal sesi  
= Pil zayıflıyor.

Azalan dört ton sesi  
= Pili bitmiş.

### LED ışık (isteğe bağlı)


Sürekli **TURUNCU** renkte yanıp sönme pilin zayıfladığını gösterir.

## Sol ve sağ işitme cihazını tanımlama

Farklı programlanmış olabileceğinden, sol ile sağ cihazın birbirinden ayrılması önemlidir.

Sol/sağ renk göstergelerini işitme cihazı üzerinde ve aşağıda gösterildiği gibi 60 ve 85 hoparlörlerin üzerinde bulabilirsiniz. Gösterge işaretleri (Sol ya da Sağ), 100 hoparlörde ve bazı kulaklıklarda da bulunabilir.

105 hoparlörler için gösterge kulaklık üzerinde bulunur.

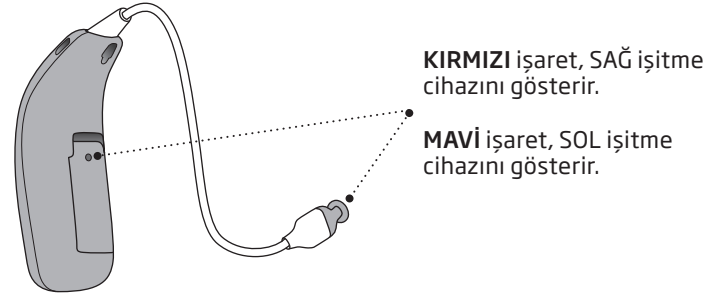

# İşitme cihazını takma

## Adım 1




İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştirin.

Hoparlörü her zaman bir kulaklık takılıyken kullanmalısınız.

Sadece işitme cihazınız için tasarlanmış olan parçaları kullandığınızdan emin olun.

## Adım 2

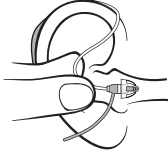

Hoparlör telinin kıvrımını başparmağınızla işaret parmağınızın arasında tutun.

Kulaklığın kulak kanalına dönük olması gerekir.

## Adım 3




Kulak kulpu (isteğe bağlı)

Hoparlör kablosu başınıza dayanana kadar, kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza doğru itin.

Hoparlörün kulak kulpu varsa, kulak kepçesi kıvrımına oturacak şekilde kulağınıza yerleştirin.

## Temizleme

Çok Amaçlı Alet kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve bir tel döngü içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

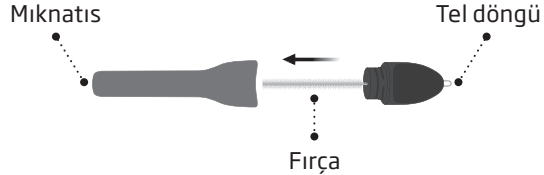

### ÖNEMLİ UYARI

Çok Amaçlı Alet dahili bir mıknatısa sahiptir. Çok Amaçlı Aleti kredi kartlarından ve manyetik olarak duyarlı diğer cihazlardan 30 santimetre (1 ft.) uzakta tutun.

İşitme cihazınızı tutarken ve kullanırken düşürmeyin. Temizlerken zarar görmesini önlemek için yumuşak bir yüzeyin üzerinde tuttuğunuzdan emin olun.

### Mikrofon deliklerini temizleyin

Deliklerdeki ve deliklerin etrafındaki yüzeydeki artıkları dikkatli bir biçimde fırçalamak için Çok Amaçlı Alet fırçasını kullanın.

Çok Amaçlı Aletin parçalarını mikrofon deliklerine zorlayarak sıkıştırmadığınızdan emin olun. Bu, işitme cihazında hasara neden olabilir.




### ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. İşitme cihazı asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

## Standart kulaklıkları deęiřtirme


Standart kulaklık (kubbe ve Grip Tip) temizlenmemelidir. Kulaklık kulak kiriyle dolduysa, yenisiyle deęiřtirin. Grip Tip en az ayda bir deęiřtirilmelidir.

### Adım 1

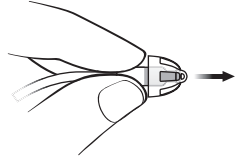


Hoparlörü tutun ve kulaklıęı çekerek çıkartın.

### Adım 2

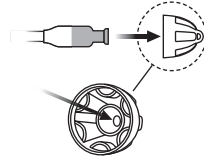

Saęlam durmasını saęlamak için hoparlörü tam kulaklıęın ortasına takın.

### Adım 3

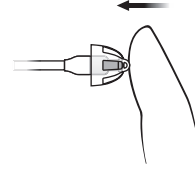

Kulaklıęın saęlam takıldıęından emin olmak için sıkıca itin.


### ÖNEMLİ UYARI

Kulaęınızdan çıkartırken kulaklık, hoparlörün üstünde deęilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmıř olabilir. Daha fazla talimat için iřitme uzmanınıza danıřın.

## ProWax miniFit filtresi

Hoparlörün kulaklık takılı olan ucunda beyaz bir kulak kiri filtresi takılıdır. Kulak kiri filtresi, kirin hoparlöre zarar vermesini önler.

Tıkanığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında filtreyi değiştirdiğinizden emin olun. Alternatif olarak, işitme uzmanınızla irtibata geçin. Kulak kiri filtresini değiştirmeden önce hoparlörden kulaklığı çıkardığınızdan emin olun. Bunu yapmak için **Standart kulaklıkları değiştirme** bölümüne bakın.

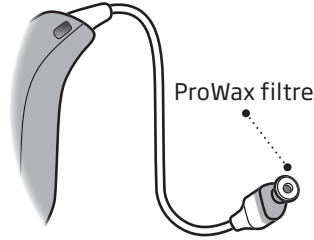


### ÖNEMLİ UYARI

Her zaman işitme cihazınızla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullandığınızdan emin olun. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.


## ProWax miniFit filtresini değiştirin

### 1. Alet

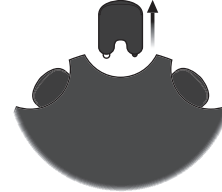


Aleti kabuğundan çıkartın. Aletin iki pimi vardır, biri sökmek içindir, diğerinde de yeni kulak kiri filtresi vardır.

### 2. Çıkart

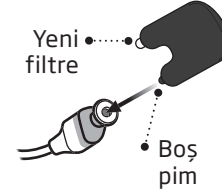

Boş pimi hoparlördeki kulak kiri filtresine takın ve çekip çıkartın.

### 3. Yerleştir

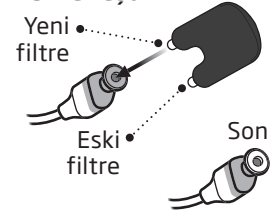

Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takın, aleti çıkarın ve atın.

### Not

Bir kalıp veya Lite Uç kullanıyorsanız, işitme uzmanınızın hoparlördeki kulak kiri filtresini değiştirmesi gerektirir.

## Özel kulaklıkları temizleme


Kulaklığı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

Kulaklıkta, kulak kiri ve atıkların hoparlöre zarar vermesini önlemek için beyaz bir kulak kiri filtresi\* bulunur.

Tıkanığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında filtreyi değiştirdiğinizden emin olun.

Alternatif olarak işitme uzmanınızla irtibata geçin.

- Havalandırma deliğini, içine fırçayı hafifçe sokup çevirerek temizleyin.

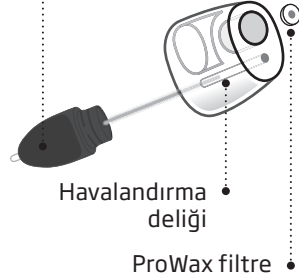


### Not

Bir Power flex kalıp veya Lite Uç kullanıyorsanız, işitme uzmanınızın hoparlördeki kulak kiri filtresini değiştirmesi gerektirir.

\* VarioTherm Mikro kalıp ve Lite Uçta kulak kiri filtresi yoktur


## ProWax filtresini değiştirme

### 1. Alet

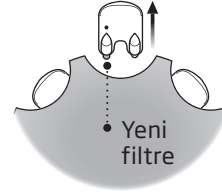

Aleti kabuğundan çıkartın. Aletin iki pimi vardır, biri sökmek içindir, diğerinde de yeni kulak kiri filtresi vardır.

### 2. Çıkart

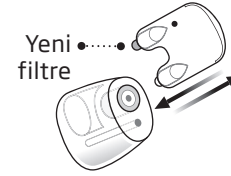

Boş pimi kulaklıktaki kulak kiri filtresine takın ve çekip çıkartın.

### 3. Yerleştir



Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takın, aleti çıkarın ve atın.



## İşitme cihazını saklama

İşitme cihazınızı kullanmadığınızda, saklanacağı en iyi yer şarj cihazıdır.

İşitme cihazınızı her zaman şarjlı durumda tutmak için işitme cihazını şarj cihazına yerleştirin ve şarj cihazı fişinin prize takılı olduğundan emin olun.

İşitme cihazındaki şarj edilebilir pil ömrünü maksimum seviyede tutmak için aşırı ısıya maruz bırakmayın. Örneğin, şarj cihazında olsa bile işitme cihazını araç içinde veya pencere önünde güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın.

## Uzun süreli saklama

İşitme cihazını uzun süre (14 günden fazla) saklamadan veya bir yere bırakmadan önce, tamamen şarj ettiğinizden ve KAPALI konuma aldığınızdan emin olun. Bu şekilde pil tekrar şarj edilebilir.

## Not


Şarj edilebilir pili korumak için işitme cihazını altı ayda bir tamamen şarj etmeniz gerekir. Saklanan şarj cihazının altı aylık zaman diliminde şarj edilmemesi durumunda, şarj edilebilir pilin değiştirilmesi gerekir.

İşitme cihazınızın nasıl şarj edileceğine ilişkin talimatlar için şarj cihazı kullanım kılavuzuna bakın.

## Uçak modu

Uçak modunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için Basma düğmesinin alt kısmını yedi saniye basılı tutun.

Uçak modunu etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda, işitme cihazında dört azalan ton sesi ve kısa bir açılış müziği çalar. Ayrıca, aşağıdaki işitme cihazı LED ışığı düzenleri görülür:

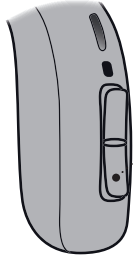

**Etkinleştirildiğinde:** Önce **TURUNCU** renkte bir defa uzun yanıp söner ve ardından bir defa **YEŞİL** ve iki defa **TURUNCU** renkte olmak üzere üç defa yanıp söner. Bu şekilde uçak modunun etkinleştirildiği doğrulanır.

**Devre dışı bırakıldığında:** Önce **TURUNCU** renkte bir defa uzun, ardından **YEŞİL** renkte iki defa uzun yanıp söner. Bu şekilde uçak modunun devre dışı bırakıldığı doğrulanır.

Sesler ve ışıklar hakkında daha fazla bilgi için **Ses ve LED ışık göstergeleri** bölümüne bakın.

İşitme cihazlarının birinin üzerindeki Basma düğmesine basıldığında her iki işitme cihazında da Uçak modunu etkinleştirileceğini unutmayın.

### Not

Uçak modu etkinleştirildiğinde, Bluetooth® KAPATILIR. Ancak işitme cihazının hâlâ AÇIK ve çalışır durumda olduğunu unutmayın.

## İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda açıklanan özellik ve aksesuarlar isteğe bağlıdır. Özellikler ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için işitme uzmanınızla iletişime geçin.

Zorlu dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, işitme cihazlarınıza özel bir program eklemek bu konuda size yardımcı olabileceğinden, işitme uzmanınızla konuştuğunuzdan emin olun.

*Yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz işitme koşullarını aşağıda belirtin.*

---


---

---

## Ses seviyesini değiştirme

Basma düğmesi, sesi ayarlamanızı sağlar. Ses seviyesini artırdığınızda veya azalttığınızda, bir sinyal sesi duyarsınız.

Düğme basma süreleri ve sayılarına ilişkin bilgi için bu kitapçığın sonundaki **Kişisel işitme cihazı ayarlarınız** bölümündeki **İşitme cihazınız için genel ayarlara genel bakış** tablosuna bakın.

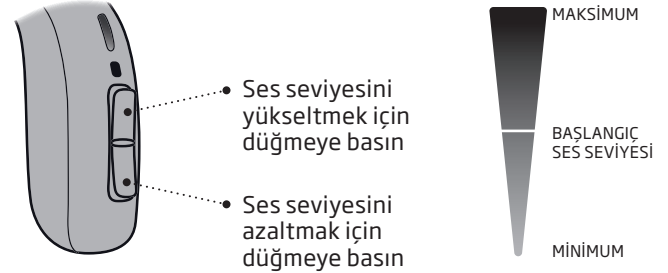


## Programı deęiřtirme

İřitme cihazınızda en fazla drt farklı program kaydedilebilir. Bunlar, iřitme uzmanınız tarafından yapılandırılır. Seçtięiniz programa (1, 2, 3 veya 4) baęlı olarak, birden drde kadar ton sesi duyarsınız.

Ton sesleri hakkında bilgi için **Ses ve LED ıřık gstergeleri** blmne bakın.

Dęme basma sreleri ve sayılarına iliřkin bilgi için bu kitapçıęın sonundaki **Kiřisel iřitme cihazı ayarlarınız** blmndeki **İřitme cihazınız için genel ayarlara genel bakıř** tablosuna bakın.

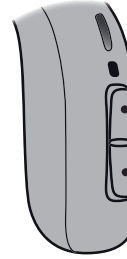

Programlar arasında geçiř yapmak için Basma dęmesine basın.

Basma dęmesinin st kısmında basıldıęında program dngs bir programdan dięerine geçer, rneęin program 1'den 2'ye veya program 4'ten 1'e.

Basma dęmesinin alt kısmına basılırsa, program dngs bykten kçęe doęru ilerler, rneęin 2'den 1'e veya program 1'den 4'e.

## İşitme cihazınızı sessize alma

İşitme cihazınızı aşağıdaki isteğe bağlı cihaz / uygulamalardan birini kullanarak sessize alabilirsiniz:

- ON App
- ConnectClip
- Uzaktan Kumanda 3.0

## İşitme cihazınızı sessizden çıkartmak

İşitme cihazınız, isteğe bağlı cihaz / uygulamalardan biri kullanılarak veya işitme cihazındaki düğmenin üst veya alt kısmına kısa süre ile basılarak sessizden çıkartılabilir.

### ÖNEMLİ UYARI

Bu modda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için sessize alma işlevini işitme cihazınızı KAPATMAK için kullanmayın.

## İşitme cihazının iPhone, iPad ve iPod ile kullanımı

Oticon More, Made for iPhone® işitme cihazı olup, iPhone, iPad® veya iPod touch®\* ile doğrudan iletişim ve kontrole olanak sağlar.

İşitme cihazınızın bu ürünlerden biriyle kullanımına ilişkin yardım için işitme uzmanınızla iletişime geçin.

Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın bu işaretle tanımlanan Apple ürünleri için özel olarak tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşılamak üzere sertifikalı olduğu anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygun olmasından sorumlu değildir. Lütfen bu Aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Made for  
iPhone | iPad | iPod

## İşitme cihazının Android cihazlar ile kullanımı

Oticon More, Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) desteği sunar ve seçili Android™ cihazlar\* ile doğrudan iletişim ve kontrol için kullanılabilir.

İşitme cihazınızın Android cihazlarla kullanımına ilişkin yardım için işitme uzmanınızla iletişime geçin.

## Eşleştirme ve uyumluluk

İşitme cihazınızın iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazlar ile eşleştirilmesine ilişkin talimatlar için aşağıdaki web sitesine bakın:

[www.oticon.global/pairing](http://www.oticon.global/pairing)

\*Uyumlu iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazların listesi için aşağıdaki web sitesine bakın:

[www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)

## Kablosuz aksesuarlar ve diğer seçenekler

Kablosuz işitme cihazlarınızı geliştirmek için bir aksesuar yelpazesi bulunur. Bunlar, birçok günlük durumda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

### ConnectClip

Cep telefonunuz ile eşleştirildiğinde uzak mikrofon ve hands-free kulaklık seti olarak kullanılabilen bir cihaz.

### Telefon Adaptörü 2.0

İşitme cihazları ve ConnectClip ile birlikte kullanıldığında, bir sabit telefon ile hands-free olarak iletişim kurmanıza olanak sağlayan bir cihaz.

### TV Adaptörü 3.0

TV veya bir elektronik ses cihazından işitme cihazınıza ses akışı sağlayan bir cihaz.

### Uzaktan Kumanda 3.0

Programı değiştirmenize veya ses seviyesini ayarlamanıza veya işitme cihazınızı sessize almanıza olanak sağlayan bir cihaz.

### EduMic

Sınıf ortamlarında, çalışma ortamlarında, kamuya açık alanlarda(Telecoil kullanılarak) ve diğer kurulumlarla uzak mikrofon olarak kullanılabilen bir cihaz.

### ON App

İşitme cihazınızı cep telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol etmenize olanak sağlayan bir uygulama. iPhone, iPad, iPod touch ve Android cihazlar için.

### Telecoil

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya tiyatro, ibadethane veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olabilir. Bir teleloopun kurulu olduğu yerler bu simge gösterilir.



Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin ticari markasıdır.

## **Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı)**

### **Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı**

Tinnitus SoundSupport, tinnitus yönetim programının bir birimi olarak, tinnitus şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sunmak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Hedef kitle, 18 yaş üzeri yetişkinlerdir.

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna vakıf yetkili işitme uzmanlarına (odyologlar, odyometristler, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

## **Tinnitus ses üreticisi kullanıcıları için yönergeler**

Aşağıdaki talimatlar, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunluk ve bant genişliğinde ses üretmek için tasarlanan bir tinnitus yönetim aygıtıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun bir bakım takibi önerebilir. Bu bakımla ilgili öneri ve talimatlara uyulması önemlidir.

### **Sadece reçete ile kullanılır**

Sağlıklı bir uygulama için tinnitus bildiren kişinin ses üreticisi kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, tinnitusa neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses üreticisini kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.



## Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve tinnitusunuzu rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. Tercih ettiğiniz ses(ler)i işitme uzmanınızla birlikte seçebilirsiniz.

### Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses üreticisi maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

### Sessiz konum

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, sessize alma işlevi sadece çevre seslerini sessize alıp, Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. İşitme cihazlarınızın sessize alınmasına ilişkin bilgi için **İşitme cihazlarınızı sessize alma** bölümüne bakın.

### Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir işitme cihazını seçtiğinizde, işitme uzmanınız işitme cihazınızdaki Basma düğmesini sadece tinnitus rahatlatma sesi için bir ses seviyesi kontrolü olarak çalışmaya ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses üreticisinin ses seviyesi kontrolünü bu iki seçenekten birini kullanarak ayarlar:

- A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı olarak değiştir veya
- B) Her iki kulaktaki ses seviyesini de aynı anda değiştir.

Tinnitus SoundSupport ses seviyesi ayarları hakkında daha fazla bilgi için bu kitapçığın sonundaki **Kişisel işitme cihazı ayarlarınız** bölümündeki **İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel bakış** tablosuna bakın.

## Kullanım süresi sınırlaması

### Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız, sizin için günlük maksimum Tinnitus SoundSupport kullanım süresi önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

**Tinnitus SoundSupport:** Günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için bu kitapçığın sonundaki **Kişisel işitme cihazı ayarlarınız** bölümündeki **Kullanım süresi sınırlaması** tablosuna bakın.

## İşitme uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

### Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

### Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı, 80 dB(A) SPL değerini aştığında, uygulama yazılımı otomatik olarak bir uyarı gösterir. Daha fazla bilgi için uygulama yazılımında tinnitus uygulama grafiğinin yanındaki **Maks. kullanım süresi göstergesine** bakın.

### Ses seviyesi kontrolü devre dışı

İşitme cihazındaki ses üreticisinin ses seviyesi kontrolü varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

## Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiyse

**Düğmeler ve İkazlar** ekranında tinnitus ses seviyesi kontrolünü etkinleştirirseniz, bir uyarı görüntülenebilir. Bu, rahatlatıcı sesin işitme hasarına neden olabilecek seviyelerde dinlenmesi durumunda meydana gelir.

Uygulama yazılımındaki **Maks. kullanım süresi** tablosunda, hastanın Tinnitus SoundSupport'u güvenli bir şekilde kaç saat kullanabileceği gösterilmektedir.

1. Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği her bir program için maksimum kullanım süresini not almayı unutmayın.
2. Bu değerleri bu kitapçığın arkasındaki **Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması** tablosuna not aldığınızdan emin olun.
3. Hastanıza buna göre bilgi verin.

## ⚠ Tinnitus SoundSupport uyarıları

İşitme uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses üreticisini etkinleştirdiyse, aşağıdaki uyarıları dikkate aldığınızdan emin olun.

Tinnitus yönetim cihazıyla oluşturulan herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, tinnitusun kötüleşme potansiyeli ve/veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya tinnitus da bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşıyorsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktor, odyolog veya diğer işitme uzmanlarına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses üreticisi özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bazı etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

### Maksimum kullanma süresi

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyun. Bu sürenin aşılması, tinnitusun veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

## ⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı sağlamak için işitme cihazınızı kullanmadan önce kendinizi aşağıdaki genel uyarılar hakkında bilgilendirmelisiniz.

Kullanım sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak işitme cihazınız ile beklenmedik çalışma veya ciddi sorunlar yaşamaz durumunda, işitme uzmanınıza danışın. İşitme uzmanınız size sorunun giderilmesi ve mümkünse, üreticiye ve/veya ulusal yetkililere bildirilmesi konusunda destek olacaktır.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayın. İşitme cihazı, işitme rehabilitasyonunun sadece bir parçasıdır, dudak okuma ve işitsel eğitim ile desteklenmelidir. Ayrıca bir çok durumda, işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının bundan tam olarak yararlanamayacağını unutmayın.

Bu işitme cihazı, çıkartılamayan, şarj edilebilir bir lityum iyon pil tarafından desteklenir. Lütfen işitme cihazınızı şarj ettiğinizden ve şarj edilebilir işitme cihazlarına ilişkin güvenlik ve kullanım bilgisine sahip olduğunuzdan emin olun.

İşitme cihazının içinde bulunan pile erişmeye çalışmayın. Pil yalnızca işitme uzmanınız tarafından değiştirilmelidir.

İşitme cihazını sadece belirlenmiş bir şarj cihazıyla şarj edin. Diğer şarj cihazları işitme cihazına ve pile zarar verebilir.

*Pil veya işitme cihazı yutulduğunda, acil olarak bir doktora görünün.*

### İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

### Boğulma tehlikesi ve küçük parçaları yutma riski vardır

İşitme cihazları ve parçaları, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

*İşitme cihazı veya küçük parçaların yutulması halinde acilen doktora başvurun.*

### Patlayıcılar

Normal kullanım koşullarında, işitme cihazının kullanımı güvenlidir. İşitme cihazı, patlayıcı ortamlar açısından uluslararası standartlara uygunluk konusunda test edilmemiştir.

Bu nedenle, işitme cihazını patlama tehlikesi olan ortamlarda, örn. mayınlar, oksijen açısından zengin ortamlar veya yanıcı anesteziğin kullanıldığı alanlarda kullanmayın.

### Lityum-iyon pillerin yutulması veya kulağa veya burna sokulması ölüm tehlikesi arz eder

Lityum-iyon pilleri kesinlikle yutmayın ya da kulağınıza veya burnunuza sokmayın, aksi halde iki saat gibi kısa bir sürede ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Bu, burun veya kulakta kalıcı hasara neden olabilecek veya potansiyel olarak iç organlarda tahribata yol açabilecek kimyasal yanmadan kaynaklanabilir. Lityum-iyon pilin yutulması ya da kulak veya burna sokulması durumunda, acilen tıbbi yardım alın.

Devamı arka sayfada

## Genel uyarılar

### Şarj edilebilir pil

Pile zarar verebileceğinden, işitme cihazını açmaya çalışmayın.

Asla pili değiştirmeye çalışmayın. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde, lütfen cihazınızı işitme uzmanınıza geri gönderin. Kurcalama izleri tespit edildiğinde hizmet garantisi iptal edilir.

Pil sızıntısı durumunda, işitme cihazınızı kullanmayın. Aksi halde sızıntı yapan pilden çıkan asitlerden dolayı ciltte tahrişe neden olabilir. Pilden sızan asitlerin cildinize temas etmesi durumunda, silmek için ıslak bir bez kullanın ve cildinizde asit kalmadığından emin olun. Cildinizde tahriş olması durumunda, doktorunuza başvurun. İşitme cihazınızın kullanımına ilişkin daha fazla talimat için işitme uzmanınıza danışın.

Pilleri bir USB konektörüyle şarj etmenin güvenliği, harici sinyal kaynağıyla belirlenir. Bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

### Bozukluk

İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin piller tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkanığında işitme cihazları çalışmayabilir.

### Aktif implantlar

Bu işitme cihazı zorlu testlere tabi tutulmuş ve insanlar için uluslararası maruz kalma standartlarına [insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler (Özgül Soğrulma Oranı - SAR)] göre insan sağlığına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Kalp pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal implantlarla bir arada olma standartlarında tanımlanan insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler için uluslararası kabul edilen SAR güvenlik sınırlarının çok altındadır.

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, parazit oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

OtoTelefon veya Çok Amaçlı Alet (dahili bir mıknatıs içerir), implanttan en az 30 santimetre (1 ft.) uzakta tutulmalı, örneğin göğüs cebinde taşınmamalıdır.

İmplant edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, mıknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

### Kulak kanalında ayrılmış kulaklık

Kulağınızdan çıkartırken kulaklık, hoparlörün üstünde değilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmış olabilir. Daha fazla talimat için işitme uzmanınıza danışın.

### X-ray/CT/MR/PET taraması, elektro terapi ve ameliyat

Elektromanyetik alanlarda zarar görebileceklerinden, X-Ray, CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarın.

Devamı arka sayfada

## ⚠ Genel uyarılar

### Isı ve kimyasallar

İşitme cihazınızı asla direkt güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakmayın.

İşitme cihazınızın mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savor, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

### Çok güçlü cihaz

İşitme cihazı kullanıcısının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski oluşabileceğinden, maksimum ses basınç seviyesi 132 dB SPL (IEC 60138-4/IEC 711) aşan bir işitme cihazın seçimi, uygulanması ve kullanımı sırasında özel bir özen gösterilmelidir.

*İşitme cihazınızın çok güçlü bir cihaz olup olmadığı hakkında bilgi için modele genel bakış kısmına bakın.*

### Muhtemel yan etkiler

İşitme cihazları ve kulaklıklar kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazlarınızda kullanılan alerjik olmayan ürünler çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir.

*Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurun.*

### Uçakta kullanım

İşitme cihazınız Bluetooth kullanıyor. Uçakta, uçuş personeli tarafından Bluetooth'a izin verilmediği sürece, Bluetooth'u devre dışı bırakmak için işitme cihazı uçuş moduna alınmalıdır.

### Üçüncü taraf aksesuarlarının kullanımı

Sadece üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Orijinal olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

### İşitme cihazlarında modifikasyona izin verilmez

Üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar ekipmanın garantisini geçersiz kılacaktır.

### ⚠ Parazit

İşitme cihazı uluslararası standartların en katı kurallarına göre geniş kapsamlı parazit testlerine tabi tutulmuştur.

Sol taraftaki işarete sahip ekipmanların yakınında elektromanyetik parazit meydana gelebilir. Taşınabilir ve mobil RF (radyo frekans) iletişim ekipmanları işitme cihazınızın performansını etkileyebilir. İşitme cihazınızın elektromanyetik parazitten etkilenmesi durumunda, paraziti azaltmak için işitme cihazınızı parazitin kaynağından uzaklaştırın.

### Kullanıcıda Dikkat Dağılması

İşitme cihazı kullanımı, dikkatinizi dağıtabilir. İşitme cihazınızı kullanırken çevrenize dikkat edin. Trafikte iletişim cihazlarının kullanımı ile ilgili ulusal trafik yasalarına bakınız.

## Sorun Giderme

Şarj cihazı sorunlarını gidermek için şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

| Belirti                 | Olası nedenler                                                                                                                       | Çözümler                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ses yok                 | İşitme cihazında güç kesintisi vardır                                                                                                | İşitme cihazını şarj edin                                                        |
|                         | Bitik pil                                                                                                                            | İşitme uzmanınızla irtibata geçin                                                |
|                         | Tıkanmış kulaklıklar (kubbe, Grip Tip veya kalıp)                                                                                    | Kalıbı temizleyin<br>Kulak kiri filtresini, kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirin   |
| Aralıklı veya kısıp ses | Ses çıkışı tıkanmış                                                                                                                  | Kalıbı temizleyin veya kulak kiri filtresini, kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirin |
|                         | Nem                                                                                                                                  | İşitme cihazını hafifçe silin ve kurumasını bekleyin                             |
|                         | İşitme cihazında güç kesintisi vardır                                                                                                | İşitme cihazını şarj edin                                                        |
| Ötme sesi               | İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış                                                                                           | Kulaklığı yeniden takın                                                          |
|                         | Kulak kanalında kir birikmiştir                                                                                                      | Kulak muayenesi için doktorunuza gidin                                           |
| Sinyal sesi             | İşitme cihazınız dört kez arka arkaya sekiz sinyal sesi çalıyorsa, işitme cihazınızın bir mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı vardır | İşitme uzmanınızla irtibata geçin                                                |

### Not

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbirisi işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Devamı arka sayfada

## Sorun Giderme

Şarj cihazı sorunlarını gidermek için şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

| Belirti                                                                                              | Olası nedenler                                                                                                                                                                    | Çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı KAPALI durumda kalıyor       | Şarj cihazı AÇIK değildir                                                                                                                                                         | Şarj cihazı elektrik fişinin doğru takıldığından emin olun                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      | İşitme cihazı ya da şarj cihazı sıcaklığı çok yüksek veya çok düşüktür                                                                                                            | Şarj cihazını ve işitme cihazını sıcaklığın +5°C ile +40°C (+41°F ile +104°F) olduğu bir yere götürün                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                      | Şarj işlemi tamamlanmamıştır. Oda sıcaklığı +35°C'nin (+95°F) üzerinde olup, şarj süresinin uzamasına neden oluyordur. Şarj cihazı, pili korumak için şarj işlemini durdurmuştur. | İşitme cihazını şarj cihazına tekrar takın. Bu şekilde şarj işlemi yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanır.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                      | İşitme cihazı şarj cihazına yanlış yerleştirilmiştir                                                                                                                              | Şarj bağlantı noktalarında yabancı madde olup olmadığını kontrol edin                                                                                                                                                                                                                     |
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı YEŞİL renkte yanıp sönüyor   | İşitme cihazı uzun süre kullanılmamıştır                                                                                                                                          | İşitme cihazındaki pilin nasıl bittiğine bağlı olarak, işitme cihazı 10 dakikalık bir zaman dilimi içinde otomatik olarak normal şarj moduna devam eder. Bu işlem sırasında, işitme cihazlarını şarj cihazında bıraktığınızdan emin olun.                                                 |
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı TURUNCU renkte yanıp sönüyor | Sistem hatası                                                                                                                                                                     | İşitme uzmanınızla irtibata geçin                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apple cihazla eşleşme sorunu                                                                         | Bluetooth bağlantısı başarısız oldu                                                                                                                                               | 1) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın<br>2) Bluetooth'u kapatıp tekrar açın<br>3) İşitme cihazını kapatıp tekrar açın<br>4) İşitme cihazını tekrar eşleştirin (Yönergeler için şu adresi ziyaret edin: <a href="http://www.oticon.global/pairing">www.oticon.global/pairing</a> ) |
|                                                                                                      | Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Not

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.



## Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toz geçirmez ve su girişine karşı korumalıdır, bu da tüm günlük yaşam koşullarında kullanılmak üzere tasarlandığı anlamına gelir.

Suya ve toza dayanıklılık, yağmurlu havalarda veya terlediğinizde işitme cihazınızın ıslanmasından endişe etmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

İşitme cihazını şarj etmeden önce, olası nemi silerek kuruladığınızdan emin olun.

İşitme cihazınızın suya temas edip çalışmayı durdurması durumunda, suyu hafifçe silerek işitme cihazının kuruymasını bekleyin.

### ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka sıvılara batırmayın.

## Kullanım koşulları

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çalıştırma koşulları</b>        | Sıcaklık: +5°C ile +40°C (41°F ile 104°F)<br>Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış<br>Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Şarj koşulları</b>              | Sıcaklık: +5°C ile +40°C (41°F ile 104°F)<br>Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış<br>Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Taşıma ve saklama koşulları</b> | Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:<br><br><b>Taşıma:</b><br>Sıcaklık: -20°C ile +60°C (-4°F ile 140°F)<br>Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış<br>Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında<br><b>Saklama:</b><br>Sıcaklık: -20°C ile +30°C (-4°F ile 86°F)<br>Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış<br>Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında |

### Not

Şarj cihazının Kullanım koşulları hakkında daha fazla bilgi için şarj cihazınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

## Teknik bilgiler

İşitme cihazı aşağıdaki iki radyo teknolojisini içerir:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa mesafeli manyetik indüksiyon teknolojisi kullanan bir radyo alıcı-vericisi içerir. Bu vericinin manyetik alan gücü çok zayıftır ve her zaman 15 nW'nin altındadır (tipik olarak 10 metre (33 ft.) mesafede -40 dBµA/m (-12,20 dBµA/ft) altındadır).

Bu işitme cihazı ayrıca her ikisi de ISM bandı 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir. Radyo vericisi zayıftır ve her zaman 12 dBm toplam yayılma gücüne eşit 16 mW'ın altındadır.

İşitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur. İşitme cihazınızı yalnızca kablosuz aktarıma izin verilen yerlerde kullanın.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunabilir. Daha fazla bilgi için: Teknik Veriler Sayfası, [www.oticon.global](http://www.oticon.global)

### ABD ve Kanada

Bu cihaz, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü (DA AU5 MNR R) içerir:  
FCC Kimliği: 2ACAHAU5MRTRC  
IC: 11936A-AU5MRTRC

### Not:

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma kapsamında lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazit oluşturmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışma şekline neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Bu tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745 ile uyumludur.

Uygunluk Beyanı, genel merkezden temin edilebilir.

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark  
[www.oticon.global/doc](http://www.oticon.global/doc)

CE 0123



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danimarka



Elektronik ekipmanlara  
ait atıklar yerel  
düzenlemelere göre  
atılmalıdır.



Bluetooth®

IP68

## Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması



### Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.



### Üretici

Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 2017/745 ve 2017/746'da tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.



### CE işareti

Bu cihaz, gerekli tüm AB yönetmelikleri ve direktifleri ile uyumludur. Dört basamaklı sayı, onaylı kuruluşun tanıdığını gösterir.



### Elektronik atık (WEEE)

İşitme cihazlarını, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.



### Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)

Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.

IP68

### IP kodu

Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529'a uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.



### Bluetooth logosu

Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.

| Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Made for Apple işaretleri</b><br>Cihazın iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumlu olduğunu belirtir.                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>İşitme döngüsü</b><br>Bu logo, işitme desteğinin evrensel simgesini içerir. "T" harfi ise bir işitme döngüsünün kurulu olduğunu ifade eder.                                                                                                                                                          |
|  | <b>Radyo Frekans (RF) vericisi</b><br>İşitme cihazınız bir RF vericisi içerir.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GTIN</b>                                                                       | <b>Global Ticari Ürün Numarası</b><br>Tıbbi cihaz yazılımı dahil, tıbbi cihaz ürünlerini tanımlamak için kullanılan, global olarak benzersiz 14 haneli sayı. Bu kitapçıkta GTIN, tıbbi cihaz ürün yazılımıyla (FW) ilgilidir. Düzenleyici ambalaj etiketindeki GTIN, tıbbi cihaz donanımına ilişkindir. |

| Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması                                  |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kuru tutun</b><br>Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.                                                                         |
|  | <b>Dikkat işareti</b><br>Uyarılar ve ikazlar için Kullanım Kılavuzuna başvurun.                                                                   |
|  | <b>Katalog numarası</b><br>Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.                                  |
|  | <b>Seri numarası</b><br>Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.                            |
|  | <b>Tıbbi Cihaz</b><br>Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.                                                                                               |
|  | <b>Pil geri dönüşüm simgesi</b><br>Li-İyon pil geri dönüşüm simgesi                                                                               |
|  | <b>Sıcaklık sınırı</b><br>Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir.                                     |
|  | <b>Nem sınırlaması</b><br>Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği nem aralığını belirtir.                                            |
|  | <b>Radyo Frekans Tanımlaması</b><br>Üretim ve servis amacıyla, cihaza yapıştırılan pasif radyo-frekans tanımlama etiketinin bulunduğunu gösterir. |

## Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlörler, kulaklıklar ve filtreler vs. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış/hatalı kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Bu garanti kapsamında, işitme cihazının tamir edilmesi veya muadil bir modelle değiştirilmesi tamamen üreticinin inisiyatifindedir. Yukarıdaki

garanti, tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için ona başvurun.

### Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen çözebilecek olan işitme uzmanınıza götürün. İşitme uzmanınız, üreticiden garanti hizmeti almanız konusunda size yardımcı olabilir. İşitme uzmanınız, bu tür hizmetler için ücret talebinde bulunabilir.

## Garanti

### Sertifika

Kullanıcının adı: \_\_\_\_\_

İşitme uzmanı: \_\_\_\_\_

İşitme uzmanının adresi: \_\_\_\_\_

İşitme uzmanının telefonu: \_\_\_\_\_

Satın alma tarihi: \_\_\_\_\_

Garanti süresi: \_\_\_\_\_ Ay: \_\_\_\_\_

Model sol: \_\_\_\_\_ Seri no: \_\_\_\_\_

Model sağ: \_\_\_\_\_ Seri no: \_\_\_\_\_

## Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

*İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.*

| Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması |                             |                                   |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                    | Kullanım sınırlaması yoktur |                                   |                               |
|                                             | Program                     | Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus) | Maks. ses seviyesi (Tinnitus) |
| <input type="checkbox"/>                    | 1                           | Günde maks. _____ saat            | Günde maks. _____ saat        |
| <input type="checkbox"/>                    | 2                           | Günde maks. _____ saat            | Günde maks. _____ saat        |
| <input type="checkbox"/>                    | 3                           | Günde maks. _____ saat            | Günde maks. _____ saat        |
| <input type="checkbox"/>                    | 4                           | Günde maks. _____ saat            | Günde maks. _____ saat        |

### İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel bakış

| Sol                           |                                | Sağ                   |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Evet | <input type="checkbox"/> Hayır | Tinnitus SoundSupport | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır |

☐ **A) Her bir kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı olarak değiştirme**  
Ses seviyesini (işitme cihazların sadece birinde) **yükseltmek** veya **azaltmak** için ses seviyesi istediğiniz seviyeye gelene kadar, Basma düğmesinin üst veya alt kısmına arka arkaya kısa süreli basın.

☐ **B) Her iki kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini aynı anda değiştirme**  
Her iki cihazdaki sesi yükseltmek/azaltmak için bir cihazı kullanabilirsiniz. Bir işitme cihazındaki ses seviyesini değiştirdiğinizde, diğer işitme cihazındaki ses seviyesi de bunu izler.  
Ses seviyesini **yükseltmek** için Basma düğmesinin üst kısmına arka arkaya kısa süreli basın.  
Ses seviyesini **azaltmak** için Basma düğmesinin alt kısmına arka arkaya kısa süreli basın.

*İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.*

| İşitme cihazınız için genel ayarlara genel bakış              |                                            |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Sol                                                           |                                            | Sağ                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır  | Ses seviyesini değiştirme                  | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır  |  |
| <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır  |                                            | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır  |  |
| <input type="checkbox"/> Kısa basın                           | Programı değiştirme                        | <input type="checkbox"/> Kısa basın                           |  |
| <input type="checkbox"/> Uzun basın                           |                                            | <input type="checkbox"/> Uzun basın                           |  |
| Ses kontrol göstergeleri                                      |                                            |                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI | Min./maks. ses seviyesi sinyal sesleri     | <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI |  |
| <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI | Ses seviyesi değişikliklerinde sinyal sesi | <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI |  |
| <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI | Açılış ses seviyesinde sinyal sesi         | <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI |  |
| Pil göstergeleri                                              |                                            |                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI | Pil zayıf uyarısı                          | <input type="checkbox"/> AÇIK <input type="checkbox"/> KAPALI |  |

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

## Ses ve LED ışık göstergeleri

Farklı sesler ve ışık düzenleri işitme cihazının durumunu gösterir. İlerleyen sayfalarda farklı göstergeler listelenmiştir. Şarj cihazınızdaki ışık göstergeleri için şarj cihazının Kullanım kılavuzuna bakın.

İşitme uzmanınız ses ve LED ışık göstergelerini tercihlerinize göre ayarlayabilir.

| Program | <input type="checkbox"/> Ses | <input type="checkbox"/> LED ışık*                                                  | Ne zaman kullanılmalı |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 1 ton sesi                   |  |                       |
| 2       | 2 ton sesi                   |  |                       |
| 3       | 3 ton sesi                   |  |                       |
| 4       | 4 ton sesi                   |  |                       |

 YEŞİL renkte kısa süreli yanıp sönmeye

\*LED ışık sürekli olarak veya kısa aralıklarla arka arkaya üç defa yanıp söner

Devamı arka sayfada

| AÇ/KAPAT                                                                                   | Ses                                        | LED ışığı                                                                                                                                                                                    | LED ışık yorumları               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AÇIK                                                                                       | <input type="checkbox"/> Müzik sesi        | <input type="checkbox"/>   | Bir defa göster                  |
| KAPALI                                                                                     | <input type="checkbox"/> Azalan 4 ton sesi | <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                  |
| Ses seviyesi                                                                               | Ses                                        | LED ışığı                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Açılış ses seviyesi                                                                        | <input type="checkbox"/> 2 sinyal sesi     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                  |
| Minimum/maksimum ses seviyesi                                                              | <input type="checkbox"/> 3 sinyal sesi     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                  |
| Sesi artır/azalt                                                                           | <input type="checkbox"/> 1 sinyal sesi     | <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                  |
| Sessize alma işlevi ON App, ConnectClip veya Uzaktan Kumanda 3.0 üzerinden etkinleştirildi |                                            | <input type="checkbox"/>   | Sürekli veya arka arkaya üç defa |

 YEŞİL renkte uzun yanıp sönme  YEŞİL renkte kısa yanıp sönme

 TURUNCU renkte uzun yanıp sönme  TURUNCU renkte kısa yanıp sönme

| Aksesuarlar          | <input type="checkbox"/> Ses        | <input type="checkbox"/> LED ışığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LED ışık yorumları               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TV Adaptörü 3.0      | 2 farklı ton sesi                   |                                                                                                                                                                           | Sürekli veya arka arkaya üç defa |
| ConnectClip          | 2 farklı ton sesi                   |                                                                                                                                                                           |                                  |
| Uçak modu            | <input type="checkbox"/> Ses        | <input type="checkbox"/> LED ışığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Uçak modu etkin      | 4 azalan ton sesi + kısa müzik sesi |     |                                  |
| Uçak modu devre dışı | 4 azalan ton sesi + kısa müzik sesi |    *                                                                                   |                                  |

 YEŞİL renkte uzun yanıp sönme  YEŞİL renkte kısa yanıp sönme

 TURUNCU renkte uzun yanıp sönme  TURUNCU renkte kısa yanıp sönme

\*Yalnızca üç defa tekrarlama seçildiğinde kullanılabilir

Devamı arka sayfada



| Uyarılar                                                                         | Ses                             | LED ışığı       | LED ışık yorumları                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Düşük batarya seviyesi                                                           | □ 3 farklı sinyal sesi          | □ ● ● ● ● ● ● ● | Sürekli yanıp sönüyor               |
| Pil kapalı                                                                       | Azalan 4 ton sesi               |                 |                                     |
| Mikrofon servis kontrolü gerekli                                                 | Arka arkaya 4 defa 8 uyarı sesi | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Arka arkaya dört defa               |
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı YANMIYOR |                                 | KAPALI          | <b>Sorun Giderme</b> bölümüne bakın |

223666TR / 2020.07.14 / v1

| Uyarılar                                                                                             | Ses | LED ışığı | LED ışık yorumları                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı TURUNCU renkte yanıp sönüyor |     | ■ ■ ■     | Sürekli yanıp sönüyor. <b>Sorun Giderme</b> bölümüne bakın |
| İşitme cihazı şarj cihazına yerleştirildiğinde, işitme cihazı LED ışığı YEŞİL renkte yanıp sönüyor   |     | ○         | Sürekli yanıp sönüyor. <b>Sorun Giderme</b> bölümüne bakın |

■ YEŞİL renkte uzun yanıp sönme    ○ YEŞİL renkte kısa yanıp sönme  
 ■ TURUNCU renkte uzun yanıp sönme    ● TURUNCU renkte kısa yanıp sönme

223666TR / 2020.07.14 / v1



0000223666000001

**oticon**  
life-changing technology

223666TR / 2020.07.14 / v1  
Oticon More Ürün Yazılımı 1