


Crescendo 60

Kommunikationsforstærker

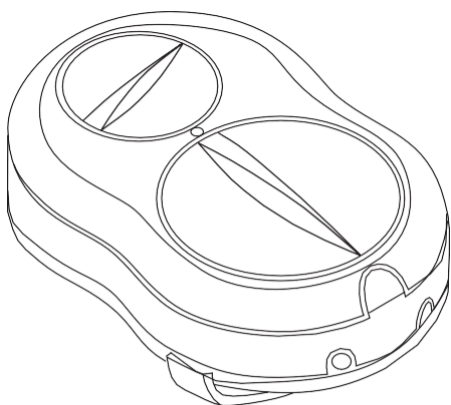

Brugervejledning

Introduktion

Tak, fordi du valgte Crescendo 60 kommunikationsforstærkeren. Inden du tager systemet i brug, bedes du venligst læse brugervejledningen. Den beskriver, hvordan du bruger forstærkeren og de forskellige funktioner.

Crescendo 60 hjælper dig med at kommunikere. Det er en batteridrevet kommunikationsforstærker, der kan modtage lyd fra forskellige kilder. Den er ideel til mennesker, som har brug for forstærkning af lyd, men som ikke har høreapparater.

Crescendo 60 har tonekontrol, som kan øge de høje og lave frekvenser alt efter lytterens behov. Det er også muligt at bruge forstærkeren med høreapparater via en halsteleslynge. I så fald skal høreapparaterne være indstillet på telespoleprogrammet (T+MT).

Advarsel

Lyden fra Crescendo 60 kan blive meget høj.

Sluk altid for produktet, inden du skifter batteri, tilslutter eller fjerner tilbehør.

Forholdsregler

Produktet er kun beregnet til brug som beskrevet i denne vejledning.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for fejl på produktet opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.

Skil ikke produktet ad. Åbn kun batterilåget, når du skal skifte batteri eller betjene funktionsomskifteren.

Sørg for, at strømmen er slukket på eksterne lyd-kilder, fx tv/radio, der bruger 230V, inden du tilslutter Crescendo 60 til lyd-kilden.



Udsæt ikke Crescendo 60 for regn eller andre former for væske eller for varme-kilder, fx direkte sollys, radiatorer mv.

Brug kun AA Alkaline batterier. Mix ikke nye og brugte batterier.

Brug kun genopladelige batterier til forstærkeren i overensstemmelse med batteriernes brugervejledning.

Fjern batterierne, hvis Crescendo 60 ikke skal bruges i en længere periode.


Funktioner

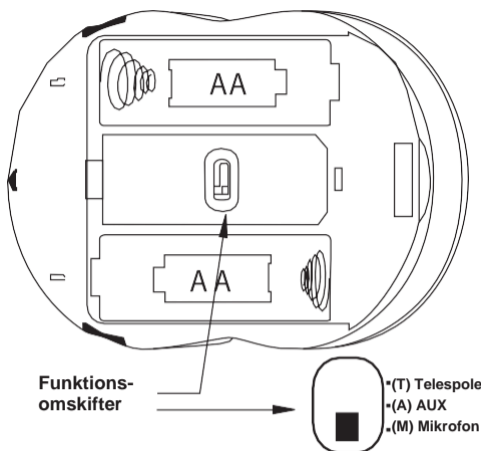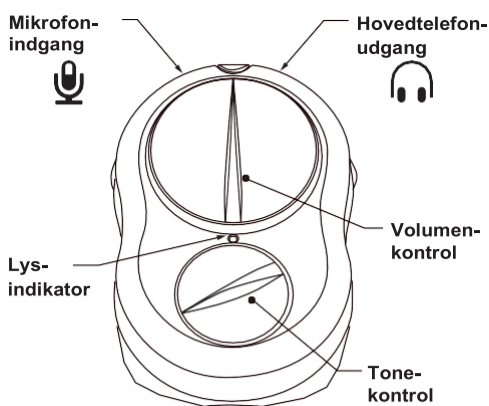


- Justerbar volumenkontrol
- Justerbar tonekontrol
- Bælteklips
- Halsnsnor
- Forstærkeren bruger 2 stk. AA Alkaline 1,5V batterier. Batterilevetiden er over 60 timer ved brug af hovedtelefoner.
- Genopladelige AA batterier kan bruges
- Lysdioden lyser, når forstærkeren er tændt. Når batteriniveauet er lavt, vil dioden lyse rødt.
- Funktionsmuligheder (Mikrofon, AUX, telespole)

Isæt batterier

Forstærkeren bruger 2 stk. AA Alkaline batterier (LR06 eller AA). Fjern bælteklipsen (se tegning). Løft batteridækslet ved at trykke ind på klik-låsen på batteridækslet samtidig med, at du løfter dækslet.

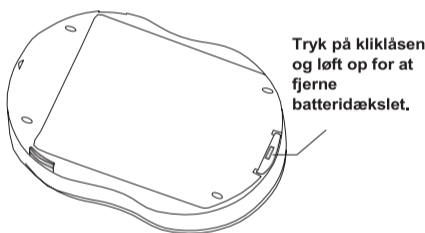

Sæt batterierne i. Sørg for, at batterierne vender rigtigt, som vist vha. symbolerne i batterirummet.

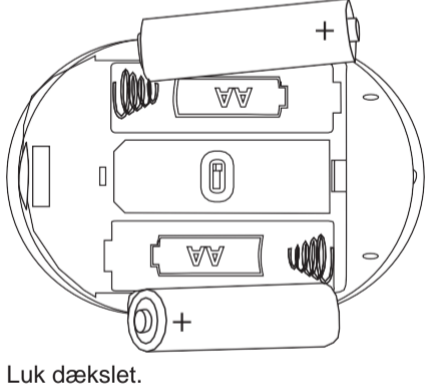

Luk dækslet.

Hurtig opsætning

Crescendo 60 er indstillet i M-position ved levering.

Sæt batterierne i forstærkeren (som vist ovenfor).

Forstærkeren slukkes, når volumenkontrollen er drejet så langt til venstre som muligt forbi kliklyden. Kontrollen vil pege opad, og lysindikatoren vil være slukket.

Tilslut hovedtelefoner eller halsteleslynge (tilbehør) i udgangen med hovedtelefon-symbolet. Halsteleslynge bruges sammen med høreapparater med telespole (program T eller MT).

Tag hovedtelefoner eller halsteleslynge (tilbehør) på. Tænd for Crescendo 60 ved at dreje volumenkontrollen med uret forbi kliklyden, og lysindikatoren lyser grøn.

Lysindikatoren lyser rødt, når batteriniveauet er lavt.

Tilpas lyd-niveau og tonekontrol, så den passer til din hørrelse.

Når du er færdig med at bruge Crescendo 60, slukker du den ved at dreje volumenkontrollen mod uret forbi kliklyden. Lysindikatoren slukkes.

Funktionsmuligheder

■ Mikrofon

Funktionsomskifteren under batteridækslet skal stå på »M«.

Tilslut mikrofonen til mikrofonindgangen med mikrofonymbølet. Mikrofonen bruges, når du gerne vil høre dine omgivelser.

■ Direkte lyd fra tv, radio mv. (AUX in)

Funktionsomskifteren under batteridækslet skal stå på »A«.

Tilslut 3,5 mm jackstik-ledning til mikrofonindgangen med mikrofonymbølet.

Tilslut derefter den anden ende af ledningen til lydudgangen på tv, radio mv. Du kan bruge SCART, RCA Phono eller hovedtelefonudgangen.

■ Telespole

Funktionsomskifteren under batteridækslet skal stå på »T«.

Telespolefunktionen bruges i lokaler, hvor der er en teleslynge installeret, fx i kirker, teatre, biografteatre, konferencecentre mv. Test eller lyt til et eksisterende teleslynagesystem med hovedtelefonerne.

Lyttemuligheder

Følgende tilbehør kan tilsluttes hovedtelefonudgangen med 3,5 mm stereo-jackstik.

■ Stetoclip (inkluderet)

■ Hovedtelefoner (inkluderet)

■ Halsteleslynge (tilbehør)


Kan bæres rundt om halsen for at sende lyden direkte til høreapparaterne indstillet på telespoleprogrammet (T/ M+T).

Bælteklips/halssnor


Montér bælteklipsen ved at trykke vingerne ind i sliskerne på bagsiden af forstærkeren, som vist herunder:



Fjern bælteklipsen ved at presse en af vingerne væk fra forstærkeren. Forsøg ikke at afmontere bælteklipsen ved at løfte den væk fra batteridækslet, da der er risiko for, at klipsen knækker.

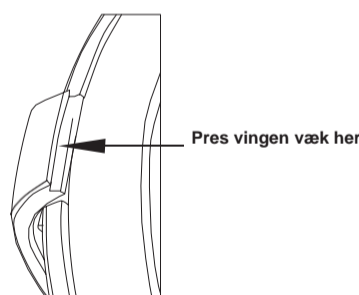

Fjern bælteklipsen og montér halssnoren, som vist på billedet herunder. Sæt bælteklipsen på forstærkeren. Halssnoren har en sikkerhedslås, der automatisk brydes, hvis snoren sidder fast.

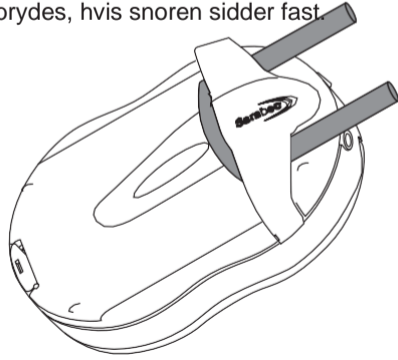

Fejlfinding

Ingen lyd

Tjek, at hovedtelefoner/mikrofon er korrekt monteret i stikkene.

Tjek, om funktionsomskifteren er indstillet korrekt.

Batterierne kan være løbet tør for strøm. Skift til nye batterier.

Hovedtelefoner og/eller mikrofon kan være defekte.

Lav eller forvrænget lyd

Batterierne kan være ved at løbe tør for strøm. Skift til nye batterier.

Tjek, om funktionsomskifteren er indstillet korrekt.

Tilbagekobling eller hylende lyd

Mikrofonen er for tæt på hovedtelefonerne, og volumen er for høj.

Knitrede lyd eller lyden går til og fra

Defekte ledninger - vrid ledningerne for at finde fejlen. Skift den defekte ledning.

Metallisk eller dæmpet lyd

Tonekontrol er ikke indstillet korrekt.

Vedligeholdelse

Hvis enheden bliver beskidt, kan du nøjes med at tørre den af med en blød og lettere fugtig klud.

Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre kemikalier. Undgå at bruge enheden, hvor den udsættes for direkte sollys i længere perioder. Derudover skal enheden beskyttes mod overdreven varme, fugt og mekaniske stød.

Garanti og service

Der ydes 2 års garanti.

Har du brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller leveret fra.

Specifikationer

Batteri

2 stk. 1,5V AA Alkaline batterier

Batterilevetid

Ca. 80 timer

(i brug med 32 ohm hovedtelefoner)

Dimensioner

L 95 mm x B 62 mm x H 25 mm (uden bælteklips)

Vægt

70 g uden batterier, ca. 120 g med batterier

Materiale

ABS plast

Ydeevne

Frekvenskarakteristik:
200Hz-10 kHz +/- 3dB

Maximum forstærkning: 60dB

Tonekontrol:

+/- 8dB ved 200Hz

+/- 8dB ved 5kHz

Maximum lydtryk:

> 125dB SPL med stetoclip

Tilbehør

- Halsteleslynge
- Hovedtelefon
- Alkaline 1,5V AA batterier

Overensstemmelseserklæring

Sarabec Ltd erklærer hermed, at Crescendo 60 forstærkeren er i overensstemmelse med alle relevante UK Statutory Instruments direktiver og EU-forordninger.

Sarabecs EU-autoriserede repræsentant: HUMANTECHNIK GmbH, Im Wörth 25, D-79576 Weil am Rhein, Tyskland.

Overensstemmelseserklæringen kan fås fra Sarabec Ltd, 15 High Force Road, Middlesbrough, TS2 1RH, England. www.sarabec.com



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.