

Neuro 2 Svømmekit

Kvikreferencevejledning



Svømmekittet er en vandtæt løsning til Neuro 2-lydprocessoren, der kan tåle nedsænkning i vand i 2 timer på op til 3 meters dybde. Dette tilbehør holder processoren tør under vandaktiviteter som svømning, roning eller kajaksejls.


Tilsigtet brug

Svømmekittet er tilbehør, der giver udvidet beskyttelse af Neuro 2-lydprocessoren, når den anvendes i vand eller fugtige eller støvede omgivelser.



Svømmecoveret er konstrueret til brug i et år eller 50 gange afhængigt af, hvad der indtræffer først. Efterse altid svømmecoveret omhyggeligt før brug. Hvis du opdager forandringer i covermaterialet eller materialets stramhed, skal du holde op med at bruge coveret og bestille nye (svømmecoverkit).

Oplysningerne i denne kvikreferencevejledning erstatter ikke brugervejledningen til svømmekittet. Sørg for at blive bekendt med svømmekittet ved at læse brugervejledningen.


Sådan sættes lydprocessoren i svømmecoveret

 **Bemærk:** Brug altid genopladelige batterier til at drive lydprocessoren, når du bruger svømmekittet. Zink-luftbatterier er afhængige af frisk luft-tilførsel for at kunne producere energi, og de kan således ikke bruges inde i et svømmecover.


- 1 Åbn låget på svømmecoveret.
- 2 Efterse svømmecoveret for at sikre, at der ikke sidder snavs, støv og hår i åbningen til svømmespolestikket eller åbningen og låget til processorindstikket.
- 3 Sæt lydprocessoren helt ind i svømmecoveret. Under isætning skal coveret bøjes og lydprocessor-hooken forsigtigt føres på plads for at undgå, at den skubbes til side.

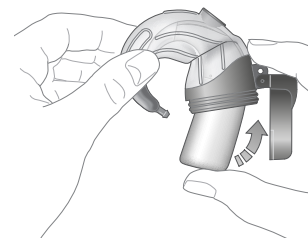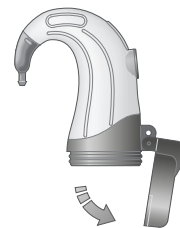


- 4 Sørg for, at lydprocessoren er helt i, så spolestikket er rettet perfekt ind efter åbningen i svømmecoveret.

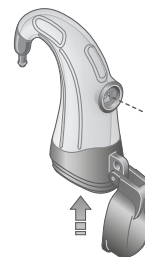

- 5 Hold det vinklede svømmespolestik med kablet vinkelret på svømmecoveret, og sæt stikket helt ind i lydprocessoren og coveret. Den røde pakningsring skal berøre coveret.

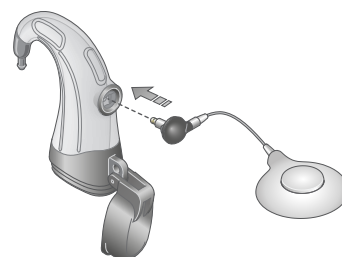


- 6 Drej stikket 90 grader med uret for at låse det på plads. Spolekablet skal ende med at være parallelt med coveret.

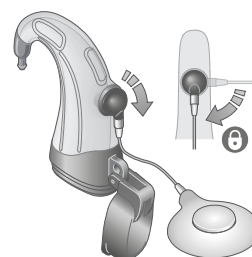

- 7 Luk låget på svømmecoveret.

- 8 Sæt systemet på øret.

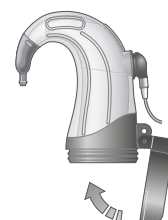

Udsagnene i denne Kvikreferencevejledning menes at være korrekte på datoen for publikation. Billederne er ikke kontraktligt bindende. Produkternes tilgængelighed afhænger af den lokale registrering.

Oticon Medical (NEURELEC) forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, karakteristika og modeller uden forudgående varsel. Den eneste garanti Oticon Medical (NEURELEC) giver, er den udtrykkelige, skriftlige garanti givet ved salget eller udlejningen af deres produkter.

Oticon Medical
NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

CE 0459 (2020)

223093DK - version A / 2020.06