

# Mode d'emploi



## SmartCharger miniRITE R miniBTE R

Oticon Real™  
Oticon More™  
Oticon Zircon  
Oticon Play PX  
Oticon CROS PX

# Introduction de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouveau chargeur.

Veillez à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section **Avertissements**.

Il décrit comment utiliser au mieux votre chargeur.

Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre chargeur, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Pour votre information, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à parcourir les différentes sections.

| **À propos de** | [Pour bien commencer](#) | [Utilisation quotidienne](#) | [Avertissements](#) | [Plus d'informations](#) |

## **REMARQUE IMPORTANTE**

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre solution d'aide auditive spécifique, reportez-vous au mode d'emploi de celle-ci.

## Usage prévu

<b>Usage prévu</b>	Le chargeur est conçu pour recharger les aides auditives et les émetteurs CROS pourvus de batteries rechargeables. Le produit est conçu pour être utilisé avec une solution auditive déterminée.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Il n'existe aucune instruction d'utilisation (diagnostic) pour le chargeur à proprement parler.
<b>Utilisateur prévu</b>	Personne souffrant d'une perte auditive, utilisant une aide auditive et les personnes en charge de l'utilisateur. Audioprothésiste responsable du réglage de l'accessoire.
<b>Groupe prévu d'utilisateurs</b>	Adultes et enfants de plus de 36 mois.
<b>Environnement d'utilisation</b>	Intérieur et extérieur.
<b>Contre-indications</b>	Aucune contre-indication.
<b>Avantages cliniques</b>	Consulter les avantages cliniques de l'aide auditive.

# Sommaire

## À propos de

Contenu de la boîte	6
Chargeur	8
Conditions de température	9

## Pour bien commencer

Préparation du chargeur	10
Recharger les aides auditives	12

## Utilisation quotidienne

Temps de charge	14
Recharger le chargeur	16
Fonction batterie externe	18
Alimenter et recharger via d'autres sources	19
Sécher vos aides auditives	20
Entretien de votre chargeur	21

## **Avertissements**

---

Avertissements généraux	22
-------------------------	----

---

## **Plus d'informations**

---

Dépannage	26
Conditions d'utilisation	30
Garantie	36

---

# Contenu de la boîte

La boîte d'emballage contient les accessoires suivants :



Chargeur



Prise murale  
(varie d'un pays à l'autre)



Câble



Ce mode d'emploi



# Chargeur

## Description et fonction

### Câble USB


Insérer dans la prise murale



**Ports de charge**  
Pour les aides auditives lors de la charge

### Prise murale

Pour prise électrique

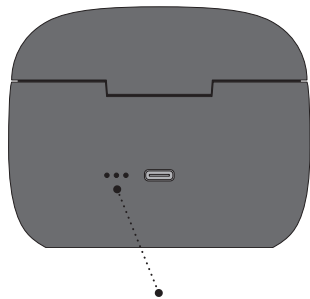

**Indicateur de batterie**  
Affiche l'état de charge de la batterie externe/le niveau de charge de la batterie externe



# Conditions de température

Température	Condition de charge
En-dessous de +5°C (+41°F)	Pas de charge en raison de la basse température.
+10 °C à +35 °C (+50°F à +95°F)	Condition optimale de charge. La charge des aides auditives peut prendre jusqu'à 3,5 heures.
+5°C à +10°C et +35°C à +38°C (+41°F à 50°F et +95°F à +100°F)	Charge prolongée. La charge des aides auditives peut prendre jusqu'à 5 heures.
Au-dessus de +38°C (+100°F)	Pas de charge en raison de la température élevée.


## REMARQUE IMPORTANTE

Ne pas exposer le chargeur à des températures inférieures à -20°C (-4°F) ou supérieures à +60°C (140°F).

# Préparation du chargeur


Connecter à la source d'alimentation

## Étape 1

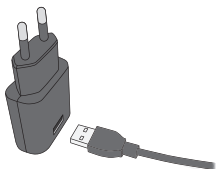


Insérez le connecteur USB dans la fiche électrique.

## Étape 2

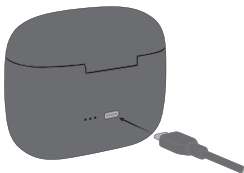

Insérez l'autre extrémité du câble USB à l'arrière du chargeur.


## Étape 3

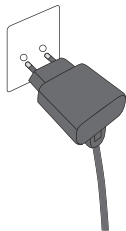

Insérez la fiche électrique dans une prise murale.

Le chargeur s'allume automatiquement et commence à charger la batterie externe intégrée.

## Le chargeur est allumé

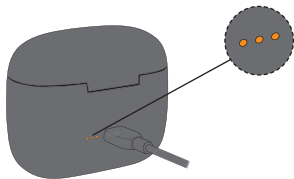

Lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation, l'état de charge de la batterie externe du chargeur est affiché.

### **Première utilisation - Recharger la batterie externe**

Lorsque vous utilisez votre chargeur pour la première fois, il est important de recharger complètement la batterie intégrée du chargeur.

# Recharger les aides auditives


Placez les aides auditives dans le chargeur



Placez les aides auditives dans les ports de charge comme indiqué sur l'image et fermez le couvercle. Veillez à ce que vos aides auditives correspondent aux points de couleur des ports de charge du chargeur qui distinguent droite et gauche.

Le point de couleur ROUGE est pour l'aide auditive droite. Le point de couleur BLEU est pour l'aide auditive gauche.

État de charge

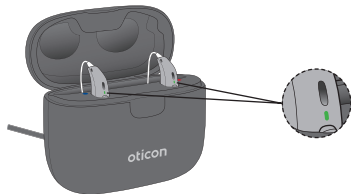

Les voyants LED des aides auditives s'allument lorsque les aides auditives sont placées correctement dans le chargeur.

**Voyant LED d'état de charge de l'aide auditive :**

ORANGE = Charge en cours  
VERT = Charge complète



## Temps de charge

Veillez à recharger complètement vos aides auditives avant la première utilisation et rechargez-les chaque nuit. Cela vous permet de commencer votre journée avec des aides auditives complètement chargées.

Si votre aide auditive est complètement déchargée, le temps de chargement normal est de :

<b>miniRITE R</b>	Entièrement chargée	Chargée à 50%	Chargée à 25%
	3 heures	1 heure	30 min
<b>miniBTE R</b>	Entièrement chargée	Chargée à 40%	Chargée à 20%
	3,5 heures	1 heure	30 min

Lorsque la pile de vos aides auditives est complètement chargée, le processus de chargement s'arrête automatiquement.

Le temps de chargement peut varier en fonction de la capacité restante de la batterie et entre l'aide auditive gauche et droite.

Le couvercle du chargeur sert de protection et de stockage pour vos aides auditives. Pendant la charge, lorsque vous ouvrez le couvercle, les voyants lumineux (LED) de vos aides auditives s'allument pour indiquer leur état de charge.

**Remarque**

Si vous n'avez pas utilisé votre aide auditive depuis longtemps et que vous essayez de la recharger, 30 secondes peuvent s'écouler avant le début du chargement de l'aide auditive. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre aide auditive.

**REMARQUE IMPORTANTE**

Veillez à ce que votre chargeur soit alimenté ou que la batterie intégrée du chargeur soit chargée lorsque l'aide auditive ou l'émetteur sont installés dans le port de charge. Dans le cas contraire, vos aides auditives ou l'émetteur resteront allumés et continueront à consommer l'énergie de la batterie.

## Recharger le chargeur

Votre chargeur contient une batterie intégrée Lithium-ion rechargeable qui fait également office de batterie externe. Cela vous permet de recharger une paire d'aides auditives au moins trois fois sur une batterie externe complètement chargée lorsque vous êtes en déplacement.

### Lorsque le chargeur est branché à une source d'alimentation

- Vos aides auditives et la batterie intégrée du chargeur sont en cours de charge.

### Lorsque le chargeur est débranché d'une source d'alimentation

- Le chargeur rentre en mode **Batterie externe**, ce qui vous permet de charger vos aides auditives lorsque vous n'avez pas accès à une prise électrique.

### Durées de mise en charge

Batterie de la batterie externe	Batterie externe + aides auditives
Jusqu'à 4 heures selon le niveau de charge	Jusqu'à 8 heures selon le niveau de charge






#### Remarque

Il est recommandé de laisser le couvercle fermé à chaque fois que vous chargez vos aides auditives.



Lorsque le chargeur est connecté à une source d'alimentation, les voyants lumineux (LED) sur votre chargeur indiquent l'état de charge de la batterie externe.

Les voyants lumineux (LED) s'éteignent brièvement une fois la batterie externe complètement chargée.

	Charge (batterie trop faible pour recharger les aides auditives)
	Charge
	
	
	Entièrement chargé





 clignotement ORANGE    ORANGE    VERT

### REMARQUE IMPORTANTE

Lors du chargement, les voyants lumineux de votre chargeur doivent être allumés comme décrit dans ce mode d'emploi. Si les voyants lumineux ne sont pas allumés comme décrit, débranchez le chargeur et consultez votre audioprothésiste.

## Fonction batterie externe

Lorsque le chargeur est déconnecté de l'alimentation, les voyants lumineux (LED) de votre chargeur indiquent le niveau de charge de la batterie externe. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant en ouvrant le couvercle du chargeur.

	Trois cycles de recharge complète de deux aides auditives
	Deux cycles de recharge complète de deux aides auditives
	Un cycle de recharge complète de deux aides auditives
	Batterie trop faible pour un cycle de recharge complet

 Clignotement ORANGE  VERT

### Stockage à long terme

Avant de stocker le chargeur durant une période plus longue (plus de 14 jours), veillez à recharger complètement la batterie externe du chargeur. Ainsi, la batterie pourra être à nouveau chargée.

#### Remarque

Pour protéger la batterie rechargeable, il est nécessaire de charger complètement la batterie externe du chargeur tous les 12 mois, sinon la batterie rechargeable aura peut-être besoin d'être remplacée.

## Alimenter et recharger via d'autres sources

Vous pouvez alimenter et charger la batterie du chargeur depuis d'autres sources qu'une prise électrique murale. Cela peut être réalisé à l'aide du câble USB du chargeur.

Assurez-vous que la source d'alimentation est compatible USB 2.0, sortie minimale de 500 mA.

### Exemples de sources d'alimentation :

- Ordinateur
- Voiture

#### **REMARQUE IMPORTANTE**

Lorsque vous utilisez une prise électrique murale, utilisez l'alimentation électrique d'origine fournie (5,0V/1A) pour le chargeur.

## Sécher vos aides auditives

Le SmartCharger utilise la chaleur de la charge inductive pour sécher vos aides auditives lorsque vous les placez dans les ports de charge.

Le séchage de vos aides auditives est activé lorsque vous les placez dans les ports de charge et que le chargement commence.

### REMARQUE IMPORTANTE

Veillez à retirer le câble USB lorsque vous transportez le chargeur.

## Entretien de votre chargeur

Veillez toujours à ce que le chargeur soit sec et propre avant de l'utiliser. Nettoyez les ports de charge en utilisant un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau ou de liquide de nettoyage pour nettoyer les ports de charge.

Rangez votre chargeur dans un endroit sec, par exemple dans la chambre.

Veillez à maintenir le chargeur dans un environnement où la température se situe entre +5°C et +38°C (+41°F et +100°F).

### **REMARQUE IMPORTANTE**

Pour nettoyer le chargeur, utilisez un chiffon doux et sec. Le chargeur ne doit jamais être lavé ni immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

## **Avertissements généraux**

Pour votre sécurité personnelle et pour garantir une utilisation correcte de votre chargeur, vous devez bien vous familiariser avec les avertissements d'ordre général suivants avant de l'utiliser. Consultez votre audioprothésiste si vous rencontrez des opérations inattendues ou des incidents sérieux avec le chargeur au cours de son utilisation ou à cause de son utilisation. Votre audioprothésiste vous aidera à résoudre les problèmes liés à la manipulation et, le cas échéant, à effectuer un signalement auprès du fabricant et/ou des autorités nationales.

### **Risque de brûlures**

Ne placez rien d'autre que les aides auditives dans les ports de charge.

### **Risque d'étouffement**

Le chargeur, les aides auditives et leurs composants doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact.

*En cas d'ingestion d'une petite pièce, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous dans un hôpital.*

### **Chaleur et produits chimiques**

Le chargeur ne doit jamais être exposé à une température extrême, par exemple en le laissant dans une voiture garée en plein soleil.

Le chargeur ne doit pas être séché dans un four à micro-ondes ou tout autre type de four.

Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer le chargeur. Enlevez toujours votre chargeur

avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

### **Explosifs**

Le chargeur peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions normales d'utilisation. Le chargeur n'a pas été testé pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives.

Par conséquent, n'utilisez pas le chargeur dans des environnements présentant un danger d'explosion, par ex. des mines, des environnements riches en oxygène ou des zones où des anesthésiques inflammables sont manipulés.

### **Batterie rechargeable**

Ne tentez pas d'ouvrir le chargeur car cela pourrait endommager la batterie.

N'essayez jamais de remplacer la batterie. S'il est nécessaire de la remplacer, veuillez renvoyer votre appareil au fournisseur.

La garantie deviendra nulle en cas de présence de signes d'altération.

Si la batterie fuit, ne portez pas ou ne transportez pas votre chargeur car cela peut provoquer une irritation de la peau à cause de l'acide fuyant de la batterie. Si votre peau a été en contact avec l'acide d'une batterie qui fuit, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer et assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'acide sur votre peau. Si vous ressentez une irritation cutanée, consultez votre médecin. Pour de plus amples instructions concernant la manipulation de votre chargeur, consultez votre audioprothésiste.

Le rechargement sécurisé des batteries au moyen du connecteur USB dépend entièrement de la source extérieure des signaux. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.

## **Avertissements généraux**

### **Connexion à un équipement externe**

La sécurité d'utilisation du chargeur, lorsqu'il est connecté à un équipement externe avec un câble USB, dépend de la source extérieure des signaux. Lorsque le chargeur est connecté à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.

### **Soyez attentif à votre environnement**

Évitez d'interagir avec votre chargeur lorsque vous devez diriger votre attention sur autre chose. Cela peut vous distraire de votre environnement, par exemple lorsque vous êtes dans la circulation. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant (par exemple les téléphones portables).

### **Effets secondaires possibles**

Bien que les matières utilisées pour fabriquer votre chargeur soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires.

*Si ces effets se produisent, consultez un médecin.*

### **Transport à bord d'un avion**

Consultez la compagnie aérienne pour obtenir des détails concernant le transport du chargeur de votre aide auditive à bord d'un avion.

### **Implants actifs**

Le chargeur a été minutieusement testé et caractérisé pour la santé humaine conformément aux normes internationales en matière d'exposition humaine (rapport d'absorption spécifique – SAR), de puissance électromagnétique induite et de tensions dans le corps



humain. Les valeurs d'exposition sont bien en dessous des limites de sécurité acceptées internationalement pour le SAR, l'alimentation électromagnétique induite et les tensions dans le corps humain définies dans les normes pour la santé humaine.

Il est recommandé de maintenir une distance d'au moins 15 centimètres entre le chargeur et l'implant, par ex. ne le transportez pas dans une poche de poitrine puisqu'il contient des aimants. En général, suivez les directives recommandées par les fabricants de défibrillateurs implantables et de stimulateurs cardiaques concernant l'utilisation avec des appareils électroniques portables et des aimants.

Si vous avez un implant actif, contactez le fabricant de votre appareil implantable pour des informations sur les risques d'interférences.

## **Charge**

Pour éviter que la batterie ne se détériore pendant le stockage, chargez votre chargeur tous les 12 mois.

## **Utilisation d'accessoires d'autres marques**

N'utilisez que des accessoires, des transducteurs ou des câbles fournis par le fabricant de cet appareil. Les accessoires qui ne sont pas d'origine peuvent réduire la compatibilité électromagnétique (CEM) de votre chargeur.

## **Radiographie/tomodensitométrie/IRM/PET-scan, électrothérapie et intervention chirurgicale**

Retirez votre chargeur avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à votre chargeur par des champs électromagnétiques importants.

# Dépannage

Symptôme	Causes possibles
Les aides auditives ne s'allument pas après avoir été retirées du chargeur	Le chargeur n'a pas eu le temps d'allumer les aides auditives avant qu'elles ne soient retirées du chargeur
Deux voyants lumineux (LED) du chargeur émettent des clignotements ORANGE	L'aide auditive ou le chargeur sont trop froids ou trop chauds
Trois voyants lumineux (LED) du chargeur émettent des clignotements ORANGE	Erreur système
Le voyant lumineux (LED) du chargeur reste éteint lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation	Le chargeur n'est pas en charge

## Solutions

---

Placez les aides auditives dans les ports de charge et essayez à nouveau, ou utilisez le bouton-poussoir pour allumer les aides auditives manuellement

---

Déplacez l'aide auditive et le chargeur à un endroit où la température se situe entre +5 °C et +38 °C (+41°F et +100°F)

---

Contactez votre audioprothésiste

---

Vérifiez si la prise murale est connectée correctement

Assurez-vous que la source d'alimentation fournit suffisamment de puissance pour votre chargeur

---

Suite page suivante

# Dépannage

Symptôme	Causes possibles
<b>Le voyant lumineux (LED) de l'aide auditive clignote en VERT lorsque l'aide auditive est placée dans le chargeur</b>	L'aide auditive n'a pas été utilisée pendant une longue période
<b>La LED de l'aide auditive reste éteinte lorsque l'aide auditive est placée dans le chargeur</b>	Le chargeur n'est pas branché
	L'aide auditive ou le chargeur sont trop chauds ou trop froids
	La charge est incomplète. Le chargeur a arrêté le chargement pour protéger la batterie.
	L'aide auditive n'est pas insérée correctement dans le chargeur
<b>Le voyant lumineux (LED) de l'aide auditive clignote en ORANGE lorsque l'aide auditive est placée dans le chargeur</b>	Erreur système

## Solutions

Selon le niveau d'énergie de la pile de l'aide auditive, celle-ci reprendra une charge normale après un délai allant jusqu'à 10 minutes.

Veillez à laisser l'aide auditive dans le chargeur au cours de ce processus.

---

Vérifiez si la prise murale du chargeur est connectée correctement ou si la batterie externe est suffisamment chargée

---

Déplacez l'aide auditive et le chargeur à un endroit où la température se situe entre +5 °C et +38 °C (+41°F et +100°F)

---

Réinsérez l'aide auditive dans le chargeur. Cela complètera la charge en 15 minutes environ.

---

Vérifiez qu'il n'y ait pas d'impuretés dans les ports de charge

---

Contactez votre audioprothésiste

## Conditions d'utilisation

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température : +5 °C à +38 °C (+41 °F à +100 °F) Humidité : 5 % à 93 %, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
<b>Transport et conditions de stockage</b>	La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :  Température : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F) Humidité : 5 % à 93 %, sans condensation

Pour des informations concernant les conditions d'utilisation de l'aide auditive, consultez le mode d'emploi de l'aide auditive.

Cet appareil médical est conforme  
au Règlement relatif aux dispositifs  
médicaux (UE) 2017/745.

La déclaration de conformité est  
disponible auprès du siège social.

Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark  
[www.oticon.global/doc](http://www.oticon.global/doc)

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :  
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,  
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE"



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemark



Les déchets  
électroniques doivent  
être traités selon la  
législation locale.



## Description des symboles et des abréviations utilisés dans ce mode d'emploi



### **Avertissements**

Les textes marqués d'un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.



### **Fabricant**

L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans le règlement de l'UE 2017/745.



### **Marquage CE**

L'appareil est conforme à tous les règlements et directives de l'UE.



### **Déchets électroniques (DEEE)**

Recyclez les aides auditives, les accessoires, les piles ou les batteries conformément aux réglementations locales.

Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également renvoyer les déchets électroniques à leur audioprothésiste. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets et au matériel électrique (DEEE).



### **Marque de conformité réglementaire (RCM)**

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique applicables aux appareils fournis aux marchés australien ou néo-zélandais.



## Description des symboles supplémentaires utilisés sur les étiquettes



### **Garder au sec**

Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.



### **Numéro de référence**

Indique le numéro de référence du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.



### **Numéro de série**

Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un appareil médical spécifique puisse être identifié.



### **Dispositif médical**

Cet appareil est un dispositif médical.



### **Nature de la tension d'alimentation**

Indique que la nature de l'alimentation électrique de l'appareil devrait être en CC (courant continu).



Li-ion

### **Symbole de recyclage de la batterie**

Symbole de recyclage de la batterie Lithium-ion.



### **Limite de température**

Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.



### **Limite d'humidité**

Indique le taux d'humidité auquel le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.

## Description des symboles supplémentaires utilisés sur les étiquettes

**FW**

**FW**

Version du firmware utilisée dans l'appareil.

**UDI**

**Identifiant unique des dispositifs**

Indique un support qui contient des informations sur l'identifiant unique des dispositifs.

## Garantie internationale

Votre appareil bénéficie d'une garantie internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie internationale couvre les défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, tubes, écouteurs, embouts et filtres, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des changements physiques au niveau de votre oreille, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie internationale et peuvent l'annuler. La garantie internationale expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques

dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation du pays dans lequel vous avez acheté votre appareil. Votre audioprothésiste peut également offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie internationale. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

### **Si vous avez besoin de services d'entretien**

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre appareil tout au long de sa durée de vie. Votre audioprothésiste peut exiger des frais de service.

# Garantie

## Certificat

Nom de l'utilisateur : \_\_\_\_\_

Audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Adresse de l'audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Téléphone de l'audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Période de garantie : \_\_\_\_\_ Mois : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_ N° de série : \_\_\_\_\_

262445FR / 2022.10.17 / v1





Life-changing technology signifie  
Des technologies qui changent la vie.

**oticon**  
life-changing **technology**