

PHILIPS

HearLink

AudioClip



사용 설명서

HEA6000

품질 보증서

일시 : _____ 모델 : _____

보증 기간 : _____

시리얼 번호 : _____

청각 클리닉

국제 보증

오디오클립은 제조업체에 의해 배송된 날로부터 24 개월 동안 국제 보증이 적용됩니다. 보증은 보청기 자체의 기계적인 결함에 대해서만 적용되며 배터리, 케이블, 전원 등과 같은 액세서리에는 적용되지 않습니다. 부적절한 취급 또는 관리, 과도한 사용, 사고, 공인되지 않은 업체에 의한 수리, 부식될 수 있는 환경의 노출, 기기에 들어간 이물질로 인한 손상 또는 잘못된 조정으로 인해 발생한 문제는 보증에 적용되지 않습니다. 상기의 품질 보증은 소비재를 관리하는 국가 규정 하에 있을 수 있는 사용자의 법적 권한에 영향을 미치지 않습니다. 귀하의 청력 관리 전문가가 제한된 보증의 조항을 초과하는 품질 보증을 발급할 수도 있습니다. 보다 자세한 정보는 전문가에게 문의하십시오.

수리가 필요할 경우

단순한 문제의 처리가 가능하고 즉시 조정할 수 있는 청력 관리 전문가에게 오디오클립을 가져가십시오.

소책자 소개

이 소책자는 귀하의 새로운 오디오클립을 사용하고 유지 관리하는 방법을 보여줍니다. 주의사항을 포함하여 소책자를 주의 깊게 읽으십시오. 소책자를 통해 귀하의 새로운 오디오클립의 모든 이점을 알 수 있습니다.

궁금한 사항이 있는 경우에는 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.

사용 목적

오디오클립은 음성 및 무선 전자 오디오 기기를 포함한, 보청기와 주변 환경의 소리 송, 수신을 위하여 제작되었습니다. 또한 무선 보청기 사용자들의 보청기 조절 및 기능 제어를 지원할 수 있습니다.

오디오클립은 성인과 36개월 이상의 아동이 사용하도록 합니다.


중요 사항

오디오클립을 사용하기 전에 이 책자의 전체 내용을 숙지하시기 바랍니다. 이 책자에는 오디오클립의 사용 및 관리 관한 지침과 중요한 정보가 들어 있습니다.

소개


오디오클립은 휴대 전화를 위한 무선 헤드셋과 원격 마이크/파트너 마이크로 사용할 수 있습니다.

1. **휴대 전화를 위한 헤드셋**
휴대 전화의 소리는
오디오클립 (A)을 통해
보청기로 스트리밍 됩니다.
착용자의 음성은
오디오클립으로
수집되어 휴대 전화 (B)로
전송됩니다.

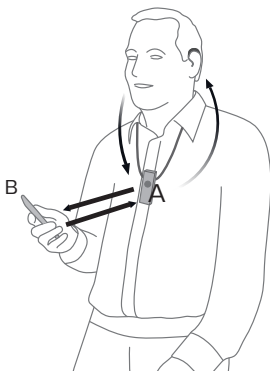

2. 원격/파트너 마이크

선택한 스피커의 음성은 오디오클립에서 보청기로 무선으로 전송됩니다.

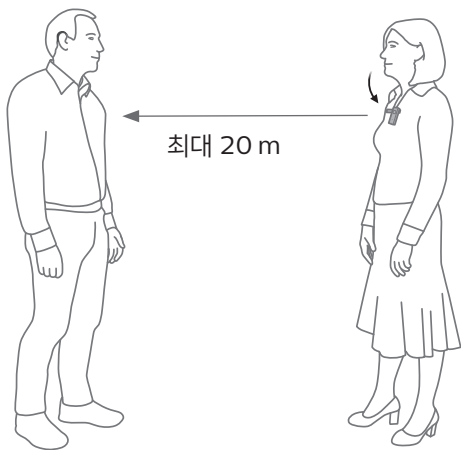

목차

구성품	11
개요 - 주요 기능	12
개요 - 제품 표시등	14
시작하기	16
일상 사용: 켜/끔	22
일상 사용: 충전	23
오디오클립으로 휴대전화 사용하기	25
오디오클립을 휴대전화와 연결하기	26
전화 수신	27
전화 발신	29
고급 기능	30
음악 청취	31
오디오클립으로 원격 마이크 사용하기	33
마이크 모드 선택하기	34
원격 마이크의 소리 시작하기/멈추기	35
원격 마이크의 소리 조절하기	36

보청기를 사용하여 원격 마이크의 소리 시작하기/ 멈추기	37
오디오클립을 보청기 리모컨으로 활용하기	38
다른 특징 및 기능	39
오디오클립 관리	40
주의 사항	41
제품 사양	47
기술적 정보	49

구성품

오디오클립 패키지에는 다음과 같은 구성품이 들어있습니다:



오디오클립



USB 충전 케이블



벽에 꽂는 충전기
(나라마다 다름)



목걸이 - 긴 사이즈



목걸이 - 보통 사이즈





파우치




소책자 (사용 설명서)

개요 - 주요 기능

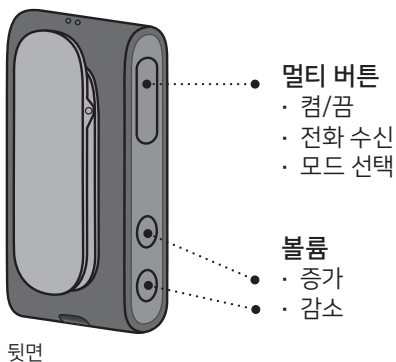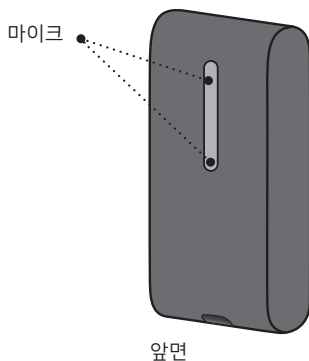


상태 표시등

전원 표시등

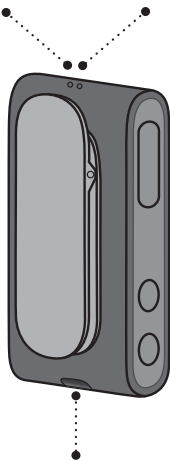

충전 소켓
(Micro USB)

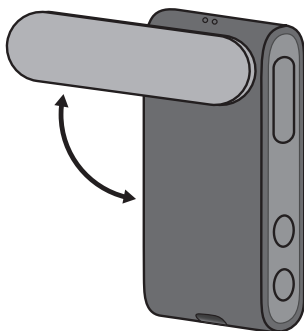

오디오클립 착용을 위한
(회전) 클립

개요 - 제품 표시등


상태	설명	
	노란색 깜빡임	연결 보청기 탐색 중
	노란색 고정	보청기 연결완료 (휴대폰 연결없는 상태)
	파란색 깜빡임	휴대폰 탐색 중 (연결 중)
	파란색 고정	휴대폰 연결 완료
	녹색 고정	전화 통화 중
	녹색 깜빡임	전화 수신
	주황색 고정	음악 청취
	자홍색 고정	원격 마이크 모드
	자홍색 깜빡임	원격 마이크 연결 중

전원	설명	
	빨간색 고정	배터리 부족
	녹색 고정	전원 켜짐 - 충전 상태 아님
	녹색 깜빡임	전원 켜짐 - 충전 중
	녹색 흐려짐	전원 켜짐 - 충전 완료
	주황색 깜빡임	전원 꺼짐 - 충전 중
	주황색 고정	전원 꺼짐 - 충전 완료

시작하기


오디오클립을 보청기와 사용하기 위하여, 먼저 보청기와 오디오클립을 쌍으로 연결해야 합니다. 오디오클립과 휴대전화를 사용하려면 오디오 클립을 휴대 전화와 페어링 하여 연결해야 합니다.

A. 보청기와 오디오클립 페어링 하기

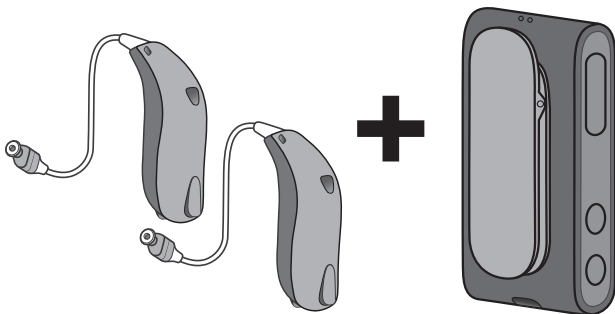

보청기와 오디오클립 페어링에 대한 자세한 지침은 **18** 페이지를 참조하십시오.


B. 오디오클립과 휴대 전화를 페어링 하기

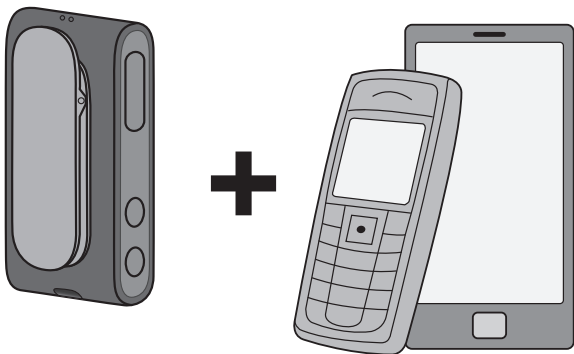


휴대전화와 오디오클립 페어링에 대한 자세한 지침은
20 페이지를 참조하십시오.

A. 보청기와 오디오클립 페어링 하기


1. 오디오클립 전원 확인
전원 표시등의 불이 꺼질 때(●)까지, 약 6초 동안 멀티버튼을 눌러줍니다.

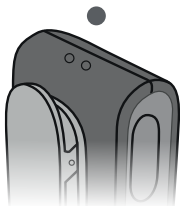


2. 보청기 전원 끄
(배터리 도어를 열며)

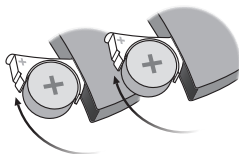

3. 보청기 전원 켜
(배터리 도어를 닫으며)
이제 보청기는 오디오클립과 연결될 준비가 되었습니다.
완전한 연결까지 3분 정도 소요될 수 있습니다.

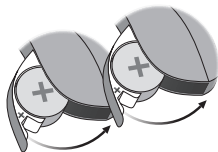


4. 오디오클립 전원 켜기
전원 표시등에 녹색 불이 고정될 때(●)까지, 멀티버튼을 약 3초 동안 눌러줍니다.

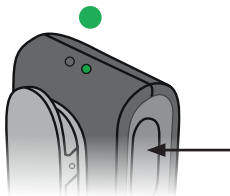

5. 오디오클립은 보청기를
탐색할 것이며, 상태
표시등에 노란 불이
깜빡이는 것(●)을
확인할 수 있습니다.



6. 오디오클립과 보청기를 가깝게 위치시킵니다.
(최대 20 cm)

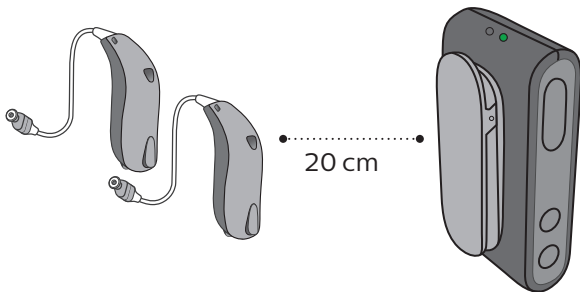

7. 보청기와 연결 완료 확인
상태 표시등에 노란 불이
고정되는 것(●)을 확인
합니다.




B. 휴대 전화와 오디오클립 페어링 하기

1. 오디오클립 페어링 모드로 변경

상태 표시등의 파란 불이 깜박일 때(●)까지 멀티버튼과 볼륨 증가 버튼(A)을 동시에 약 6초 정도 눌러 줍니다. .

2. 오디오클립은 약 3분간 페어링 모드로 유지될 것입니다.

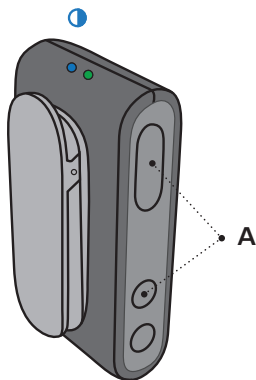


3. 휴대 전화의 페어링 활성화

블루투스를 활성화 시킨 후, 연결 가능한 기기 목록 중 오디오클립을 찾아 연결 합니다.

일반적으로 설정에서 확인할 수 있습니다 -> 휴대 전화의 블루투스 섹션에서 확인해 봅니다.

4. 핀 코드 입력

휴대 전화의 핀 코드 입력이 필요한 경우, 숫자 0000을 입력 합니다.

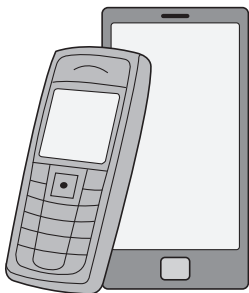

5. 페어링 완료


두 기기의 연결이 완료가 되면 상태 표시기의 파란 불이 고정(●)됩니다.



일상 사용: 켜기/끄기




- **켜기**
전원 표시기에 녹색 불이 고정(●)될 때까지 멀티 버튼을 약 3초 동안 눌러 줍니다.

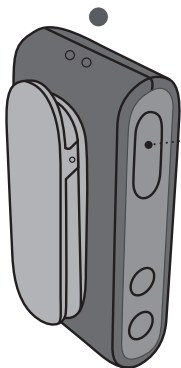

- **끄기**
전원 표시기가 꺼질 때(●)까지 멀티 버튼을 약 6초 동안 눌러 줍니다.


일상 사용: 충전 중

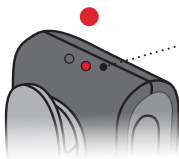

- **배터리 부족**
스트리밍 시간이 30분 남았을 때, 전원 표시기가 빨간색(●)으로 바뀝니다.



- **충전 중**
구성품에 포함된 충전기를 오디오클립 하단의 마이크로 USB 커넥터에 연결합니다, 전원 표시등이 녹색 ● 또는 주황색 ● 으로 깜박일 것 입니다.

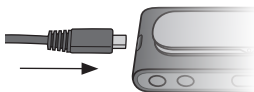

충전 표시기			상태
	깜빡임	충전 중	오디오클립 켜 있는 상태
	사라짐	충전 완료	
	깜빡임	충전 중	오디오클립 꺼 있는 상태
	고정	충전 완료	

중요 공지



충전 표시등이 켜지지 않으면, 충전기에서 장치를 분리하고 청각 전문가와 상담하십시오.

중요 공지

오디오클립을 충전 할 때는 제공된 전원 공급 장치 5.0V / 1A를 사용해야 합니다, 다음의 CE 및 안전 표시 유형을 사용하십시오:




오디오클립을 휴대 전화와 사용하기

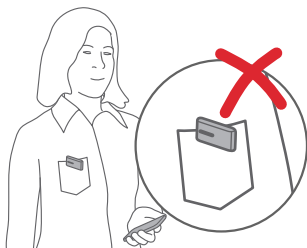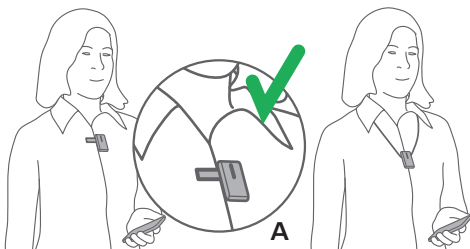

중요 공지

오디오클립은 최상의 수행능력을 위해 표시된 대로 착용해야 합니다. 오디오클립은 마이크가 수직으로 입을 가리키게 착용하며 (A), 옷 등으로 덮여 있지 않아야 합니다. 오디오클립과 휴대 전화 간의 최대 거리는 10m입니다.

오디오클립을 휴대전화와 연결하기

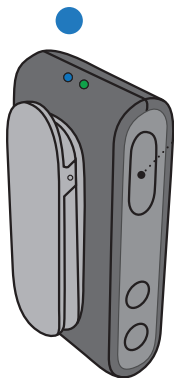


- 전화 모드 선택 하기
모드를 변경하기 위하여,
멀티 버튼을 약 3초간
누릅니다. 모드 변경이 완료
되면 보청기에서 신호음이
들릴 것 입니다. 이때, 상태
표시기는 파란색(●)으로
고정될 것 입니다.



상태	설명
●	오디오클립은 보청기에 연결되었습니다. (휴대 전화와의 연결 없음).
●	휴대전화에 연결 되었습니다.
●	오디오클립은 원격/파트너 마이크 모드 입니다.

전화 수신

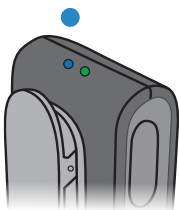

전화 연결하기


오디오클립이 켜져 있고
휴대 전화가 범위 내에
있으면, 휴대 전화에
자동으로 연결될 것 입니다.

상태 표시기는 파란색(●)
으로 고정될 것 입니다.




전화 벨


전화 벨이 울리면
보청기에서 신호음(사용
가능한 경우 전화기의
벨소리)을 듣게 될 것
입니다.

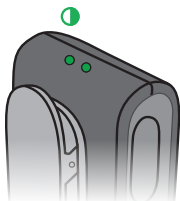

상태 표시기에는 녹색
(●) 불빛이 깜빡 거릴 것
입니다.

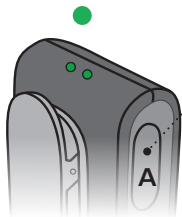


- **전화 받기**
멀티 버튼 (A)을 짧게 누르거나, 휴대 전화로 전화를 받습니다. 통화가 연결되면, 상태 표시기가 녹색(●) 불빛으로 고정될 것입니다.

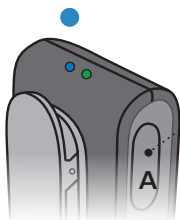

- **전화 끊기**
멀티 버튼 (A)을 짧게 누르거나, 휴대 전화의 전화를 끊습니다. 통화가 끊어지면, 상태 표시기가 파란색(●) 불빛으로 고정될 것입니다.

전화 걸기

전화를 걸려면 휴대 전화를 사용해야 합니다(오디오클립으로 전화 발신 안됨), 전화 통화가 자동으로 오디오클립에 연결될 것 입니다.

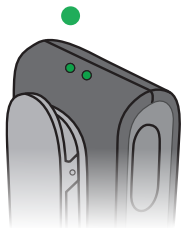

통화가 연결되면 상태 표시기가 녹색(●) 불빛으로 고정될 것 입니다.

고급 기능

음성 다이얼링/음성 명령

휴대폰에 연결되어있는 경우, 멀티 버튼을 두 번 누르면 음성 다이얼이 활성화됩니다(전화기가 지원할 경우).

전화 거절

전화벨이 울리는 동안 볼륨 감소 버튼을 길게 누르면, 전화가 거절 됩니다.

보청기 마이크 음소거

볼륨 감소 버튼을 약 3초간 길게 누르면, 보청기 마이크가 음소거 됩니다.

볼륨 증가 또는 감소 버튼을 짧게 누르면, 보청기 마이크는 다시 활성화 될 것 입니다.

음악 청취

무선 오디오 (A2DP)

Bluetooth를 통해 휴대 전화 또는 다른 기기를 연결하였을 때, 휴대 전화 또는 다른 기기에서 재생된 음악이 자동으로 보청기에서 재생될 것 입니다.

상태 표시등은 주황색(●)으로 고정되었습니다.


오디오클립에서 아무것도 조작할 필요가 없습니다.



상태	설명
●	오디오클립은 휴대 전화의 음악을 스트리밍 중 입니다.

볼륨 조절

음악을 듣는 동안, 스트리밍된 신호의 소리를 볼륨 증가/감소 버튼을 통하여 조절할 수 있습니다.

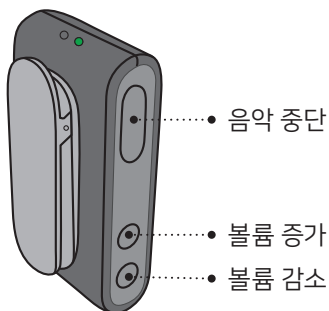


휴대전화의 신호 중단하기

멀티 버튼을 짧게 눌러 스트리밍을 멈출 수 있습니다.
휴대전화의 조절을 통하여, 소리를 다시 청취할 수 있습니다.

원격 마이크로서, 오디오클립을 사용하기

원격 마이크


이 모드에서는 오디오클립을 착용한 사람의 음성을 보청기로 직접 들을 수 있습니다.

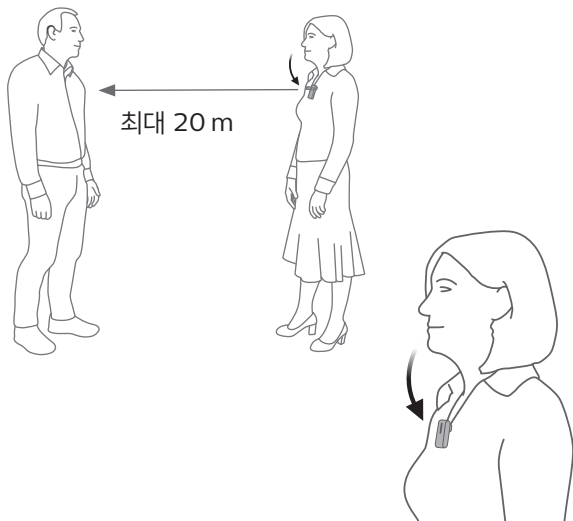

중요 공지

마이크가 수직으로 입을 가리키고 있는지, 옷 등에 덮여 있지는 않은지 확인합니다.

마이크 모드 선택하기

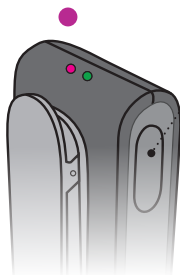

- 마이크 모드 선택하기
멀티 버튼을 약 3초 동안
길게 눌러, 모드를 변경
합니다.


모드 변경이 완료 되면,
보청기로 신호음을 들을 수
있습니다.



상태 표시등은 자홍색(●)
으로 고정될 것 입니다.

상태	설명
●	오디오클립은 보청기에 연결되었습니다. (휴대 전화와의 연결 없음).
●	휴대전화에 연결 되었습니다.
●	오디오클립은 원격/파트너 마이크 모드 입니다.

원격 마이크의 소리 시작하기/ 멈추기

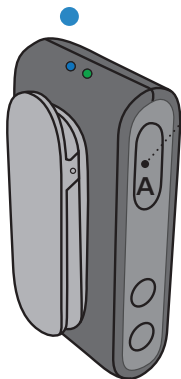


- 원격 마이크의 소리 멈추기
멀티 버튼을 (A) 약 3 초간
누르면, 원격 마이크에서
보청기로 전달되는 신호를
멈추고, 보청기는 기존
프로그램으로 다시 전환 될
것 입니다.

상태 표시등은 노란색 ●
또는 파란색 ● 고정으로
변경될 것 입니다.

원격 마이크의 소리 조절하기

볼륨 증가 또는 감소

스트리밍된 신호를 볼륨 버튼을 이용하여 조절할 수 있습니다.

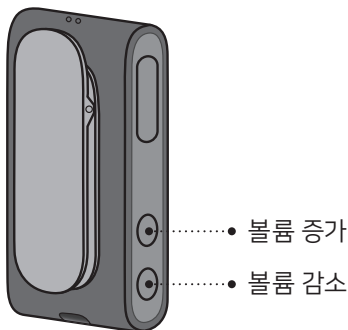

보청기 마이크 음소거

(원격 마이크로만 소리 수신 하기)

볼륨 감소 버튼을 약 3초간 눌러, 보청기 마이크를 음소거 합니다.

볼륨 증가 또는 감소 버튼을 짧게 눌러 보청기 마이크를 다시 활성화할 수 있습니다.


보청기를 사용하여 원격 마이크의 소리 시작하기/멈추기

P1 -> P2 -> TV ->

마이크

보청기 버튼을 누르면, 다음 프로그램으로 전환 될 것 입니다.

원격 마이크 프로그램으로 변환되면, 보청기로 신호음이 들릴 것 입니다.

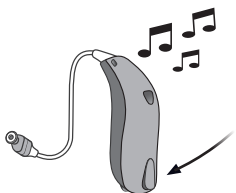


원격 마이크 모드를 중단하려면, 원하는 보청기 프로그램으로 변환 합니다.

중요 공지

보청기 기능에 대한 자세한 내용은 보청기 사용 설명서를 참조하십시오.


오디오클립을 보청기 리모컨으로 활용하기

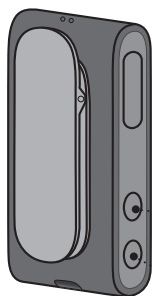

오디오클립이 소리를
스트리밍 하지 않을 경우,
보청기 리모컨의 역할로써
활용할 수 있습니다.

- 볼륨 증가
짧게 누름

- 볼륨 감소
짧게 누름

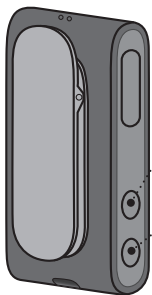

- 다음 프로그램
약 3초 동안 누름

- 보청기 마이크 음소거 -
길게 누름
볼륨 증가 또는 감소 버튼을
짧게 누름으로써 음소거 해제

중요 공지

오디오클립과 보청기 간의 최대 거리는 2미터 입니다.

다른 특징 및 기능

한번에 하나의 기기 연결

여러 기기(최대 8 개)를 페어링 하면 오디오클립은 첫 번째 휴대 전화 또는, 연결 범위 내에 있는 기기를 연결할 것입니다.

마이크 사용 시, 전화 통화 불가

원격 마이크 또는 파트너 마이크로써 사용할 때, 휴대 전화와의 연결은 끊어질 것입니다.

마이크 모드 시, 연결 범위 밖에 위치

오디오클립이 보청기의 연결 범위 밖에 위치할 때에, 보청기는 90초 후에 초기 프로그램으로 돌아갈 것입니다.

Bluetooth 페어링 해지

멀티 버튼, 볼륨 증가/감소 버튼을 동시에 10초 동안 누를 경우, 모든 블루투스 연결이 해지 됩니다. 연결 해지가 완료 되면, 상태 표시등에 빨간색 불빛 ● 이 깜빡 거릴 것입니다.

오디오클립 관리

부드럽고 마른 천으로 오디오클립을 닦습니다, 물이나 기타 액체에 씻거나 담그지 말아야 합니다.

⚠ 주의 사항

오디오클립을 사용하기 전에 안전하고 정확한 사용을 위해 사용자는 다음의 일반적인 주의 사항들을 숙지해야 합니다. 오디오클립으로 예기치 않은 작업이나 이벤트가 발생하는 경우 청각 전문가에게 문의하십시오.

질식 위험 & 작은 부품을 삼킬 수 있는 위험

오디오클립은 어린이와 해당 부품을 삼킬 수 있는 사람의 손에 닿지 않아야 하고 자칫 삼킬 경우 신체적 손상을 일으킬 수 있습니다. 작은 부품을 삼켰을 경우, 즉시 의사의 진찰을 받아야 합니다.

폭발

오디오클립의 전원이 정상적인 사용 환경에서 화재를 유발할 만큼 에너지가 충분하지 않습니다. 하지만, 오디오클립은 폭발 위험 환경에 관한 국제 표준 준수 여부를 테스트하지 않았습니다. 폭발의 위험이 있는 장소에서 오디오클립을 사용하지 않는 것을 권고 드립니다.

X-ray, CT, MR, PET 스캐닝, 전기 치료 및 수술
강한 전자기장에 노출되었을 때 오디오클립이 손상 될 수 있으므로 X-ray, CT, MR, PET 스캔, 전기 요법, 수술 전에 오디오클립을 제거해야 합니다.

고열 및 화학 제품

오디오클립은 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다(예를 들어, 햇빛 아래 주차 된 차 안에 보청기를 방치). 오디오클립의 습기를 말리기 위해서 전자 레인지나 다른 오븐 등을 사용해서는 안됩니다. 화장품, 헤어 스프레이, 향수, 면도 크림, 선탠 로션, 벌레 퇴치약과 같은 화학 물질들은 오디오클립을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 제품들을 사용하기 전에는 항상 오디오클립을 제거하고 완전히 건조 시킨 뒤, 사용 해야 합니다.

전파 방해

오디오클립은 전파 방해에 대해 국제 규격에 따라 완벽히 테스트 되었으나, 보청기와 다른 기기(예를 들어 일부 휴대폰, 밴드 라디오, 상점 도난 방지 알림 시스템) 간의 전파 방해가 발생할 수 있습니다. 만약 이러한 전파 장애가 발생되면 오디오클립을 이러한 기기들로부터 멀리 떨어뜨려야 합니다.

⚠ 주의 사항

교통 수단 사용 시

오디오클립을 사용하면 혼란스러울 수 있습니다.
오디오클립을 사용하는 동안 주변을 주의하십시오.
교통 상황에서 통신 장치 사용에 관한 국가 별 교통법을
참조하십시오.

비행기에서의 사용

오디오클립에는 Bluetooth가 포함되어 있습니다.
승무원이 특별히 허용한 경우를 제외하고는, 기내에서
사용하지 않아야 합니다.

능동 삽입형 의료기기

오디오클립은 인체 노출에 대한 국제 표준 (Specific Absorption Ratio, SAR)에 따라 인체 건강에 대한 철저한 테스트와 특성 규명을 통해 전자기파 및 전압을 인체에 유도합니다. 노출 값은 인체 건강 표준 및 심박 조율기 및 심장 제세동기와 같은 능동 의료용 임플란트와의 공존에 대해 정의 된 SAR에 대한 국제 허용 안전 한계, 인체 내 전압 강세 및 전압을 크게 낮출 수 있습니다.

충전형 배터리

배터리가 손상 될 수 있으니, 오디오클립을 열지 마십시오.

배터리를 절대 교체하지 마십시오. 배터리를 교체해야 할 경우, 공급 업체에 문의 합니다. 훼손의 징후가 있는 경우 서비스 보증이 무효화됩니다.

USB 커넥터를 사용하여 배터리를 충전할 경우, 이에 대한 안전은 외부 신호 소스에 의해 결정됩니다. 벽면 콘센트에 연결된 외부 장비에 연결될 때, 이 장비는 IEC-62368 (IEC-60065, 2019년 6월 20일까지의 IEC-60950) 또는 동등한 안전 표준을 준수 해야 합니다.

외부 장비에 연결

USB 케이블을 통해 외부 장비에 연결될 때, 오디오클립 사용의 안전성은 외부 신호 소스에 의해 결정됩니다. 벽면 콘센트에 연결된 외부 장비에 연결될 때, 이 장비는 IEC-62368 (IEC-60065, 2019년 6월 20일까지의 IEC-60950) 또는 동등한 안전 표준을 준수 해야 합니다.

⚠ 주의 사항

교차 사용

오디오클립은 어린이와 기능을 제어 할 수 있는 사람의 안전을 보장하고 잘못된 사용을 방지하기 위해 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

목걸이 사용

목걸이로 착용 중에 갑자기 무언가에 걸리면, 자동으로 분리되도록 제작 되었습니다. 그러므로, 인증되지 않은 방법으로 목걸이를 짧게 하거나 개조 하려 하지 마십시오. 36 개월 미만의 어린이는 목에 걸어 사용하지 않아야 합니다.

예측 가능한 부작용

오디오클립에 사용된 비 알레르기성 물질은 드물게 피부 자극이나 기타 부작용을 일으킬 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 의사와 상담하십시오.

휴대전화 호환성

필립스에서 포괄적으로 테스트 한 휴대전화 목록을 www.hearingsolutions.philips.com에서 확인할 수 있습니다. 이는 테스트 당시에 호환성을 위한 최소 요구 사항을 충족시키는 제품들입니다. 그러나, 필립스는 일반적으로 이러한 호환성에 대해 책임을 지지 않습니다. 특히, 향후 휴대 전화의 업데이트 또는 발견되지 않은 비 호환성 문제로 인한 책임을 지지 않습니다. 또한 필립스는 예상과 달리, 호환 되지 않는 휴대 전화 환급과 관련하여 재정적인 책임을지지 않습니다. 새 휴대 전화를 구입하기 전에 위에 언급 된 목록을 참조하십시오.

제품 사양

이름/모델	오디오클립/AC1A
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
호환성	필립스 2.4GHz 무선 보청기
크기	53 x 27 x 18 mm; 무게 27 g
사용 조건	작동 습도: 15% ~ 93%, 상대 습도, 비응축 작동 온도: +5°C ~ +40°C 보관과 운송: -20°C ~ +60°C
시스템 특징	휴대 전화 헤드셋(핸즈 프리/헤드셋 프로필) & 스테레오 음악 (A2DP) 원격/파트너 마이크
보청기 조절	볼륨, 프로그램 변환, 보청기 마이크 음소거
배터리 ²	일반 16시간 사용: 2시간 오디오 스트리밍 + 2시간 휴대전화 + 12시간 대기 36시간 대기 (보청기 켜기, 스트리밍 없음) 충전 시간: 2시간 배터리 총 예상 수명: 720번 충전 후에 80% 전력치로 감소/재충전 사이클
소리 음질 ³	스테레오/20kHz 샘플링 주파수
주파수 대역 ³	80 Hz – 10 kHz
페어링 세부 사항	최대 8개까지 블루투스® 기기 페어링
블루투스® 준수	버전 4.2 + EDR
블루투스® 프로파일 지원	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 Headset Profile (HSP) 1.2 Hands-Free Profile (HFP) 1.6 와이드밴드 음성 지원을 포함
무선 범위 ⁴	블루투스® 클래스 2 장치(예, 휴대 전화): 10 미터 오디오클립과 보청기 연결 범위: 20 미터
스트리밍 주파수	2.4 GHz (Bluetooth® band)

방사	모든 관련 표준 준수 시, 최대 50mW까지 17dBm e.r.r.p.와 동일
상태 표시기	LED 탑재(오디오클립). 신호음 전달(보청기)
HearSuite 2019.1 (또는 추후 버전)	스트리밍 프로그램의 피팅

² 공급한 충전기 사용 시

³ 고객의 보청기에 따라 실제 오디오 수행능력 다를 수 있음

⁴ 오디오클립과 다른 장치 사이의 장애물 없음. 2.4 GHz 대역에서 작동하는 다른 장치와 간섭을 일으키거나 연결 범위를 줄일 수 있음

기술적 정보

사용 조건

작동 습도: 15% ~ 93%, 상대 습도, 비응축

작동 온도: +5°C ~ +40°C

보관과 운송: -20°C ~ +60°C

오디오클립 블루투스®는 EDR, BLE (Bluetooth® Low Energy) 및 독점적인 단거리 무선 기술을 사용하는 무선 송, 수신기가 모두 포함되어 있습니다(2.4GHz에서 작동). 2.4GHz 무선 송신기는 약하고 총 복사 전력에서 항상 50mW 미만에서 17mbm e.i.r.p.와 동일 합니다.

오디오클립은 무선 송신기, 전자기기 호환성 및 인체 노출에 관한 국제 표준을 준수합니다.

오디오클립은 제한된 규격을 가지고 있어, 관련된 승인 표시는 본 사용 설명서에서 찾을 수 있습니다.

USA 및 캐나다

이 기기는 하기와 같이 인증 ID 번호가 있는 무선 모듈을 포함하고 있습니다:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

해당 모듈은 FCC 규정의 제 15조 및 캐나다 산업성 허가 면제 RSS 표준을 준수합니다.

작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다:

1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
2. 이 장치는 의도하지 않은 작동을 유발할 수 있는 간섭이 포함된 모든 간섭을 수용합니다.

주의:

규정 준수에 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조를 하면, 사용자의 장비 작동 권한이 무효화 될 수 있습니다.

이 Class B 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

주의: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제 15 조에 의거, Class B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 지역 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출 할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장 할 수는 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 방법 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결하려고 시도하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
- 제조업체 또는 라디오/ TV 기술자와 상담 하십시오.

사용 설명서 또는 포장 라벨에 사용된 기호에 대한 설명

	주의 장치를 사용하기 전에 경고 기호가 표시된 텍스트를 읽어야 합니다.
	제조업체 이 제품은 기호 옆에 이름과 주소가 명시된 제조업체가 생산합니다. EU 지침 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC에 정의된 의료 기기 제조업체를 나타냅니다.
	CE 마크 본 제품은 의료 기기 지침 93/42/EEC를 준수합니다.
	전자 폐기물 (WEEE) 지역 규정에 따라 보청기, 액세서리 또는 배터리를 재활용하거나 처분하기 위해서는 보청기 전문가에게 해당 제품을 보내십시오. 전자 기기는 폐기물 및 전기 장비(WEEE)에 관한 지침 2012/19/EU가 적용됩니다.
	규정 준수 마크 이 제품은 호주 또는 뉴질랜드 시장에 공급되는 제품에 대한 전기 안전, EMC 및 무선 스펙트럼 요구 사항을 준수합니다.
	블루투스® 로고 Bluetooth® SIG, Inc.의 등록 상표이며 이를 사용하려면 라이선스가 필요합니다.

Complies with IMDA Standards DA103820	싱가포르 IMDA 레이블 싱가포르 IMDA 레이블 장치가 IMDA (Info Communications Media Development Authority)에서 게시한 표준 및 사양을 준수하며 싱가포르의 공용 전기 통신 네트워크와 호환되며 다른 공인 무선 통신 네트워크에 무선 주파수 간섭을 일으키지 않음을 나타냅니다.
Rated input: 5.0 V  0.4 A	전원 콘센트
	일본 TELEC 레이블 “R”은 인증 된 무선 장비의 표시를 나타냅니다.
	남아프리카 공화국 ICASA 레이블 남아프리카 공화국에서 기기가 인증되고 공인 된 것을 나타냅니다.
	습기주의 습기로부터 보호되어야 하는 의료 기기를 나타냅니다.
	주의 기호 경고 및 주의 사항에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.
REF	카탈로그 번호 의료 기기를 식별할 수 있도록 제조업체의 카탈로그 번호를 나타냅니다.
SN	시리얼 번호 특정 의료 기기를 식별할 수 있도록 제조업체의 일련 번호를 나타냅니다.

	CTN CTN은 영업 및 고객이 필립스 브랜드 이름을 사용하여 각 제품 유형을 식별하는 데 사용되는 상용 고유 부품 번호입니다.
	FW 펌웨어 버전이 사용된 버전입니다.
 2017DJ6897	China CMIIT ID 해당 기기가 중국에서 인증되었음을 나타냅니다.
	이중 절연 전원 공급 장치가 이중 절연됨을 나타냅니다. 이것은 단일 장애의 위험이 매우 낮다는 것을 의미합니다, 예를 들어, 단일 오류가 발생할 수 없습니다.
	실내 사용 제품이 실내에서 사용할 수 있는 자격이 있음을 나타냅니다.

REACH 선언:

REACH는 필립스 히어링 솔루션의 완제품 중량에서 고 위험성 우려 후보물질(SVHC)이 0.1 % 이상 초과하는 경우를 확인하기 위해 화학 성분 함량 정보를 제공하도록 요구합니다. 제조 시점을 기준으로 REACH SVHC 목록에는 히어링크(HearLink)는 현재 포함되지 않습니다. 더 많은 최신 정보는 다음의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. www.hearingsolutions.philips.com/REACH

제조업체는 이 오디오클립(AC1A)이 Directive 2014 / 53 / EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수 함을 선언합니다. 적합성 선언은 제조업체에서 구할 수 있습니다.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.hearingsolutions.philips.com



Waste from electronic
equipment must be
handled according to
local regulations.



Bluetooth®

< >
8,15 mm

^
9,0 mm
v



Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용을 위해선 라이선스가 필요합니다. 이 제품은 SBO Hearing A / S의 책임 하에 제조 및 판매되며, SBO Hearing A / S는 이 제품을 보증합니다.