

Neuro 2 Swimkit

Snelgids



De Swimkit is een waterdichte oplossing voor de Neuro 2 soundprocessor, waardoor hij 2 uur kan worden ondergedompeld in water tot op een diepte van 3 meter. Dit accessoire houdt uw processor droog tijdens wateractiviteiten, zoals zwemmen, varen of kajakken.

Beoogd gebruik

De Swimkit is een accessoire dat de Neuro 2 soundprocessor extra beschermt bij gebruik in water of vochtige en stoffige omgevingen.

Het zwemhoesje is ontworpen om gedurende één jaar of 50 keer gebruikt te worden, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Inspecteer het zwemhoesje altijd zorgvuldig vóór en na gebruik. Als u wijzigingen in het materiaal of de bevestiging van het hoesje waarneemt, stop dan met het gebruik van het hoesje en bestel nieuwe hoesjes (kit met zwemhoesjes).



De informatie in deze snelgids vervangt niet de gebruiksaanwijzing van de Swimkit. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de Swimkit door de gebruiksaanwijzing te lezen.

De soundprocessor in de zwemhoes plaatsen




Opmerking: Gebruik altijd oplaadbare batterijen om de soundprocessor van energie te voorzien wanneer u de Swimkit gebruikt. Zink-lucht batterijen zijn afhankelijk van de toevoer van verse lucht om energie te produceren en kunnen daarom niet worden gebruikt in een zwemhoesje.


- 1 Open het dekseltje van het zwemhoesje.
- 2 Controleer of het zwemhoesje vrij is van vuil, stof en haar in de opening voor de aansluiting voor de zwemantenne en in de opening en het dekseltje voor het plaatsen van de processor.
- 3 Plaats de soundprocessor volledig in het zwemhoesje. Buig het hoesje tijdens het inbrengen en leid de haak van de soundprocessor voorzichtig naar zijn plaats om te voorkomen dat deze zich aan de zijkant bevindt.

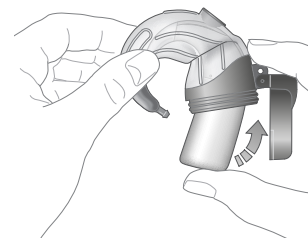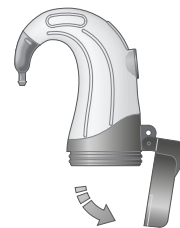


4 Zorg ervoor dat de soundprocessor volledig is geplaatst, zodat de antenne-aansluiting perfect is uitgelijnd met de opening in het zwemhoesje.

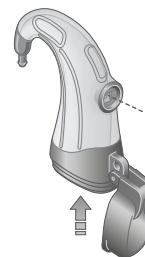

5 Houd het gebogen stekertje van de zwemantenne loodrecht op het zwemhoesje en steek het stekertje volledig in de soundprocessor en het hoesje. De rode afdichtring moet het hoesje raken.

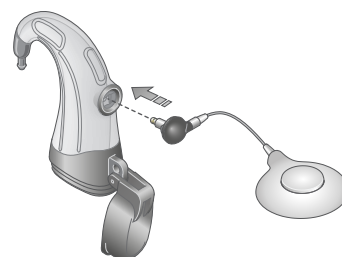


6 Draai de plug 90 graden rechtsom om deze op zijn plaats te vergrendelen. De antennekabel moet zich nu evenwijdig aan het hoesje bevinden.

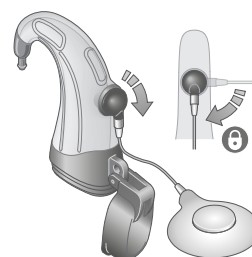

7 Sluit het dekseltje van het zwemhoesje.

8 Plaats het systeem op uw oor.

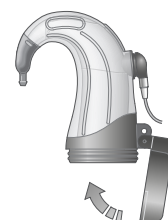

De verklaringen in deze Snelgids worden geacht waar te zijn op de datum van publicatie. De afbeeldingen zijn niet contractueel bindend. Beschikbaarheid van de producten is afhankelijk van lokale registratie.

Oticon Medical (NEURELEC) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de eigenschappen en modellen. De enige garantie die Oticon Medical (NEURELEC) geeft is de uitdrukkelijke schriftelijke garantie die wordt gegeven bij de verkoop of het verhuur van haar producten.

Oticon Medical
NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

CE 0459 (2020)