

Neuro 2 Zestaw do pływania

Skrócona instrukcja obsługi



Zestaw do pływania to wodoodporne rozwiązanie dla procesora mowy Neuro 2, umożliwiające zanurzenie w wodzie na 2 godziny do głębokości 3 metrów. Akcesorium to utrzymuje procesor w suchości podczas aktywności w wodzie, takich jak pływanie, pływanie łódką lub kajakami.


Przeznaczenie

Zestaw do pływania to akcesorium zapewniające zwiększoną ochronę procesora mowy Neuro 2, gdy używamy go będąc w wodzie lub w wilgotnym i zapyłonym otoczeniu.


Obudowa wodoodporna przeznaczona jest do użytku przez rok lub 50-krotnie w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze. Zawsze dokładnie sprawdzaj obudowę wodoodporną przed i po użyciu. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany w materiale lub szczelności rękawa, przestań go używać i zamów nowy zestaw (obudowa wodoodporna).

Informacje zawarte w tej Skróconej instrukcji obsługi nie zastępują Instrukcji obsługi zestawu do pływania. Zapoznaj się z zestawem do pływania, czytając instrukcję obsługi.


Jak wkładać procesor mowy do osłonki do pływania

 **Uwaga:** Zawsze używaj akumulatorów do zasilania procesora mowy podczas korzystania z zestawu do pływania. Baterie cynkowo-powietrzne wykorzystują dopływ świeżego powietrza, aby wytwarzać energię, dlatego nie można ich używać w obudowie wodoodpornej.


- 1 Otwórz pokrywę obudowy wodoodpornej.
- 2 Sprawdź obudowę wodoodporną, aby upewnić się, że w otworze złącza anteny do pływania oraz w otworze i pokrywie służącej do wkładania procesora nie ma brudu, kurzu i fragmentów włosów.
- 3 Całkowicie włóż procesor mowy do wnętrza obudowy wodoodpornej. Podczas wkładania zegnij obudowę i ostrożnie umieść rożek procesora mowy we właściwym miejscu, aby uniknąć zakleszczenia po bokach.

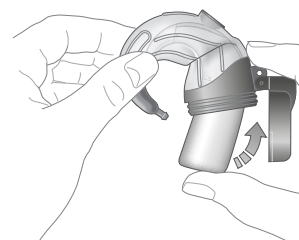


- 4 Upewnij się, że procesor mowy jest całkowicie umieszczony w obudowie, tak aby złącze anteny było idealnie dopasowane do otworu w obudowie wodoodpornej.

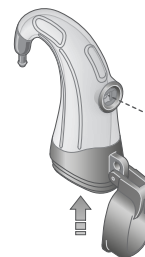

- 5 Przytrzymaj wygiętą wtyczkę anteny do pływania razem z kablem ustawionym prostopadle do obudowy wodoodpornej i całkowicie włóż ją do procesora mowy oraz obudowy. Czerwony pierścień uszczelniający musi dotykać obudowy.

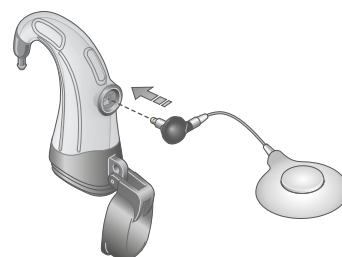

- 6 Obróć wtyczkę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować. W rezultacie przewód anteny powinien znaleźć się w pozycji równoległej do obudowy.

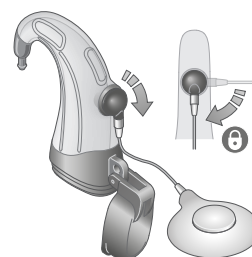

- 7 Zamknij pokrywę obudowy wodoodpornej.

- 8 Umieść system za uchem.



Stwierdzenia zawarte w niniejszej Skróconej instrukcji obsługi są prawdziwe w dniu publikacji. Ilustracje nie są zobowiązujące prawnie. Dostępność produktów zależy od lokalnej rejestracji.

Ilustracje nie są zobowiązujące prawnie. Dostępność produktów zależy od lokalnej rejestracji.

Oticon Medical (NEURELEC) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, charakterystyce i modelach bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją Oticon Medical (NEURELEC) jest wyraźna pisemna gwarancja udzielona na sprzedaż lub na wynajem jej produktów.

Oticon Medical
NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

CE 0459 (2020)