

Neuro 2 Kit para água

Guia de Consulta Rápida



O Kit para água é uma solução à prova de água para o processador sonoro Neuro 2, permitindo a imersão em água por 2 horas a uma profundidades de até 3 metros. Este acessório mantém seu processador seco durante atividades na água, como natação, canoagem ou caiaque.


Uso previsto

O Kit para água é um acessório que oferece proteção estendida para o processador sonoro Neuro 2, quando usado na água ou em ambientes úmidos e com poeira.


A Capa para água foi desenvolvida para ser utilizada por um ano ou 50 vezes, dependendo de qual ocorrer primeiro. Sempre inspecione cuidadosamente a capa para água antes e após o uso. Se você observar qualquer alteração no material da capa, pare de usar a capa e solicite uma nova (Kit de capa para água).

O Guia de Consulta Rápida não substitui as Instruções de Uso do Kit para água. Certifique-se de se familiarizar com o Kit para água lendo as Instruções de Uso.


Como inserir o processador sonoro na capa para água

 **Nota:** Utilize sempre baterias recarregáveis para ligar o processador sonoro quando usar o Kit para água. As baterias zinco-ar contam com alimentação de ar fresco para produzir energia e, portanto, não podem ser usadas dentro de uma Capa para água.


- 1 Abra a tampa da Capa para água.
- 2 Inspecione a Capa para água para garantir que esteja livre de qualquer fragmento de sujeira, poeira e cabelo na abertura do conector da Antena para água e a abertura e tampa de inserção do processador.
- 3 Insira o processador sonoro totalmente na Capa para água. Durante a inserção, dobre a capa e cuidadosamente leve o gancho do processador sonoro para seu lugar, para evitar que enrosque nas laterais.

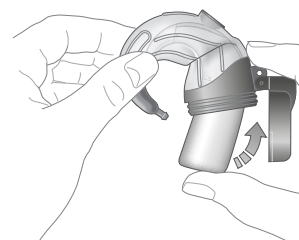


4 Certifique-se de que o processador sonoro esteja totalmente inserido e que o conector da antena esteja perfeitamente alinhado com a abertura da Capa para água.

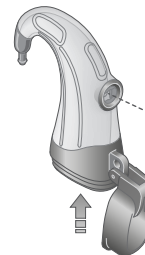

5 Segure o plug angulado da Antena para água com o cabo perpendicular à Capa para água e insira o plug totalmente dentro do processador sonoro e capa. O anel de vedação vermelho deve tocar a capa.

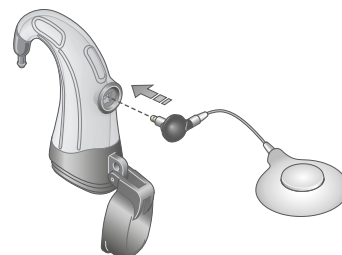

6 Gire o plug em 90 graus no sentido horário para fixá-lo no lugar. O cabo da antena deve ficar paralelo à capa.

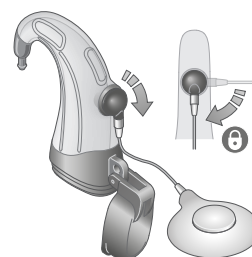

7 Feche a tampa da Capa para água.

8 Coloque o sistema em sua orelha.



As declarações deste Guia de Consulta Rápida são consideradas verdadeiras na data de publicação. As imagens não são contratualmente vinculadas. A disponibilidade dos produtos depende do registro local.

Oticon Medical (NEURELEC) reserva-se o direito de efetuar alterações ao design, características e modelos sem aviso prévio. A única garantia que a Oticon Medical (NEURELEC) efetua, é a garantia expressa, por escrito, sobre a venda ou locação de seus produtos.

Oticon Medical
NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

CE 0459 (2020)

223106BR-PT - Version A / 2020.06