


beflex[®]

The 3in1 Trial System

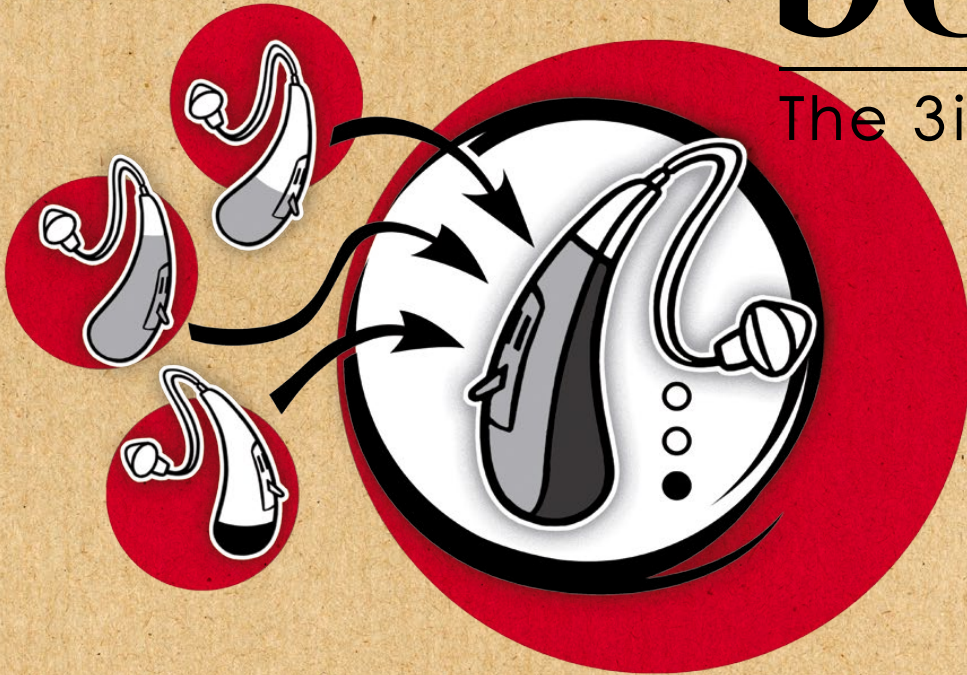

bernafon[®]
Your hearing · Our passion

beflex³

The 3in1 Trial System

Moderne høreapparater fås i mange forskellige modeller og performance-kategorier. Dette er vigtigt for at dække de mange former for høretab samt klienternes individuelle behov og præferencer. Det kan dog gøre det til en krævende proces for både dig og dine klienter at vælge det ideelle høreapparat.

Det nye BeFlex testhøreapparat fra Bernafon er et revolutionerende tilpasnings- og rådgivningskoncept, som kan afhjælpe processen.

BeFlex er et helt nyt tilpasnings- og rådgivningskoncept med potentiale til at revolutionere dine daglige aktiviteter. Det er et fleksibelt teshøreapparat, som du kan programmere med op til tre forskellige performance-kategorier samtidigt. Det kan bidrage til at reducere de tvivlsspørgsmål, som dine klienter måtte have, om hvorvidt de køber det bedst egnede høreapparat. Desuden er det med til at lette og effektivisere din rådgivningsopgave.

En revolutionerende mulighed med BeFlex

Giv dine klienter mulighed for at sammenligne flere performance-kategorier på én gang. Det kan bidrage til at reducere den tid, det tager at færdiggøre et salg, og desuden kan oplevelsen med BeFlex bidrage til at opbygge klientens tillid til købsprocessen.


En ny epoke i rådgivning med BeFlex

Opbyg et troværdigt og tillidsfuldt forhold til dine klienter ved at tilbyde dem et gennemskueligt tilpasningsforløb. Engager dine klienter på en ny måde og find den bedste løsning sammen.

En reduceret lagerbeholdning med BeFlex

Med BeFlex har du Bernafons nyeste høreapparatmodeller og -teknologi lige ved hånden til at demonstrere for klienten – samtidig med at du reducerer dit lagerbehov.

HVAD ER BEFLEX?

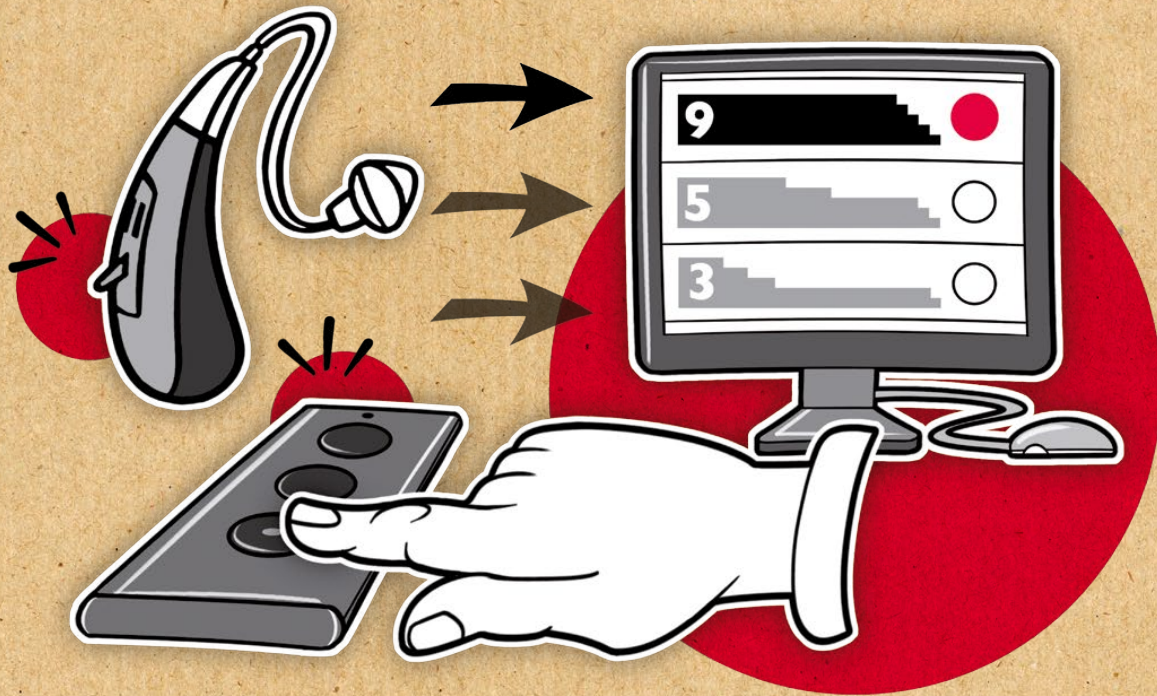

Det nuværende udbud af produkter og teknologier er enormt, og det er derfor ikke altid nemt at finde det rigtige produkt. Din professionelle vejledning og kundens oplevelse af købsprocessen er derfor vigtig. "Prøv før du køber"-konceptet har stor betydning for købsbeslutningen, og branchen for høreapparater er ingen undtagelse. At kunne tilbyde apparater i en prøveperiode er blevet standard for mange høreapparatspecialister.

BEFLEX – EN MODERNE STANDARD

Takket være den schweiziske teknik har Bernafon skabt et unikt prøvesystem til branchen. Hvor andre prøveapparater er begrænset til blot at kunne demonstrere én performance-kategori ad gangen, går BeFlex skridtet videre. Med dette system kan du integrere hele sortimentet af Bernafons teknologiske niveauer i ét enkelt høreapparat. Med andre ord er det nu muligt at sammenligne forskellige båndbredder, egenskaber og funktioner på samme tid.

DEN FØRSTE I BRANCHEN

9

JUNA 9

7

JUNA 7

5

SAPHIRA 5

3

SAPHIRA 3

1

NEVARA 1



Undersøgelser har vist, at den menneskelige lyttehukommelse er bedst til at bedømme små forskelle i lydsituationer, hvis de sammenlignes samtidigt. En almindelig måde at sammenligne lydsituationer på er brugen af lydprøver. Lydprøver er blevet brugt til at demonstrere, hvordan forskellige performance-kategorier lyder i forskellige lyttemiljøer. Disse lydprøver ligger dog fjernt fra situationerne i virkeligheden, der ofte er meget specifikke og forskellige fra klient til klient.


Oplevelsen er vigtig

BeFlex er den første prøveløsning, der tilbyder dine klienter en direkte sammenligning af høreapparaters teknologier. Send blot klienterne hjem med en BeFlex bag øret og lad dem opleve forskellige Bernafon teknologier i deres egne specifikke lytteomgivelser. Brug mindre tid på at tilpasse ved at spare tid på at forklare forskellene mellem performance-kategorierne.

Skab en kundeoplevelse

Engager dine klienter tidligere i tilpasningsprocessen med BeFlex. Dine klienter bliver involveret aktivt i deres købsbeslutningen, og resultatet er en større brugeraccept, større sikkerhed i købsbeslutningen og tilfredshed med den service, der ydes. Du kan også præsentere dine kunder for valg og muligheder, der måske ikke er blevet overvejet tidligere.

EN REVOLUTIONNERENDE MULIGHED

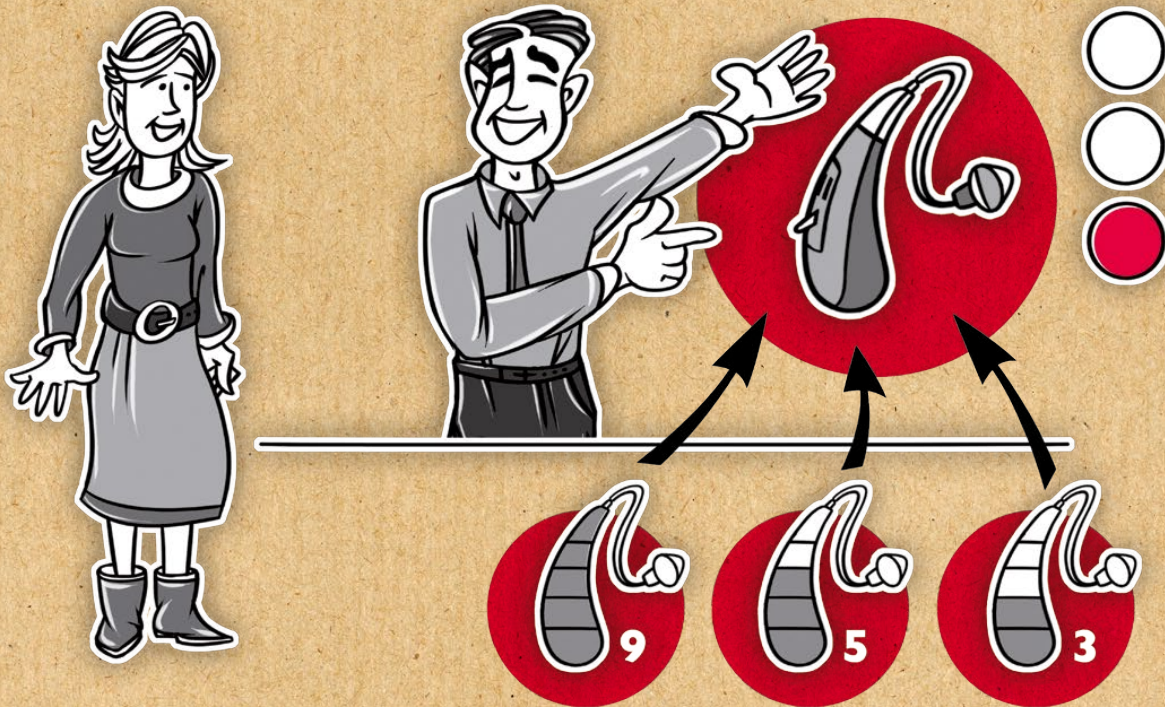

Vind tid


Anvend BeFlex til at demonstrere Bernafons forskellige teknologiske niveauer efter blot en enkelt tilpasning. Herved sparer du den tid, du normalt bruger på at sammenligne de forskellige performance-kategorier én efter én. Udnyt også muligheden for nemt og hurtigt at overføre tilpasningsdataene fra BeFlex til et nyt høreapparat. Det giver klienten et genkendeligt udgangspunkt for den første tilpasning af det nye høreapparat.

Vind rum


Med BeFlex vil du altid have det rigtige høreapparat ved hånden. Der er ikke længere behov for en omfattende investering i høreapparater til dit lager. Alle performance-kategorier fra premium til begynderniveau kan programmeres ind i ét enkelt apparat – igen og igen.

Nem reparationsprocedure


BeFlex er mere end et testhøreapparat. Udstyr dine klienter med et BeFlex, når deres Bernafon høreapparater indsendes til reparation. Overfør klientens indstillinger til BeFlex høreapparatet og dæk ventetiden, uden at klienten mærker forskel.

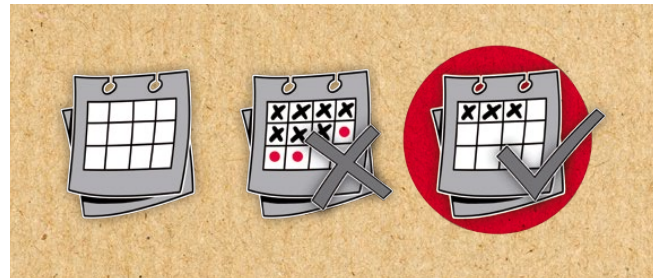

VIND ERFARING

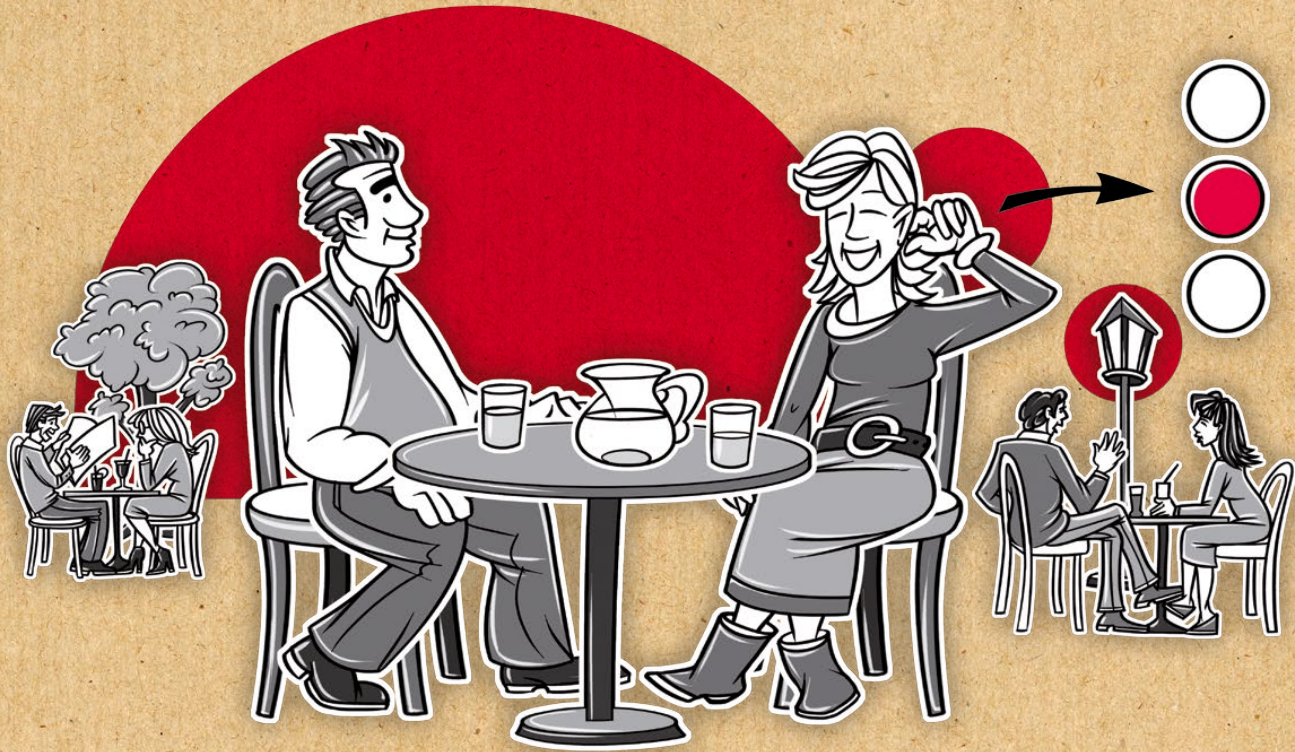

Set fra brugerens side er det ikke altid nemt at vælge det ideelle høreapparat. Især for den uerfarne målgruppe, der nemt kan blive overvældet af alle de forskellige høreapparatmodeller og performance-kategorier. Som hørespecialist kan du ændre dette med BeFlex.

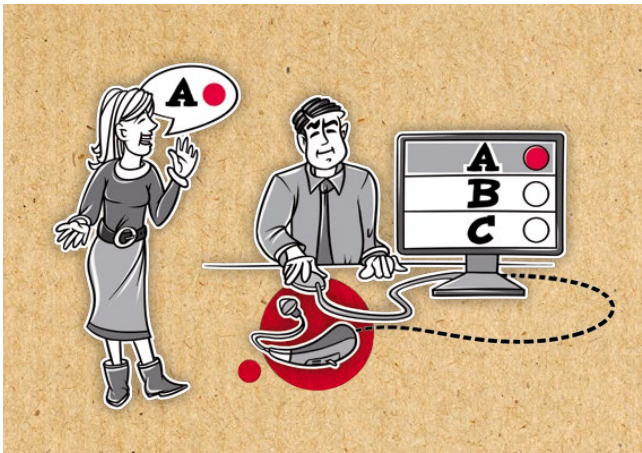


Opbyg det rigtige fundament for fremtiden

Gennemskuelighed i tilpasningsprocessen er alfa og omega for et konstruktivt forhold til klienten. BeFlex giver dig mulighed for at opbygge et forhold, der bygger på troværdighed og tillid.

Skab muligheder

Forskellige performance-kategorier byder på forskellige fordele for forskellige klienter. Giv klienterne mulighed for at sige, hvad der passer bedst til dem ud fra deres umiddelbare oplevelse med BeFlex og brug denne erfaring som et udgangspunkt for at finde den endelige høreløsning. Betragt det som en fordelagtig win-win-situation.

EN NY EPOKE I FLEKSIBILITET



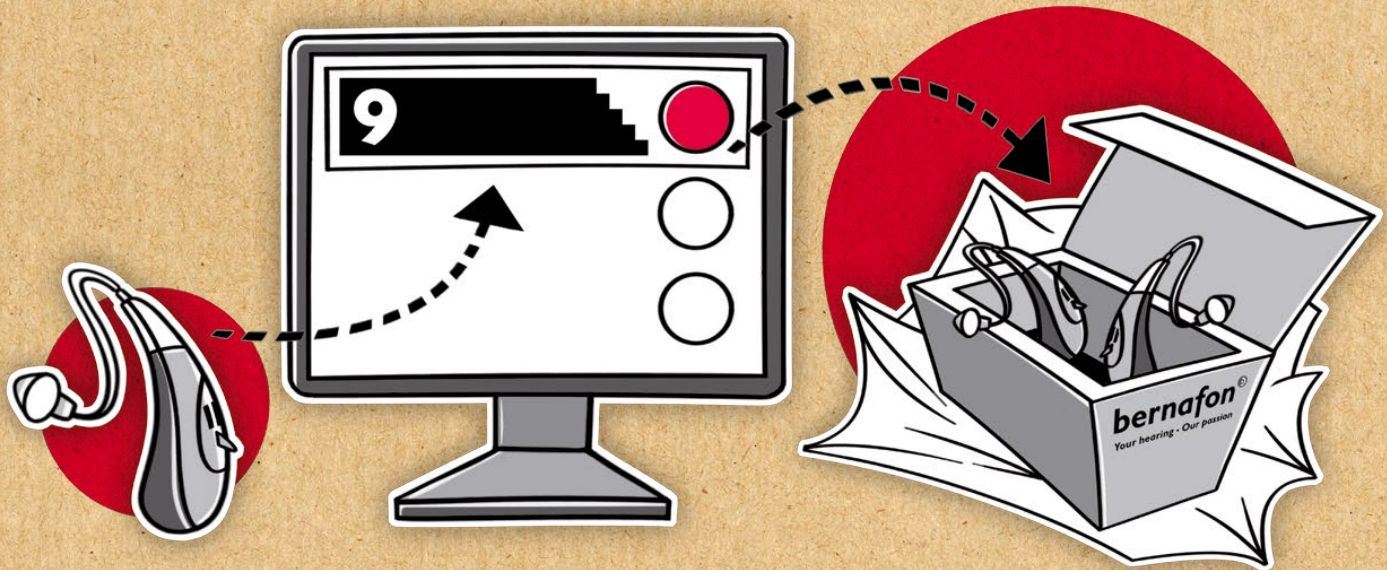


Tilpasningsområder

Lette til svære høretab kan alle dækkes med instrumenter fra BeFlex, så du kan præsentere BeFlex prøvesystemet til en lang række klienter.

BeFlex modeller

BeFlex instrumentudvalget dækker tre populære høreapparatmodeller: Pico RITE, Nano BTE og Power BTE. De følger alle Bernafons S-formkoncept, der er inspireret af det menneskelige øres ergonomiske form. Den høje bærekomfort gør dem sammen med instrumenternes robusthed og driftsikkerhed til ideelle apparater til afprøvning i hjemlige omgivelser.

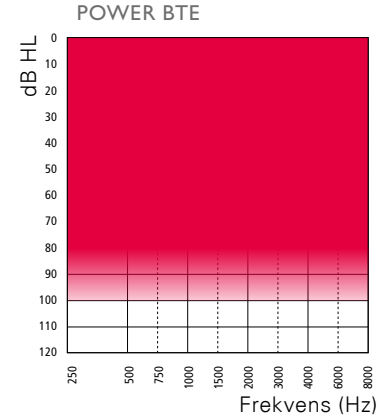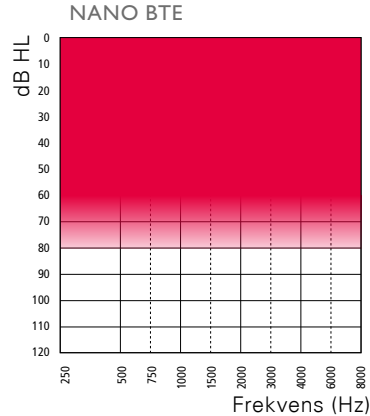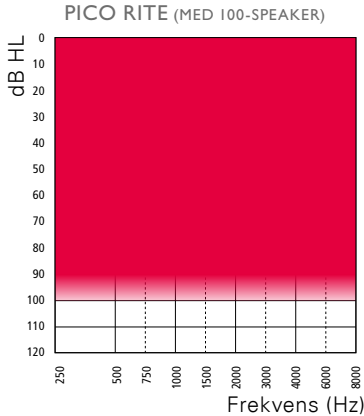

BEFLEX INSTRUMENTUDVALGET



PICO RITE



NANO BTE



POWER BTE

Alle BeFlex kan sættes sammen med standard miniFit, Spira Flex samt ørebøjlesystemerne.


GIV PLADS TIL BEFLEX

Anbefalinger fra ekspert til ekspert



- Vælg en BeFlex høreapparatmodel ud fra klientens høretab, lyttebehov og -præferencer.

PRODUCT COMPARISON			
PERFORMANCE	JU9 N Earhook	SA3 N Earhook	SAS N Earhook
FEATURES			
BENEFITS			
Ability to perceive sounds naturally.	■	■	■
Ability to focus on speech understanding in challenging hearing situations.	■	■	■
Ability to provide wearing comfort in a wide range of noisy environments.	■	■	■
Ability to provide easy use and handling in changing listening environments.	■	■	■
Ability to configure the hearing system according to the users' needs and preferences.	■	■	■
Ability to connect the hearing system to mobile phones and other electronic devices wirelessly.	■	■	■

- Brug produktsammenligningsværktøjet, der er tilgængeligt i Bernafons produktvælger, til først at vise de forskellige fordele ved performance-kategorierne for klienten. Der kan vælges op til tre muligheder til sammenligning. Gør derefter sammenligningen virkelig for klienten ved at indstille de udvalgte performance-kategorier i BeFlex høreapparatet.
- Indstil BeFlex via programmet Oasis 22.0 (eller nyere).

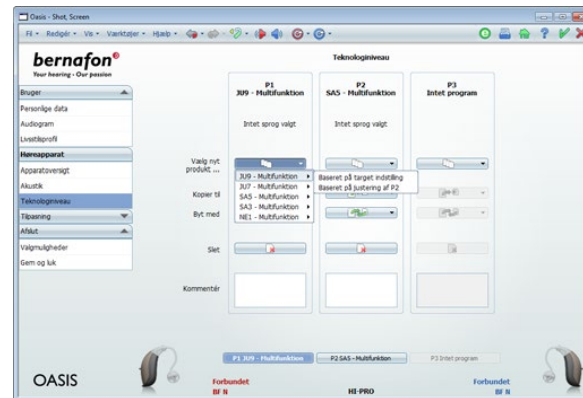

- Udskriv BeFlex brochuren fra Oasis til klienten. Anbefal også klienten at afprøve performance-kategorierne i forskellige lyttesituationer. Klienten kan nemt skifte mellem performance-kategorierne ved et tryk på høreapparatets knap(per) eller på RC-N fjernbetjeningen.
- Bestem prøveperioden i samråd med klienten og fastsæt en dato for en opfølgende konsultation. BeFlex har et indbygget advarselsystem til prøvetidens udløbstid, som slukker apparatet, når prøveperioden er slut.
- Du er nu klar til at sende klienten hjem med BeFlex høreapparatet.

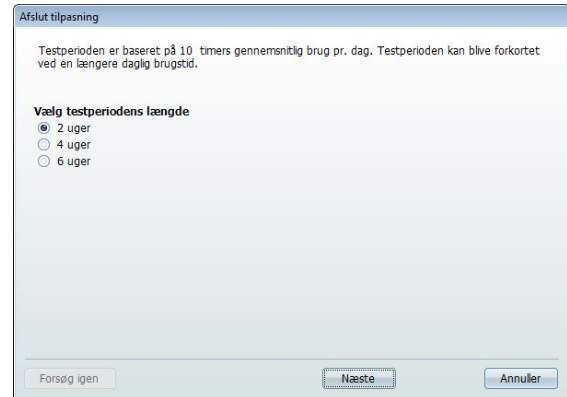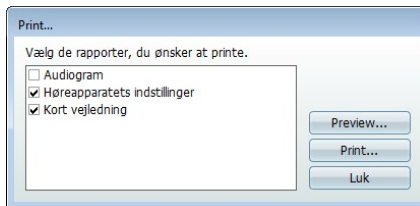

- Ved den opfølgende konsultation aflæses datalognings-skærm-billedet på Oasis. Du kan nu se hvilken performance-kategori, klienten har brugt mest. Dette er en hjælp i rådgivningen og støtter din anbefaling af, hvilket produkt, der er bedst egnet.

- Efter salg og udlevering af det nye høreapparat kan brugerindstillingerne fra BeFlex overføres til det nye høreapparat via Oasis. Tildeling og finjustering af høreapparatets program følger den sædvanlige procedure.




The screenshot shows a dialog box titled 'Søg høreapparater' (Search hearing aids). It contains two columns of text, each starting with 'HØR N' (HEAR N). The text in both columns is identical: 'Høreapparatet er ikke blevet tilbasset før. Det er et andet høreapparat, end det der er blevet tilbasset.' Below this, it asks 'Hvordan vil du fortsætte?' (How do you want to continue?) and provides two radio button options: 'Start en ny tilpasning' (Start a new fitting) and 'Overfør alle Oasis data til høreapparatet og fortsæt' (Transfer all Oasis data to the hearing aid and continue). The second option is selected. At the bottom, there are buttons for 'Forsøg igen' (Try again), 'Tilbage' (Back), 'Næste' (Next), 'Anvend' (Apply), and 'Annuller' (Cancel).

WWW.BEFLEX.BERNAFON.COM

Prøv BeFlex – et revolutionerende tilpasnings- og rådgivningskoncept fra Bernafon. Brug det til at spare tid i tilpasningsprocessen og opbyg et kundeforhold, der bygger på troværdighed, tillid og professionalisme i din praksis.

Flere oplysninger findes i tilpasningsvejledningen til BeFlex eller ved at kontakte din lokale Bernafon forhandler.

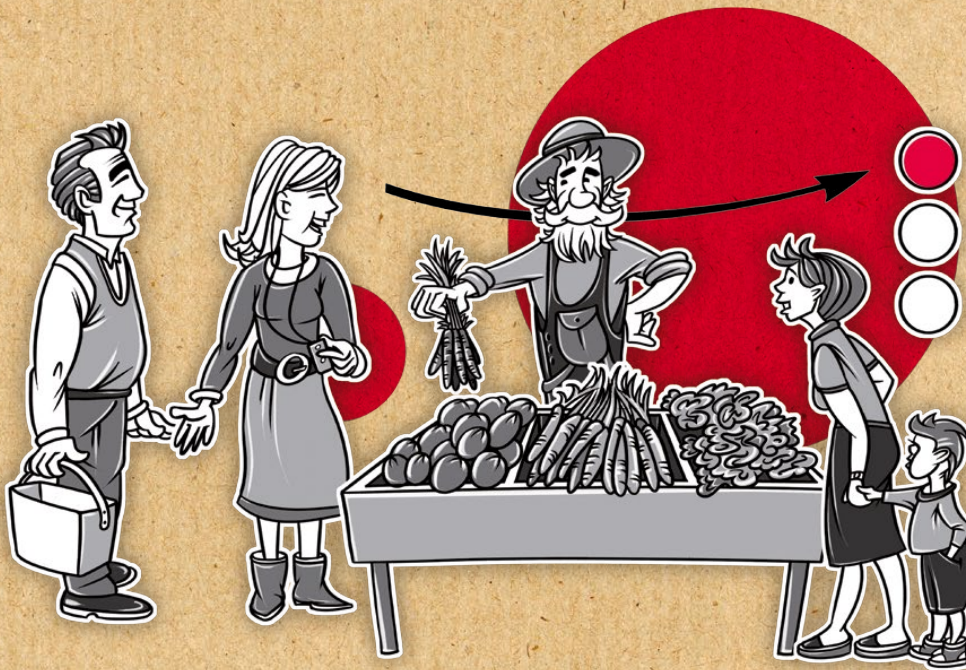

Bernafon selskaber

Australien · Canada · Kina · Danmark · Finland · Frankrig · Tyskland · Italien · Japan · Korea · Holland · New Zealand · Polen · Spanien · Sverige · Schweiz · Tyrkiet · Storbritannien · USA

www.bernafon.dk

SWISS 
Engineering

bernafon[®]
Your hearing · Our passion