

A photograph of a Bernafon PICO RITE hearing aid and its clear dome component resting on a piano keyboard. The hearing aid is a small, beige, behind-the-ear device with a thin wire connecting it to a clear, dome-shaped component. The keyboard is white and black, and the background is softly blurred.

# GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI

For en førsteklases  
høreoplevelse

JUNA 9 | 7  
PICO RITE

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion





Bernafon glæder sig over at kunne introducere det nye premium høreapparat Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear).

Juna Pico RITE er lille og stilfuldt og samtidigt effektivt og behageligt at bære. Med de nye imponerende Audio Efficiency™ funktioner og det nye miniFit speaker- og domesystem, kan du tilbyde Juna til endnu flere brugere. Derudover er Juna Pico RITE kompatibelt med alt trådløst tilbehør fra Bernafon herunder SoundGate 3, SoundGate Mikrofon og SoundGate App.

**Få mere ud af hver eneste lyd.  
Med Juna Pico RITE. Dit førstevalg.**

# Gør en lille ting til en stor løsning



## 1 Batteriskuffe

- Nem at åbne og lukke
- Integreret stopper til at slukke for høreapparatet og forhindre batteriet i at falde ud

## 2 Trykknop

- Stor og lettilgængelig trykknop
- Programskift og justering af lydstyrken via trykknappen
- Mulighed for lydløs tilstand via trykknappen

## 3 Mikrofoner

- Integreret dobbelt mikrofonssystem, der giver en optimal retningskarakteristik

## 4 Pålidelighed


- Vandafvisende hus
- IP57 beskyttelse mod støv- og vandindtrængning

## 5 Trådløs kompatibilitet

- Kan bruges sammen med alt trådløst tilbehør fra Bernafon, som f.eks. SoundGate 3 Bluetooth®-kommunikationsenheden

## 6 Programmeringsstik

- Diskret placering af programmeringsstikket
- Nemt at isætte FlexConnect-programmeringskablet

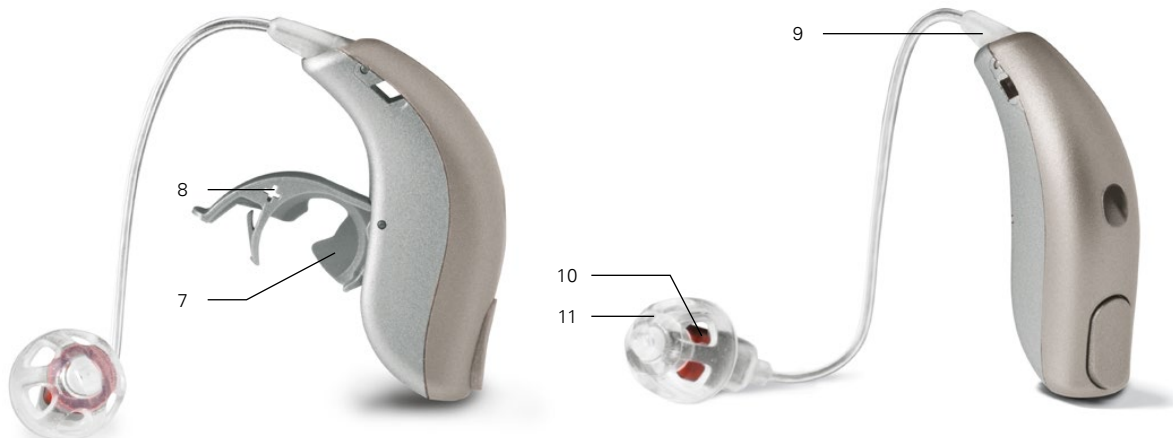

#### **7 Batteriskuffe**

- Lille batteriskuffe designet til det langtidsholdbare 312-batteri

#### **8 Venstre-/højre-markør**

- Farvemarkering gør det muligt at skelne mellem det venstre og højre høreapparat

#### **9 miniFit speaker unit**

- Nem montering af speaker unit
- Tre forskellige typer af speaker units, der dækker milde til kraftige høretab
- Fire forskellige speakerlængder

#### **10 miniFit receiver**

- Farvemarkering gør det muligt at skelne mellem venstre og højre speaker unit
- Udskifteligt voksfiltet beskytter speakeren mod ørevoks og fugt

#### **11 miniFit ørepropper**

- Bredt sortiment af forskellige miniFit domes i flere størrelser
- Bredt sortiment af forskellige custom moulds

# Gør tilpasningsmuligheder til reele fordele

Juna Pico RITE er lille, men samtidigt effektivt nok til høretab på op til 100 dB HL. Det leveres med miniFit speaker- og domesystem, der giver store fordele med hensyn til fleksibilitet i tilpasningen, performance og udseende såvel som pålidelighed.

## Fleksibel tilpasning

Der findes tre forskellige typer af speakere, der dækker milde til kraftige høretab. Ligeledes findes der en bred vifte af domes og moulds, hvilket øger valgmulighederne for dig og brugerne.

## Performance og udseende

60- og 85-speakere leveres i et buet hus, der følger øregangens krumning for derved at opnå den bedste lyd kvalitet og fysiske pasform. 100-speakeren har et transparent hus, der gør det ekstra diskret. Alle speakertyper er så små, at det er muligt at levere endnu mindre custom moulds.

## Pålidelighed

miniFit domes er fremstillet af silikone og sidder særligt godt fast på speakeren og i øret. Dette nye materiale forlænger holdbarheden. De integrerede voksfilter i custom moulds forlænger ligeledes øreproppernes holdbarhed.

	60-SPEAKER	85-SPEAKER	100-SPEAKER
<b>ÅBEN TILPASNING</b>			
Åben dome (6, 8, 10 mm)	●	●	
Bas dome, Dobbelt vent (6, 8, 10, 12 mm)	●	●	●
Bas dome, Enkelt vent (6, 8, 10, 12 mm)	●	●	●
Power dome (6, 8, 10, 12 mm)	●	●	●
<b>BRUGERTILPASNING</b>			
Micro mould	●	●	
Lite Tip	●	●	
Power mould			●

# Gør udfordrende situationer til succeshistorier



Juna Pico RITE-høreapparatet bygger på Bernafons egenudviklede Audio Efficiency™ teknologi. Dette system forbedrer brugernes taleforståelighed og lyttekomfort, og gør det nemt at tage højde for individuelle livsstilsbehov og præferencer.

## Audio Efficiency™

SoundGate 3 er vores Bluetooth®-kommunikationsenhed, der gør det muligt for brugerne at etablere forbindelse til flere lyd-kilder. RC-N fjernbetjeningen er lille, men har store og lettilgængelige knapper. Du kan også præsentere brugerne for Bernafons brugervenlige SoundGate App. Justering af lydstyrken og programskift på Pico RITE-høreapparatet kan nemt og diskret foretages på en iPhone®<sup>1)</sup>.

Læs mere om Bernafons nyeste teknologi i den nye Audio Efficiency™ Flash-applikation på vores hjemmeside.

### Fjernbetjening RC-N



### TV-adapter 2 Telefonadapter 2



### SoundGate Mikrofon



### SoundGate 3



### SoundGate App



Apple, Apple-logoet og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc.

<sup>1)</sup> SoundGate App kan bruges på iPhone (SoundGate App understøtter iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s og iPhone 4). SoundGate App kræver Bernafons SoundGate 3 (eller nyere versioner) og trådløse høreapparater.

# Gør avanceret teknologi til en omfattende produktpakke

	JUNA 9 PICO RITE	JUNA 7 PICO RITE
<b>SIGNALBEHANDLING</b>		
ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Frequency Composition™	●	●
DSP frekvensbåndbredde	10 kHz	10 kHz
<b>LYTTEKOMFORT</b>		
Adaptiv støjregulering Plus (antal kontrolindstillinger)	5	4
Dæmpning af pludselig kortvarig støj	●	●
Adaptiv tilbagekoblingsannullering Plus	●	●
Vindstøjsmonitor	●	●
Lydmiljøoptimering	1/4	1/1
Avanceret Soft Noise kontrol	●	●
Reduktion af efterklang	●	–
i-VC	●	●
<b>BINAURAL KOORDINATION</b>		
Volumenkontrol, programskift	●	●
Lydmiljøklassificering	●	●
Dæmpning på det frie øre ved telefonsamtaler	●	●
<b>UNDERHOLDNING</b>		
Livemusikprogram	●	●
Biografprogram	●	●
<b>RETNINGSBESTEMMELSESDINDSTILLINGER</b>		
Adaptiv direktionalitet	●	●
Adaptiv højfrekvent direktionalitet	●	–
True Directionality™	●	–
<b>KOMFORTFUNKTIONER</b>		
Volumenkontrol klik	●	●
Lydløs tilstand via trykknop	●	●
Konfigurerbar opstartsforsinkelse	●	●
<b>INDIVIDUALISERING</b>		
Programmuligheder/definerede lytteprogrammer	14/4	13/4
Adaptivitetskontrol	●	–
Datalogging & datalæring	●	●
Afgræns VC læring	●	–
Intelligent volumenkontrol	●	–
Sprogspecifikke indstillinger	●	●
REmit™	●	●
Tilpasningsassistent	●	●
Komfort i fly program	●	–