



*Avancerede fordele
på digitalt startniveau*



neo
■■■■■
Connected to the world

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

☑ *Oplev en verden af avancerede
fordele med Neo*



neo
.....
Connected to the world


Hvilke funktioner behøver du for at løse brugerens problemer?

Indtil nu har det været nødvendigt at benytte avancerede digitale høreapparater for at få de funktioner, du ønsker for brugerne.

Neo, forbundet til verden

Genopfrisk forbindelsen mellem brugeren og omverdenen.

- Åben tilpasning med store ventilationskanaler
- Adaptive Feedback Canceller
- Støjreduktion
- Retningsbestemte mikrofoner
- Mange programmer
- Mange kanaler
- Udvidelses muligheder
- Automatisk telespole
- Telebooster
- Trykknop
- FM kompatibelt
- Pålideligt og præcist software

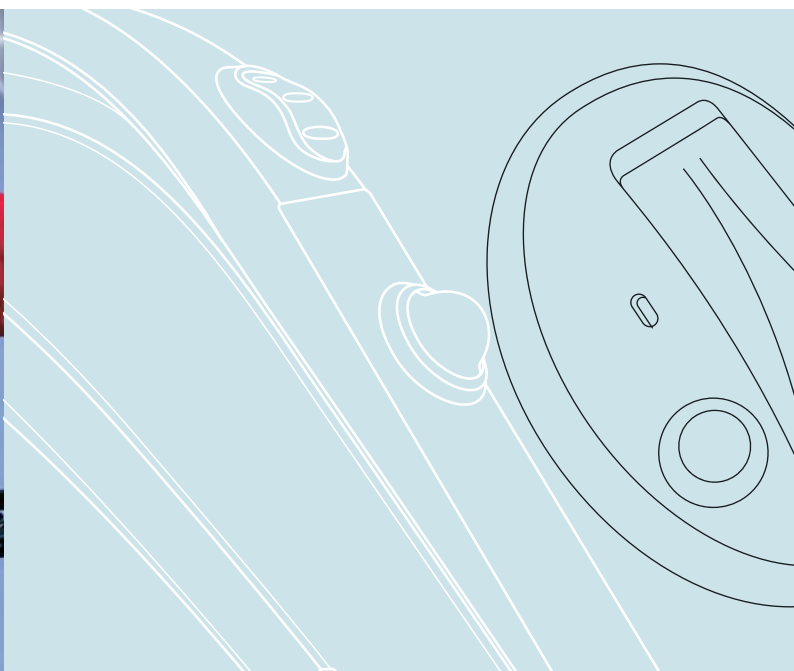

Avancerede funktioner



Avancerede funktioner er nu tilgængelige for alle.

Neo har alle de afgørende funktioner, der skal til for at tilfredsstille brugeren. Funktioner, der før kun var tilgængelige ved avancerede høreapparater, er nu tilgængelige på startniveau.

OpenFit™

Neo har:

- OpenFit™**
- Adaptive Feedback Cancellation**
- Adaptive Noise Reduction i 8 frekvensbånd**
- Retningsbestemte mikrofoner med aktiv mikronmatching**
- Flere lytteprogrammer til forskellige omgivelser**
- 5 kanaler for maksimum fleksibilitet**
- Soft Noise Management™**
- Lydindikatorer for vigtige funktioner**
- Automatisk telespole**
- Telebooster**
- Trykknop til høreapparatfunktioner**
- Volumenkontrol**
- FM kompatibelt**



neo
Connected to the world

✓ Avanceret tilpasningssoftware

Åbner op for en ny verden af tilpasningssoftware med den perfekte kombination af Neo og OASIS plus.


Den avancerede platform af tilpasningssoftware sikrer en perfekt tilpasning hver gang.

Intelligent software gør dit arbejde lettere.

- ✓ Første tilpasning med kun 3 museklik
- ✓ 5-kanal tilpasningsnøjagtighed med 5 MPO knapper
- ✓ Finjusteringsknapper lige ved hånden
- ✓ TriQualizer™ for præcis tilpasning
- ✓ 3-D billede af høreapparatets reaktion
- ✓ Interaktiv finjustering for at støtte dialogen med brugeren
- ✓ COSI for at rådgive og sikre at kundens mål bliver opfyldt
- ✓ NOAH link kompatibel
- ✓ Standard programmeringskabler og flex connect kabler
- ✓ Ens tilpasning med alle Bernafons digitale høreapparater

oasis
plus

noah
LINK

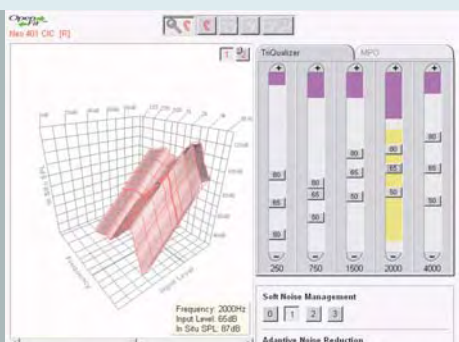

Neo og OASIS plus, den perfekte kombination af avancerede høreapparater og gennemtænkt tilpasningssoftware.

Neo har håndgribelige brugerfordele

Avancerede brugerfordele

- Fremragende lyd kvalitet
- Lyttekomfort
- Ingen okklusion
- Ingen hylen
- Udvidet taleforståelse i støj

Avancerede funktioner

- Innovativ teknologi
- Adaptive Noise Reduction
- OpenFit™
- Adaptive Feedback Cancellation
- Retningsbestemte mikrofoner, FM kompatibelt

Funktioner der før var for dyre for mange af brugerne er nu tilgængelige.



Komfort

- ✔ OpenFit™ for at reducere okklusionseffekten og give en naturlig hørelse
- ✔ Adaptive Feedback Cancellation, et automatisk aktivt feedback cancellation system, der leder efter og eliminerer irriterende hyl
- ✔ 5 kanaler med uafhængige knapper, der sikrer, at lydniveauet er komfortabelt

Nem at bruge og pålidelig

- ✔ Europæisk kvalitet og design
- ✔ Brugervenligt programvalg med en knap
- ✔ Intelligent lydindikator for høreapparatfunktioner



Problemfri justeringer

- ✓ Nem at tilpasse og finjustere med TriQualizer™
- ✓ Adaptive Feedback Cancellation uden at reducere frekvensforstærkning, for at sikre høj taleforståelse
- ✓ OASIS plus er et velafprøvet, stabilt software, der over længere tid har bevist sin pålidelighed



Nem at forklare

- ✓ Trykknop med let adgang til høreapparat funktioner
- ✓ Intuitiv programhåndtering med lydindikator
- ✓ Intelligens i designet og implementering af funktionerne



Mere værdi for pengene

- ✓ Neo, den bedste pris/ydeevne på startniveau
- ✓ Avancerede funktioner for at imødekomme brugerens behov
- ✓ Avancerede brugerfordele



Avancerede fordele

Forbedret hørelse i støjende omgivelser

- Retningsbestemte mikrofoner med aktiv mikrofonmatching, bevist teknologi der forstærker lydopfattelsen i støj
- Adaptive Noise Reduction i 8 frekvensbånd for at forbedre lyttekomforten og reducere træthed
- Kompatibel med FM udstyr i ørehøjde som f.eks. LEXIS

Optimal hørelse i alle omgivelser

- Flere lytteprogrammer der let kan tilpasses ethvert behov
- Soft Noise Management™ der reducerer miljøbestemte lyde
- NAL NL 1 tilpasningsrationale, der bliver tilpasset brugeren med Client Experience Level



Et helt sortiment af høreapparater til praktisk talt alle behov

Høreapparat	OSPL90, peak / dB SPL [earsim]	Full-On Gain, peak/dB [earsim]	Batteri-størrelse	Lokale knapper
Neo 102 BTE	128	64	13	Trykknop+volumenkontrol
Neo 105 BTE DM	127	66	13	Trykknop+volumenkontrol
Neo 112 BTE	136	76	13	Trykknop+volumenkontrol
Neo 202 ITE	129	62	13	Trykknop+volumenkontrol
Neo 352 HS (US/CAN only)	124	56	312	Trykknop+volumenkontrol
Neo 322 ITC	124	56	312	Trykknop+volumenkontrol
Neo 355 HS DM (US/CAN only)	122	54	312	Trykknop+volumenkontrol
Neo 315 ITC DM	122	54	312	Trykknop+volumenkontrol
Neo 302 ITC	120	50	312	Trykknop+volumenkontrol
Neo 301 ITC	120	50	312	Trykknop
Neo 411 MC (Lab opt.)	114	45	10	Trykknop
Neo 401 CIC	114	45	10	Trykknop



Neo, forbundet med verden

Bernafon tilbyder et bredt sortiment af digitale høresystemer, der dækker alle kundernes behov. Alle høreapparater er udstyret med OASIS plus – det universelle, intelligente software til alle Bernafons høreapparater.

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

www.bernafon.com

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90
www.bernafon.com

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf. 3917 7101
Fax 3927 7900
www.bernafon.dk