


Tuotetiedot

JUNA 9 | 7 PICO RITE


Juna Pico RITE on pienikokoinen RITE-koje, joka sopii lievästä vaikeisiin kuulonalenemiin. Juna Pico RITE-kojeessa on miniFIT-kuuloke ja tippi. Vaihtoehtona on kolme erilaista kuuloketta ja useita erilaisia tippejä ja yksilöllisiä korvakappaleita.

Juno Pico RITE:n huipputason Audio Efficiency™, – ominaisuudet ovat Bernafonin teknologian ydintä. Juna Pico RITE on myös yhteensopiva kaikkien Bernafonin langattomien lisävarusteiden kanssa.


PICO RITE 60-KUULOKKE

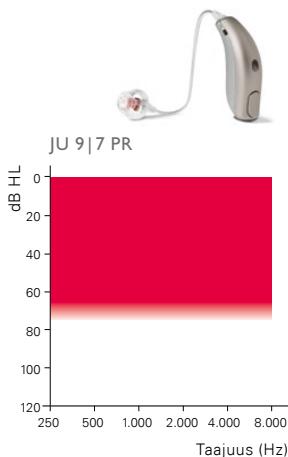

PICO RITE 85-KUULOKKE

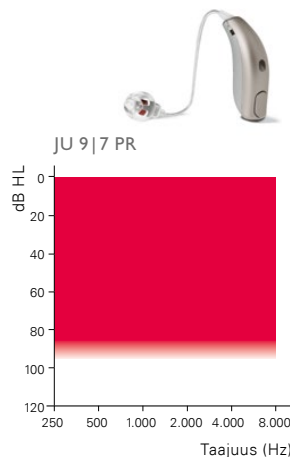

PICO RITE 100-KUULOKKE

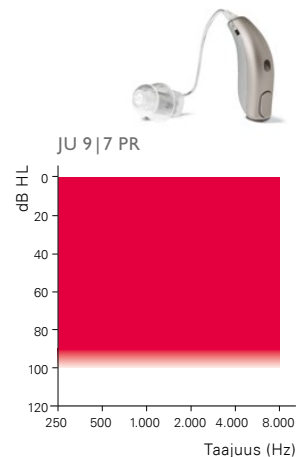

Audio Efficiency™

Puheen selkeys

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*
- i-VS

Kuuntelumukavuus

- Adaptiivinen Feedback-hallinta
- Adaptiivinen melunhallinta Plus
- Impulssimelunhallinta
- Kaiunnan hallinta*
- Binauraalinen koordinointi

Yksilölliset ominaisuudet

- Live-musiikki- ja elokuvaohjelmat
- Miellyttävä lentomatka -ohjelma*
- Langattomat yhteydet
- Kielten ominaispiirteiden huomiointi
- REMfit™

Lisäominaisuudet

Tekniset ominaisuudet

- Digitaalinen signaalinkäsittely 10 kHz:iin saakka
- Moniympäristö-ohjelma
- Ympäristöäänien optimointi
- Automaattinen puhelimen tunnistus
- Vettähyllävä pinta kaikilla korvantauskojeilla
- Pölyn- ja vedenkestävä kuori (IP57)

Yksilölliset ominaisuudet

- Tiedonkeruu
- Älykäs, kuuntelutilanteita tunnistava oppiminen
- Oppiva* ja älykäs voimakkuussäädin*
- 14 Kuunteluohjelma vaihtoehtoilla
- 4 vapaasti muokattavaa ohjelmapaikkaa

* Vain Juna 9 PR -mallissa



JU 9|7 PR
100-Kuuloke





JU 9|7 PR
85-Kuuloke





JU 9|7 PR
60-Kuuloke

— Mittaukset 100-Kuuloke
- - - Mittaukset 85-Kuuloke
— Mittaukset 60-Kuuloke

2CC KYTKINONTELO

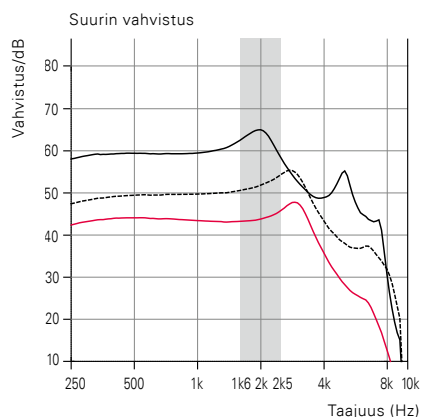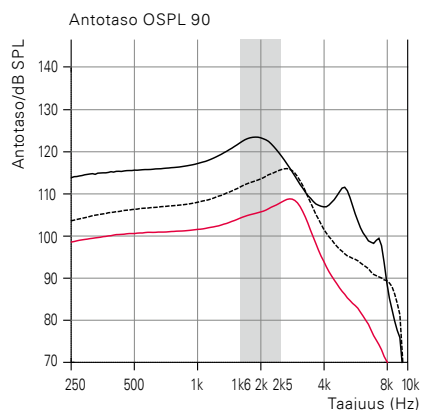

EAR SIMULATOR

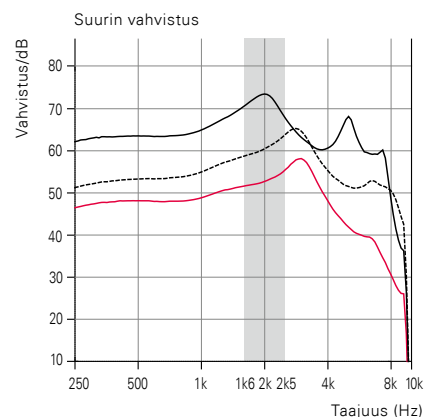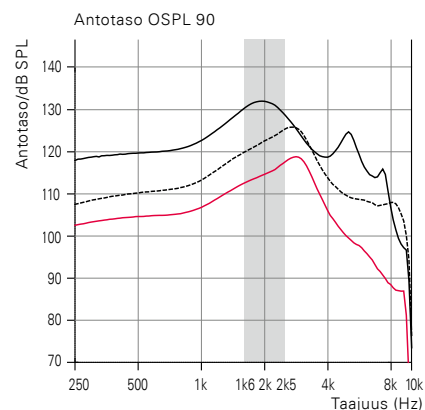

2CC KYTKINONTELO

	100-KUULOKE	85-KUULOKE	60-KUULOKE
OSPL 90, huippu (dB SPL)	123	116	109
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	119	112	105
Suurin vahvistus, huippu (dB)	65	55	48
Suurin vahvistus, 1600 Hz (dB)	62	50	43
HFA suurin vahvistus (dB)	60	51	44
Referenssivahvistus	44	36	28
Lepovirta (mA)	1.3	1.2	1.2
Toimintavirta (mA)	1.6	1.5	1.3
Paristotyyppi	312		
Särö 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Taajuusalue (Hz)	100 – 7700	100 – 8200	100 – 6500
Sisäisen kohinan ekvivalentti ¹⁾ , dB(A)	17	17	17
Ohjelman valitsin	● ***		
Voimakkuussäädin	***		
Automaattinen puhelimen tunnistus	●		

KORVASIMULAATTORI

	100-KUULOKE	85-KUULOKE	60-KUULOKE
OSPL 90, huippu (dB SPL)	132**	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	130	120	112
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	–	–	–
Suurin vahvistus, huippu (dB)	73	65	58
Suurin vahvistus, 1600 Hz (dB)	70	59	51
HFA suurin vahvistus (dB)	–	–	–
Referenssivahvistus	57	45	37
Lepovirta (mA)	1.3	1.2	1.2
Toimintavirta (mA)	1.4	1.3	1.3
Paristotyyppi	312		
Särö 500/800/1600 Hz (%)	<5/<3/<3	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Taajuusalue (Hz)	–	–	–
Sisäisen kohinan ekvivalentti ¹⁾ , dB(A)	15	20	19
Ohjelman valitsin	● ***		
Voimakkuussäädin	***		
Automaattinen puhelimen tunnistus	●		

¹⁾ Tekninen tieto mitattu laajennettuna, vastaten testimittausasetuksia.

“2cc” viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60318-5. “KORVASIMULAATTORI” viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60318-4. Sovellettavat versiot: IEC 60118-0:1994, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

** Noudata erityistä huolellisuutta, kun sovitat ja käytät kojetta suurimmalla äänenpaineella eli yli 132 dB SPL (IEC 60318-4).

Tällöin voi olla riski vahingoittaa kuulokojeen käyttäjän jäljellä olevaa kuuloa.

*** Painokytkintä voidaan käyttää voimakkuussäätimenä.

JUNA 9 | 7 PICO RITE VÄRIT

ALAKUORI MAC (METALLINEN ANTRASIITTI)



ALAKUORI MSIL (METALLINHOPEA)



JUNA 9 | 7 PICO RITE AKUSTISET VAIHTOEHDOT

100-KUULOKKE



Heti valmis

Bassotippi
Tuplaventti



Bassotippi
Yksi ventti



Power-tippi



Yksilöllinen

Power-korvakappale



85-KUULOKKE



Heti valmis

Avoin tippi



Bassotippi
Tuplaventti



Bassotippi
Yksi ventti



Power-tippi




60-KUULOKKE




Yksilöllinen

Mikrokorvakappale

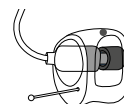

Kevyttippi

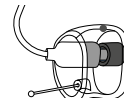

OHJELMOINTI

Juna 9|7 Pico RITE ohjelmoidaan Bernafon Oasis -ohjelmalla, versio 20.0 tai uudempi. Sopii NOAH-ohjelmaan (MS-Windows®-pohjainen PC-sovitus-ohjelma). Vaatimuksena NOAH + HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³ tai nEARcom. Oasis-asennus yksin pelkästään myös mahdollinen.

Laitteistovaatimukset

Windows® 8.1, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows® 8, 32/64 bit (Oasis 18.0 tai uudempi)
Windows® 7, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows Vista®, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (kaikki versiot)
Noah 4.3 (minimivaatimus for Windows® 8)
Noah 3 kaikki versiot (ei suositella)

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

TUOTE	KUVAUS	TUOTENUMERO
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (HiPro)	Sininen, vasen	384-20-033-00
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (HiPro)	Punainen, oikea	384-20-032-00
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (NOAHlink)	Sininen, vasen	384-20-035-00
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (NOAHlink)	Punainen, oikea	384-20-034-00
FlexConnect	Ohjelmointinauha Pico RITElle	390-01-180-05
Sovituspakkaus miniFitille	Pakkaus sisältää 60- ja 85-kuulokkeet, avoimia tippettä ja bassotippettä kahdella ventillä, työkaluja ja muita välineitä	149445
Kaukosäädin RC-N	Huomaamaton laite äänenvoimakkuuden säätämiseen ja ohjelmien valintaan	139772
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Langaton yhteys ja kaukosäädin induktiosilmukalla	144604
SoundGate-mikrofoni	Klipsillä kiinnitettävä mikrofoni, jonka avulla saa paremmin selvän mikrofonia käyttävän henkilön puheesta (vaatii SoundGate 3 -laitteen)	145645
TV-sovitin 2 (Bluetooth®)	Langaton TV-äänien vastaanotto	127847
Puhelinsovitin 2 (Bluetooth®)	Langaton yhteys lankapuhelimiin	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)



Valmistaja

Sveitsi

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Puh +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Suomi

Kuulopiiri Oy
Sepänkatu 7 (PL10)
40720 Jyväskylä
Puh +358 14 8403 300
Fax +358 14 8403 390
www.kuulopiiri.fi

SWISS 
Engineering

www.bernafon.fi

bernafon 
Your hearing • Our passion