

Tuotetiedot

SUPREMIA 7 | 3


Bernafonin Supremia 7|3 super power BTE kuulokoje sopii henkilöille, joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema. Supremia on varustettu Bernafonin patentoimalla Audio Efficiency™ -teknologialla, joka mahdollistaa ensiluokkaiset

ominaisuudet kuten Speech Cue Priority™, kaiunnan hallinnan ja Frequency Composition™. Supremian voi liittää moniin langattomiin lisälaitteisiin, esim. SoundGate 3, SoundGate Mikrofoni ja RC-N-kaukosäädin.

SUPER POWER KOUKULLA



SR 7 | 3 SP

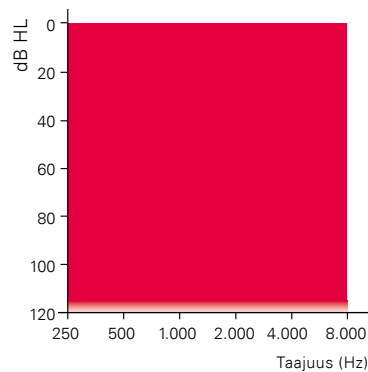

KOJEEN VÄRIT



metallinen
beige



metallinen
antrasiitti



antiikin
pronssi



metallinen
hopea



vaalean-
punainen



vaalean-
sininen

PERUSKUOREN VÄRI



hiekan
beige

Kaikki Super Power BTE-kojeiden peruskuoret ovat aina hiekan beige -värisiä ja yläkuoreessa on monia eri väri vaihtoehtoja.

Audio Efficiency™

Puheen selkeys

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*

Kuuntelumukavuus

- Adaptiivinen Feedback-hallinta
- Adaptiivinen melunhallinta Plus
- Impulssimelunhallinta*
- Kaiunnan hallinta*
- Binauraalinen koordinointi

Yksilölliset ominaisuudet

- Langattomat yhteydet
- Kielten ominaispiirteiden huomiointi
- REMfit™

* Vain Supremia 7 -mallissa

Lisäominaisuudet

Tekniset ominaisuudet

- Digitaalinen signaalinkäsittely 8 kHz:iin saakka
- Moniympäristö-ohjelma
- Ympäristöäänien optimointi*
- Automaattinen puhelimen tunnistus*
- Induktiokela
- Adaptiivinen suuntatieto
- Vettähylyvä pinta kaikilla korvantauskojeilla
- Pölyn- ja vedenkestävä kuori (IP58)
- LED-merkkivalo



Yksilölliset ominaisuudet

- Tiedonkeruu
- Älykäs voimakkuussäädin*
- 13 kuunteluohjelmaa
- 4 vapaasti muokattavaa ohjelmapaikkaa
- DAI / FM -liitin
- 1 dB VS portaittaisella säädöllä





SR 7|3 SP
Koukku

2CC KYTKINONTELO

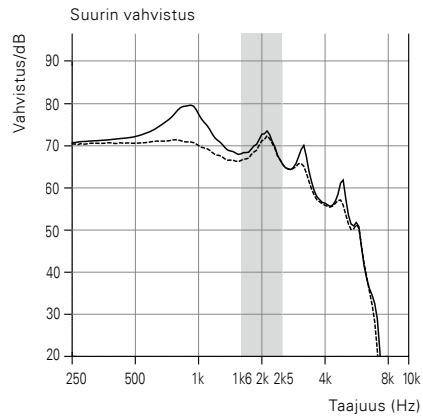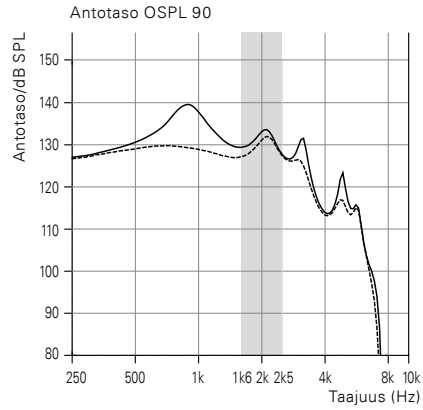

KORVASIMULAATTORI

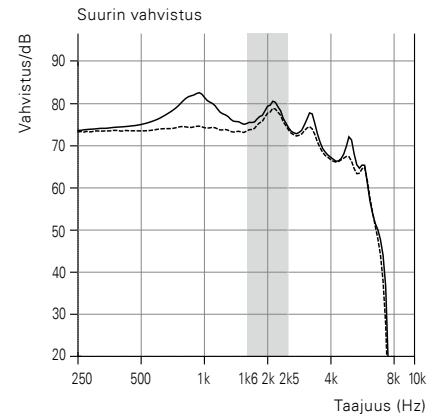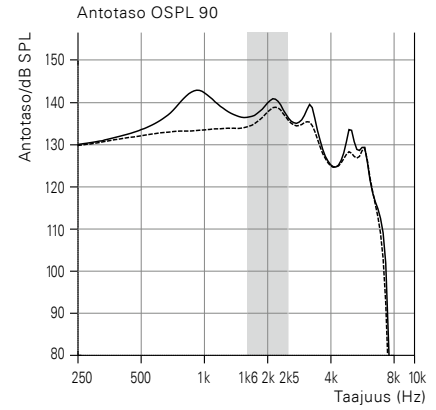

— Mittaukset koukulla ilman vaimenninta
- - - Mittaukset koukulla vaimentimen kanssa

2CC KYTKINONTELO

KORVASIMULAATTORI

	KOUKKU ILMAN VAIMENNINTA	KOUKKU VAIMENTIMELLA	KOUKKU ILMAN VAIMENNINTA	KOUKKU VAIMENTIMELLA
OSPL 90, huippu (dB SPL)	139**	132**	143**	139**
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	129	127	136**	134**
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	131	128	-	-
Suurin vahvistus, huippu (dB)	79	72	82	79
Suurin vahvistus, 1600 Hz (dB)	68	66	75	73
HFA suurin vahvistus (dB)	70	67	-	-
Referenssivahvistus	54	51	62	60
Lepovirta (mA)	1.1	1.1	1.1	1.1
Toimintavirta (mA)	2.0	1.7	1.3	1.3
Paristotyyppi	13		13	
Särö 500/800/1600 Hz (%)	<3/<2/<2	<2/<2/<2	<9/<2/<3	<5/<4/<4
Taajuusalue (Hz)	100 – 6000		-	-
Sisäisen kohinan ekvivalentti ¹⁾ , dB(A)	16	17	18	17
Induktiokela 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	98	96	105	103
Induktiokela HFA SPLITS (dB SPL)	108	101	-	-
Ohjelman valitsin	●		●	
Voimakkuussäädin	●		●	
LED-merkkivalo	●		●	
Automaattinen puhelimen tunnistus	●*		●*	
Mikrofonijärjestelmä	dir		dir	

¹⁾Tekninen tieto mitattu laajennettuna, vastaten testimittausasetuksia.

"2cc" viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60318-5:2006. "Korvasimulaattori" viittaa kytkinonteloon perustuen IEC 60318-4:2010. Sovellettavat versiot: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2009.

**Noudata erityistä huolellisuutta, kun sovitat ja käytät kojetta suurimmalla äänenpaineella eli yli 132 dB SPL (IEC 60318-4).

Tällöin voi olla riski vahingoittaa kuulokojeen käyttäjän jäljellä olevaa kuuloa.

** Vain Supremia 7 -mallissa

	SUPREMIA 7	SUPREMIA 3
SIGNAALINKÄSITTELY		
ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Frequency Composition™	●***	●
Taajuusalue	8 kHz	8 kHz
KUUNTELUMUKAVUUS		
Adaptiivinen melunhallinta (ANR Plus)	5 ctr	4 ctr
ANR Plus Ultra Comfort	●	–
Impulssimelunhallinta	●	–
Adaptiivinen feedback-hallinta Plus	●	●
Tuulikohinan hallinta	●	●
Ympäristöäänien optimointi	1/4	–
Edistynyt hiljaisten äänien hallinta	3 ctr	2 ctr
Kaiunnan hallinta	●	–
BINAURAALINEN KOORDINOINTI		
Mykistys, ohjelmavalitsin	●	●
Ympäristöäänien erittely	●	–
Puhelittoman puolen vaimennus	●	–
SUUNTATOIMINTO		
Adaptiivinen	●	●
True Directionality™	●	–
MUKAVUUSTOIMINNOT		
Naksahtava voimakkuussäädin	●	●
Mykistys painokytkimellä	●	●
Säädettävä käynnistyksen viive	●	●
1 dB VS portaittainen säätö	●	●
LED-merkkivalo	●	●
PERSONOINTI		
Ohjelmavaihtoehdot/ohjelmamuisti	13/4	11/4
Sopeutumisen hallinta	●	–
Tiedonkeruu	●	●
Älykäs voimakkuussäädin	●	–
Kielten ominaispiirteiden huomiointi	●	●
REMrfit™	●	●
Interaktiivinen asiakasohjelma	●	●
LANGATTOMAT LISÄVARUSTEET (VALINNAISIA)		
Kaukosäädin RC-N	●	●
SoundGate 3 (Bluetooth®)	●	●
SoundGate-mikrofoni (vaatii SoundGate 3 -laitteen)	●	●
TV-sovitin 2 / Puhelinsovitin 2	●	●
FM-liitin	●	●
DAI-liitin	●	●
CROS-mikrofoni	●	●

***Supremia 7 tarjoaa lisäksi kohdetaajuusalueen (1,0 – 2,9 kHz)

OHJELMOINTI



Supremia 7|3 Super Power ohjelmoidaan Bernafon Oasis -ohjelmalla, versio 20.0 tai uudempi. Sopii NOAH-ohjelmaan (MS-Windows®-pohjainen PC-sovitushjelma). NOAH, jossa on FittingLINK, HI-PRO, HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, tai nEARcom ohjelmointirajapinta. Oasis-asennus yksin pelkästään myös mahdollinen.

Laitteistovaatimukset










Windows® 8.1, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows® 8, 32/64 bit (Oasis 18.0 tai uudempi)
Windows® 7, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows Vista®, 32/64 bit, kaikki versiot
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (kaikki versiot)
Noah 4.3 (minimivaatimus for Windows® 8)
Noah 3 kaikki versiot (ei suositella)

TUOTE	KUVAUS	TUOTENUMERO	
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (HiPro)	Sininen, vasen	384-20-033-00	
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (HiPro)	Punainen, oikea	384-20-032-00	
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (NOAHlink)	Sininen, vasen	384-20-035-00	
Ohjelmointikaapeli Nro 2 uusi standardi (NOAHlink)	Punainen, oikea	384-20-034-00	
FittingLINK	Langaton ohjelmointilaite suoraan tietokoneeseen kuulokojeohjelmointia varten. Vaatii oman USB Bluetooth® donglen asentamisen toimiakseen (sisältyy pakkaukseen).	144720	

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

TUOTE	KUVAUS	TUOTENUMERO	
Kaukosäädin RC-N	Huomaamaton laite äänenvoimakkuuden säätämiseen ja ohjelmien valintaan	139772	
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Langaton yhteys ja kaukosäädin induktiosilmukalla	144604	
SoundGate-mikrofoni	Klipsillä kiinnitettävä mikrofoni, jonka avulla saa paremmin selvän mikrofonia käyttävän henkilön puheesta (vaatii SoundGate 3 -laitteen)	145645	
TV-sovitin 2 (Bluetooth®)	Langaton TV-äänien vastaanotto	127847	
Puhelinsovitin 2 (Bluetooth®)	Langaton yhteys lankapuhelimiin	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)	
DAI-liitin	SBO tuote	147602	
FM-liitin	SBO tuote	147435	
Ohjelmointiliitin		399-50-640-00	
CROS-mikrofoni	SBO tuote	153877	

Valmistaja

Sveitsi

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Puh +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Suomi

Kuulopiiri Oy
Sepänkatu 7 (PL10)
40720 Jyväskylä
Puh +358 14 8403 300
Fax +358 14 8403 390
www.kuulopiiri.fi