

INFORMATION PRODUIT

VÉRITÉ 9 | 7 | 5



VE9 MR


VE7 MR

VE5 MR

DESCRIPTION

Vérité est une famille d'aide auditive à écouteur déporté disponible en 3 catégories de prix et de performances offrant aux clients des bénéfices inégalés avec son incroyable traitement de signal ChannelFree™, la synchronisation binaurale et la connectivité sans fil.

GAMME D'ADAPTATION

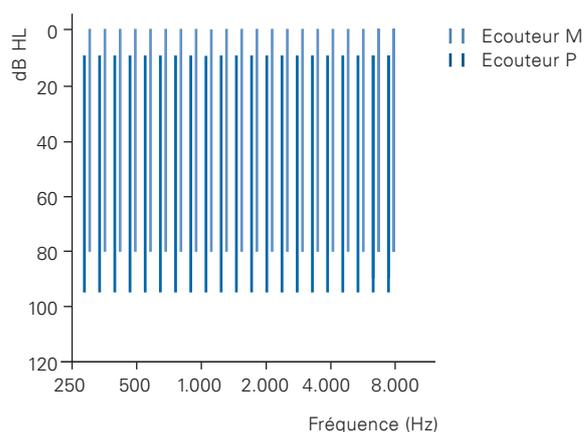

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Traitement du signal ChannelFree™
- Coordination binaurale sans fil
- Programme Multi-Environnement
- Optimiseur d'environnement*
- Directionnalité adaptative
- Réduction adaptative du bruit
- Unification adaptative du signal
- Soft Noise Management avancé
- Système de compression du signal rapide
- Data logging et learning
- Option de 2 puissances d'écouteurs
- Détection automatique du téléphone
- Live Music Plus**

CARACT. DE PERSONNALISATION

- Profil de style de vie
- Data learning
- 3-4 programmes attribuables (inclue la fonction de copie)
- 8-11 options de programmes d'écoute
- Design attractif avec 15 options de couleurs différentes
- Télécommande RC-P en option
- SoundGate en option pour une connectivité sans fil Bluetooth® pour téléphone cellulaire et sources audio diverses*
- Adaptateur téléphone filaire en option pour une réception sans fil*
- Adaptateur TV en option pour une réception TV sans fil*

* Pour VE9 MR et VE7 MR seulement

** Pour VE9 MR seulement



VE9 MR / VE7 MR avec écouteur P




VE9 MR / VE7 MR avec écouteur M

— Mesure avec écouteur P
 - - - Mesure avec écouteur M

COUPLEUR 2CC



SIMULATEUR D'OREILLE

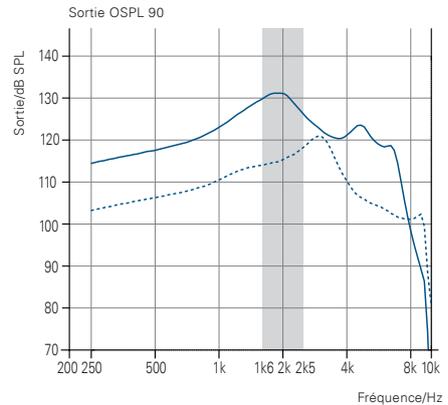

COUPLEUR 2CC

	AVEC ÉCOUTEUR M	AVEC ÉCOUTEUR P
OSPL 90, crête	110	122
OSPL 90, 1600 Hz	105	121
HFA OSPL 90	105	118
Gain max., crête	49	60
Gain max., 1600 Hz	41	59
HFA Gain max.	43	56
Gain de référence	29	42
Courant au repos	1.2	1.2
Courant en fonction	1.3	1.4
Type de piles	312	
Distorsion 500/800/1600 Hz	<1 / <1 / <1	<2 / <1 / <1
Gamme de fréquence	100-7400	100-6900
Bruit équivalent d'entrée ¹⁾	15	14

SIMULATEUR D'OREILLE

	AVEC ÉCOUTEUR M	AVEC ÉCOUTEUR P
OSPL 90, crête	121	131
OSPL 90, 1600 Hz	114	130
HFA OSPL 90	-	-
Gain max., crête	60	70
Gain max., 1600 Hz	50	68
HFA Gain max.	-	-
Gain de référence	39	55
Courant au repos	1.2	1.2
Courant en fonction	1.2	1.3
Type de piles	312	
Distorsion 500/800/1600 Hz	<2 / <2 / <2	<3 / <3 / <2
Gamme de fréquence	-	-
Bruit équivalent d'entrée ¹⁾	18	11

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

¹⁾ Les données techniques sont mesurées avec l'expansion, correspondant aux caractéristiques du caisson de mesure.

" Coupleur 2cc " fait référence à un coupleur conformément à IEC 60318-5. " Simulateur d'oreille " fait référence à un coupleur conformément à IEC 60711.

Versions appliquées : IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 et ANSI S3.22:2003.

ACCESSOIRES (EN OPTION)



SoundGate

Télécommande RC-P

Adaptateur TV

Adaptateur téléphone





VES MR avec écouteur P





VES MR avec écouteur M

— Mesure avec écouteur P
 - - - Mesure avec écouteur M

COUPLEUR 2CC

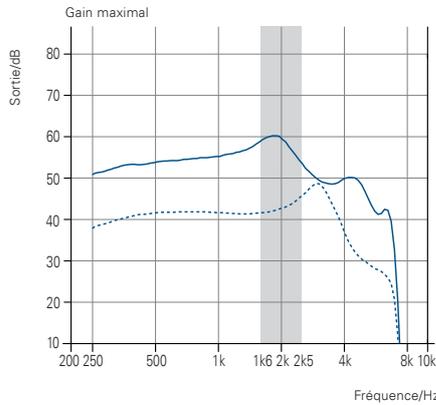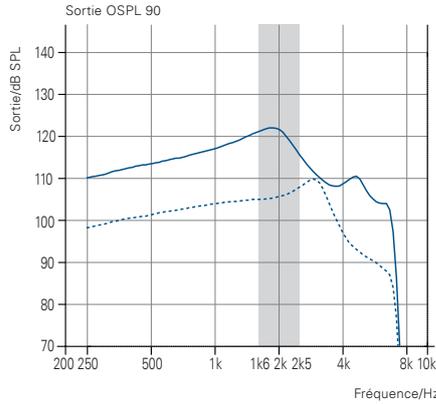

SIMULATEUR D'OREILLE

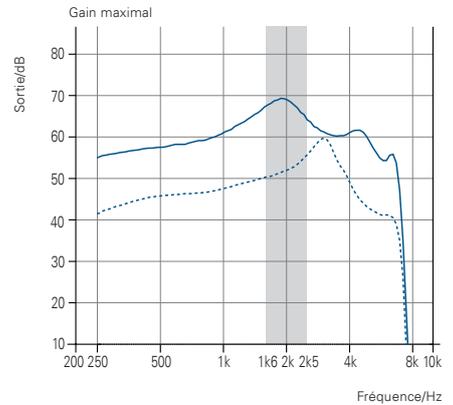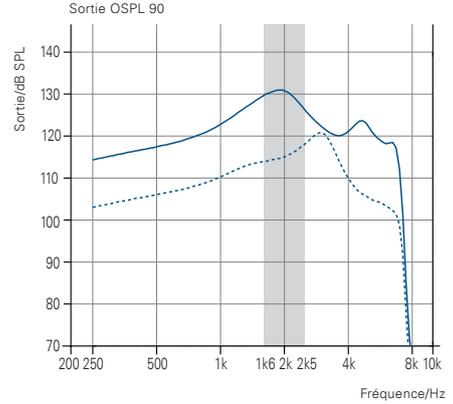

COUPLEUR 2CC

	AVEC ÉCOUTEUR M	AVEC ÉCOUTEUR P
OSPL 90, crête	110	122
OSPL 90, 1600 Hz	105	121
HFA OSPL 90	105	118
Gain max., crête	49	60
Gain max., 1600 Hz	41	59
HFA Gain max.	43	56
Gain de référence	29	42
Courant au repos	1.2	1.2
Courant en fonction	1.3	1.4
Type de piles	312	
Distorsion 500/800/1600 Hz	<1 / <1 / <1	<2 / <1 / <1
Gamme de fréquence	100-6900	100-6900
Bruit équivalent d'entrée ¹⁾	15	14

SIMULATEUR D'OREILLE

	AVEC ÉCOUTEUR M	AVEC ÉCOUTEUR P
OSPL 90, crête	121	131
OSPL 90, 1600 Hz	114	130
HFA OSPL 90	-	-
Gain max., crête	60	70
Gain max., 1600 Hz	50	68
HFA Gain max.	-	-
Gain de référence	39	55
Courant au repos	1.2	1.2
Courant en fonction	1.2	1.3
Type de piles	312	
Distorsion 500/800/1600 Hz	<2 / <2 / <3	<3 / <3 / <2
Gamme de fréquence	-	-
Bruit équivalent d'entrée ¹⁾	17	12

¹⁾ Les données techniques sont mesurées avec l'expansion, correspondant aux caractéristiques du caisson de mesure.

OPTIONS DE COULEURS

Toutes les couleurs sont disponibles pour tous les types.



striped black SPMBL striped anthracite SPAC striped stone SPST striped mocca SPMBR striped gold SPSGO striped steel grey SPCGR striped chocolate brown SPMBR striped dune beige SPDBE striped birch beige SPBBE striped white silver SPWH

COULEURS ADDITIONNELLES



solid anthracite PAC solid mocca PMBR solid birch beige PBBE solid dune beige PDBE solid stone PST

ÉQUIPEMENTS DE PROGRAMMATION

Vérité 9 | 7 | 5 sont programmables avec Oasis de Bernafon, version 11.5 ou supérieur, compatible NOAH3. NOAH3 avec HiPro ou NOAHlink requis.

Produit	Description	Référence
Câble prog., n° 2 Nouvelle norme (HiPro)	Bleu, gauche	384-20-033-00
Câble prog., n° 2 Nouvelle norme (HiPro)	Rouge, droit	384-20-032-00
Câble prog., n° 2 Nouvelle norme (NOAHlink)	Bleu, gauche	384-20-035-00
Câble prog., n° 2 Nouvelle norme (NOAHlink)	Rouge, droit	384-20-034-00

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES	VÉRITÉ 9	VÉRITÉ 7	VÉRITÉ 5
COORDINATION BINAURALE			
Contrôle du volume*, changement de programme	●	●	●
Classification des environnements	●	●	
Suppression du Larsen	●	●	
Atténuation controlatérale lors de l'usage du téléphone	●		
DIRECTIONNALITÉ			
Fixe / Omnidirectionnel fixe / Adaptatif	●	●	●
Adaptativité haute fréquence	●		
GESTION DU BRUIT, ÉCOUTE DE CONFORT			
Gestion du vent	●	●	●
Réduction du bruit adaptative	4 états de contrôle	3 états de contrôle	2 états de contrôle
Gestion adaptative du Larsen / Suppression	●	●	●
Optimiseur d'environnement	1/4	1/1	
Soft noise management évolué	●	●	●
PERSONNALISATION			
Live Music Plus	●		
Options de programmes	11	10	8
Nombre de programmes	4	4	3
Data logging	●	●	●
Apprentissage du contrôle de volume*	●	●	
Smart VC*	●		
ACCESSOIRES SANS FIL (OPTION)			
Télécommande (RC-P)	○	○	○
SoundGate (sans fil)	○	○	
Adaptateur TV / Adaptateur téléphone	○	○	

* disponible avec la télécommande ou la soundGate en option.

● standard ○ optionnelle

Fabricant**Suisse**

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

France

Prodition S.A.S.
37-39, rue Jean-Baptiste Charcot
92402 Courbevoie cedex
Téléphone +33 1 41 88 00 80
Fax +33 1 41 88 00 86
www.bernafon.fr