

Volume +++

Anspruchsvolle Hörsituation

4629 Hz



FOKUS AUF DIE KLÄNGE
DES LEBENS

ACRIVA HÖRSYSTEME



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Im Fokus: Was Sie hören wollen

Überall auf der Welt sind Digitalkameras im Einsatz. Mit ihrer Hilfe rücken wir kostbare Momente in den Fokus, fangen sie ein und teilen sie mit anderen Menschen. Mit digitalen Hörsystemen verhält es sich ähnlich. Sie erlauben Ihnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Sie hören möchten oder müssen, um sich aktiv an Gesprächen mit Angehörigen, Freunden und Kollegen zu beteiligen.

Acriva, die neueste Hörsystemfamilie von Bernafon, hilft Ihnen, diese kostbaren Momente in Ihren Fokus zurückzubringen. Unsere Hörsysteme werden in Bern entwickelt und sind das Ergebnis von Schweizer Präzisionsarbeit. Sie bieten sowohl ausgezeichnete Sprachverständlichkeit als auch besten Hörkomfort und werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt.



Volume ++

Laute Umgebung


Klappern von Besteck



Im Fokus: Die Schweizer Spitzentechnologie

Acriva Hörsysteme sind mit der neuen Audio Efficiency™ 2.0 Technologie von Bernafon ausgestattet. Dieses System kombiniert und koordiniert komplexe Funktionen und stellt sicher, dass Sie in den Alltag eintauchen, ohne sich der Hörsysteme weiter bewusst zu sein.

Sie profitieren von einer absolut klaren Sprachverständlichkeit, einem deutlich gesteigerten Hörkomfort und zahlreichen Möglichkeiten, das Hörsystem Ihrem persönlichen Lebensstil anzupassen.

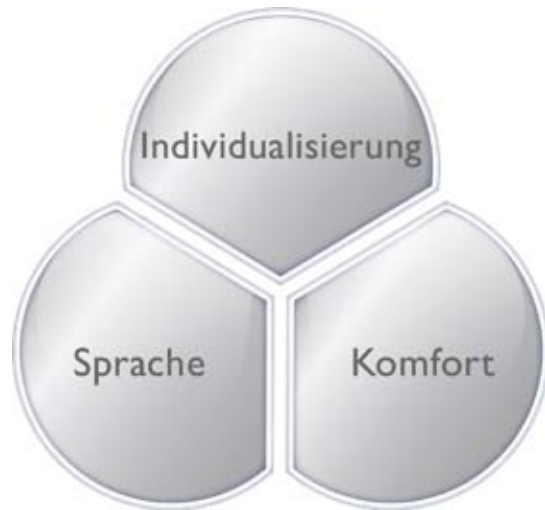

Audio Efficiency™ 2.0

Αυδιο Εφικότητα 2.0



Hören, was Sie hören wollen. Acriva verbessert das Sprachverstehen und sorgt dank der von Bernafon patentierten ChannelFree™ Signalverarbeitung für einen klaren, natürlichen Klang. Ob Sie mit Freunden essen gehen, den Abend mit der Familie zu Hause verbringen oder auf einer Tagung unterwegs eine Präsentation verfolgen – Acriva wird Sie nicht im Stich lassen.



Störende Geräusche loswerden. Acriva schafft ein optimales Klangerlebnis, indem es unerwünschte Umgebungsgereusche entfernt und gleichzeitig akustische Rückkopplung unterdrückt, die vom Hörsystem selbst stammt. Durch diese Kombination wird das Hören spürbar angenehmer, und Sie werden Acriva sehr gerne tragen.



Sie haben die Wahl. Acriva ist in einer grossen Auswahl an Bauformen, Funktionen und Farben erhältlich. Ihrem mobilen Lebensstil und Ihrem Bedürfnis nach räumlicher Freiheit sind kaum Grenzen gesetzt, denn Acriva ist Bluetooth®-fähig. Über Zusatzgeräte werden Telefonate mit Ihrem Mobil- oder Festnetztelefon einfacher als je zuvor, und das Musikhören und Fernsehen erhält eine neue Qualität.

Volume +

Ruhige Umgebung

Entfernte Stimme



■ 60%
■ 20%
■ 10%

Im Fokus: Die natürlichen Hörerlebnisse

Acriva Hörsysteme helfen Ihnen beim Hören und Verstehen, selbst in schwierigsten Hörsituationen.

Klarer und natürlicher Klang mit ChannelFree™

Unser exklusives Signalverarbeitungssystem analysiert und verstärkt Sprachsignale 20.000 Mal pro Sekunde. So genießen Sie eine erstklassige Klangqualität und beste Sprachverständlichkeit in allen wichtigen Situationen.

Präzise Lokalisierung von Sprache mit Direktionalität

Unabhängig davon, ob Sprache von vorn, von der Seite oder sogar von hinten kommt – Acriva erkennt das Signal und sorgt dafür, dass Sie Gesprächen besser folgen können.

Hohe Töne wahrnehmen mit Frequency Composition™

Basierend auf Ihrem individuellen Hörverlust macht unser neuestes Feature wichtige hochfrequente Töne wie Konsonanten in der Sprache, Kinderstimmen und Vogelgezwitscher wieder hörbar.

Im Fokus: Hörkomfort auf neuem Niveau

Acriva reduziert unangenehme Geräusche in jeder schwierigen Situation. So werden Sie wieder Freude am Hören haben.

Die **Adaptive Noise Reduction Plus** verwendet schnelle Algorithmen, um unerwünschte Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel Verkehrslärm oder Staubsaugergeräusche, zu mildern.

Zusätzlich reduziert die **Impulsschallunterdrückung** unangenehme impulsartige Geräusche wie Besteckklappern, sodass Sie Unterhaltungen zu Hause oder im Restaurant besser genießen können.

Der **Adaptive Feedback Canceller Plus** beseitigt die lästigen Pfeiftöne, die vom Hörsystem selbst abgegeben werden, noch bevor sie hörbar werden.

Acriva ist auch mit der **binauralen Koordination** ausgestattet, wovon Sie profitieren, wenn Sie zwei Hörsysteme tragen.

- Beide Hörsysteme arbeiten als Einheit zusammen und tauschen ständig Informationen über die Hörumgebung aus.
- Eine an einem der Hörsysteme vorgenommene Lautstärke-einstellung oder ein Programmwechsel wird sofort auf beiden Hörsystemen aktiv.
- Das Hörsystem, das Sie beim Telefonieren nicht am Ohr halten, erhält automatisch eine geringere Verstärkung. Telefongespräche in lauten Umgebungen werden so spürbar angenehmer.

Volume ++++

Enormer Lärm

98 dB SPL



Volume ++++



105 dB SPL



Im Fokus: Das Live-Musik Erlebnis

Manchmal wecken Klänge stärkere Emotionen als Bilder, insbesondere im Kino und im Konzertsaal. Wir wissen jedoch, dass das Hören von Live-Musik oder das Betrachten von Filmen auf der Grossleinwand mit Hörsystemen schwierig sein kann. Häufig erreichen Filme und Live-Konzerte sehr hohe Lautstärken, und die Spannweite der Schalldruckpegel ist sehr gross.

Übliche Hörsysteme begrenzen oder beschneiden die sehr lauten Signalanteile über 95 dB und verhindern damit, dass der Zuhörer in den vollen Genuss des Kino- oder Live-Musik-Erlebnisses kommt.

Mit unserem einzigartigen **Live Musik- und Kino-Programm** werden sehr laute Klänge bis 110 dB jedoch in vollem Umfang verarbeitet. Auf diese Weise bleibt die grosse Dynamik von Musik und Filmsound erhalten und erlebbar.

Im Fokus: Das moderne Leben

Die heutigen Kommunikationswege sind integrierter, mobiler und vielfältiger denn je. Auch Hörsysteme müssen in diese Zeit passen, und die Anbindung zu elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern und MP3-Playern muss reibungslos funktionieren.

Über das **SoundGate 2** kann Acriva einfach mit modernen Multimedia-Geräten verbunden werden. Das Gerät wirkt als Schnittstelle zwischen Ihren Hörsystemen und externen Kommunikations- und Mediengeräten.

Ob daheim oder unterwegs – das SoundGate 2 erleichtert Ihnen Fernsehen, Telefonieren und Musikhören und macht die Kommunikation zu einem noch grösseren Genuss.¹⁾

¹⁾ Weitere Informationen über das SoundGate 2 entnehmen Sie bitte unserer SoundGate 2 Broschüre (erhältlich unter www.bernafon.com), oder fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker.



Das SoundGate 2 ist die Schnittstelle zwischen Ihren Hörsystemen und verschiedenen elektronischen Geräten.



Der Telefon-Adapter 2 verbindet Ihr Festnetz-Telefon über das SoundGate 2 mit Ihren Hörsystemen.




Der TV-Adapter stellt die Verbindung zum Fernsehgerät her und überträgt den Ton über das SoundGate 2 an Ihre Hörsysteme.

Wireless




Bluetooth®

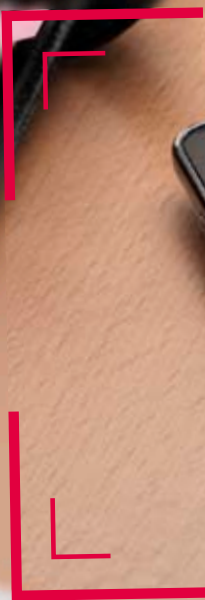


Komfortabel

Klein

Nahezu unsichtbar

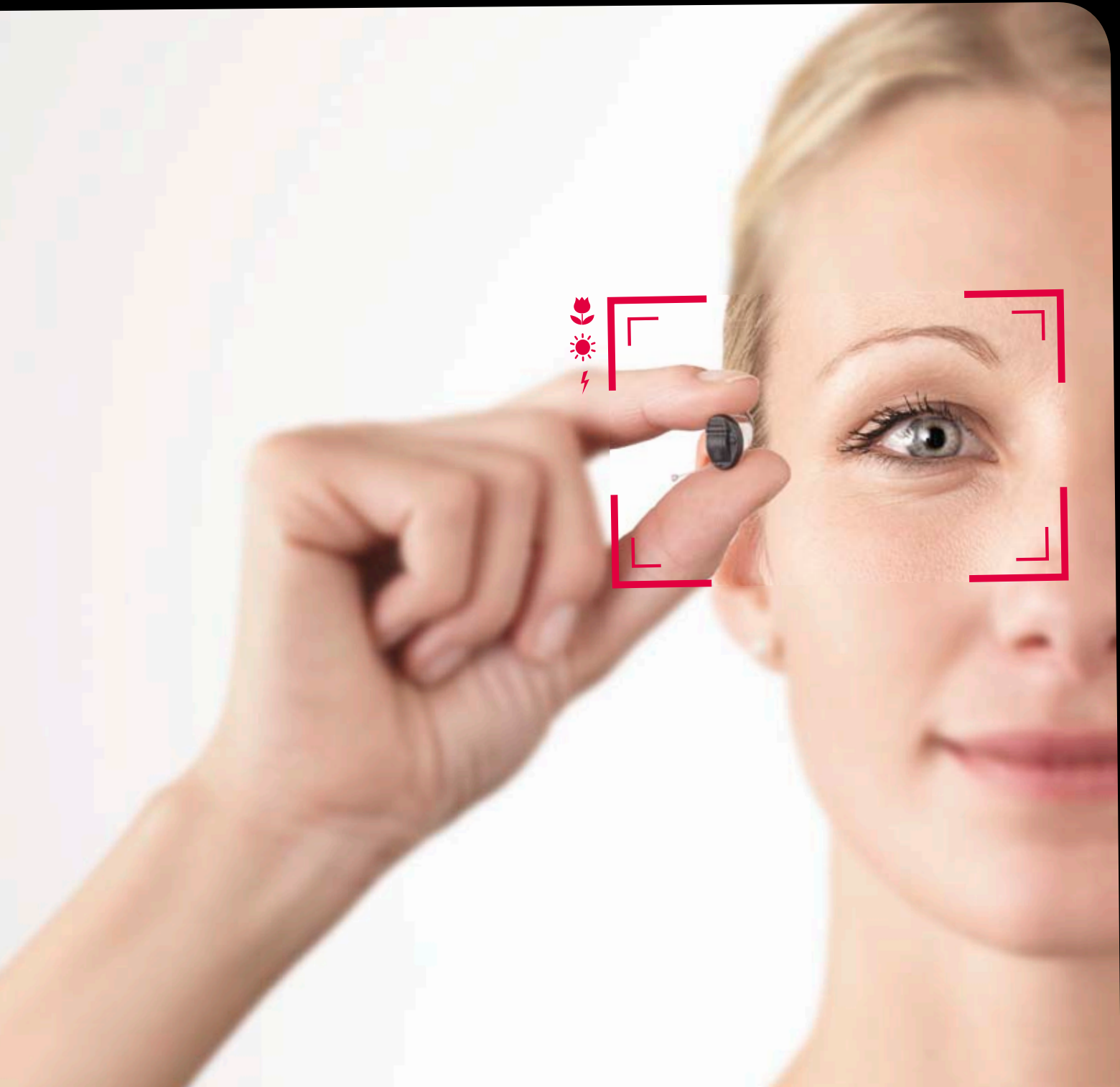

Im Fokus: Die Frage des Stils

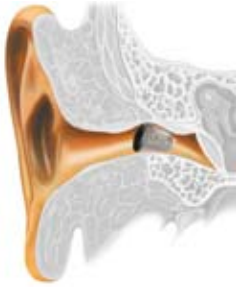

Acrica ist in insgesamt elf verschiedenen Bauformen erhältlich – als Hinter-dem-Ohr (HdO) und Im-Ohr (IdO). Neu ist das Invisible-in-the-Canal (IIC) Hörsystem. Es ist so klein, dass es sehr tief im Gehörgang platziert werden kann und von aussen kaum sichtbar ist. Ihre Mitmenschen werden nicht einmal bemerken, dass Sie ein Hightech-Hörsystem tragen.²⁾

Alle Acriva HdOs sind mit einer hydrophoben Beschichtung versehen und haben das IP57-Zertifikat erhalten. Dies bedeutet, dass sie weitgehend gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt sind.

Eine breite Farbpalette sorgt dafür, dass Sie Ihr Acriva HdO entsprechend Ihrer Haar- und Hautfarbe oder Ihrem Modegeschmack auswählen können. Auch die IdOs sind in vier dezenten Hauttönen erhältlich.

²⁾ Weitere Informationen über das IIC entnehmen Sie bitte unserer Acriva IIC Broschüre (erhältlich unter www.bernafon.com), oder fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker.



beige



dunkel-
braun



grau
braun



grau



ivory



metallic
platin



metallic
anthrazit



metallic
beige



dunkel
chrom

Seit 1946 entwickeln wir mit Leidenschaft erstklassige Hörsysteme, die es Menschen mit Hörproblemen ermöglichen, authentische und stimulierende Hörerlebnisse zu geniessen. Mit Schweizer Ingenieurkunst, Präzision und unserem Engagement für individuellen Service streben wir danach, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Unser Ziel ist es, unseren Partnern jeden Tag einen Extranutzen zu bieten. Bernafon-Repräsentanten und -Mitarbeitende in über 70 Ländern setzen sich täglich für unsere Vision ein, damit Menschen mit verminderter Hörfähigkeit wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Hauptsitz

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90

Deutschland

Bernafon Hörgeräte GmbH
Nunsdorfer Ring 14
12277 Berlin
Telefon +49 30 723 937 0
Telefax +49 30 723 937 19

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion