

USŁYSZ
WYRAŹNIE
20 GŁOSÓW
ŚPIEWAJĄCYCH
“STO LAT”

Najwyższej jakości wrażenia
słuchowe

APARATY SŁUCHOWE JUNA




bernafon[®]
Your hearing · Our passion



Czy chcesz w końcu naprawdę dobrze słyszeć i rozumieć mowę w wymagających środowiskach akustycznych? Bernafon, szwajcarski producent aparatów słuchowych, spełni Twoje oczekiwania – i to w stopniu dużo większym, niż się tego spodziewasz! Aparaty słuchowe Juna to rodzina najbardziej zaawansowanych produktów, funkcjonująca w oparciu o niezwykle wyrafinowaną technologię przetwarzania dźwięku. Aparaty Juna zapewniają Użytkownikowi najwyższej jakości dźwięk, dyskrecję, komfort słuchowy oraz współpracują z różnymi akcesoriami bezprzewodowymi.

Razem z Juna wydobędziesz więcej z każdego otaczającego Ciebie dźwięku.

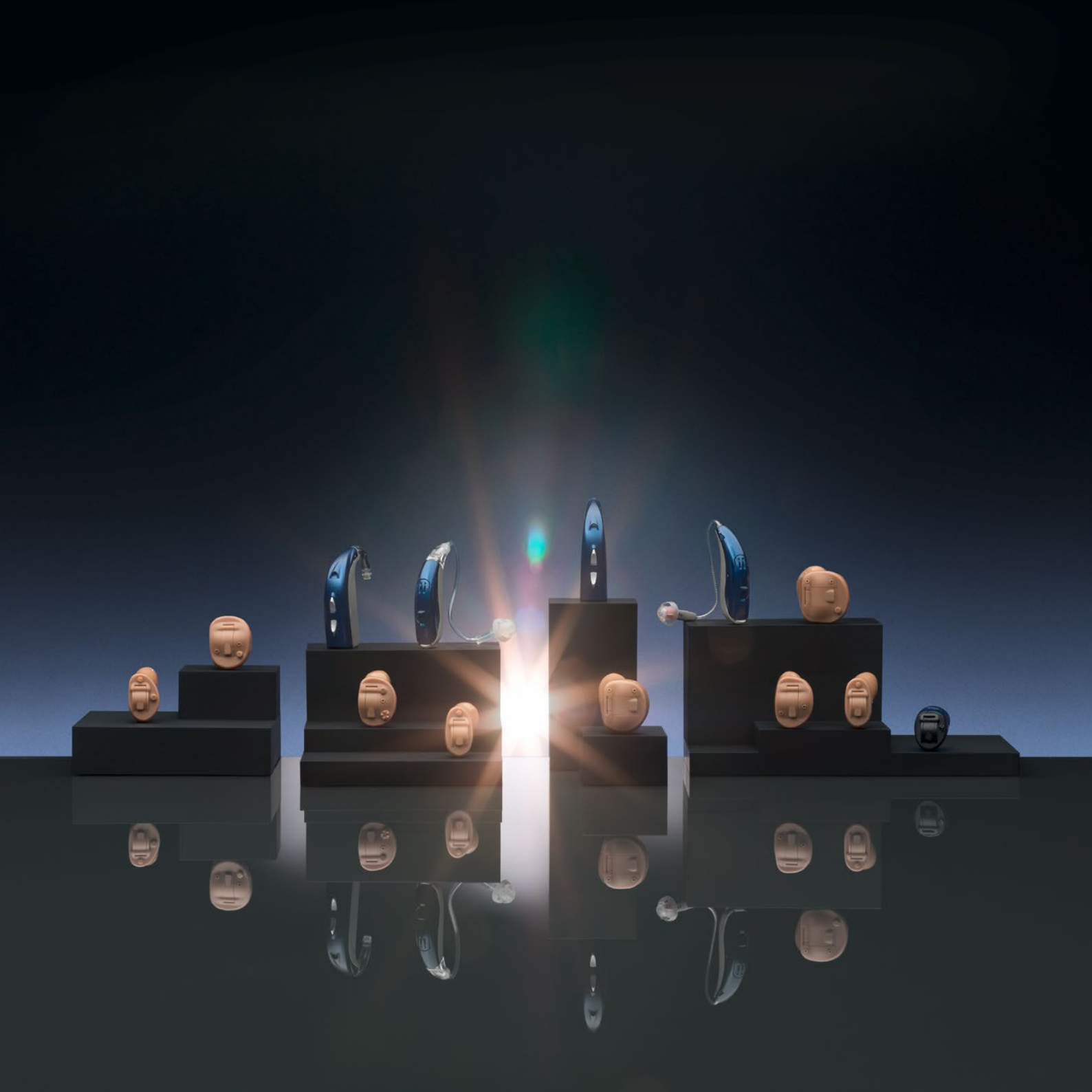

Aparaty stworzone specjalnie dla Ciebie


Aparaty słuchowe Juna są dostępne w postaci wielu modeli zausznych (BTE) oraz wewnętrznych (ITE). Dzięki temu Protetyk Słuchu dobierze bez problemu aparat słuchowy, który spełni Twoje wymagania.

Aparaty słuchowe Juna – dostępne modele

Modele BTE występują w 7 gustownych wariantach kolorystycznych, umożliwiających dobór aparatu z uwzględnieniem odcienia skóry, kolorów włosów i innych preferencji Użytkownika. Aparaty ITE dostępne są w 4 kolorach.



Kolory JUNA BTE

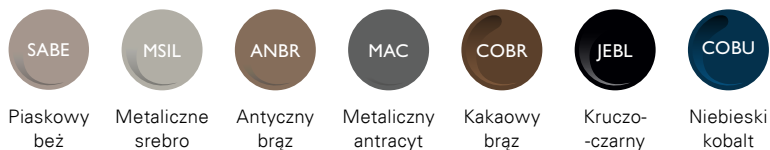



SPRAW, ABY
NIEMOŻLIWE
STAŁO SIĘ
MOŻLIWYM



Najnowsza technologia dla najwyższej jakości wrażeń słuchowych

Aparaty słuchowe Juna funkcjonują w oparciu o nowatorski system Audio Efficiency™, który nieprzerwanie zarządza poszczególnymi układami zwiększania wyrazistości mowy, jakości dźwięku oraz komfortu słuchowego, uwzględniając jednocześnie indywidualne wymagania Użytkownika. Bez względu na otoczenie akustyczne, Audio Efficiency™, niczym dyrygent orkiestry, odpowiednio “poprowadzi” działanie Twojego aparatu słuchowego.



Audio Efficiency™



Rozumienie mowy

Audio Efficiency™ gwarantuje maksymalną zrozumiałość mowy oraz jakość dźwięku, nawet w “trudnych” środowiskach akustycznych.



Komfort

Audio Efficiency™ zarządza kilkoma systemami aparatu, których celem jest zwiększanie komfortu Użytkownika oraz redukcja tzw. zmęczenia słuchowego.



Indywidualizacja

Audio Efficiency™ oferuje duże możliwości personalizacji ustawień oraz współpracę z akcesoriami bezprzewodowymi, dzięki którym możliwe jest swobodne używanie aparatów w większości warunków akustycznych.

SPRAW, ABY KAŻDE
USŁYSZANE SŁOWO
BYŁO DLA CIEBIE
KOMPLEMENTEM





Zamień przypadkowe dźwięki w zrozumiałą mowę

Juna gwarantuje maksymalne rozumienie mowy występującej w niekorzystnych warunkach akustycznych. W niniejszej sekcji zaprezentowano informacje dotyczące poszczególnych układów intensyfikacji zrozumiałości mowy.

ChannelFree™ jest, opracowanym przez Bernafon, unikalnym systemem przetwarzania mowy, precyzyjnie optymalizującym wzmocnienie aparatu aż 20,000 razy na sekundę. ChannelFree™ zapewnia dużą precyzję wzmocnienia oraz najwyższą jakość dźwięku.

Regulacja głośności nowej generacji

i-VC działa na zupełnie innej zasadzie, niż tradycyjne potencjometry głośności. Jeśli Użytkownik zwiększa głośność dźwięku, i-VC automatycznie zwiększa wzmocnienie pasma częstotliwościowego mowy w większym stopniu, niż dla pasm związanych z innymi dźwiękami. W przypadku zmniejszenia wzmocnienia, i-VC modyfikuje ustawienia aparatu tak, aby nadal zapewnić maksymalne rozumienie mowy.

Nie bez znaczenia są też fenomenalne właściwości kierunkowe aparatów Juna. Dzięki **zaawansowanej kierunkowości** możliwy jest naturalny odbiór dźwięków dobiegających ze wszystkich kierunków.

Zmień każde pomieszczenie w ulubione miejsce do słuchania

Wyobraź sobie, że przebywasz np. w kościele, katedrze lub dużej hali. W takich pomieszczeniach, ze względu na bardzo długi czas pogłosu, rozumienie mowy jest drastycznie utrudnione. W pomieszczeniach "pogłosowych" mowa bezpośrednia zostaje "zmieszana" z mową odbitą od ścian, podłogi, sufitu i innych obiektów znajdujących się w pomieszczeniu. Oprócz spadku rozumienia mowy, pogłos negatywnie wpływa również na komfort słuchowy.



W mniejszych pomieszczeniach, jak np. pokój dzienny, pogłos jest również obecny. Jednakże w tych warunkach, ze względu na mniejsze odbicia dźwięku, jest on zazwyczaj odbierany jako coś komfortowego, wzbogacającego brzmienie dźwięku. Czas pogłosu jest tym krótszy, im mniejsze jest pomieszczenie (oraz im większe jest umeblowanie pokoju).

Zbyt duży pogłos jest szczególnie problematyczny dla Użytkowników aparatów słuchowych. Zaprojektowany przez Bernafon system Redukcji Pogłosu dokonuje detekcji oraz skutecznej eliminacji nadmiarowego dźwięku odbitego. Dzięki temu Użytkownik czuje się o wiele bardziej komfortowo w pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu.

A woman with short, wavy white hair is seated at a dark wooden table in a bright, airy cafe. She is wearing a light-colored, textured blazer over a white top and a pearl necklace. She is smiling broadly, showing her teeth, and holding a white ceramic coffee cup with both hands. On the table in front of her is a matching white saucer with a spoon. To her left is a glass sugar dispenser, and to her right is a glass of water. The background features large windows with black frames, letting in natural light. The text "SPRAW, ABY KAŻDA ROZMOWA STAŁA SIĘ MIŁYM WYDARZENIEM" is overlaid on the left side of the image in a dark, sans-serif font.

SPRAW, ABY
KAŻDA ROZMOWA
STAŁA SIĘ MIŁYM
WYDARZENIEM

Zmień hałaśliwe otoczenia w oazy spokoju

W wielu przypadkach otoczenie, w którym przebywa Użytkownik może być bardzo hałaśliwe, negatywnie wpływając na komfort słuchowy. Dlatego też Juna zaopatrzone w najbardziej efektywne systemy redukcji dźwięków niepożądanych.

Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus szczegółowo analizuje otoczenie akustyczne oraz – bez negatywnego wpływu na rozumienie mowy – redukuje słyszenie tzw. szumów stacjonarnych (np. hałas uliczny, hałas z budowy, odkurzaczy) w celu maksymalizacji komfortu słuchowego Użytkownika.

Redukcja Hałasu Transjentowego

natychmiastowo tłumi nagłe, dyskomfortowo głośne dźwięki transjentowe (impulsowe) jak trzaskanie drzwi, dźwięk sztućców, tłukącego się szkła itp.

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus jest systemem odpowiedzialnym za skuteczną eliminację uporczywych sprzężeń zwrotnych (pisków), zanim zostaną one w ogóle usłyszane przez Użytkownika.

Program słuchowy **Komfort w Samolocie** stworzono z myślą o Użytkownikach podróżujących. Pomimo ogólnej wygody podróży samolotem, pasażerowie są prawie zawsze narażeni na dyskomfort związany z dużym poziomem hałasu wewnątrz samolotu. Dzięki programowi słuchowemu Komfort w Samolocie ustawienia redukcji hałasu i kierunkowości aparatów optymalizowane są tak, aby zwiększyć znacznie komfort słuchowy w tych warunkach akustycznych.

Zamień Twój iPhone® w zaawansowany pilot zdalnego sterowania do aparatów słuchowych

Z największą przyjemnością prezentujemy SoundGate App¹⁾- łatwą w użyciu i funkcjonalną aplikację zamieniającą telefon iPhone w wygodny pilot zdalnego sterowania. Dzięki SoundGate App Użytkownik może zdalnie zmieniać głośność, program słuchowy oraz wybierać źródło dźwięku. Zdalne sterowanie aparatami nigdy nie było tak proste i dyskretne.

Przejrzysty i intuicyjny wygląd SoundGate App umożliwia jej natychmiastowe wykorzystanie, nawet przez mniej doświadczonych Użytkowników aparatów słuchowych.

Darmową aplikację SoundGate App można zainstalować z App Store – wystarczy wpisać w odpowiedniej wyszukiwarce "Bernafon SoundGate" oraz kliknąć "Instaluj".



¹⁾ Do zastosowania razem z iPhone (iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s oraz iPhone 4). SoundGate App wymaga urządzenia SoundGate 3 oraz aparatów słuchowych z funkcjami bezprzewodowymi.

Apple, logo Apple oraz iPhone są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.

Zamień trudne wyzwania w osobiste sukcesy



Mikrofon SoundGate zaprojektowano w celu zapewnienia Użytkownikowi jeszcze lepszej wyrazistości mowy w hałaśliwych warunkach. Urządzenie to jest miniaturowym mikrofonem, który może być m.in. przypięty do ubrania osoby, której słucha Użytkownik aparatu, np. spikera podczas prezentacji.

Po podłączeniu do SoundGate 3 Mikrofon SoundGate bezprzewodowo transmituje mowę spikera do aparatów słuchowych Użytkownika. Mikrofon SoundGate waży tylko 13 gramów, a sam produkt cechuje się bardzo gustownym designem. Zaleca się stosowanie Mikrofonu SoundGate zawsze, kiedy wysoki poziom szumów utrudnia zrozumienie mówcy (restauracje, przyjęcia itp.).

Pilot zdalnego sterowania RC-N umożliwia dyskretną zmianę programu słuchowego lub/i głośności dźwięku. RC-N jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie dyskrecję i wygodę podczas użytkowania aparatów słuchowych.

Połącz aparaty słuchowe z najnowocześniejszymi akcesoriami bezprzewodowymi i doświadcz najwyższej jakości wrażeń słuchowych.



Od 1946 roku z wielką pasją projektujemy, ulepszamy oraz wprowadzamy na rynek nowoczesne systemy wspomagające słyszenie, które umożliwiają osobom z uszkodzonym słuchem powrót do świata dźwięków. Szwajcarska technologia, precyzja oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż nasze produkty doceniło wielu Protetyków Słuchu oraz Pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest ciągły rozwój, nieustanne udoskonalanie naszych produktów oraz usług. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele obecni są w ponad 70 państwach. To właśnie dzięki nim osoby dotknięte niedosłuchem mogą swobodnie komunikować się oraz cieszyć się pełnią życia.

Światowa siedziba

Szwajcaria

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Polska

Acustica Sp. z o.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Tel. +48 58 511 08 03
Faks +48 58 511 17 81

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion