



| Uwolnij swoją **kreatywność**




Leox

Super Power | Ultra Power

bernafon[®]
Your hearing • Our passion



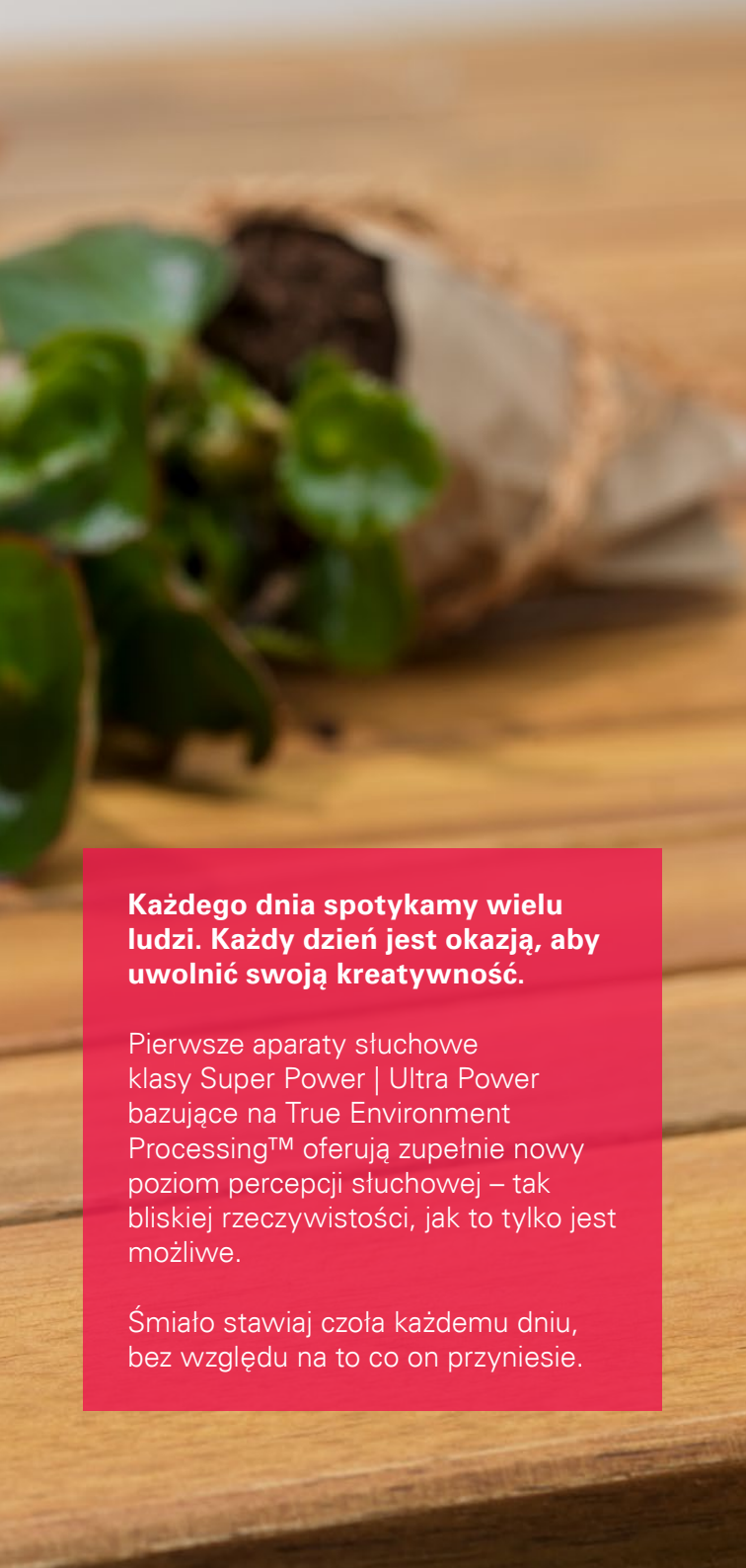

Każdego dnia spotykamy wielu ludzi. Każdy dzień jest okazją, aby uwolnić swoją kreatywność.

Pierwsze aparaty słuchowe klasy Super Power | Ultra Power bazujące na True Environment Processing™ oferują zupełnie nowy poziom percepcji słuchowej – tak bliskiej rzeczywistości, jak to tylko jest możliwe.

Śmiało stawiaj czoła każdemu dniu, bez względu na to co on przyniesie.



Rozumienie mowy

Dzięki niezwykle zaawansowanej technologii Leox oferuje Tobie znaczną poprawę rozumienia mowy oraz komfortu słuchowego – zarówno w ciszy, jak i w hałaśliwym otoczeniu. Możesz w końcu przyłączyć się do ważnych dla Ciebie rozmów.



Moc

Leox zapewnia jedno z największych w branży wzmocnień dźwięku. W końcu możesz skorzystać z rozwiązania, które uwzględnia Twoje potrzeby.



Łączność beprzewodowa


Wystarczy kilka dotknięć ekranu Twojego smartfona, aby przesyłać dźwięk z urządzeń Bluetooth® wprost do Twoich uszu. Jeśli potrzebujesz więcej swobody – Leox spełni Twoje oczekiwania.

True Environment Processing™: Nowa "filozofia" przetwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym.

Gdziekolwiek jesteś - w ciszy, w hałasie, Twoje aparaty słuchowe powinny zapewniać coś więcej, niż tylko odpowiednie wzmocnienie dźwięku. Współczesne aparaty powinny aktywnie reagować na zmiany w środowisku akustycznym oraz dynamicznie adaptować się do nich.



Typowe aparaty słuchowe wzmacniają dźwięki, nie rozróżniając ich rodzajów.

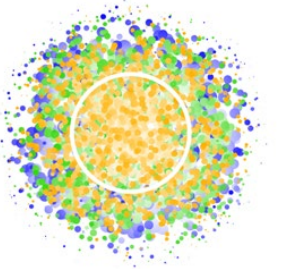

W przypadku True Environment Processing™ stosuje się różne wzmocnienia dla różnych rodzajów sygnałów akustycznych.

Dzięki temu otrzymuje się równowagę pomiędzy rozumieniem mowy, słuchową lokalizacją dźwięku oraz komfortem Użytkownika.

Technologia leżąca u podstaw True Environment Processing™

Obsługiwany przez bardzo wydajny procesor system **Dynamic Environment Control System™** składa się z kilku układów, których zadaniem jest odpowiednia obróbka dźwięku – nawet w "trudnych", dynamicznych otoczeniach dźwiękowych. W związku z tym Leox oferuje Użytkownikowi wiele istotnych możliwości:*

Przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym, które sprawia, że **dźwięki środowiskowe stają się bardziej rozróżnialne**

Rozszerzona świadomość otoczenia akustycznego poprzez poprawę słuchowej lokalizacji dźwięku

Zwiększenie tzw. stosunku sygnału do szumu **dla lepszego odbioru i rozumienia mowy** w hałaśliwych i dynamicznych warunkach dźwiękowych

Większy komfort słuchowy w głośnych otoczeniach, przy zapewnieniu dobrego odbioru mowy i innych ważnych dźwięków

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). *Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments*. White Paper. Czerwiec 2019, bernaфон.com/professionals.

Leox - kluczowe cechy

Super Power | Ultra Power

Stopień ochrony IP68

Odporność na kurz i wodę
zapewniająca trwałość produktu

Wielokolorowa dioda LED

Wzrokowa kontrola
stanu aparatu

Niezależne przyciski funkcyjne

Oddzielna kontrola
głośności oraz zmiana
programów słuchowych

Adapter DAI/FM

Podłączenie do klasycznego
przewodu audio (DAI) oraz
beprzewodowych systemów FM



2,4 GHz Bluetooth® Low Energy

Bezprzewodowa łączność z zewnętrznymi urządzeniami audio

Rożek

Dostępny w wersji z filtrem, jak i bez filtra

Technologia NFMI

Bezprzewodowa synchronizacja obydwóch aparatów

Cewka indukcyjna

Bezpośrednia łączność z indukcyjnymi systemami audio

Wymienna bateria

Bateria 13 dla modelu BTE SP oraz 675 dla modelu BTE UP

część górna

SABE

piaskowy
beż

MSIL

metal.
srebro

ANBR

antyczny
brąz

MAC

metal.
antracyt

BU

niebieski

RE

czerwony

podstawa

metaliczny
antracyt

MAC



Made for


🍏 iPhone | iPad | iPod

Wszystko, co jest istotne. Perfekcyjnie połączone.

Leox niezwykle łatwo łączy się z światem innych urządzeń audio. Dzięki wykorzystaniu specjalnego urządzenia pośredniczącego lub zastosowaniu łączności bezpośredniej możliwe jest bezprzewodowe połączenie aparatów Bernafon z wieloma zewnętrznymi urządzeniami audio. Dostępna jest również intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne, która umożliwia proste i dyskretne zdalne sterowanie oraz kontrolę aparatów.

Więcej informacji znajdziesz na:
www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch oraz Apple Watch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

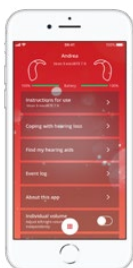

EasyControl-A

Aplikacja, którą musi mieć każdy Użytkownik aparatów Power. Wykorzystaj naszą bezpłatną "apkę", aby zdalnie regulować głośność dźwięku, zmieniać programy słuchowe oraz kontrolować stan baterii aparatów. EasyControl-A oferuje również bardzo przydatną funkcję "Znajdź mój aparat słuchowy".



SoundClip-A

Opcjonalne urządzenie pośredniczące w transmisji dźwięku pomiędzy nowoczesnymi smartfonami Bluetooth® oraz aparatami słuchowymi. Noszone np. przypięte do koszuli umożliwia rozmowy telefoniczne bez użycia rąk. SoundClip-A może również służyć jako mikrofon do poprawy rozumienia mowy w hałasie oraz jako pilot do aparatów słuchowych.

TV-A

Urządzenie transmitujące bezpośrednio dźwięk twojego telewizora wprost to aparatów słuchowych – z jakością Dolby Digital® Stereo.



RC-A

Klasyczny pilot zdalnego sterowania do aparatów słuchowych.

Od naszych początków w 1946 roku kontynuujemy tradycję założycieli firmy i opracowujemy nowoczesne technologie dla osób niedosłyszących. Szwajcarskie dziedzictwo i wartości, najdoskonalsze rozwiązania oraz najwyższa jakość produktów umożliwiają nam realizację naszego głównego celu:

Pomagać ludziom komunikować się pomiędzy sobą lepiej.

Aby dowiedzieć się więcej o aparatach słuchowych Leox, skonsultuj się z Protetykiem Słuchu lub odwiedź naszą stronę internetową **www.bernafon.pl**.



SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernaфон Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA