

LEPSZE SŁYSZENIE DLA CIEBIE I DLA MNIE



NEVARA 1



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

OŻYWIONE ROZMOWY POMIĘDZY TOBĄ I MNA



Nevara jest zaawansowanym aparatem słuchowym bazującym na Audio Efficiency™ – opracowanej przez firmę Bernafon, fenomenalnej technologii wzmocnienia dźwięku. Od teraz najnowocześniejsze funkcje aparatów słuchowych są dostępne również w przypadku "przyjaznych cenowo" produktów. To właśnie dlatego twierdzimy, że rodzina produktowa Nevara jest dostępna dla każdego Użytkownika.

Niczym florysta dysponujący różnymi kwiatami, roślinami i dekoracjami, Protetyk Słuchu skomponuje dla Ciebie najlepszy produkt, dzięki któremu będziesz po prostu słyszeć lepiej. Ponadto, niezwykle wręcz prostota dopasowania oraz opcja zdalnego sterowania sprawiają, że Nevara jest produktem bezkonkurencyjnym w swojej klasie cenowo-technologicznej.


**Nieważne, jak bardzo różnią się Klienci,
Nevara oferuje rozwiązania dla każdego!**

Aparaty słuchowe dla Ciebie i dla mnie

W firmie Bernafon tworzymy aparaty słuchowe głównie z myślą o najwyższej jakości dźwięku, dyskrecji Użytkowników oraz przywiązując dużą wagę do żywotności naszych produktów. Nevara nie jest wyjątkiem w żadnym z tych aspektów. Szczytowe wartości MPO zawierające się w zakresie od 119 do 138 dB SPL sprawiają, że jest to znakomity produkt również do korekcji głębokich niedosłuchów.

Wszystkie nowe modele Power BTE stanowią znakomite rozwiązanie dla Użytkowników, którzy wymagają dużego wzmocnienia dźwięku. Dzięki rewelacyjnemu designowi oraz dostępności wielu elementów dźwiękowodowych, modele P BTE gwarantują bardzo łatwe dopasowanie oraz komfort Użytkownika.

Dla jeszcze większej dyskrecji i komfortu Klienta aparaty słuchowe Nevara są kompatybilne z pilotem zdalnego sterowania RC-N umożliwiającemu zmianę głośności dźwięku i programów słuchowych. Co więcej, Nevara współpracuje z systemem FittingLINK, który umożliwia całkowicie bezprzewodowe programowanie aparatu.

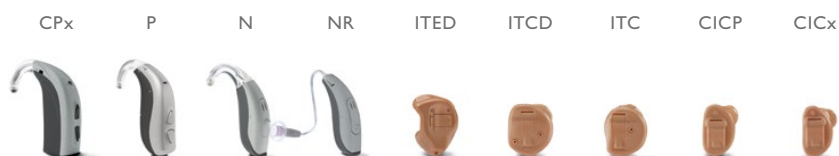

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

	CPx	P	N	NR	ITED	ITCD	ITC	CICP	CICx
Kierunkowość	dual omni	kier.	kier.	kier.	kier.	kier.	wszekier.	wszekier.	wszekier.
Bateria	13	13	312	312	13	312	312	10	10
Przełącznik programów	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Regulacja głośności	●	●	*	*	*	*	○	*	*
Ochrona IPxx	IP58	IP58	IP57	IP57	–	–	–	–	–

AKCESORIA

Pilot zdalnego sterowania RC-N	○	○	○	○	○	○	–	○	○
FittingLINK	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Adapter FM/DAI	○	○	–	–	–	–	–	–	–

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE (SZTUCZNE UCHO)

OSPL 90, maks. dB SPL	137	138	128	132	129	128	128	125	119
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL	135	134	127	131	121	119	119	117	108
Full-On Gain, maks. dB	77	72	55	73	60	60	60	57	52
Full-On Gain, 1600 Hz dB	73	67	54	69	54	48	49	49	40
Wzmocnienie pomiarowe odniesienia	60	58	47	54	47	41	42	42	34

● standard ○ opcja

* Przełącznik programów może służyć do regulowania głośności

Atrakcyjne kombinacje kolorów dla Ciebie i dla mnie

Neara oferuje duże możliwości wyboru kombinacji kolorystycznej oraz funkcje, które sprawdzą się u każdego Klienta.

CPx, N, NR	P		MODELE WEWNĄTRZUSZNE
Podstawa obudowy Grafit	Podstawa obudowy Metaliczny antracyt	Podstawa obudowy Metaliczne srebro	
 beż	 piaskowy beż	 piaskowy beż	 beż
 ciemny brąz	 metaliczne srebro		 jasny brąz
 szary brąz	 antyczny brąz		 brąz
 szary	 metaliczny antracyt		 ciemny brąz
 metaliczny antracyt			

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA STWORZONE DLA CIEBIE I DLA MNIE



Najlepszy zestaw opcji dla Ciebie i dla mnie



Audio Efficiency™

Nevara oferuje Audio Efficiency™ – jedną z najlepszych technologii przetwarzania dźwięku w aparatach słuchowych. Systemy zwiększające rozumienie mowy gwarantują, że Nevara jest satysfakcjonującym rozwiązaniem dla każdego Klienta, który chce po prostu słyszeć lepiej.

Speech Cue Priority™ jest jednym z najnowszych i najdoskonalszych osiągnięć technologicznych firmy Bernafon. Podczas, gdy wielu Klientów może odnosić znacznie korzyści z precyzyjnego wzmocnienia każdej głoski, ta strategia przetwarzania dźwięku może się nie sprawdzić u innych Użytkowników. Aby sprostać oczekiwaniom różnych Klientów, Speech Cue Priority™ oferuje dwa różne tryby wzmocnienia dźwięków mowy. Priorytet Fonemów zapewnia bardzo precyzyjne wzmocnienie nawet najsubtelniejszych głosek. W tym trybie działania aparat aplikuje odpowiednie wzmocnienie nawet dla bardzo cichych i krótkotrwałych fonemów. Priorytet Obwiedni wprowadza mniej zmian wzmocnienia dźwięku w czasie, dzięki czemu obwiednia amplitudowa mowy pozostaje niezniekształcona.

Systemy Adaptacyjnej Redukcji Sprzężeń Plus oraz **Adaptacyjnej Redukcji Hałasu Plus** gwarantują duży komfort słuchowy, nawet w głośnym hałasie. ARS Plus niezwykle precyzyjnie wykrywa oraz usuwa niepożądane sprzężenia akustyczne. Podstawową cechą tej funkcji jest niezwykła szybkość działania – system ten skutecznie usuwa sprzężenia akustyczne nawet w takich sytuacjach jak zakładanie kapelusza, przykładanie telefonu do ucha lub dokonywanie manualnych zmian w aparacie itp. ARH Plus zarządza tłumieniem dźwięku monitorując w sposób ciągły tzw. stosunek sygnału do szumu. We względnie głośnym otoczeniu ARH Plus wprowadza maksymalne tłumienie hałasów tła akustycznego. Jeśli jednak w środowisku akustycznym zaczyna dominować mowa, system ten natychmiastowo zmniejsza tłumienie dźwięku tak, aby utrzymać rozumienie mowy na odpowiednim poziomie.

Kierunkowość Automatyczna przełącza tryb działania mikrofonów pomiędzy wszechkierunkowością i kierunkowością, w zależności od otoczenia dźwiękowego, w którym przebywa Użytkownik. Zmiana kierunkowości następuje całkowicie automatycznie, bez niepotrzebnego angażowania Użytkownika w regulowanie aparatu.

Przegląd możliwości

NEVARA 1	
PRZETWARZANIE DŹWIĘKU	
ChannelFree™	●
Speech Cue Priority™	●
Pasmo przeniesienia	8 kHz
KOMFORT SŁUCHOWY	
Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus (ARH Plus)	2 poziomy
Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus (ARS Plus)	●
Menadżer Cichych Dźwięków	2 poziomy
KOORDYNACJA DWUUSZNA	
VC, zmiana programu	●
USTAWIENIA KIERUNKOWOŚCI	
Stała Wszechkierunkowość	●
Stała Kierunkowość	●
Automatyczny Kierunkowy	●
KOMFORT	
"Kliki" VC	●
Wyciszenie poprzez przycisk programów	●
Programowalne opóźnienie włączenia	●
PERSONALIZACJA	
Opacje/pamięci programów	7/4
Data Logging	●
Dopasowanie ukierunkowane na cechy języka	●
REMfit™	●
Klient Interaktywny	●

● standard

Od 1946 roku z wielką pasją projektujemy, ulepszamy oraz wprowadzamy na rynek nowoczesne systemy wspomagające słyszenie, które umożliwiają osobom z uszkodzonym słuchem powrót do świata dźwięków. Szwajcarska technologia, precyzja oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż nasze produkty doceniło wielu Protetyków Słuchu oraz Pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest ciągły rozwój, nieustanne udoskonalanie naszych produktów oraz usług. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele obecni są w ponad 70 państwach. To właśnie dzięki nim osoby dotknięte niedosłuchem mogą swobodnie komunikować się oraz cieszyć się pełnią życia.

Światowa siedziba

Szwajcaria

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Polska

Acustica Sp. z o.o.
ul. Abrahama 1a, lok. 3.09
80-307 Gdańsk
Tel. +48 58 511 08 03
Faks +48 58 511 08 03

SWISS 
Engineering



follow us on facebook
www.facebook.com/bernafon

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion