


SoundStudio™

Hörsystemanpassung als Erlebnis

Mit dem Profi-Beschallungssystem **SoundStudio** lassen sich beliebig viele Hörsituationen in Ihrem Anpassungsraum nachbilden. Wählen Sie aus einer großen Anzahl von virtuellen Klangszenen die passenden aus, um damit individuell auf das Hörempfinden Ihrer Kunden eingehen zu können. Als Integrationslösung in unsere Messtechnik gewährleistet das **SoundStudio** einfachste Bedienbarkeit und reduziert die Anpasszeit.

Hörsystemanpassung ist Vertrauenssache

Erstellen Sie passend zur Lebenssituation Ihrer Kunden individuelle akustische Umgebungsprofile und simulieren Sie diese mit dem **SoundStudio**. So schaffen Sie bereits während der Anpassung Vertrauen in die neuen Hörsysteme und reduzieren die Anpasszeit.

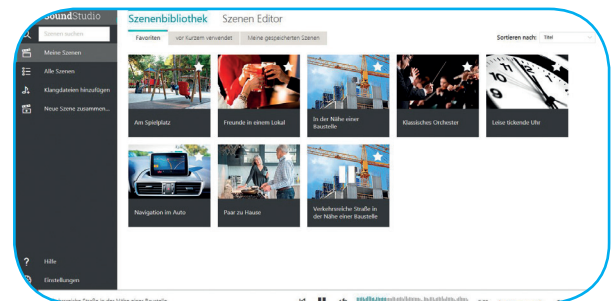


Ein Rundum-Erlebnis

Der Kunde steht im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt. Präsentieren Sie beliebig viele Geräusche im Raum und passen Sie die Software-Einstellung der Lebenssituation Ihres Kunden an.

SoundStudio™ auf einen Blick

- Volle Software-Integration in die Affinity-, Equinox- und Callisto-Suite
- Akustische Umgebungssimulation
- Verschiedene Hörumgebungen und Geräusche
- Modifizierbar auf eigene Anforderungen

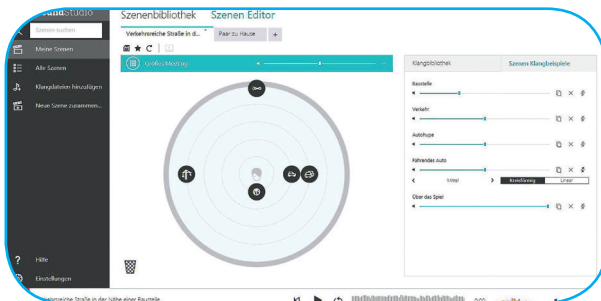

Überzeugen Sie durch Kompetenz

Erläutern Sie Hörsystemeigenschaften, wie zum Beispiel Störgeräuschunterdrückung, Mehrmikrofontechnik und Richtmikrofoneigenschaften.



Technische Daten



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Prozessor	Intel Dual Core 1,0 GHz oder höher
Speicher	1 GB RAM Mindestens 5 GB freier Festplattenspeicher
Grafik	mind. 1280 x 768, 16 Bit
Sound	Ein freier HDMI, Mini-HDMI oder Display Port Ausgang wird benötigt.
Betriebssysteme	Windows 7, Professional 32/64 Bit oder Ultimate 32/64 Bit Windows 8.1, Professional 32/64 Bit oder Enterprise 32/64 Bit Windows 10, Home 32/64 Bit, Pro 32/64 oder Enterprise 32/64 Bit

FLEXIBEL INTEGRIERBAR

SoundStudio arbeitet mit 5 oder 7 Lautsprechern, die möglichst gleichmäßig im Raum verteilt werden. Das System ist dabei so flexibel, dass räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden und eine individuelle Integration in Ihren Anpassraum erfolgen kann.

INTEGRIERTE SOFTWARE

SoundStudio ist Bestandteil Ihrer Affinity/Callisto oder Equinox Suite und wird von dort aus gestartet. Mit einem Receiver, sowie den dazugehörigen Lautsprechern, bauen wir das **SoundStudio** zu einem professionellen Beschallungssystem aus.

Optionales
Zubehör

-HDMI Receiver
-Lautsprecher passiv

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 | 44309 Dortmund | Deutschland

Tel.: +49 231 / 92 53 14 0

vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de