

MA 25

Schnelle Hörtests – mobil, flexibel und unabhängig

Das MA 25 ist geeignet für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.

Kleines Gerät mit großer Leistung

Das kleine, handliche MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von $-10 \text{ dB}_{\text{HV}}$ bis $95 \text{ dB}_{\text{HV}}$ zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

Überall einsetzbar – auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

MA 25 auf einen Blick

- Mit Schallschutzkopfhörer DD65
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Unabhängig vom Stromnetz, Batteriebetrieb
- Variante MA 25e mit MAICO Audiometrie-Software und Patienten-Datenbank zur Einbindung in die Praxis EDV und NOAH
- Automatische Audiometrie nach Hughson/Westlake



Technische Daten

MA 25 SCREENING AUDIOMETER

Testsignale	Sinuston, Puls- und Wobbelton
Testfrequenzen kHz	0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8
Pegelstufen	5 oder 1 dB
Pegelbereich	-10 bis 95 dB _{HV} entsprechend der Frequenzen in der Tabelle

kHz	0,125	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	6	8
DD65	65	75	90	95	95	95	95	95	95	90	85

ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g
Stromversorgung	3 AA Batterien (100 Stunden Lebensdauer) oder optionales Netzteil

SICHERHEITSNORMEN

EN 60601-1
 EN 60645-1 Klasse 4
 Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



VARIANTEN

1. MA 25 mit Batteriebetrieb, inklusive Tragetasche
2. MA 25 inklusive Patientenantworttaste und externem Netzteil
3. MA 25e mit automatischer Audiometrie nach Hughson/Westlake und Audiometrie-Software, inklusive Patientenantworttaste

STANDARDZUBEHÖR

- Kopfhörer DD65 mit Schallschutzkappen
- Audiogrammblock
- Batterien
- Tragetasche

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Patientenantworttaste
- Netzteil
- MAICO Audiometrie-Software

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard Zubehör



MA 25



Kopfhörer DD65



Tragetasche



Audiogramblock


Optionales Zubehör



Patientenantworttaste



Netzteil

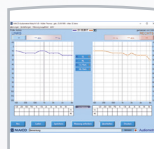

MAICO Audiometrie-Software

Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Deutschland
 Tel.: +49 30/70 71 46-20 · Fax: +49 30/70 71 46-99
 vertrieb@diatec-diagnostics.de · www.diatec-diagnostics.de