


## UltraVac+

Absaugung /  
Trockenkammer

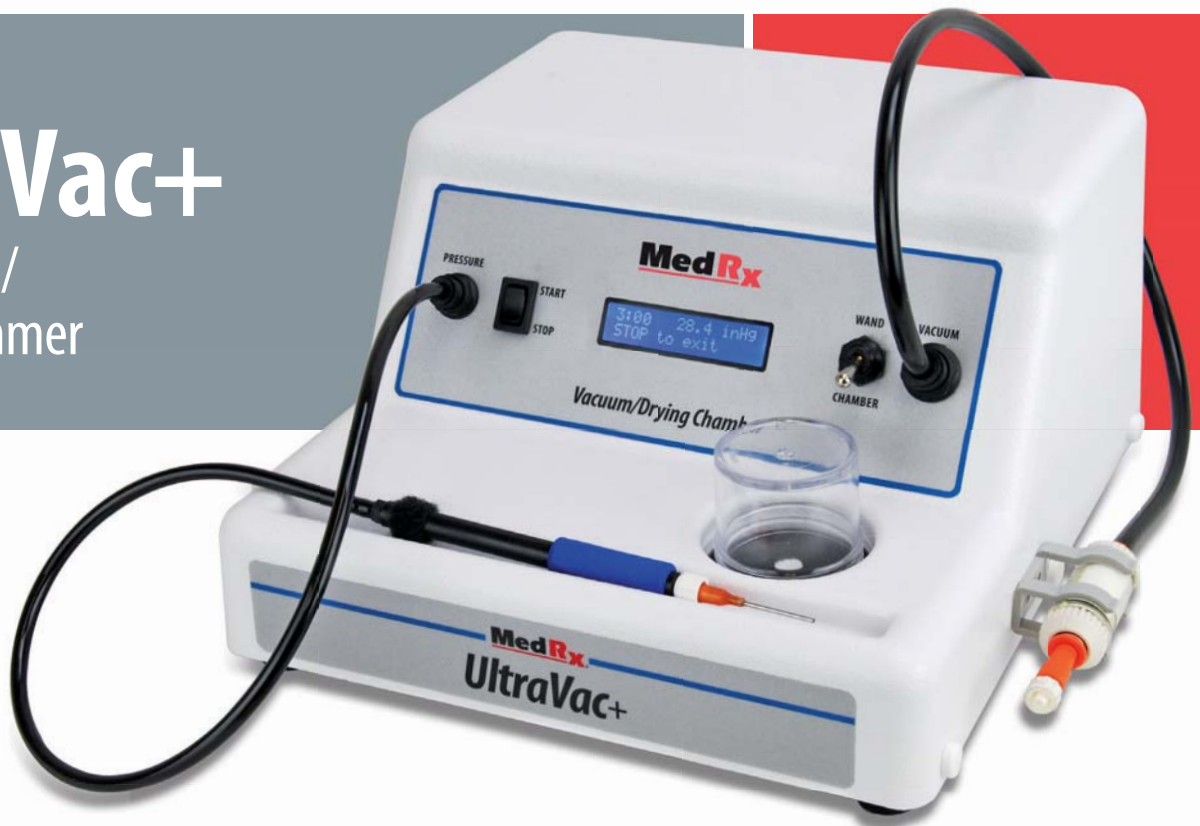

## Hörgeräte Wartungssystem

Entwickelt, um Akustikern und Technikern ein nützliches Werkzeug für Reparatur und Pflege von Hörgeräten an die Hand zu geben.

Dieses aktualisierte System ist klein und effizient bei der Entfernung von Cerumen und sonstigen Ablagerungen aus Akustikrohren und anderen Hörgeräte-Öffnungen. Es bietet Vakuum und Druckluft gleichzeitig, um selbst hartnäckige Verkrustungen/ Verschmutzungen zu lösen.

### MedRx ULTRA VAC+

- Digitale Anzeige von Kammerdruck und Zeit
- Getrennte Vakuum- und Druckluftsonden verringern Verschmutzungen im Gerät
- Automatische Erkennung der Betriebsmodi
- Neue Position des Absaugfilters für verbesserte Zuverlässigkeit
- Vier Minuten-Timer für die Trockenkammer

# ULTRA VAC+

# Die neue Generation der Hörgerätewartung.

## Spezifikationen

# ULTRA VAC+

## Über MedRx

MedRx, Inc. ist ein U.S. amerikanisches Unternehmen, das Diagnostik und Hörgeräte Anpass-technologien speziell für die Anforderungen von Hörgeräeakustikern entwickelt.

MedRx hat eine bemerkenswerte neue Generation von besonders kleinen und doch kraftvollen PC-basierten Geräten für Audiometrie, Real Ear Measurement, Live Speech Mapping, Hörgerätemessung und Video Otoskopie geschaffen.

## Standard Zubehör

- ULTRA VAC+ Grundgerät
- Vakuumsonde mit Schlauch
- Druckluftsonde mit Schlauch
- Aufsätze für Sonden
- Becher für Trockenkammer
- Partikelfilter
- Reinigungsset

## Technische Spezifikationen

STROMVERSORGUNG  
100 - 240 V, 50/60 Hz

LEISTUNGS-AUFNAHME  
< 100 watts

SICHERUNG  
1,25 A, träge, 5 x 20 mm  
2,5 A, träge, 5 x 20 mm

TEMPERATURBEREICH  
0° bis 50° C

GEWICHT  
ca. 5 kg

ABMESSUNGEN (L x B x H)  
ca. 26 cm x 28 cm x 16 cm

PARTIKELFILTER  
I-355

SONDENSPIZEN  
Gr. 14, Gr. 15, 2x Gr. 18, 2x Gr. 20  
mit Bajonettverschluss

TROCKENKAMMER  
Laufzeit 4 Minuten mit automatischer Abschaltung

VACUUMFUNKTION  
konstant



ULTRA VAC+™ is a Trademark of MedRx

Ihr offizieller Vertriebs- und Servicepartner:

**Diatec Diagnostics GmbH**  
Hohenbuschei-Allee 2, 44309 Dortmund  
T: 0231 / 92 53 14-0, F: - 9  
vertrieb@diatec-diagnostics.de  
www.diatec-diagnostics.de