

Oticon CROS-familien

CROS-familien udvides nu med den første genopladelige CROS/BiCROS høreøsning med TwinLink™ dual-streaming-teknologi og med kompatibilitetsmuligheder, som ikke er set før.



NYHED - Oticon CROS PX miniRITE R

Den nye, genopladelige tilføjelse til Oticon CROS-familien giver større mulighed for fleksibilitet i tilpasningen for enkeltsidigt døve (SSD) brugere. Denne model er nem at genoplade og har et batteri, der har strøm nok til en hel dags brug. Oticon CROS PX er baseret på platformen Polaris™, den nyeste og hurtigste chip udviklet af Oticon, hvilket giver brugerne exceptionel lyd kvalitet.

Kompatibilitet


Oticon CROS-familien har endnu flere kompatibilitetsmuligheder og kan mikses og matches på tværs af forskellige produktfamilier. Bagud- og fremadrettet kompatibilitet gør det muligt for Oticon CROS miniRITE T og Oticon CROS PX miniRITE R at fungere sammen med nye og tidligere høreapparatfamilier. Brugere kan nyde lyd af høj kvalitet og få deres egen CROS-løsning med deres foretrukne høreapparat fra familierne Oticon More™, Opn S™*, Opn Play™*, Ruby, Xceed og Xceed Play, eller nemt prøve et nyt høreapparat uden at skifte deres CROS-sender.


TwinLink dual-streaming

Oticon CROS-familien med modellerne miniRITE R og miniRITE T indeholder TwinLink, en innovativ teknologi, som simultant kan streamer via Near-Field Magnetic Induction (NFMI) og 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy. Oticon CROS-senderen sender lyd fra det dårligere øre via den trådløse NFMI-teknologi til en modtager på det bedre øre. Samtidigt kan brugerne streamer fra en iPhone®, Android™-enhed og trådløst tilbehør fra Oticon, hvilket gør det muligt at fortsætte samtalen, imens man ser tv eller lytter til musik.



*Undtaget Oticon Opn S 3 og Opn Play 2

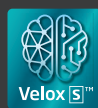

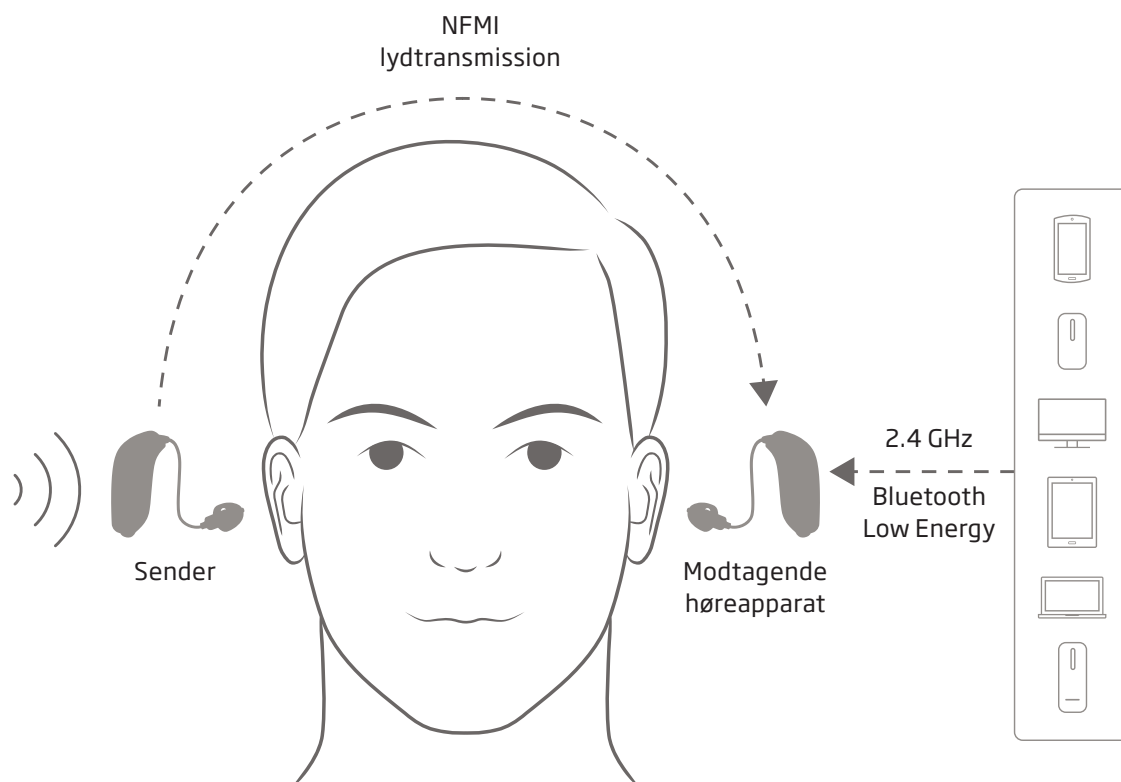

Oticon CROS-familien - kort fortalt

- Oticon CROS PX miniRITE R er den seneste tilføjelse til Oticon CROS-porteføljen.
- Oticon CROS-familien kan enten bruges til en CROS- eller en BiCROS-tilpasning.
- Oticon CROS PX er den første genopladelige løsning med TwinLink dual-streaming; brugerne kan streame direkte til deres høreapparat fra en iPhone, Android-enhed og Oticons trådløse tilbehør uden at transmissionen afbrydes.
- Den genopladelige model har stor batterikapacitet, når den genoplades natten over.
- Senderne i Oticon CROS-familien fås i syv standardfarver; Oticon CROS PX miniRITE R fås også i farven Hear Pink.
- Oticon CROS-familien er fremad- og bagudkompatibel med Oticon More, Opn S*, Opn Play*, Ruby, Xceed og Xceed Play.
- Oticon CROS-familien er kompatibel med modellerne miniRITE, miniRITE T, miniRITE R, BTE PP, BTE SP og BTE UP.
- Lydtransmissionen kan skræddersys til den enkelte bruger og optimeres til tale (op til 10 kHz).

VIDSTE DU DET? _____

Visse klienter med SSD kan have gavn af andre høreteknologier. Læs mere om Oticon Medicals benforankrede høre løsninger og CI på www.oticonmedical.com/dk

*Undtaget Oticon Opn S 3 og Opn Play 2