

Teknisk datablad

Charger 1.0 miniBTE R

Opladeren er designet til at gøre den daglige rutine for opladning helt enkel med nogle få, simple handlinger.

Opladning

- Høreapparaterne tages af og sættes i opladeren - intet låg at åbne.
- Høreapparaterne begynder automatisk at oplade, når de sættes i opladeren, og tænder automatisk, når de tages ud af opladeren.
- Oplad hver nat, så vil høreapparaterne være helt opladet, når de skal bruges om dagen.

Nem at forstå

En LED-indikator på høreapparatet gør det nemt for brugeren at forstå opladningsstatussen:

- Orange = oplader
- Grøn = fuldt opladet

Kort opladningstid

Hvis høreapparaterne er løbet helt tør for strøm, er de normale ladetider:

- 3,5 t. = fuldt opladet
- 1 t. = 40 % opladet
- 0,5 t. = 20 % opladet

Produktfakta

- Induktiv opladning
- LED-indikator - statusindikator for tænd/sluk
- Magnetisk forbindelse - høreapparaterne bliver siddende i opladeren
- Fast strømkabel
- Gummifødder giver høj stabilitet
- Bløde, runde former - nem at rengøre
- Blød pung til rejseaktiviteter inkluderet



Opladeren er designet til opladning af miniBTE R. Den er baseret på induktiv teknologi, og den oplader trådløst høreapparaterne i løbet af tre timer for en fuld opladning.


Designet til miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX



*Strømkablet vil være forskelligt fra land til land



Tekniske data: Oplader	
Navn	Oplader 1.0, Oticon miniBTE R
Designet til/kompatibel med	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R
Dimensioner	Ø95 mm /samlet højde på 39 mm
Vægt	135 g
Farve	Sort (black)
Strømforsyningsstik	USB A
Statusindikator	LED-indikator på opladeren: Angiver opladerens tænd/sluk-status LED-indikator på høreapparatet under opladning: Angiver ladeindstilling
Høreapparaternes ladetid	Maks. 3,5 timers opladning afhængig af batteriets indledende tilstand Temperatur: +10 °C til +35 °C Maks. 5 timers opladning afhængig af batteriets indledende tilstand Temperatur: +5 °C til +10 °C og +35 °C til +40 °C
Strømkilde	Medfølgende strømstik**
Indgangsspænding	5 V DC
Indgangsstrøm	< 0,2 A (opladning af to høreapparater) <10 mA standby (ingen høreapparater isat)
Kabel	Fastmonteret kabel, længde 150 cm
Forbundet til eksternt udstyr	Når dette udstyr er forbundet til eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal dette udstyr overholde IEC-62368-1 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.
Brugsbetingelser	
Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur: -25 °C til +70 °C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk	700 hPa til 1060 hPa
Tekniske data: Stikkontakt	
Indgangsspænding	100 -240 V AC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Udgangsspænding	5 V DC
Udgangsstrøm	1 A

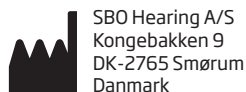

Hovedkontor
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark